



Bruksanvisning - engelsk (NO)



[www.3pp-eifu.com](http://www.3pp-eifu.com)

**Beskrivelse:** Oval-8 Finger Splints er en støpt platenhet designet for å passe på et ledd for støtte, beskyttelse og justering. De er tilgjengelige i 14 størrelser for å imøtekomme en rekke fingerstørrelser. Oval-8 Finger Splints er vanntette og kan brukes under våte forhold.

**Tiltenkt bruk:** Oval-8 Finger Splints er designet for å bruke tre kontrollpunkter rundt et ledd for å holde en knoke rett, forhindre eller begrense bevegelse for beskyttelse og for å tillate healing. Produktet kan brukes til å håndtere flere fingerforhold avhengig av hvor og hvordan det brukes på leddet.


**Forholdsregler:** Ikke til bruk på åpne sår. Ikke til bruk hvis det er hevelse. Ikke til bruk på tær. Enheten kan forårsake irritasjon eller trykk på leddet. Avbryt bruken hvis det oppstår irritasjon eller trykk. Kontakt helsepersonell hvis irritasjonen vedvarer.




Følg retningslinjer for rengjøring på en vanlig tidsplan. Forsiktig: Bør ikke brukes av barn under 5 år. Kan forårsake kvelning ved svelging.

**Retning:** Hvordan bruke Oval-8 Finger Splints for å håndtere forskjellige fingerforhold.


1. Boutonniere-deformitet

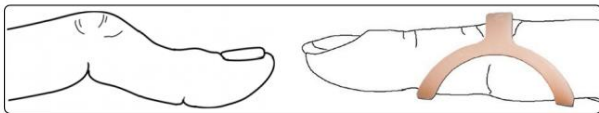


4. Mallet Finger

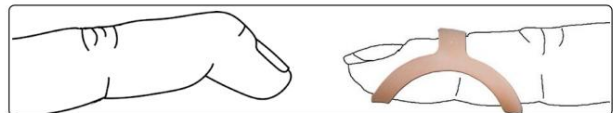


2. Kroket finger

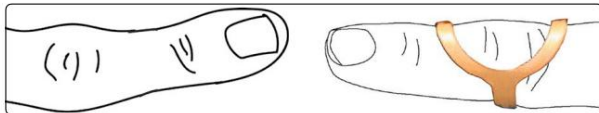


5. Svanenakkedeformitet

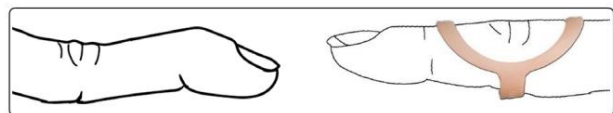



3. Trigger Tommel

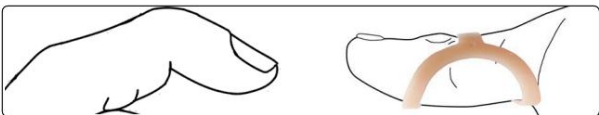

6. Trigger finger

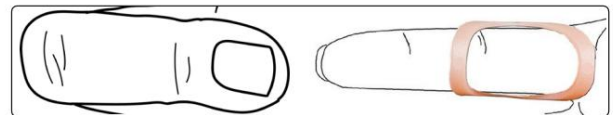

**Merk:** Oval-8 splinter sitter strammere eller løsere avhenger av hvilken ende som settes på fingeren først. Pluss + tegnet indikerer den løsere enden.

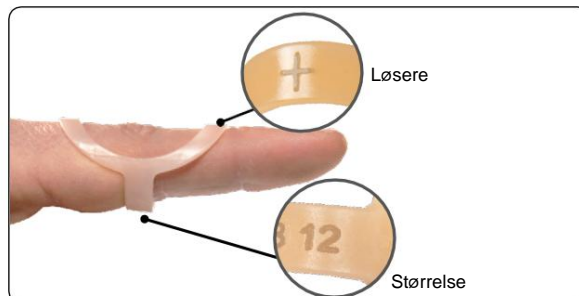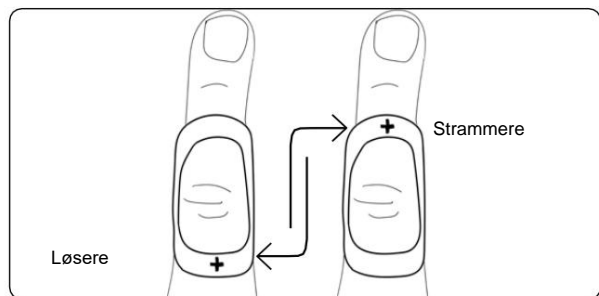

**Måling for en Oval-8 Finger Splint:** Instruksjoner for måling av sifre for riktig størrelse på produktet finnes på side 3 og 4.

**Slik leveres:** Produktet er produsert av ren polypropylen. Produktet er lateksfritt. Ikke bruk hvis enheten er skadet. Oppbevares på et kjølig, tørt sted. Den er tilgjengelig i 14 størrelser, pakket i ulike mengder. Pakkealternativer er på side 4.

**Rengjøring:** Håndvask med såpe og vann, og lufttørk produktet regelmessig. Desinfiser produktet med 70 % isopropanol eller en 10% blekeløsning.

**Avhending:** Produktet er ment å kunne gjenbrukes på samme person flere ganger. Kast enheten hvis den viser tegn på overdreven slitasje og erstatt den med et nytt produkt etter behov.

**Nårbør dukonsultere en helsepersonell:** Rådfør deg med en helsepersonell hvis du opplever noen bivirkninger på enheten, inkludert hudreaksjoner eller endringer i tilstanden.

**Merknad til bruker og/eller pasient:** I tilfelle en uønsket hendelse relatert til enheten, fjern enheten og rapporter hendelsen til distributøren og den autoriserte representanten i medlemsstaten der brukeren er bosatt.

**Distributører:** [www.3pp-eifu.com/#distributors](http://www.3pp-eifu.com/#distributors)

**Etikettsymboler:** Alle symbolene som brukes på produktetiketten eller produktlitteraturen er definert i 3-punkts produktsymbolforklaringen her: [www.3pp-eifu.com/#symbols](http://www.3pp-eifu.com/#symbols)



3-Point Products, Inc  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393



Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)





Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug



### Måle fingeren(e) for en Oval-8 fingerskinne

Oval-8 Finger Splints er et medisinsk utstyr og en tettstående passform gir vanligvis de mest effektive resultatene. Riktig størrelse avhenger av hva fingerproblemet er og hvor båndet skal bæres. Vennligst følg instruksjonene

Du vil trenge:

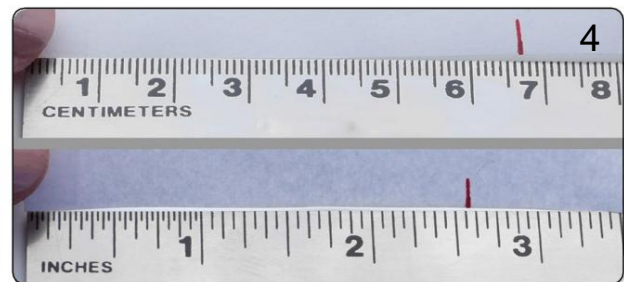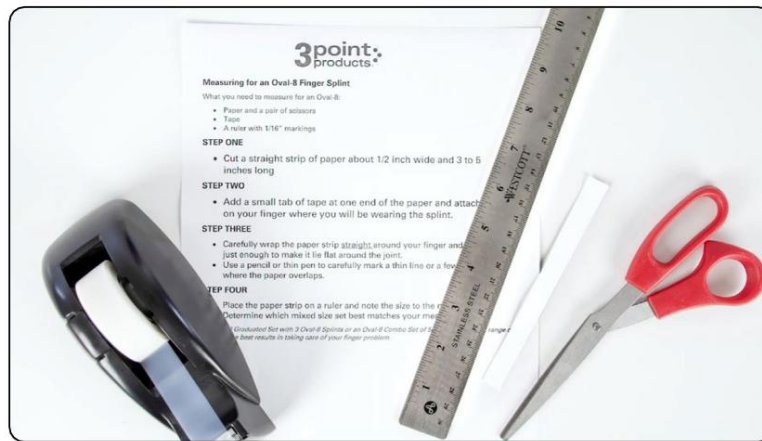



## Oval-8 størrelses- og emballasjeskjemaer

Oval-8 størrelsestabell (engelsk)		
Oval-8 Størrelse	Mål (tommer)	Mål (centimeter)
2	1-3/4"	4,3 cm
3	1-13/16"	4,5 cm
4	1-15/16"	4,95 cm
5	2-1/6"	5,27 cm
6	2-3/16"	5,7 cm
7	2-5/16"	5,86 cm
8	2-7/16"	6,14 cm
9	2-1/2"	6,35 cm
10	2-11/16"	6,82 cm
11	2-13/16"	7,09 cm
12	2-15/16"	7,4 cm
13	3"	7,65 cm
14	3-3/16"	8,09 cm
15	3-1/4"	8,2 cm

Oval-8 emballasjeskjema						
Oval-8 Størrelse	En (1) per pakke	Tre (3) per pakke	Fem (5) per pakke	Testsett sett tre (3) størrelser	Oval-8-sett Klinikkboks med 44 skinner	
					Antall per størrelse	
2	✓	✓	✓	2-3-4	Størrelse 2 og 15	1
3	✓	✓	✓	4-5-6	Størrelse 3-4 og 13-14	2
4	✓	✓	✓	6-7-8	Størrelse 11 og 12	3
5	✓	✓	✓	8-9-10	Størrelse 5 og 10	4
6	✓	✓	✓	10-11-12	Størrelse 6-7-8-9	5
7	✓	✓	✓	13-14-15		
8	✓	✓	✓		Størrelsessett ett (1) hver størrelse - 14 totalt	
9	✓	✓	✓	Kombissett fem (5) størrelser	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	
10	✓	✓	✓	2-3-4-5-6		
11	✓	✓	✓	5-6-7-8-9		
12	✓	✓	✓	8-9-10-11-12		
1, 3	✓	✓	✓	11-12-13-14-15		
14	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			

Alle pakker er kanskje ikke tilgjengelige fra alle selgere