

GRIPA 28210



Användningsområden/**Indikationer**

Gripa är ett handledsbandage som är avsedd att ge ett lätt stöd åt handleden för att om möjligt förebygga arbetsskador, framför allt i samband med repeterande arbetsmoment samt att förbättra greppet. Gripa hjälper användaren att undvika ofördelaktiga handledspositioner.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte späns åt

för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Textilen består av polyester, bomull och elasthan med en fyllning av polyuretan. Antiglidmaterialet i handflatan är tillverkat av syntetiskt gummi. Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Latex fri.


Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas.


Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.


Instruktion

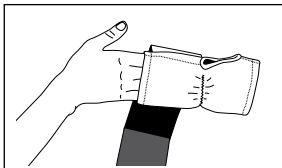

1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.

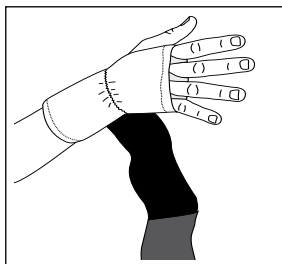

2. För handen genom bandaget så att tummen kommer i öppningen.

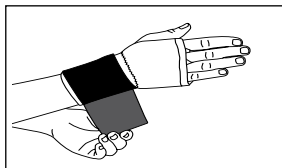

3. Se till att fingerdelarna placeras rätt mellan fingrarna

4. Drag därefter bandet runt handleden i riktning utåt och nedåt och fäst kardborrbandet.

5. Efterjustera så att bandaget sitter bekvämt.

Anvendelsesområder/**Indikationer**

Gripa er en håndledsbandage der er beregnet til at give let støtte til håndleddet, for at kunne forebygge eventuelle arbejdsskader, ved fx. gentagne arbejdsbevægelser samt til at forbedre grebet. Gripa hjælper brugeren til at undgå ufordelagtige håndledspositioner.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis nogen former for irritation eller hudproblemer opstår,

skal bandagen straks tages af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Tekstilmaterialet består af 94% bomuld og 6% lycra med fyld af polyuretan. Antiskridmaterialet i håndfladen er fremstillet af syntetisk gummi. Produktet er ikke behandlet med flammehæmmere. Latexfri.


Vaskeinstruktion

Luk alle velcrobånd i bandagen inden vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Liggetørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses.

Ved spørgsmål


Hvis der opstår problemer skal du tage bandagen af og kontakte din bandagist, terapeut eller forhandler.

Instruktion

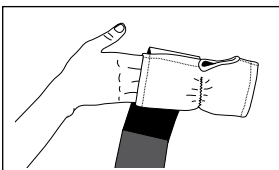


1. Kontroller at produktet er helt og uden skader.

2. Før hånden gennem bandagen så tommelen kommer op i åbningen.

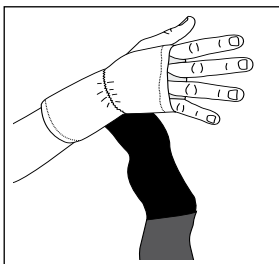

3. Sørg for at fingerdelene placeres korrekt mellem fingrene.

4. Træk derefter båndet rundt omkring håndleddet i retning ud og ned og luk velcrobåndet.

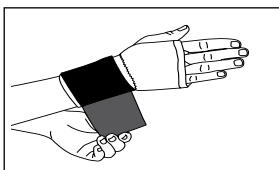

5. Efterjuster så bandagen sidder behageligt.

Käyttöalueet/indikaatiot

Gripa rannetuki on tarkoitettu keventämään kuormitusta kämmenessä ja ranteessa ennaltaehkäisevästi. Ennenkaikeka silloin kun esim. työssä on toistuvia liikkeitä ja käden otetta halutaan parantaa. Gripa auttaa käyttäjää välttämään vääriä/huonoja kädenasentoja.

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali

Tekstiili on valmistettu polyesteristä, puuvillasta ja elastaanista polyuretaanitäytteellä. Luistamaton materiaali kämmenessä on valmistettu synteettisestä kumista. Tuote ei ole tulen kestävä. Ei sisällä lateksia.


Pesuohteet

Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Pese koneessa 40°C:ssa. Tasokuivaus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti.


Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.


Sovitusohjeet

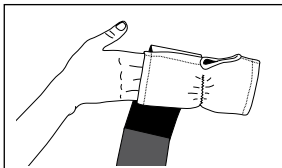

1. Tarkista, että tuote on ehjä.

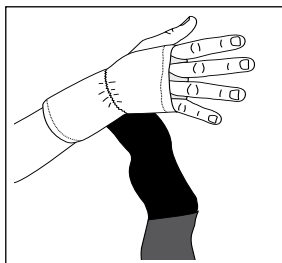

2. Vedä tuki käteesi kuin hanska, niin että peukalo menee sisään sille tarkoitetusta aukosta.

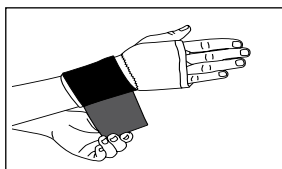

3. Ole tarkkana, että sormet menevät myös oikeista aukoista sisälle.

4. Vedä nauha ranteen ympäri ja kiinnitä tarra.

5. Säädä istuvuus.

Bruksområder/**Indikasjoner**

Gripa er en håndleddsstøtte som gir lett støtte til håndleddet, forbedret grepet og for om mulig å forebygge arbeidsskader, framfor alt i samband med repeterende arbeidsmoment. Gripa hjelper brukeren med å unngå ufordelaktige håndleddsposisjoner.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun utføres av helsefaglig, kyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes til for hardt. Ta straks av ortosen om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon

Tekstilen består av polyester, bomull og elastan med et fyll av polyuretan. Antiglimaterialet i håndflaten er laget av syntetisk gummi. Produktet er ikke behandlet med flammebeskyttende middel. Uten latex.


Vaskeinstruksjon

Lukk alle borrelåsene før vask. Bruk vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Ved spørsmål


Om det oppstår noen problemer, ta av ortosen og kontakt utprøveren eller stedet du kjøpte ortosen.

Instruksjon

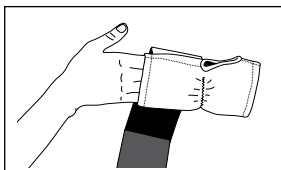


1. Kontroller at produktet er helt og uten skader.

2. Før hånden gjennom støtten slik at tommelen kommer i åpningen.

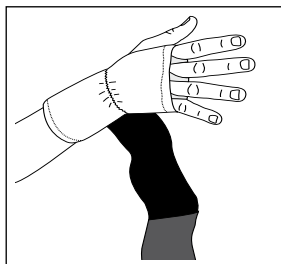

3. Pass på at fingerdelene plasseres riktig mellom fingrene.

4. Dra deretter båndet rundt håndleddet i retning utover og nedover, og fest borrelåsen.

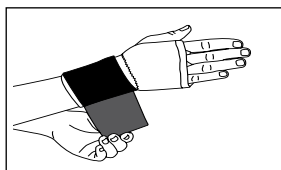

5. Etterjuster slik at støtten sitter behagelig.

Indications / Intended Use

This product is intended to give a light support for the wrist and to help prevent work related injuries - most commonly with repetitive work patterns. The material in the palm enhances the gripping ability.

Contraindications

No known.

Adjustments

This product should only be altered by a medical professional.

Warnings

Make sure that the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis.

Material Specifications

This orthosis is made from polyester, cotton and elastane with a filling made of polyurethane. The anti-slip material in the palm is made from synthetic rubber. This product is not flame retardant. Latex free.


Washing Instruction

Close all Velcro prior to laundering. Machine wash in 40°C (104°F). Use a washing bag. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean.


Who to Contact

If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.

Instruction for use

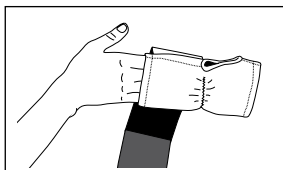


1. Check that the support is complete and without damage.

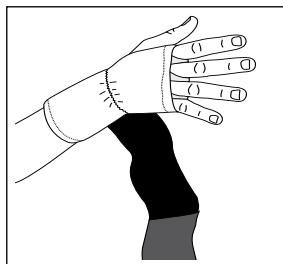

2. Put the hand into the support with the rubber material facing the outside on the palm side.

3. Make sure that the finger divider straps are correctly positioned.

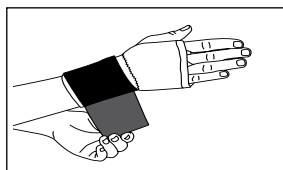

4. Pull the wide elastic strap around the wrist and secure.

5. Adjust for comfort.

| Item No. | Color | Size | Side | Wrist Circumference |
|------------|-------|---------|---------|---------------------|
| 28210 1011 | Blå | Small | Vänster | 11-14 cm |
| 28210 1012 | Blå | Medium | Vänster | 14-17 cm |
| 28210 1013 | Blå | Large | Vänster | 17-20 cm |
| 28210 1014 | Blå | X-Large | Vänster | 20-23 cm |
| 28210 2011 | Blå | Small | Höger | 11-14 cm |
| 28210 2012 | Blå | Medium | Höger | 14-17 cm |
| 28210 2013 | Blå | Large | Höger | 17-20 cm |
| 28210 2014 | Blå | X-Large | Höger | 20-23 cm |

