

CAMP[®]

Humerux

humerusortose med maksimal kontroll
ved hjelp av det unike drasystemet.

traction
system[®]



Humerux

humerusortose med maksimal kontroll ved hjelp av det unike drasystemet.

Ortosen er beregnet for behandling av Diafysale humerusfrakturer, postoperativ frakturbehandling og for kontroll av instabilitet gjennom helingsprosessen.




▲ **Y-drasystem bruker en draanordning for å øke og justere spenningen**, noe som hjelper til med å maksimere kontrollen over retning, fiksering og immobilisering av humerus.



Ytraction system®

▲ **Tekstil som puster og gir en god vattering mot huden!**

100% LATEX FREE ✓

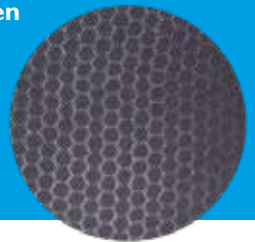

▲ Platene og båndene stabiliserer humerus ved hjelp av individuell tilpassing og den sirkulære kompresjonen rundt mykdelene.

Det anerkjente Sarmiento-prinsippet gir optimal kompresjon rundt mykdelene. Platene kan ved behov varmes og formes anatomisk*.




▲ Brystbånd som enkelt kan justeres hindrer ortosen fra å gli ned. Polstret i armhulen for best mulig komfort.

▲ Fiksering med 3 bånd som løper gjennom dobbeltspenner og med lavprofil borrelås gir en smidig, enkel, komfortabel og sikker justering.

*Ta platene av termoplast ut av ortosen, varm forsiktig med varmegjorte til 150°C på ca. 15 cm avstand.

Art.nr.	Størrelse	Lengde	Omkrets
62105 0011	Small	37 cm	18 - 26 cm
62105 0012	Medium	38 cm	26 - 34 cm
62105 0013	Large	41 cm	34 - 42 cm
62105 0014	X-Large	42 cm	42 - 50 cm

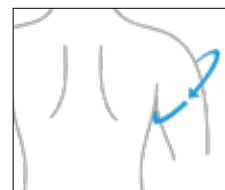

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no