

Method TA™ AFO



METHOD TA™



Method TA™ AFO

Method TA™ AFO er en prefabrikert, individuelt tilpasset ortose som kan brukes til behandling av et bredt spekter av patologiske gangavvik hos pasienter med slag, CP, MMC, CMT og andre komplekse nevromotoriske lidelser.

Indikasjoner:
Slag, CP, MS, MMC, ryggmargskade, CMT og andre nevromotoriske tilstander som gir gangavvik i ståfasen.

Kontraindikasjoner:
Pasientvekt over 100 kg (220lbs)

*Høyere vektgrense med inkludert Heavy Duty Stirrup

Egenskaper


- 1. Enkel å ta på med tibiabånd med tommelgrep og statisk friksjonsbeskyttelse for enkel enhåndsapplikasjon.
- 2. Smussavvisende, justerbare og reposisjonerbare liners for komfort hele dagen.
- 3. Avansert prepreg karbonfiber for maksimal utnyttelse av Triple Action® ankeldel.
- 4. Rigid fremre skinne med lateralt ledd og supramalleolær forlengelse for å motvirke posturale avvik i fot og ankel.
- 5. Triple Action® ankelledd med uavhengig justering av ROM, alignment og fjærmotstand.
- 6. Prepreg fotplate med avvikling og energigjenvinning for mer effektiv gange.
- 7. Y-bøyle for høy belastning gir forbedret stabilitet og pålitelighet.



Justering og tuning

Method TA™ støtter Becker's Systematic Tuning Procedure™ for Triple Action® ankler med enkle instruksjoner for rask tilpassning og optimalisering.

Vår forskningsbaserte metode standardiserer og forenkler prosessen, og gir en effektiv ortose som klinikere kan tilpasse raskt, uten tekniske forsinkelser som kan forlenger pasientbehandlingen.

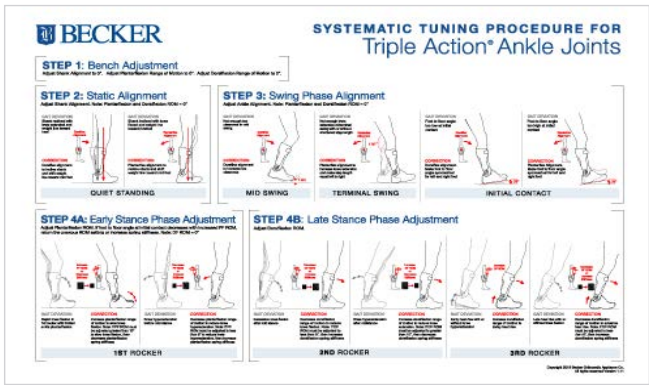

Klikk eller skann QR-koden for å åpne
Systematic Tuning Procedure™ PDF.



Bestillingsinformasjon

Art.nr.	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Max Skostørrelse	AFO Høyde	Fotbladets lengde	Vektbegrensning
625851013	Method TA™	Venstre	Large	Herre: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625852013	Method TA™	Høyre	Large	Herre: 46 EUR (11 US)	406mm (16")	279mm (11")	100kg (220lbs)
625851011	Method TA™	Venstre	Small	Dame: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)
625852011	Method TA™	Høyre	Small	Dame: 40 EUR (9 US)	356mm (14")	241mm (9.5")	100kg (220lbs)

Bruk kun som anvist. Se IFU for fullstendig sikkerhetsinformasjon, indikasjoner, kontraindikasjoner og forholdsregler.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no