

VISSION[™] produktsortiment



Utforsk **VISSION™** sortimentet



Nyhet!

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal

En komfortabel håndleddsorthose i tekstil utviklet for klinisk bruk, ideell når en volar skinne ikke tolereres godt eller gir ubehag under arbeidsoppgaver. Ortosen har to fleksible plaststøtter på dorsalsiden, som begrenser ekstensjon i håndleddet samtidig som full gripefunksjon opprettholdes.

En elastisk håndleddsrem gir ekstra stabilisering, og støttenivået kan justeres ved å bruke en eller begge støttene. Justerbar tommelrem.

Bruksområder:
For behandling av tendinitt, karpaltunnelsyndrom, lateral epikondylitt, hypermobilitet, revmatiske tilstander og uspesifikk smerte.



VISSION™ Wrist Orthosis

En håndleddsorthose i standardmodell laget i et stabilt og slitesterkt elastisk materiale med en myk og behagelig innside. Modellen er helt åpen og enkel å ta på og av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i hånden, over håndbaken og rundt tommelens muskulatur.

Den gir en stabil støtte og har en formbar plastskinne volart. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder:
Betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer



VISSION™ Wrist Orthosis Short

En litt kortere håndleddsorthose, laget i et stabilt og slitesterkt elastisk materiale med en myk og behagelig innside. Modellen er helt åpen, og enkel å ta på og av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i hånden, over håndbaken og rundt tommelens muskulatur.

Denne modellen er uten skinne volart. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder:
Støtter og avlaster håndleddet etter skade, operasjon, fjerning av gips, hypermobilitet, revmatiske problemer, ved kroniske smertetilstander, slitasje i ledd eller overbelastning. Kan også brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.



VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part

Smidig, elastisk håndleddsorthose med tommeldel som er laget i et stødig og slitesterkt elastiskmateriale med en myk og behagelig innside. Ortosen er beregnet til å begrense bevegelse i CMC og MCP 1 leddene, posisjonere tommelen i en funksjonell posisjon samt begrense fleksjon i håndleddet.

Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden. Tommeldelen har et ekstra bånd som ytterligere kan justere tommelgrepet.

Bruksområder:
Lett til moderat instabilitet i CMC og MCP 1, ligamentskader, betennelser, degenerative sykdommer, traume.



VISSION™ Neo Thumb

Myk og fleksibel tommelorthose i lateksfri neopren som gir både varme og støtte til CMC- og MCP-leddene. I hvile holder den tommelen i en nøytral posisjon.

Finnes i to lengder, hvor den lengre modellen også gir støtte til håndleddet. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder:
Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommel og håndledd.

Lang modell



Kort modell



VISSION™ Thumb Orthosis with Stay

Myk, elastisk tommelorthose i lang og kort modell, laget av slitesterkt og komfortabelt materiale. Designet for å begrense bevegelse i CMC- og MCP I-leddene og plassere tommelen funksjonelt. Den lange modellen gir også lett støtte til håndleddet. Begge modellene har en plastskena på tommelsiden med polstret pute samt et åpent, justerbart bånd; skena på den lange modellen kan tas av for økt fleksibilitet.

Bruksområder:
Lang modell: Artrose og/eller instabilitet i CMC- og MCP I-leddene, triggerfinger og De Quervains sykdom.
Kort modell: Instabilitet i CMC- eller MCP-ledd, betennelse, degenerative tilstander, overbelastningsskader og revmatisme.

Lang modell



Kort modell



Fremmer restitusjon med komfort og stabilitet

Vission er en serie ortoser spesielt utviklet for traumebehandling og behandling av skader og overbelastning. Serien har et klassisk, funksjonelt design og tilbyr et bredt utvalg av modeller og størrelser med fokus på materialer, passform og komfort. Den myke innsiden gir høy komfort, mens den fleksible elastikken gir stabilt og behagelig støtte som holder ortosen på plass. Ortosene er laget av slitesterke materialer som beholder både form og elastisitet over tid.



VISSION™ CTS Night Splint

Vission CTS er en nattskinne laget for å lindre og/eller forhindre nattlige dovninger i hendene som oppstår pga. karpaltunnelsyndrom.

Bruksområder:
Karpaltunnelsyndrom.



VISSION™ Finger Splint Splint POSI

En tekstilortose utviklet for klinisk bruk ved immobilisering av hånd og fingre (I–V). Ortosen har en justerbar volar aluminiumsskinne som muliggjør nøyaktig posisjonering i "Position of Safe Immobilization" (POSI) – en funksjon som beskytter leddene, reduserer risikoen for kontrakturer og fremmer optimal tilheling. Den justerbare distale stroppen kan plasseres og tilpasses for å sikre optimal passform. Den brede stroppen bidrar til å redusere ødem i fingrene.

Bruksområder:
Traume, postoperativt, frakturer i metakarpaler og fingre. Dupuytren's kontraktur.



VISSION™ Finger Splint Multi

Denne ortosen er beregnet for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, og har som formål å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi, ved behandling av Dupuytren's syndrom samt ved tilstander som krever midlertidig immobilisering av fingrene. Ortosen kan også brukes i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenene III-V og dets tilhørende falanger.


Bruksområder:
Immobilisering, Dupuytren's syndrom, ved frakturer.



VISSION™ Finger Splint

Fingerskinne for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon som har til hensikt å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi samt ved Dupuytren's syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Bruksområder:
Immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, konservativ fingerterapi, Dupuytren's syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

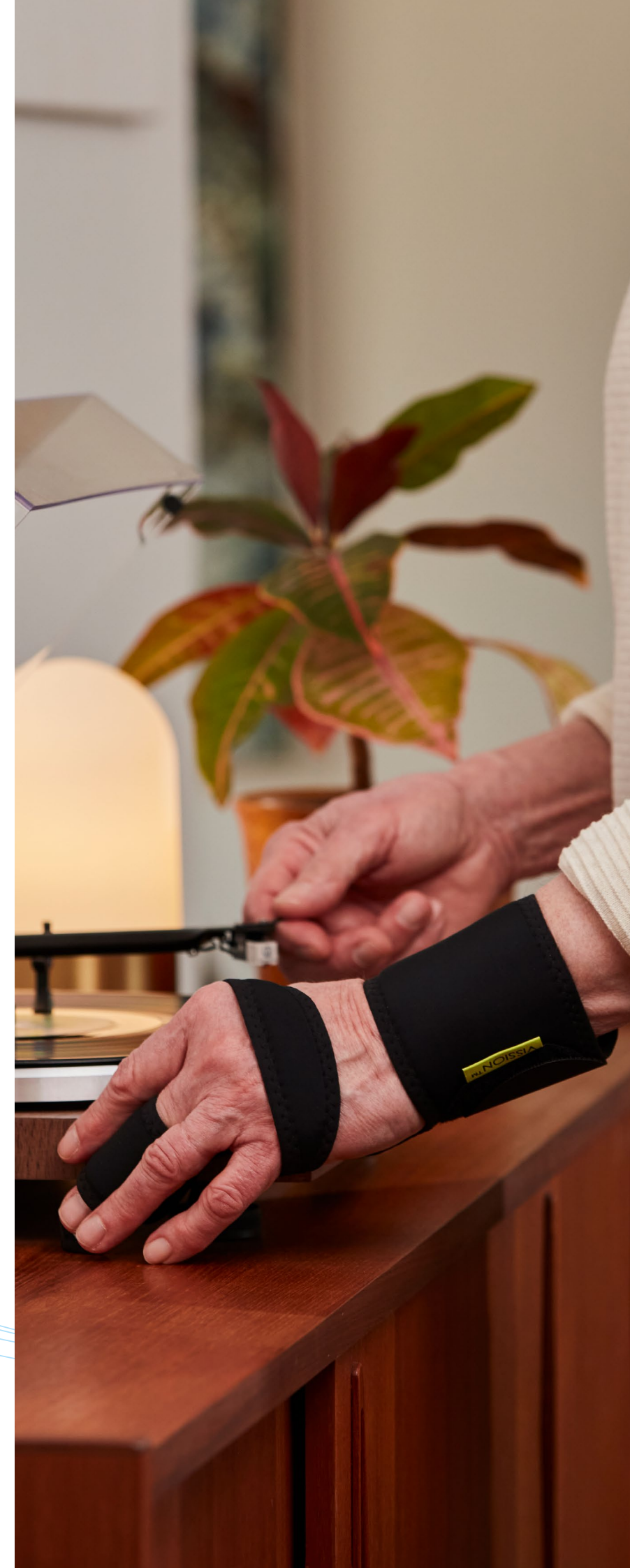

VISSION™ Lycra Neck Collar

Myk halskrage i anatomisk formet modell som gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger haken og brystets konturer for en behagelig passform. Trekket av Lycra gir et moderne utseende samt en sval og god følelse mot huden. Materialet er helt uten Latex.

Bruksområder:

Midlertidig avlastning av nakke ved f.eks. overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.



VISSION™ Shoulder Orthosis Immo

Vission Skulderortose er beregnet for immobilisering og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er spesielt egnet for skulder- og brystkasseskader. Produktet er vendbart og kan brukes på både venstre og høyre skulder.

Bruksområder:

Skulder-, arm-, albue- og skader i skulderområdet (fraktur, dislokasjon og forstuvning). Etter skulder- og brystkassekirurgi. Plexus brachialis parese.

