

# MultiMotion

## Hip Abduction System

Dynamisk Hofte-  
abduksjonssystem  
for barn



# MultiMotion

## Dynamisk hofteabduksjonssystem for barn

For en sikker og rask behandling av korrigerbare kontrakturer i hofteleddet hos barn

- Ortosen posisjonerer barnets ben i en korrekt posisjon, samt stabiliserer hofteleddet
- Adduktorene strekkes ut ved hjelp av langsom tøyning
- Kan låses og låses opp i ønsket posisjon
- Justerbare fleksjons- og ekstensjonsstopp:  
Small 14° intervall og Regular 12° intervall



### Fordeler

- Forbedring/gjenoppretting av bevegeligheten i leddet
- Sikker og trinnvis mobilisering av leddet
- Strekking/mobilisering av spastisk muskulatur
- Forebygger skader og sår på leddbrusken


### Bruksområder

#### Nevrologiske

- Spastisk diplegi
- Spastisk tetraplegi
- Spastisk triplegi

#### Ortopediske

- Kongenital sublaksasjon av hofteleddet

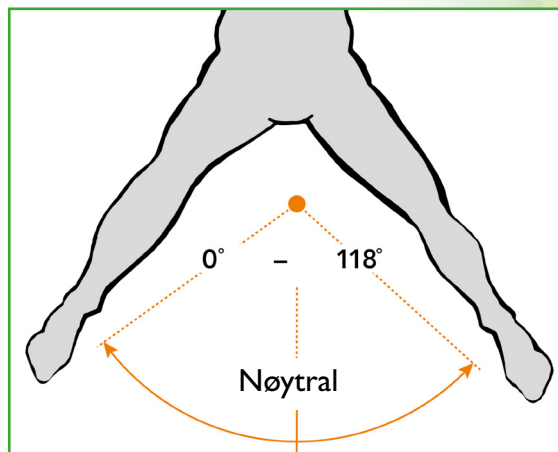

Systemet består av to komponenter, det korrigerende leddet og abduksjonsskinnene.

Komponentene monteres på en individuelt laget ortose.



### Abduksjonsskiner, Aluminium

| Art.nr. | Størrelse | Mål      |
|---------|-----------|----------|
| 69721   | Small     | < 105 cm |
| 69720   | Regular   | > 105 cm |

### MultiMotion korrigerende ledd

| Art. nr. | Størrelse | Maksimalt rotasjonsmoment | Husets diameter | Leddets vekt | Alder  |
|----------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 69152    | Medium    | 3.4 Nm                    | 35 mm           | 77 g         | < 4 år |
| 69140    | Large     | 10.2 Nm                   | 53 mm           | 180 g        | > 4 år |

OBS! Produktet må tilpasses av medisinsk kyndig personale. Personalet skal forsikre seg om at ortosen brukes på rett måte, og at den har korrekt funksjon før pasienten starter å bruke den. Pasienten og foresatte skal instrueres om hvordan ortosen tas på og av, samt hvordan leddet fungerer. Det er også viktig å informere om at innstillingene ikke må endres av andre enn behandlende personale om ikke annet er angitt. Hofteabduksjonssystemet må kun brukes på ortoser for nedre ekstremiteter, og må ikke vektbelastes.