



PRODUKTKATALOG

2022

camp.no



Support for Better Life!

INNHold


	Elements Body	5 - 8
	Hånd- og håndleddsortoser	9 - 50
	Arm- og skulderortoser	51 - 60
	Egne notiser	61 - 64
	Fot- og ankelortoser	65 - 138
	Kneortoser	139 - 166
	Hofteortoser	167 - 182
	Brystproteser	183 - 184
	Nakkeortoser	185 - 188
	Ryggortoser	189 - 224
	Stomiprodukter	225 - 236
	Ortosekomponenter	237 - 260
	Plast og materiale	261 - 294
	Verktøy og tilbehør	295 - 298
	Test, trening og behandling	299 - 306
	Salgsvilkår	307
	Personale	308



Elements Body

www.camp.no

elements *body*

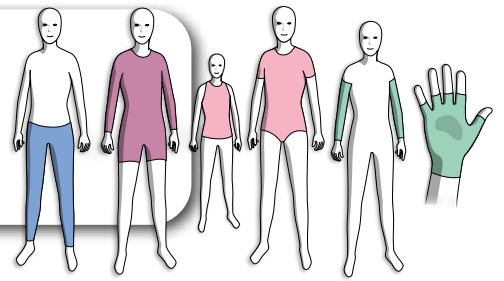

Elements Body

Elements Body er en ortose laget av lycraelastikk som er sammensatt av ulike paneler. Dene er sydd på en slik måte at ortosen gir konstant proprioceptiv feedback i form av trykk og motstand mot bol og ekstremiteter. Draktens funksjon består i at den sitter til mot kroppen og gir trykk mot bol og ekstremiteter og derved økes holdning og stabilitet. Ved å øke dybdesensibiliteten, også kalt proprioceptionen – (individets evne å avgjøre de egne kroppsdelenes posisjon), kan også evnen til finmotorikk samt funksjonelle prestasjoner forbedres. Ved hjelp av ulike forsterkninger kan man kontrollere fleksjon, ekstensjon, pronasjon og supinasjon.

Bruksområder: Cerebral parese, ervervet hjerneskade, ervervet ryggmargsskade, Cerebellær Ataxi, Atetose, Spina Bifida, Slag, MS, vedvarende lav tonus, Ehlers Danlos Syndrom, hypermobilitet, slappe ledd.

Annet: Ortosen bestilles og lages etter individuelle mål. Drakten kan utformes som hel drakt, med korte eller lange armer og ben, armstrømper med eller uten hansker. Forsterkninger og glidelås kan sys på etter behov for støtte eller funksjon. Utformingen bestemmes av ortopediingeniør i samråd med lege og fysioterapeut. Det er ortopediingeniøren som utfører måltakingen etter gjennomgått utdanning. Best resultat oppnås om ortosen brukes i minst seks timer om dagen. Drakten skal initialt brukes kortere stunder for suksessivt å oppnå målet på seks timer per dag. Den bør ikke brukes mer enn 8 - 10 timer per dag. OBS! Elements Body ortoser skal ikke brukes om natten. Ta eventuelt kontakt for å bestille målblanketter, artikler og kliniske studier.



Dere kan også bestille Elements Body digitalt via "Allard Configurator" fra vår hjemmeside. Kontakt kundeservice om dere trenger en lisens."

Art. nr.	Modell
39300	EB Vest uten ermer
39301	EB Vest med korte ermer
39301	EB Vest med lange ermer
39305	EB Body uten ermer
39306	EB Body med korte ermer
39306	EB Body med lange ermer
39310	EB Drakt uten ermer/korte ben
39310	EB Drakt uten ermer/¾ben
39310	EB Drakt uten ermer/lange ben
39311	EB Drakt med korte ermer/korte ben
39311	EB Drakt med korte ermer/¾ben
39311	EB Drakt med korte ermer/lange ben
39312	EB Drakt med lange ermer/korte ben
39312	EB Drakt med lange ermer/¾ben
39312	EB Drakt med lange ermer/lange ben
39320	EB Bukse med korte ben
39320	EB Bukse med ¾ben
39320	EB Bukse med lange ben
39325	EB Strømpe
39330	EB Kort hanske uten fingre
39331	EB Kort hanske med fingre
39335	EB Lang hanske uten fingre
39336	EB Lang hanske med fingre
39340	EB Separat erme

← NYHET!

← NYHET!

← NYHET!

← NYHET!



Hymo

HYMO-ortosen er en tekstil ortose i form av en body og/eller bukse med korte eller lange ermer og ben. Ortosen er beregnet for pasienter med Ehlers Danlos Syndrom. HYMO-ortosen sitter inntil kroppen og kan forbedre holdningen og gi økt stabilitet i leddene, f.eks. kan hoften eller skuldrene stabiliseres ved hjelp av den støtten som ortosen gir. Plaggene er målbestilte med fokus på å stabilisere og begrense bevegelsesomfanget i leddene. Ortosen brukes gradvis inntil den ønskede brukstiden på 8 – 10 timer per dag er oppnådd. Materialene i HYMO-ortosen er nøye utvalgt og produseres og sertifiseres i henhold til Øko-TEX standard 100, klasse II.

Bruksområde:

Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikasjoner:

Ødem, lukserte ledd (ikke reponerte).

Annet: Plaggene målbestilles til hver enkelt bruker. Bestillingsskjema, instruksjoner og målskjema kan lastes ned på Camp sin hjemmeside.

Art. nr.	Modell	Type	Farge
39400	Body med korte ermer	Dame	Svart
39401	Body med korte ermer	Herre	Svart
39402	Body med lange ermer	Dame	Svart
39403	Body med lange ermer	Herre	Svart
39408	Body med 3/4 lange ermer	Dame	Svart
39409	Body med 3/4 lange ermer	Herre	Svart
39404	Bukse med korte ben	Dame	Svart
39405	Bukse med korte ben	Herre	Svart
39406	Bukse med lange ben	Dame	Svart
39407	Bukse med lange ben	Herre	Svart
39410	Bukse med 3/4 lange ben	Dame	Svart
39411	Bukse med 3/4 lange ben	Herre	Svart



Dere kan også bestille Hymo digitalt via "Allard Configurator" fra vår hjemmeside. Kontakt kundeservice om dere trenger en lisens."



Hånd- og håndleddsorthoser

www.camp.no



Mål: Omkrets håndledd.

Vission fingerskinne

Fingerskinne for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon som har til hensikt å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi samt ved Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Bruksområder: Immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46020	Vission Fingerskinne	Small	< 16 cm	Bilateral
46020	Vission Fingerskinne	Medium	16 - 19 cm	Bilateral
46020	Vission Fingerskinne	Large	> 19 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd.

Vission Multifinger ortose

Denne ortosen er beregnet for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, og har som formål å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi, ved behandling av Dupuytren's syndrom samt ved tilstander som krever midlertidig immobilisering av fingrene. Ortosen kan også brukes i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenene III-V og dets tilhørende falanger.

Bruksområder: Immobilisering, Dupuytren's syndrom, ved frakturer.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Svart	Small	< 16 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Svart	Medium	16 - 19 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Svart	Large	> 19 cm	Ve/Hø

SOF-Stretch dynamisk fingerortose kort

Ortose som gir en dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk. Bilaterale vaiere kan bøyes for å tilpasse motstanden og gi plass for eventuelt ødem. Den korte designet tillater full bevegelse i MCP-leddene.

Bruksområder: Fleksjonskontraktur og stramhet i PIP-leddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
51405	Hvit	X-Small	3,8 cm
51405	Hvit	Small	4,4 cm
51405	Hvit	Medium	5,1 cm
51405	Hvit	Large	5,7 cm
51405	Hvit	X-Large	7 cm



Mål: Volart mellom MCP-leddet og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk fingerortose

Ortose som gir en dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk. Bilaterale vaiere kan bøyes for å tilpasse motstanden og gi plass for eventuelt ødem.

Bruksområder: Fleksjonskontraktur og stramhet i PIP-leddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
51400	Hvit	X-Small	5,1 cm
51400	Hvit	Small	6,4 cm
51400	Hvit	Medium	7,6 cm
51400	Hvit	Large	8,9 cm
51400	Hvit	X-Large	10,2 cm
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm



Mål: Volart mellom den distale palmarbøyen og DIP-leddet



Mål: Volart mellom den distale palmarbøyen og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk spiralortose

Ekstensjonsortose (Capener) som gir dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Spiralfjærene er plassert på begge sider av PIP-leddet for å gi samme motstand i alle posisjoner. De kan løsnes eller strammes til ønsket motstand. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk.

Bruksområder: Fleksjonskontrakturer og stramhet i PIP-leddet. Utmerket til kontrakturer opp til 45°. Egner seg ikke til rigide kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
51410	Hvit	Small	6,4 cm
51410	Hvit	Medium	7 cm
51410	Hvit	Large	7,6 cm
51410	Hvit	X-Large	8,3 cm



Mallet fingerhylse

Immobiliserer DIP-leddet i ekstensjon og gir samtidig full bevegelighet i PIP-leddet. Brukes normalt uten polstring og fikseres mot mellomste falangen med selvklebende bånd (ikke inkludert).

Art. nr.	Størrelse	Farge	Lengde	Diameter	Pk.
51422	1	Beige	5,28 cm	1,52 cm	10 stk.
51422	2	Beige	5,18 cm	1,67 cm	10 stk.
51422	3	Beige	5,84 cm	1,87 cm	10 stk.
51422	4	Beige	6,28 cm	1,91 cm	10 stk.
51422	5	Beige	5,87 cm	1,91 cm	10 stk.
51422	5,5	Beige	6,09 cm	2,29 cm	10 stk.
51422	6	Beige	6,43 cm	2,29 cm	10 stk.
51422	7	Beige	6,27 cm	2,54 cm	10 stk.



Buddy strap

Tvillingbånd som holder 2 fingre stødig sammen. Kan enkelt klippes til ønsket størrelse.

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Lengde	Pk.
51430	En størrelse	1,3 cm	12,7 cm	5 stk.

ELEMENTS tommel

ELEMENTS tommel er beregnet til behandling av lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, betennelse og slitasjeskader. Støttebandasjen begrenser bevegelsen i tommelens grunnledd og litt på håndleddet. Støttebandasjen holder tommelleddet varmt.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, betennelse og slitasjeskader.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem eller kraftig hevelse.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsiden er 12 cm (størrelse S).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34105	Grå/Svart	Small	< 17 cm	Ve/Hø
34105	Grå/Svart	Large	> 17 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

Tee Pee™ tommelortose

Tommelortose med tre formbare aluminiumskinner, sentralt, dorsalt og palmart. Ortosen gir stabil støtte for tommelen. Laget av perforert luftig mokkaimitasjon samt fôr som puster.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og instabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28560	Svart	X-Small	<9 cm	Bilateral
28560	Svart	Small	9-10 cm	Bilateral
28560	Svart	Medium	10-11,5 cm	Bilateral
28560	Svart	Large	11,5-13 cm	Bilateral
28560	Svart	X-Large	>13 cm	Bilateral



Mål: Lengde fra håndledd til tommelens IP-ledd

CMC-X Lacer tommelortose

CMC-X Lacer™ tommelortose gir smertelindring ved osteoartritt i tommelens CMC-ledd samtidig som den tillater bevegelse. Lukkingssystemet med snøring kan enkelt justeres og plassere tommelroten i ønsket abduksjonsgrad for å hjelpe til med å stabilisere CMC-leddet, og samtidig tillate tommelen en funksjonell bevegelse. Den justerbare polstrede aluminiumskinnen arbeider sammen med snøringssystemet og gir et lett trykk med ytterligere stabilisering av CMC-leddet. CMC-X Lacer tommelortose er laget av hypoallergen CoolFlex™-materiale for komfort og kompresjon. CMC-X Lacer inneholder ikke latex eller neoprene.

Bruksområder: Osteoartritt i tommelens CMC-ledd, medial sublaksjon av tommelens CMC-ledd.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28562	Svart	X-Small	<14 cm	Bilateral
28562	Svart	Small	14-16 cm	Bilateral
28562	Svart	Medium	16-18 cm	Bilateral
28562	Svart	Large	18-19,5 cm	Bilateral
28562	Svart	X-Large	>19,5 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd





Mål: Omkrets håndledd

CMC tommelortose

Denne tommelbaseortosen er beregnet til å støtte CMC-leddet ved instabilitet og slitasjeskader. Den polstrede indre skinnen i kombinasjon med et ytre elastisk lukkingsbånd gir kompresjon av tommelbasen, og hjelper dermed til med å stabilisere CMC-leddet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og instabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
2856I	Svart	X-Small	<14 cm	Ve/Hø
2856I	Svart	Small	14-15,5 cm	Ve/Hø
2856I	Svart	Medium	15,5-17,5 cm	Ve/Hø
2856I	Svart	Large	17,5-19,5 cm	Ve/Hø
2856I	Svart	X-Large	>19,5 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets rundt MCP-leddene.

CMCcare tommelortose

Tommelortose som støtter tommelens CMC-ledd og holder metakarpalleddet i en funksjonell posisjon med gripefunksjonen opprettholdt. Ortosen har en integrert formbar aluminiumsskinne og en justerbar borrelås. Det anatomiske designet, med sine avfasede kanter, gir en perfekt passform og best mulig komfort. Håndleddet og øvrige deler av hånden kan bevege seg fritt uten å hindres av ortosen.

Bruksområder: Osteoartritt i tommelens ledd, instabilitet i tommelen, postoperativt etter artroplastikk av CMC-I leddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28552	Grå	Small	16 - 19,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Large	22,5 - 26 cm	Ve/Hø

Vission NEO tommelortose kort

Myk, elastisk tommelortose i neoprene som beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket fasong.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning, hypermobilitet i tommel og håndledd.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46025	Kort	Svart	Small	13 - 16 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Svart	Medium	15 - 18 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

Vission Neo tommelortose lang

Myk, elastisk tommelortose i neoprene som beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Denne modellen som er lang gir også en lett støtte for håndleddet. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket fasong.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning, hypermobilitet i tommel og håndledd.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 12,5 cm. Ortosen er laget av Nylon og SBR (neoprene uten Latex).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
46026	Lang	Svart	En størrelse



Mål: Omkrets håndledd.

Tommelortose myk, Tommeliten

Myk, elastisk tommelortose i neoprene. Beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning og hypermobilitet i tommel og håndledd.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 11 cm (størrelse S).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28548	Tommeliten	Beige	Small	<17 cm	Ve/Hø
28548	Tommeliten	Beige	Large	>17cm	Ve/Hø
28558	Tommeliten	Blå	Small	<17 cm	Ve/Hø
28558	Tommeliten	Blå	Large	>17 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Tommelortose myk, Tommestor

Myk, elastisk tommelortose i neoprene. Beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Denne lange modellen gir også lett støtte til håndleddet. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning og hypermobilitet i tommel og håndledd.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 12,5 cm (størrelse S).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
28559	Tommestor	Blå	En størrelse	Ve/Hø



SELECTION® tommelortose Barn

Myk og god tommelortose for barn. SELECTION® materialet er tynt, smidig og tillater huden å puste. Ortosen er tenkt å guide hånd og håndledd til en funksjonell posisjon for å lindre smerte ved betennelser og revmatiske tilstander. Ortosen kan også brukes for å redusere spastisitet ved nevrologiske tilstander i hånd og håndledd. Tommelgrepet er justerbart og kantene kan trimmes ved behov.

Bruksområder: Posisjonering av hånden etter Brakialplexus nevropatier (BPN), spastisk hånd ved Cerebral Parese. Revmatiske sykdommer.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia. Ortosens lengde på tommelens radialsida er 9 cm (størrelse M).

Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Håndflatemål

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35300	Svart	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Ve/Hø
35300	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Ve/Hø
35300	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Ve/Hø
35300	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø
35300	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø

SELECTION® tommelortose Soft

Smidig og elastisk tommelortose som avlaster og gir lett beskyttelse til tommelens ledd. SELECTION® tommelortose Soft er laget av et smidig, moderne og føyelig materiale som puster og som føles behaglig mot huden. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senevester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd og lett CMC-I artrose.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia. Ortosens lengde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Svart	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

SELECTION® tommelortose Rigid

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet rundt tommelens strukturer. Gir avlastning og stabil støtte til tommelens ledd. Gir også støtte og beskyttelse for tommelens MCP-ledd. SELECTION® tommelortose Rigid er laget av et smidig, moderne og føyelig materiale som puster og som føles behaglig mot huden. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senevester. Kan klippes til ønsket form.


Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd og lett til moderat CMC-I artrose.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia. Ortosens lengde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	Medium	15-17cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Svart	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

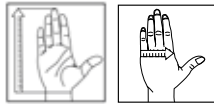

Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens lengde fra håndledd til fingertuppene

SOT Tommelortose

SOT Tommelortose er en anatomisk formet hvileortose for tommel og håndflate. Ortosen posisjonerer tommelen i et optimalt hvileleie. Den er utformet for å begrense bevegelsene i tommelens CMC- og MCP-ledd, gi støtte til håndens bue, samt posisjonere tommelens ledd og muskler i en behagelig hvileposisjon. Ortosen har en justerbar aluminiumkjerne som enkelt kan tilpasses og formes om til en individuell passform. Ortosen kan justeres etterhvert som kontrakturen forandres. Det smidige designet gjør den til et utmerket alternativ i stedet for spesiallagde hvileortoser. Les mer om tilpassing og omforming i brosjyren Tips & Tricks.

Når man har behov for ekstra støtte til håndleddet kan SOT Tommelortose brukes sammen med en håndleddsorthese. Vision (med art.nr. 46029) og Selection (med art.nr. 35207) er utmerkede ortoser for å kombinere med SOT Tommelortose.

Bruksområder: SOT Tommelortose er beregnet til bruk ved artrose, revmatoid artritt, adduksjonskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Annet: SOT Tommelortose kan vaskes i 40°.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28721	Ekstra trekk	Small	Ve/Hø		
28721	Ekstra trekk	Medium	Ve/Hø		
28721	Ekstra trekk	Large	Ve/Hø		

Vission tommelortose kort med skinne

En tommelortose med plastskinne som gir støtte for tommelen og omkringliggende strukturer. Oppbyggingen av det underliggende materialet gjør at skinnen ikke trykker mot ledd eller muskulatur. Materialet er et stabilt og slitsterkt elastikkmateriale som har en myk og behagelig innside. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Instabilitet i tommelens ledd (CMC- eller MCP-leddet), betennelser, slitasjeskader, belastningsrelaterte problemer samt ved revmatiske forandringer.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 13 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets hånledd.

Vission tommelortose lang med skinne

En smidig og elastisk tommelortose i lang modell. Ortosen har en uttakbar metallskinne som gir støtte for tommelen og omkringliggende strukturer samt gir lett støtte til hånleddet. Ortosen er tenkt å begrense bevegelse i CMC og MCP I leddene, og for å posisjonere tommelen i en funksjonell posisjon. Den er laget i et stødig og slitesterkt elastikkmateriale med en myk og behagelig innside. Åpent justerbart tommelgrep. Den todelte lukkingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd.

Bruksområder: Osteoartrose og/eller instabilitet i CMC og MCP I, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsida er 16 cm (størrelse M).

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets hånledd



Mål: Omkrets håndledd.

Vission tommelortose formbar

Tommelortosen har til hensikt å begrense bevegelse i CMC og MCP I leddene, og å posisjonere tommelen i en funksjonell posisjon ved hjelp av en individuelt formet tommelstøtte. Den perforerte termoplastskinnen er plassert i en lomme. Den varmes opp og formes lettest ved å dyppe hele ortosen i et vannbad som har 70 – 72°. Ortosen formes på pasienten for en perfekt anatomisk passform.

Bruksområder: Lett til moderat instabilitet i CMC og MCP I, ligamentskader, Morbus de Quervain, betennelser, degenerative sykdommer og traume.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46024	Tommelortose formbar	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Basic tommelortose, kort og lang

Ortose med plastskinner. Gir støtte for tommel og omkringliggende strukturer. Materialet er klipt på skrå for best mulig passform og elastisitet. Åpent justerbart tommelgrep. Den lange modellen er 2 cm lengre og gir støtte for håndleddet. Kan kombineres med håndleddsband 27448 for ekstra stabilitet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Basic tommelortose kort - ortosens lengde på radialsiden er 12,5 cm.
Basic tommelortose lang - ortosens lengde på radialsiden er 15 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

Tommelortose Rigid Airmed

Ortose for tommelbasen beregnet for posttraumatisk immobilisering av tommelens MCP-ledd. Ortosen gir støtte og avlaster trapezio-metakarpalledet. Hjelper pasienten med å begrense bevegelser som kan forårsake skade eller smerte. Ortosen har innsydde metallskinner som kan formes etter behov. Ortosen er myk og behagelig i bruk. Har ventilasjonshull.

Bruksområder: Posttraumatisk immobilisering av tommelens MCP-ledd, karpaltunnelsyndrom og tendinitt.

Annet: Ortosens lengde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse S).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilateral
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilateral
28551	Grå	Small	14 - 18 cm	Bilateral
28551	Grå	Large	18 - 22 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd.

Sporlastic tommelortose

Stabil tommelortose laget av plastmateriale for immobilisering av tommelen i funksjonsstilling. Påsydd borrelås gir fleksibel lukning. Stockinette i high-tech fiber som tar opp fuktighet og gir myk polstringseffekt er inkludert.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt og instabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28545	Beige	Small	<17 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Large	>19 cm	Ve/Hø
28547	Ekstra innerhanske	Small		Bilateral
28547	Ekstra innerhanske	Medium		Bilateral
28547	Ekstra innerhanske	Large		Bilateral



Mål: Omkrets håndledd

Lett håndleddsortose

Håndleddstøtte i neoprene. Gir varme og støtte til håndleddet. Holdes på plass ved å festes rundt tommelen. Kan klippes til ønsket passform.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer og avlastning.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
28230	Blå	En størrelse	Bilateral





Mål: Omkrets håndledd.

ELEMENTS håndledd

ELEMENTS håndledd er beregnet til behandling av lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, betennelse og slitasjeskader. Støttebandasjen begrenser bevegeligheten i håndleddet ved hjelp av den innebygde aluminiumskinnen. Støttebandasjen holder også håndleddet varmt.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, betennelse og slitasjeskader.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem eller kraftig hevelse.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 17 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34103	Grå/Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
34103	Grå/Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
34103	Grå/Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
34103	Grå/Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

ELEMENTS Bromsa håndledd

ELEMENTS Bromsa håndledd har som oppgave å hindre dorsalekstensjon av håndleddet for å minske smerte ved bl.a. tennislarm. Myke plastskinner på håndbaken.

Bruksområder: Hindre dorsalekstensjon av håndleddet for å redusere smerte ved bl.a. tennislarm.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34107	Grå/Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
34107	Grå/Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
34107	Grå/Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
34107	Grå/Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

Brems håndleddsartose

Håndleddsartose med to fleksible plastskinner dorsalt, som sammen med det kraftige elastiske båndet begrenser dorsalfleksjon av håndleddet. Motstanden justeres enkelt ved å bruke en eller begge plastskinnene, og ved å plassere det elastiske båndet mer proksimalt eller distalt. Ingen skinne volart som påvirker håndens øvrige funksjoner.

Bruksområder: Avlastning av ekstensorsenene i samband med lateral epicondylitt.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28240	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

SELECTION® Bromsa håndledd

Selection Bromsa håndledd er beregnet for å begrense bevegelsen i håndleddet for å avlaste håndekstensorene, støtte håndleddet og minske smerte ved bl.a. tennisalbue. Ortosen har myke plastskinner på håndbaken, justerbart bånd for tommelen og SELECTION lukking med lisser. Støtten kan tilpasses ved å velge å ha en eller to skinner i lommen. Snøringslukkingen gjør at ortosen bedre slutter seg om hånden og gir en bedre passform.

Bruksområder: Lateral epikondylitt, hypermobilitet, revmatiske problemer, uspesifisert smerte.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	Small	11-14 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål: Omkrets håndledd.

SELECTION® håndledd kort svart

Smidig og elastisk håndleddsortose uten skinne som er laget av et moderne og føyelig materiale som puster og føles behagelig mot huden. Ortosen som er kortere enn Selection Håndleddsortose Soft og Rigid gir støtte for håndleddet som ikke hindrer bevegeligheten men gir en lett kompresjon. Låsingssystem med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen noe med saks for optimal passform. Ekstra bånd kan bestilles separat.

Bruksområder: Støtter og avlaster håndleddet etter skade, operasjon, ved kroniske smertetilstander, slitasje i ledd eller overbelastning. Etter ganglion-operasjoner, ved behov for kompresjon. Hypermobilitet ved Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan også brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia. Ortosens lengde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35222	Kort uten skinne	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

SELECTION® h ndledd kort beige

Smidig og elastisk h ndleddsortose uten skinne som er laget av et moderne og f yelig materiale som puster og f les behagelig mot huden. Ortosen som er kortere enn Selection H ndleddsortose Soft og Rigid gir st tte for h ndleddet som ikke hindrer bevegeligheten men gir en lett kompresjon. L singssystem med sn ring er lett    pne og lukke med en h nd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon g r det mulig   justere formen noe med saks for optimal passform. Ekstra b nd kan bestilles separat.

Bruksomr der: St tter og avlaster h ndleddet etter skade, operasjon, ved kroniske smertetilstander, slitasje i ledd eller overbelastning. Etter ganglion-operasjoner, ved behov for kompresjon. Hypermobile ledd ved Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan ogs  brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo p  Camp Scandinavias YouTube –kanal. G  inn p  www.youtube.com og s k p  Camp Scandinavia. Ortosens lengde p  volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	St�rrelse	M�l	Ve/H�
35223	Kort uten skinne	Beige	X-Small	< 11 cm	Ve/H�
35223	Kort uten skinne	Beige	Small	11 - 14 cm	Ve/H�
35223	Kort uten skinne	Beige	Medium	14 - 17 cm	Ve/H�
35223	Kort uten skinne	Beige	Large	17 - 20 cm	Ve/H�
35223	Kort uten skinne	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Ve/H�



M l: Omkrets h ndledd.



Mål: Omkrets håndledd

Vission håndleddsortose kort

En litt kortere håndleddsortose, laget i et stabilt og slitesterkt elastisk materiale med en myk og behagelig innside. Modellen er helt åpen, og enkel å ta på og av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i hånden, over håndbaken og rundt tommelens muskulatur. Denne modellen er uten skinne volart. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Støtter og avlaster håndleddet etter skade, operasjon, fjerning av gips, hypermobilitet, revmatiske problemer, ved kroniske smertetilstander, slitasje i ledd eller overbelastning. Kan også brukes forebyggende ved tunge eller monotone bevegelsesmoment.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46030	Kort uten skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Gripa håndleddsortose

Ortosen gir effektiv støtte for håndleddet ved tunge eller monotone arbeidsmoment. Et kraftig elastisk bånd støtter håndleddet. "Tuff Grip" inne i håndflaten sikrer et bra grep om ulike verktøy. Laget i samarbeide med montører i verkstedsindustrien.

Bruksområder: Avlastning for håndflaten samt håndleddet og preventivt ved f.eks. monteringsarbeide.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28210	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28210	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndledd Barn

Myk og behagelig håndleddsorthese for barn. Den stabile ortosen har en aluminiumsskinne på volarsiden og to drabånd for en enkel og trinnløs lukking. Skinnen er uttagbar. SELECTION® materialet er tynt, smidig og tillater huden å puste. Tommelbåndene er justerbare og kantene er myke. Fargedetaljene er valgt for å tiltale barn.

Bruksområder: Revmatiske problemer. Nevrologiske skader hvor håndleddet trenger støtte og/eller korrigering. Etter avsluttet gipsbehandling. Betennelser.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35305	Svart	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Ve/Hø
35305	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Ve/Hø
35305	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35305	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Ve/Hø
35305	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Ve/Hø

Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Håndflatemål

Mål 3: Ortosens lengde på volarsiden

SELECTION® Open Wrist Barn

En stabil og enkel håndleddsorthese i det behagelige SELECTION® materialet. Ortosen har en formet aluminiumsskinne på volarsiden. Den har to tommelbånd, ett som festes rundt tommelen, og ett som festes på håndbaken for å holde tilbake tommelen så den ikke faller inn i håndflaten. Selection Open Wrist Barn er beregnet til å immobilisere CMC-ledd og håndledd med formålet å minske smerte, veilede håndleddet til en nøytral posisjon og ved behov for støtte til håndleddet etter traume/operasjon.

Bruksområder: Revmatoid artritt, CP, etter traume/operasjon.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35306	Barn	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: Håndflatemål

Mål 3: Ortosens lengde på volarsiden



Mål: Omkrets håndledd

SELECTION® Open Wrist

En stabil og enkel håndleddsorthese i det behagelige SELECTION® materialet. Ortoosen har en formet plastskinne på volarsiden og en smal plastskinne dorsalt. Ortoosen har et stabiliserende drarundt bånd, og tas enkelt på med en hånd. SELECTION Open Wrist er en tenkt brukt når håndleddet trenger avlastning.

Bruksområder: Betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Ortoosens lengde på volarsiden er 18 cm. Ekstra volarskinne kan bestilles i pk. à 10 stk.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35207	Svart	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35207	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35207	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35207	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35207	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets MCP 2-5

SELECTION® Ulnardeviasjonsortose

SELECTION® Ulnardeviasjonsortose er ment å forbedre fingrenes posisjon for å gi en bedre håndfunksjon og dermed et funksjonelt grep. Ortoosen avlaster, samtidig som den har en smertelindrende effekt. Den gir støtte til MCP- og PIP-leddene, samtidig som det forbedrer fingerekstensorenes draretningsretning. Ortoosen er designet slik at materialet går langt ut på ulnarsiden over 5. MCP-ledd for å gi best mulig støtte, motvirke draretningsretningen og fordele trykket. Det er mulig å feste borrelåsbåndene hvor som helst i materialet, noe som betyr at det ikke er noen begrensninger på hvor båndene er plassert for å oppnå optimal draretningsretning. Fordi ortosen er så tynn og fleksibel, kan den enkelt kombineres med en håndleddortose når ekstra støtte er nødvendig. Spesielt utformede forsterkninger av lavtemperaturplast (ikke overflatebehandlet) kan festes direkte på ortosen.

Bruksområder: For pasienter med artrose. Ulnardeviasjon kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sykdommer som RA. Selection Ulnardeviasjon kan også brukes til hypermobile ledd og for ekstra stabilitet ved nedsatt muskulatur. Skal ikke brukes i forbindelse med kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35218	Svart	X-Small	14-17 cm	Ve/Hø
35218	Svart	Small	17-20 cm	Ve/Hø
35218	Svart	Medium	20-23 cm	Ve/Hø
35218	Svart	Large	23-27 cm	Ve/Hø

NYHET!

SELECTION® Radialis Tommeldel

Tekstil tommeldel som kombineres med SELECTION® Håndleddsortoser 35204, 35205 og 35209. Tommeldelen kan med fordel også kombineres med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til bruk ved Radialisparese (dropphånd på grunn av skade på radialisnerven) for å gjøre det mulig med en funksjonell gripeevne i tiden nerven leges.

Bruksområder: Radialisparese

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Svart	Small	3 - 4 cm	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Svart	Large	5 - 6 cm	Ve/Hø



Mål: Lengde leddsenter MCP I – leddsenter IPI.

SELECTION® Radialis Fingerdel

Tekstil Fingerdel som kombineres med SELECTION® Håndleddsortoser 35204, 35205 og 35209. Fingerdelen kan med fordel også kombineres med SELECTION® Radialis Tommeldel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til bruk ved Radialisparese (dropphånd på grunn av skade på radialisnerven) for å gjøre det mulig med en funksjonell gripeevne i tiden nerven leges.

Bruksområder: Radialisparese.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Small	17 - 20 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Medium	20 - 23 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Large	23 - 27 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets MCP 2-5.



Mål 1: Omkrets håndledd

Mål 2: = Omkrets underarm

SELECTION® håndleddsorthose Soft

Smidig, elastisk håndleddsorthose laget av et moderne og føyeleg materiale som puster og som føles behagelig mot huden. SELECTION® myk har en formet plastskinne på volarsiden og en mykere rett plastskinne på dorsalsiden. Skinnene er uttagbare. Den todelte låsingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform.

Bruksområder: Når håndleddet trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Ekstra volarskinne kan bestilles i pk. à 10 stk.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Svart	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen er en middels stabil håndleddsorthese med dobbel lukkefunksjon. Den kan åpnes opp helt og deretter løst lukkes med borrelås og strammes til med snøring. Brukeren kan selv velge om den skal åpnes helt hver gang ortosen tas på/av eller om bare snøringsfunksjonen skal benyttes. Den har en lav skjæring i hånden for å følge hånden sitt naturlige punkter/områder for bøyning og utskjæringen rundt tommelen lar thenarmuskulaturen arbeide fritt. Den todelte snørelukkingen i kombinasjon med borrelåsen gjør det mulig å tilpasse vidden ved en bredere underarm. Fordi snøringen kommer fra ulnarsiden minsker risikoen for at tommelen posisjoneres feil. Regulerbart tommelbånd som utgår volart. På grunn av materialets konstruksjon er det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform. Laget i det luftige og behagelige SELECTION®-materialet med alle funksjonene det medfører. Ortosen er 22 cm lang, dvs. 4 cm lengre enn en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumsskinne på volarsiden som er uttagbar.

Bruksområder: Etter leget radiusfraktur, mykdelsskader, betennelser, slitasjeskader, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Kontraindikasjoner: Skal ikke benyttes ved ulegede frakturer.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.



Mål: Omkrets håndledd

Vission håndleddsortose med skinne

En håndleddsortose i standardmodell laget i et stabilt og slitesterkt elastisk materiale med en myk og behagelig innside. Modellen er helt åpen og enkel å ta på og av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i hånden, over håndbaken og rundt tommelens muskulatur. Den gir en stabil støtte og har en formbar plastskinne volart. Åpent justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Basic håndleddsortose, kort og lang

Enkel håndleddsortose i kort og lang modell med borrelås. Gir god støtte og kompresjon. Åpne modeller som er lette å ta på og av. Uttagbar og formbar aluminiumsskinne volart. Standardmodell med hook som festpunkt og loop som lukning gir fleksibilitet ved valg av størrelse. Kort modell kan kompletteres med ekstra bånd 27448 for ekstra stabilitet. Den lange modellen har et fastmontert elastisk bånd rundt håndleddet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Basic håndleddsortose kort - Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Basic håndleddsortose lang - Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

Basic håndleddsartose

Håndleddsartose med integrert bånd som gir ekstra bra støtte for håndleddet. Det brede proximale båndet med stor overflate for lukking, gir fleksibilitet ved valg av størrelse og forenkler på- og avtaking. Åpen modell som gjør ortosen lett å ta på og av. Uttagbar og formbar aluminiumskinne volart. Høyt skåret ved lillefingersiden for ulnar støtte.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27446	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27446	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Bisca® håndleddsartose

Modellen er spesielt egnet for revmatikere. Ortosen er føret med bomullsmateriale som er behagelig mot huden. Det integrerte båndet i kombinasjon med den uttagbare og formbare aluminiumskinnen gir bra støtte.

Bruksområder: Revmatiske sykdommer og avlastning.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 19 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28042	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28042	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28042	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Elcross® Carpus Flexi håndleddsartose

En av de mest populære ortosene til revmatiske pasienter. Føret med bomull som er behagelig mot huden. Snøresystemet gjør det enklere å lukke og justere. Velegnet for pasienter med svak håndfunksjon. Passformen er fleksibel og passer både en bred og smal underarm. Uttagbar og formbar aluminiumskinne.

Bruksområder: Revmatiske sykdommer og avlastning.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28149	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28149	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28149	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28149	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål: Omkrets håndledd.

Wrist Lacer™ II, kort

Veldig stabil håndleddsortose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes. En pute på innsiden av ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Låsingsystem med unikt design som gir en jevn kompresjon gjennom alle fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatisk og postoperativt.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm. Modellen finnes i beige: Wrist Lacer kort art.nr. 28570. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø

Wrist Lacer™, kort

Meget stabil håndleddsorthese med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Ortosen gir også en ulnar støtte. Laget i slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Justerbart tommelgrep. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og stenge med en hånd. Volar polstring ved skinnen for ekstra komfort.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm. Modellen finnes i svart: Wrist Lacer II kort art.nr. 28578. Det finnes en instruksjonsvideo for dette produktet på Camp Scandinavia sin YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk etter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28570	Kort	Beige	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Wrist Lacer™ II, lang

Veldig stabil håndleddsorthese i lang modell med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes. En pute på innsiden av ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Låsesystem med unikt design som gir en jevn kompresjon ved hjelp av alle de fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm. Modellen finnes i beige: Wrist Lacer lang art.nr. 28572. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavia sin YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk etter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.



Mål: Omkrets håndledd

Wrist Lacer™, lang

Meget stabil håndleddsorthose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Ortosen gir også en ulnar støtte. Laget i slitesterk mukkaimitasjon med fôr som puster. Justerbart tommelgrep. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd. Volar polstring ved skinnen for ekstra komfort.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm. Modellen finnes i svart: Wrist Lacer II lang art.nr. 28579. Det finnes en instruksjonsvideo for dette produktet på Camp Scandinavia sin YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk etter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28572	Lang	Beige	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Tripod™ Wrist Lacer, kort

En meget stabil håndleddsorthose med samme gode komfort og funksjonelle egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbare aluminiumskinner som er plassert ulnar, palmar og dorsalt. Disse skinnene virker sammen for å hindre radial-ulnar deviasjon og minimere fleksjon-ekstensjon av håndleddet. Den ulnare skinnen sammen med det doble snøringssystemet motvirker radial-ulnar deviasjon. Akkurat som Wrist Lacer tillater Tripod en fullt bevegelig tommel. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, radial-ulnar deviasjon, carpaltunnelsyndrom, revmatologiske sykdommer og spastisitet..

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø

V-Strap™ kort

Ligner Wrist Lacer, men har annet lukkesystem og passform. Ortosen følger håndens konturer og passer godt også til en bred hånd. Det patenterte V-formede lukkesystemet holder båndene på plass i D-ringene ved på- og avtaking.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	XX-Small	< 12 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Svart	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets hånledd

V-Strap™ lang

Ligner Wrist Lacer, men er annerledes i lukkesystem og passform. Ortosen følger håndens konturer og passer godt også til en bred hånd. Det patenterte V-formede lukkesystemet holder båndene på plass i D-ringene ved på- og avtaking.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets hånledd



Mål 1: Omkrets håndflate

Mål 2: Omkrets underarm



Mål 1: Omkrets håndflate

Mål 2: Omkrets underarm

CTS Vission

Vission CTS er en nattskinne laget for å lindre og/eller forhindre nattlige dovninger i hendene som oppstår pga. karpaltunnelsyndrom.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom.

Annet: Ekstra bånd kan kjøpes separat.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø
46051	Ekstra båndsett				

CTS håndleddsorthose

Nattortose av tynn, perforert Kydexplast. Immobiliserer håndleddet. Beregnet for pasienter med karpaltunnelsyndrom med nattlige dovninger og hevelser i hendene.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom.

Annet: Ekstra bånd kan kjøpes separat. Båndet finnes under kapittel Plast og Materiale, art.nr. 25030.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndleddsorthose Rigid

Smidig, elastisk håndleddsorthose med tommeldel laget av et moderne og føyelig materiale som puster og som føles behagelig mot huden. Tommeldelen gir ved sitt stabilere materiale en bra støtte og holder tommelen i nøytralposisjon. SELECTION® Rigid har en formet plastskinne på volarsiden og en mykere rett plastskinne på dorsalsiden. Skinnene er uttagbare. Den todelte låsing gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform.

Bruksområder: Når håndleddet og tommelen trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengelser samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia. Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm. Ekstra volarskinne kan bestilles i pk. à 10 stk.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35206	Ridig	Svart	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd



Mål: Omkrets håndledd

Vission håndleddsortose med tommeldel

Smidig, elastisk håndleddsortose med tommeldel som er laget i et stødig og slitesterkt elastikk materiale med en myk og behagelig innside. Ortosen er beregnet til å begrense bevegelse i CMC og MCP I leddene, posisjonere tommelen i en funksjonell posisjon samt begrense fleksjon i håndleddet. Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden. Tommeldelen har et ekstra bånd som ytterligere kan justere tommelgrepet.

Bruksområder: Lett til moderat instabilitet i CMC og MCP I, ligamentskader, betennelser, degenerative sykdommer, traume.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
4603I	Med tommel	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
4603I	Med tommel	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
4603I	Med tommel	Svart	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
4603I	Med tommel	Svart	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
4603I	Med tommel	Svart	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
4603I	Med tommel	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd

Basic håndleddsortose med tommel

Unikt designet håndleddsortose. Den støtter også tommelen uten å bli klumpete. Tommeldelen er delvis frittstående for å følge thenarmuskulaturen og sikre en god passform. Tommelen holdes i nøytralposisjon ved hvile. Uttagbar og formbar aluminiumsskinne volart. Tommelens skinne i fleksibel plast løper langs hele ortosen for ekstra stabilitet. Standardmodell med hook som festpunkt og loop som lukking gir fleksibilitet ved valg av størrelse.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27442	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27442	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø

Ryno Lacer® II h ndleddsortose

Meget stabil h ndledds- og tommelortose med formbare aluminiumskinner dorsalt, volart og radiale. Den radiale tommelskinnen l per i hele ortosens l ngde og immobiliserer tommelen effektivt. Laget i slitesterk m kkaimitasjon med f r som puster. Lukkesystemet med sn ring er lett    pne og lukke med en h nd. Ryno Lacer II er en oppdatert og forbedret RynoLacer med bedre polstring i h ndflaten, mer polstring over tommelen og en oppdatering av velcroen p  ortosen sin underside.

Bruksomr der: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens l ngde p  volarsiden er 22 cm.

Art. nr.	Farge	St�rrelse	M�l	Ve/H�
28576	Svart	X-Small	<14 cm	Ve/H�
28576	Svart	Small	14-16 cm	Ve/H�
28576	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/H�
28576	Svart	Large	18-20 cm	Ve/H�
28576	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/H�




M l: Omkrets h ndledd

Thermoskin artrosehanske

Hanske som gir varme for smertelindring. Yttermateriale av "nonslip" gir et sikkert grep. Det patenterte Trioxon  materialet stimulerer huden til   produsere varme, transporterer fuktighet fra huden og tillater den   puste. Det er klinisk p vist at hansken  ker temperaturen p  hudoverflaten og subkutan med ca. 2 , noe som forbedrer elastisiteten i muskler, sener og ligament.

Bruksomr der: Revmatologiske lidelser.

Art. nr.	Farge	St�rrelse	M�l	Pk.
53234	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53234	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53234	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53234	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53234	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53234	Svart	XX-Large	>30 cm	1 par

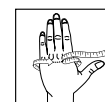

M l: Omkrets rundt MCP-leddene



CS-skinne

CS-skinnen er en blå volar skinne laget av Polypropylen. Skinne er anatomisk forformet i håndens hvileposisjon for å passe en majoritet av voksen befolkning i henhold til antropometriske data. Kan formes om ved å varme den opp med en varmepistol. Skinne er bygd opp av tynnere og kraftigere partier, hvor den kraftigste støtten ligger ved handledet for så å tynnes ut og avsluttes i skinnens lett utover bøyde ender for ikke å gi trykk. Dette gir en dynamisk støtte med god stabilisering der det ønskes.

En myk hvit dorsal plastskinne som er rett i formen. Skinne har en lett støttende funksjon.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Pk.	Ve/Hø
35210	Volar skinne	Blå	En størrelse	22x168 mm	10	Bilateral
35211	Dorsal skinne	Hvit	En størrelse	11x148 mm	10	Bilateral



Ekstra håndledsbånd

Ekstra stabiliserende bånd til våre håndleddsorthoser som passer ulike versjoner.

Art. nr.	Modell	Farge
27448	Basic ekstra håndledsbånd	Blå
35212	Selection ekstra håndledsbånd	Svart
35213	Selection ekstra håndledsbånd	Beige
46032	Vission & Selection ekstra håndledsbånd	Svart



Fingerkontrakturpute

Myk, polyesterfylt fingerseparator som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Kledd med frottémateriale som tar opp fuktighet.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Pk.	Ve/Hø
51616	Blå	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 stk.	Bilateral
51616	Blå	Large	10 x 12,7 cm	3 stk.	Bilateral

Håndflatebeskytter

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Ønskes ytterligere ekstensjon kan en rull enkelt settes inn mellom håndflate og fingre.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
51600	Håndflatebeskytter 1 stk.	Hvit/Beige	En størrelse	Ve/Hø
51601	Håndflatebeskytter 3 stk.	Hvit/Beige	En størrelse	Ve/Hø



Håndflatebeskytter med fingerdeler

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Materialet mellom fingrene gir en lett abduksjon. Kan åpnes helt for enkel påtaging.

Bruksområder: Framskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
51605	Hvit/Beige	En størrelse	Ve/Hø




Carve-It™ håndortose

Ortose som hjelper til med å holde hånden med mild til moderat fingerspastisitet i en funksjonell posisjon. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i hånden er det en anatomisk formet skumdel som bevarer håndflatens velving. En flat underside gjør den enkel å posisjonere f.eks. i sengen. Kan klippes til ønsket form. Universal bruk til både venstre og høyre hånd.


Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus.

Annet: Avtagbart trekk som kan håndvaskes og lufttørkes.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51650	Hvit	Small/Medium	<7,6 cm	Bilateral
51650	Hvit	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilateral

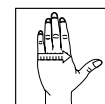

Mål: 2-5 MCP

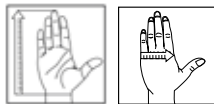

Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens lengde fra håndledd til fingertuppene

SOT Tommelortose

SOT Tommelortose er en anatomisk formet hvileortose for tommel og håndflate. Ortosen posisjonerer tommelen i et optimalt hvileleie. Den er utformet for å begrense bevegelsene i tommelens CMC- og MCP-ledd, gi støtte til håndens bue, samt posisjonere tommelens ledd og muskler i en behagelig hvileposisjon. Ortosen har en justerbar aluminiumkjerne som enkelt kan tilpasses og formes om til en individuell passform. Ortosen kan justeres etterhvert som kontrakturen forandres. Det smidige designet gjør den til et utmerket alternativ i stedet for spesiallagede hvileortoser. Les mer om tilpassing og omforming i brosjyren Tips & Tricks.

Når man har behov for ekstra støtte til håndleddet kan SOT Tommelortose brukes sammen med en håndleddsorthose. Vision (med art.nr. 46029) og Selection (med art.nr. 35207) er utmerkede ortoser for å kombinere med SOT Tommelortose.

Bruksområder: SOT Tommelortose er beregnet til bruk ved artrose, revmatoid artritt, adduksjonskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Annet: SOT Tommelortose kan vaskes i 40°.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28721	Ekstra trekk	Small	Ve/Hø		
28721	Ekstra trekk	Medium	Ve/Hø		
28721	Ekstra trekk	Large	Ve/Hø		

SOT hvileortose

SOT Hvileortose er beregnet for hender som trenger støtte av en ortose ved hvile eller for stretching, for å opprettholde eller øke håndens bevegelse. Den vel gjennomtenkte biomekaniske posisjoneringen av leddene stimulerer den spastiske hånden til avslapping, og kan også bidra til redusert smerte. Ortosen kan også brukes for å posisjonere håndleddet i en nøytral posisjon. Trekket fordeler trykket godt på volar- og dorsalsiden av hånden og armen, og kan på denne måten forhindre eller eliminere hevelse. Ortosen leveres i en grunnposisjon for hvile. Den kan enkelt formes om til POSI (Position of Safe Immobilization) for bruk etter traume og håndkirurgi. SOT er en smidig og lett ortose med moderne utseende. Kjernen av aluminium gjør at ortosen enkelt kan finjusteres til ønsket posisjon. Aluminiumkjernen er omsluttet av polyetenskum som er dekket med et behagelig tekstilmateriale. Trekkets glatte utside og ortosens lave profil gjør at den får plass under klærne. Det finnes en del ekstra tilbehør til ortosen. Det uelastiske håndleddsbåndet kan brukes for å gi et stadig trykk over håndleddet, f.eks. ved spastisitet. Fingerdelere og kiler i flere ulike størrelser.


Bruksområder: Slag, Cerebral Parese, Revmatoid artritt, pleksus- og muskeldystrofi, radialispårese. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) ved traume frakturer, brannskader, ligamentskader og etter kirurgi.

Annet: Foruten det ekstra håndleddsbåndet, finnes det to andre tilbehør: fingerdeler og kile i tre ulike størrelser.



Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens lengde fra håndledd til fingertuppene

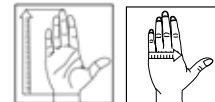

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28710	SOT Hvileortose	Svart	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Ve/Hø
28710	SOT Hvileortose	Svart	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Ve/Hø
28710	SOT Hvileortose	Svart	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Ve/Hø
28710	SOT Hvileortose	Svart	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28710	SOT Hvileortose	Svart	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28710	SOT Hvileortose	Svart	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28711	MCP kile	Svart	XX-Small	Bredde 65 mm	Høyde 10 mm	Bilateral
28711	MCP kile	Svart	Small	Bredde 75 mm	Høyde 15 mm	Bilateral
28711	MCP kile	Svart	Large	Bredde 90 mm	Høyde 20 mm	Bilateral
28712	Fingerdeler	Svart	Barn			Bilateral
28712	Fingerdeler	Svart	Medium			Bilateral
28712	Fingerdeler	Svart	Large			Bilateral
28713	Ekstra bånd	Svart	XXX-Small-X-Small			Bilateral
28713	Ekstra bånd	Svart	Small-Large			Bilateral
28714	Ekstra trekk	Svart	XXX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	XX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	X-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	Small			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	Medium			Ve/Hø
28714	Ekstra trekk	Svart	Large			Ve/Hø



Mål 1: Fra håndleddet til tuppen av langfingeren.

Mål 2: Total lengde (fra midt på underarmen til tuppen av langfingeren).



Comfy håndortose

En hvileortose som hjelper til med å opprettholde/forbedre ekstensjon i håndledd, MP-, PIP- og DIP-leddene. Den forebygger også ytterligere deformiteter, forbedrer ROM og forenkler for en god hygiene av involvert ekstremitet. Ortosen kan justeres til ønsket ekstensjon/fleksjon av håndledd og fingre. For å minske risikoen for skader på huden er trekket laget av en blanding av polyester og bomull som tillater luft å sirkulere.

Bruksområder: Posisjonere og støtte hånden ved håndledds- MP- PIP- eller DIP bøyingsmønster, ulnar deviasjon, dropphånd, deformiteter relatert til nevromuskulære svekkelser.

Kontraindikasjoner: Sirkulasjonsproblemer, trykkpunkter eller hudirritasjoner

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
51645	Comfy håndortose	Blå	Small	15-18 cm	28 cm	Bilateral
51645	Comfy håndortose	Blå	Medium	18-20 cm	32 cm	Bilateral



Kwik-Form™ progressiv håndortose

Ortose med fast skinne og avtagbar polstring. Ortosen kan justeres uten verktøy. Støtter hånd- og håndledd. Tre håndruller i ulike størrelser er inkludert for progressiv behandling av fleksjonskontrakturer i hånden.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av framskredne kontrakturer og endret tonus.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51630	Klarblå	Small/Medium	<18 cm	Bilateral
51630	Klarblå	Medium/Large	>18 cm	Bilateral

Mål: Omkrets håndledd

Kwik-Form™ hvileortose

Ortose som kan justeres til ønsket posisjon uten verktøy. Borrelåsen fester direkte mot ortosens myke overflate. Støtter tommel, hånd- og håndledd.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus og som hvileskinne.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51638	Klarblå	Small/Medium	<18 cm	Ve/Hø
51638	Klarblå	Medium/Large	>18 cm	Ve/Hø




Mål: Omkrets håndledd

Forformet hvileortose

Ortose som holder hånd og håndledd i hvilestilling. Skinnen er laget av lavtemperaturplast 3.2 mm Polyform™ som utmerket kan formes om ved individuell utprøving. Selvklebende bånd som enkelt appliseres på skinnen med varmepistol er inkludert.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus, revmatiske sykdommer og som hvileskinne.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
53223	Beige	Small	<8,9 cm	Ve/Hø
53223	Beige	Medium	9-10,2 cm	Ve/Hø
53223	Beige	Large	>10,2 cm	Ve/Hø

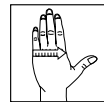

Mål: 2-5 MCP

Hånd- og håndleddsorthoser

Art.nr.	Betegnelse	Farge	Størrelse	Venstre/ Høyre	Stabilitet*	Skinne dorsalt
28210	Gripa Håndledd	Mørkeblå	S - XL	●	0	
34103	Elements Håndledd	Beige/Svart	S - XL	●	1	
34107	Elements Broma Håndledd	Beige/Svart	S - XL	●	2	●
28230	Lett Håndledd	Mørkeblå	One Size	Bilat.	0	
27441	Basic Kort	Mørkeblå	XS - XL	●	1	
27442	Basic Håndledd/Tommel	Mørkeblå	XS - XL	●	1	
27445	Basic Lang	Mørkeblå	XS - XL	●	1	
27446	Basic Åpen	Mørkeblå	XS - XL	●	1	
28042	Bisca Håndledd	Mørkeblå	S - L	●	2	
28149	Elcross Carpus Flexi	Mørkeblå	S - XL	●	2	
28240	Broma Håndledd	Mørkeblå	S - XL	●	2	●
43030	Vission Håndledd kort	Svart	XXS - XXL	●	1	
46029	Vission Håndledd med skinne	Svart	XXS - XL	●	2	
46031	Vission Håndledd med tommel	Svart	XXS - XL	●	2	
35208	Selection Broma Håndledd	Svart	XS - XL	●	2	●
35204	Selection Håndledd Soft	Svart	XS - XXL	●	2	●
35205	Selection Håndledd Soft	Beige	XS - XXL	●	2	●
35209	Selection Multiopen	Svart	XS - XXL	●	2	
35207	Selection Open Wrist	Svart	XS - XL	●	2	●
35306	Selection Open Wrist Barn	Svart	S - L	●	2	●
35222	Selection Håndledd Kort	Svart	XS - XL	●	1	
35223	Selection Håndledd Kort	Beige	XS - XL	●	1	
35305	Selection Håndledd Barn	Svart	XXS - L	●	2	
35206	Selection Rigid/Tommel	Svart	XS - XXL	●	2	●
46050	Vission CTS	Grå	S & L	●	3	
28542	CTS Håndleddsorthose	Lyseblå	S & L	●	3	●
28578	Wrist Lacer II	Svart	XXS - XXL	●	3	●
28579	Wrist Lacer II Lång	Svart	S - XL	●	3	●
28570	Wrist Lacer Kort	Beige	XS - XL	●	3	●
28572	Wrist Lacer Lang	Beige	S - XL	●	3	●
28574	V-Strap Kort	Svart	XXS - XXL	●	3	●
28575	V-Strap Lang	Svart	S - XL	●	3	●
28576	Ryno Lacer II / Tommel	Svart	XS - XL	●	3	●
28577	Tripod Wrist Lacer	Svart	XS - XL	●	3	●

*Stabilitet: 0 = Lav 1 = Medium, 2 = Medium +, 3 = Høy

Skinne volart	Skinne Radial/ Ulnart	Tommel	Justerbart tommeligrep	Snøring	Borrelås- bånd	Motvirker dorsalekstensjon	Total lengde
					●	-	18 cm
●					●	Liten grad	17 cm
					●	Høy grad	15 cm
					●	-	-
●			●		●	Liten grad	18 cm
●		●	●		●	Liten grad	18 cm
●			●		●	Viss grad	21 cm
●			●		●	Liten grad	18 cm
●	●				●	Viss grad	19 cm
●			●	●		Liten grad	18 cm
					●	Høy grad	15 cm
			●		●	Liten grad	13,5 cm
●			●		●	Viss grad	18,5 cm
●		●	●		●	Viss grad	18,5 cm
					●	Høy grad	15 cm
●			●	●		Viss grad	18 cm
●			●	●		Viss grad	18 cm
●			●	●	●	Høy grad	22 cm
●					●	Viss grad	18 cm
●					●	Viss grad	16 cm
			●	●	●	Liten grad	18 cm
			●	●	●	Liten grad	13 cm
●			●	●		Viss grad	13 cm
●		●	●	●		Viss grad	11 - 17,5 cm
●						Meget høy grad	20 cm
●			●		●	Meget høy grad	21 cm
●			●	●	●	Høy grad	21 cm
●			●	●	●	Høy grad	21 cm
●			●	●		Høy grad	21 cm
●			●	●		Høy grad	26 cm
●			●		●	Høy grad	20 cm
●			●		●	Høy grad	26 cm
●	●	●	●	●		Høy grad	21 cm
●	●		●		●	Høy grad	20 cm

Egne notater

[illegible]



Arm- og skulderortoser

www.camp.no



Mål: Omkrets rundt albueleddet

Albue-/hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen og forebygger trykksår.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Pk.
53600	Gul	Small	15-20 cm	Selges i par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	Selges i par
53600	Hvit	Large	25-30 cm	Selges i par
53600	Grønn	X-Large	>30 cm	Selges i par



Mål: Rundt albuen når den er bøyd.

ELEMENTS albue

ELEMENTS Albue er beregnet til behandling av lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte og betennelse. Støttebandasjen gir en lett kompresjon og holder leddet varmt.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte og betennelse.

Kontraindikasjoner: Ødem eller kraftig hevelse.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34101	Grå/Svart	Small	23 - 25 cm	Bilateral
34101	Grå/Svart	Medium	25 - 27 cm	Bilateral
34101	Grå/Svart	Large	27 - 30 cm	Bilateral
34101	Grå/Svart	X-Large	30 - 33 cm	Bilateral



Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen.

ELEMENTS Epi

ELEMENTS Epi er beregnet til behandling av lette og tilfeldige problemer, såkalt tennis-/golfalbue. Epi-bandasjen kan i enkelte tilfeller kombineres med en støttebandasje for håndledd. Bandasjen avlaster senefestet ved hjelp av et lett trykk på underarmsmuskulaturen. Best funksjon oppnås med bruk av de løse ileggsputene som følger vedlagt.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer, såkalt tennis-/golfalbue.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem eller kraftig hevelse.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34104	Grå/Svart	Small/Medium	20 - 28 cm	Bilateral
34104	Grå/Svart	Large/X-Large	28 - 36 cm	Bilateral

EpiGel epicondylitt

Bekvem epicondylittortose med to gelputer som kan flyttes. Den avlaster ved hjelp av kompresjon over ekstensor- og fleksormusklene uten å gi kompresjon rundt underarmen. De myke gelputene er støtdempende. Ortosen har en lav profil. Et enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

Bruksområder: Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28166	Svart	En størrelse	20-35 cm	Bilateral



Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen

EpiFoam epicondylitt

Epicondylittortose med en skumpute som plasseres enten over ekstensormuskelen for å gi avlastning ved lateral epicondylitt, eller over fleksormuskelen for avlastning ved medial epicondylitt. Et enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

Bruksområder: Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28165	Svart	En størrelse	20-35 cm	Bilateral



Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen

Elcross epicondylitt

Ortose som gir trykk over muskelbuken for avlastning av muskulatur, sener og senefester. Minsker smerte ved epicondylitt. Myk pute på innsiden kombinert med en plastbrikke øker trykket under båndet på ortosen.

Bruksområder: Lateral eller medial epicondylitt (tennis- eller golfalbue).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
28162	Blå	Small	20-25 cm
28162	Blå	Medium	25-30 cm
28162	Blå	Large	30-35 cm
28162	Blå	X-Large	35-40 cm



Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen



Mål: Rundt brystkassen på høyde med/under armhulen.

HemiSafe skulderortose

Myk og behagelig skulderortose med perfekt anatomisk passform. HemiSafe er beregnet til bruk ved hemiplegi etter slag for å minske smerte i skulderleddet og redusere risikoen for sublaksjon. Ortosen gir støtte for skulderleddet, men tillater bevegelse ved daglig aktivitet. HemiSafe er laget i et materiale som puster. En pute til å legges i armhulen ved ønske om økt abduksjon er inkludert. Ortosen kan tas av og på med en hånd.

Bruksområder: Minske smerte i skulderleddet etter slag. Redusere risikoen for sublaksjon i skulderleddet.

Annet: Latexfri

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Ve/Hø
28157	Hvit	Small	80-100 cm	Ve/Hø
28157	Hvit	Medium	100-120 cm	Ve/Hø
28157	Hvit	Large	120-140 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkrets brystkasse
Mål 2: Lengde overarm

Vission skulderortose IMMO

Vission Skulderortose er beregnet for immobilisering og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er spesielt egnet for skulder- og brystkasseskader. Produktet er vendbart og kan brukes på både venstre og høyre skulder.

Bruksområder: Skulder-, arm-, albue- og skader i skulderområdet (fraktur, dislokasjon og forstuvning). Etter skulder- og brystkassekirurgi. Plexus brachialis parese.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm

Armslynge på rull

Denne enkle varianten av armslynge (Collar'n Cuff), mitella, leveres på rull à 12 meter. I forpakningen følger det med to ruller, hvor den ene ligger i en dispenser og 10 stk. Y-borrelåsfester for å skape en fiksering av armen. Materialet er mykt og smidig samtidig som det holder formen selv under belastning.

Bruksområder: Anbefales ved traume på håndledd, albue og skulder. Kan også brukes i kombinasjon med gips.

Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
42212	Armslynge på rull	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rull




NYHET!

Armslynge FOAM

Armslynge med ekstra bånd for fiksering. Vattert materiale. Justerbart skulderbånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
2003I	Grå	Small	28-36 cm	Bilateral
2003I	Grå	Medium	35-42 cm	Bilateral
2003I	Grå	Large	41-49 cm	Bilateral
2003I	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilateral

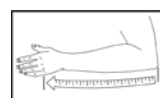


Mål: Albue til MCP.

Armslynge BOMULL


Enkel armslynge av bomull med trinnløst skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig med bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
4710I	Grå	Small	25-28 cm	Bilateral
4710I	Grå	Medium	27-30 cm	Bilateral
4710I	Grå	Large	29-32 cm	Bilateral
4710I	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilateral

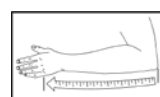

Mål: Albue til MCP.

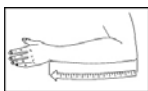

Mål: Albue til håndledd

Armslynge NETTING

Luftig armslynge med trinnløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig for bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm.
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilateral
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilateral



Mål 1: Slynge Høyde og Bredde

Mål 2: Omslag Høyde og Lengde

Armslynge WRAP

Tradisjonell armslynge i to deler som kan justeres uavhengig av hverandre. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Armdelen har en plastspenne på ryggen som holder sammen de to båndene for å hindre at disse glir ut over skuldrene. Omslaget justeres trinnløst med borrelåsbånd.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm.
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilateral
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilateral



Mål 1: Slynge Høyde og Bredde

Mål 2: Omslag Høyde og Lengde

Armslynge todelt, blå

Armslynge i foam med bredt avtagbart bånd for fiksering. To bærende bånd som fordeler vekten over begge skuldrene. Krysspennet på ryggen holder båndene på plass. Justerbare bånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.


Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
20045	Blå	Small/Medium	24 cm, 32 cm	10 cm, 100 cm	Bilateral
20045	Blå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 135 cm	Bilateral

Armslynge "8"

Lett og luftig armslynge til avlastning av skulder, arm og hånd. To brede regulerbare bånd fordeler vekten over begge skuldrene og samles i en metallring på ryggen. Kan tas på og av med en hånd. Velegnet ved nevrologiske sykdommer.

Bruksområder: Nevrologiske sykdommer, avlastning, posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
53200	Beige	Small/Medium	< 34,5 cm	Bilateral
53200	Beige	Large/X-Large	30-38 cm	Bilateral

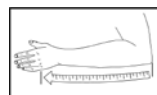

Mål: Lengde underarm albue - MCP

Skulderlås

En universal armslynge med lav profil som er enkel å applisere. Den leveres komplett med et midjebånd rundt kroppen der overarmen er festet for effektivt å immobilisere skulderen. Håndleddsfestet fester til midjebåndet foran og dette festes i sin tur igjen ved skulderstroppen med hjelp av en hurtigspenne. Den har dessuten et ekstra tommelbånd for å holde hånden i rett vinkel for å unngå dropphånd. Skulderstroppen er justerbar for å få en komfortabel passform for pasienten og for å passe til både venstre og høyre side. Det finnes en stor komfortpute som fordeler trykket over skulderen/kragebenet. Dette er en skulderlås som er lett å montere, og som er komfortabel og enkel i bruk. Midjebåndets lengde er 120 cm.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
42213	Skulderlås	Svart	En størrelse



NYHET!



Mål: Omkrets overarm proximalt.

Humerux Humerusortose

Denne humerusortosen er basert på de velkjente prinsippene for en Sarmiento ortose, en jevn sirkulær kompresjon. De tre sirkulære båndene strammes uavhengig av hverandre. Forankringen av ortosen over skulderområdet gjør at den sitter godt uten å gli ned. Stroppen som går under motsatt arm har avtagbar polstring for økt komfort. Dette gir en behagelig ortose som er enkel å ta og som pasienten lett kan godta. Det ventilerende materialet i ortosen lar huden puste og reduserer risikoen for irritasjon. Ortosen har to plater av termoplast som kan justeres ved oppvarming om nødvendig, og formen kan justeres med saks. I de fleste tilfeller er ikke dette nødvendig. Ortosen gir fri bevegelse av albueleddet. Tekstilmaterialene er testet i samsvar med Øko-tex standard 100 og inneholder ikke lateks.

Bruksområder: Humerusfrakturer (Skaftfrakturer).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Lengde	Omkrets
62105	Svart	Small	28 cm	18 - 26 cm
62105	Svart	Medium	30 cm	26 - 34 cm
62105	Svart	Large	32 cm	34 - 42 cm
62105	Svart	X-Large	34 cm	42 - 50 cm



ROM albueortose

Postoperativ albueortose designet for å låse eller kontrollere albuens bevegelse ved behandling av ligamentskader eller stabile frakturer. Tillater kontroll fra 0° til 90° i ekstensjon og fra 0° til 120° i fleksjon. Bevegelsen endres enkelt i 10° intervall. Ortosens lengde og omfang justeres fra 36 cm til 45 cm. Ortosen inkluderer en armslynge.

Bruksområder: Frakturer, postoperativt, tilstand hvor det kreves kontroll av fleksjon og ekstensjon.

Art. nr.	Størrelse	Ve/Hø
62150	En størrelse	Ve/Hø
62149	Ekstra polstring	Ve/Hø

ROM albueortose UniBor

Postoperativ albueortose med den siste generasjonens teknologi. Bevegelsen endres enkelt i fleksjon-ekstensjon i 10° intervall med 120° ROM. Leddet kan låses i ønsket posisjon. Ortosens lengde og omfang kan justeres. En teleskopisk håndstøtte som kan justeres og koples på og av for kontroll av pronasjon-supinasjon, kan bestilles til ortosen. ROM Albueortose UniBor stabiliserer armen og tilbyr en bekvem og effektiv behandling.

Bruksområder: Kontroll av fleksjon-ekstensjon av albuen og pronasjon-supinasjon etter traume.

Annet: Lengden på den daglige behandlingen og behandlingstiden skal ordineres av en lege.



Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62151	Albueortose UniBor	Bilateral
62152	Ekstra bånd	Bilateral
62153	Hånddel	Bilateral
62154	Ekstra polstring	Bilateral

Egne notater

[illegible]

Egne notater

Egne notater

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Fot- og ankelortoser

www.camp.no



Mål: Omkrets ankel.



Mål: Omkrets ankel.



Mål: Omkrets over vristens høyeste punkt.

Albue-/hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate som beskytter huden og forebygger trykksår.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Pk.
53600	Gul	Small	15-20 cm	1 par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	1 par
53600	Hvit	Large	25-30 cm	1 par
53600	Grønn	X-Large	>30 cm	1 par

ELCROSS® ankel

Smidig og myk ankelstøtte i bomull og lycra, formet som en strømpe, noe som gir en jevn kompresjon. Det integrerte elastiske båndet løfter fotens lateralside for å forhindre forstuvning av ankelen. Lett å applisere.

Bruksområder: Lett instabilitet i ankelen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28181	Blå	Small	20-25 cm	Ve/Hø
28181	Blå	Large	25-30 cm	Ve/Hø

ELEMENTS ankel

ELEMENTS ankel er beregnet til behandling av lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, forstuvninger og vrikninger (innover eller utover). Støttebandasjen kan brukes med eller uten de elastiske båndene. Støttebandasjen gir lett kompresjon og holder leddet varmt. Leddets bevegelsesomfang begrenses av de elastiske drabåndene.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, forstuvninger og vrikninger.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem, kraftig hevelse, nevropati, fotproblemer pga. diabetes eller bensår.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34100	Grå/Svart	Small	20 - 23 cm	Bilat.
34100	Grå/Svart	Medium	23 - 26 cm	Bilat.
34100	Grå/Svart	Large	26 - 29 cm	Bilat.

ASO® ankelortose

Stabil ankelortose med lav profil og stabiliserende snøring foran. De uelastiske nylonbåndenes plassering etterligner taping og hindrer foten å supinere/pronere. Båndene justeres avhengig av skadens karakter. For ytterligere komfort har ortosen fått en ny forsterket CoolFlex polstring på innsiden langs Akillessenen.

Bruksområder: Akutt- og langvarig instabilitet i ankelen og preventivt ved utøving av idrett.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28188	Uten skinner	Svart	XX-Small	22,5-25 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral
28188	Uten skinner	Svart	XXX-Large	>40 cm	Bilateral




Mål: Pådragsmål

ASO® ankelortose med skinner

Stabil ankelortose med lav profil, uttagbare plastskiner medialt og lateralt samt stabiliserende snøring foran. De uelastiske nylonbåndenes plassering etterligner taping og hindrer foten å supinere/pronere. Båndene justeres avhengig av skadens karakter. For ytterligere komfort har ortosen fått en ny forsterket CoolFlex polstring på innsiden langs Akillessenen.

Bruksområder: Akutt- og langvarig instabilitet i ankelen og preventivt ved utøving av idrett.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28186	Med skinner	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral
28186	Med skinner	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilateral
28186	Med skinner	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilateral
28186	Med skinner	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilateral
28186	Med skinner	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral
28186	Med skinner	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral

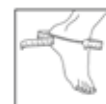

Mål: Pådragsmål



Mål: Pådragsmål

ASO®EVO™

Stabil ankelstøtte med lav profil og stabiliserende snøring foran. De uelastiske nylonbåndenes plassering etterligner taping og hindrer foten i å supinere/ pronere. På ASO®EVO™ gir nylonbåndene rundt calcaneus en større motstand mot inversjon/eversjon av calcaneus, enn standard ASO. Den øvre delen er forsterket med en plastmansjett, og dermed forbedres beskyttelsen mot høye ankelforstuvninger. For ytterligere komfort har ortosen fått en ny forsterket CoolFlex polstring på innsiden langs Akillessenen.

Bruksområder: Akutt- eller langvarig ankelinstabilitet, preventivt ved idrett, høye ankelforstuvninger og instabilitet i subtalarleddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28189	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral
28189	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilateral
28189	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilateral
28189	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilateral
28189	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral
28189	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral



Mål: Pådragsmål

ASO®EVO™ Quatro

Stabil ankelstøtte med en lavere profil enn ASO EVO. Materialet rundt foten er redusert for å ikke begrense plantar fleksjon. De uelastiske nylonbåndene etterligner teiping og hindrer foten i å supinere/pronere. På EVO Quatro gir nylonbåndene rundt calcaneus en større motstand mot inversjon/eversjon av calcaneus, enn standard ASO. Den øvre delen er forsterket med en plastmansjett, og dermed forbedres beskyttelsen mot høye ankelforstuvninger. For ytterligere komfort har ortosen fått en CoolFlex polstring for å gi en bedre komfort, samt Skinloc materiale for å hindre glidning.

Bruksområder: Akutt- eller langvarig ankelinstabilitet, preventivt ved idrett, høye ankelforstuvninger og instabilitet i subtalarleddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28192	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral
28192	Svart	Small	27,7-30 cm	Bilateral
28192	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilateral
28192	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilateral
28192	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral
28192	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral


ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS stretch up er beregnet til bruk om kvelden/natten ved behandling av Plantar Fascitt. Strømpen brukes om natten eller ved hvile annen tid på døgnet. Dette produktet er beregnet for bruk på en person. Størrelse: S, M og Large. Passer både til venstre og høyre fot.

Bruksområder: Brukes om kvelden/natten ved behandling av Plantar Fascitt.

Kontraindikasjoner: Sirkulasjonsproblemer, åpne sår på ben eller fot, ødem, hammertå, hudproblemer og/eller under graviditet. Strømpen skal ikke brukes av noen som nylig har gjennomgått en operasjon i fot og/eller ben.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34108	Svart	Small	< 20 cm	Bilateral
34108	Svart	Medium	20 - 40 cm	Bilateral
34108	Svart	Large	> 40 cm	Bilateral

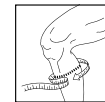

Mål: Omkrets legg.

Ankelortose Cool Gel

En ankelortose som gir immobilisering, kjøling og kompresjon for å redusere hevelse etter akutte skader i ankelen. Ortosen har luftfylte puter for kompresjon samt avtagbare gelputer som kan brukes som kjøleterapi for leddet. Ortosen kan justeres etter ankelbredden og den passer i de fleste sko.

Bruksområder: Akutte eller kroniske ankelskader.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28179	Hvit	En størrelse	25 cm	Bilateral



Mål: Høyde

Ankelortose Stabil Soft

En stabil ankelstøtte med enkle sirkulære bånd. Anatomisk formede sidestøtter av polypropen. Inermateriale av T-foam/skumplast som former seg og følger leggens kontur. Ortosen skal brukes sammen med en stabil sko.

Bruksområder: Akutt og langvarig instabilitet i ankelen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
28184	Svart	En størrelse	Bilateral





PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) er laget for å avlaste hæl og hælssår fra trykk ved sengeleie og kortere forflytting. Ortosen holder foten i nøytralleie ved sengeleie og opprettholder dorsal- og plantarfleksjon ved forflytting. Justerbart stag motvirker innover- og utoverrotasjon ved sengeleie. Regulerbar fot-, tå- og leggdel.

Bruksområder: Velegnet ved f.eks. diabetessår og trykksår.

Annet: Enkelt å ta av- og på polstringen for vask.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
71100	PRAFO Standard	Svart	En størrelse	Bilateral
71110	Komplett polstrings- og båndsett	Svart	En størrelse	

Boston Soft AFO

Ankel- og fotortose i rigid plast, foret med en myk foam. Beregnet til å forbedre posisjonering av fot og ankel, samt redusere spastisitet. Ortosen har en innebygd hælbeskytter for å forenkle leging av hælsår. Boston Soft AFO finnes i to utførelser; med eller uten antirotasjonsstag (stabilizer). Den er lett å rengjøre og kan enkelt trimmes med en saks.

Bruksområder: Ryggmargsbrokk, muskeldystrofi, CP, traume og hælsår

Annet: Stabiliseringsskinne kan bestilles i samme størrelser som Boston Soft AFO.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
71151	Uten stabiliseringsstag	Barn 1	Bilateral	19-20
71151	Uten stabiliseringsstag	Barn 2	Bilateral	21-22
71151	Uten stabiliseringsstag	Barn 3	Bilateral	23-24
71151	Uten stabiliseringsstag	Barn 4	Bilateral	25-26
71151	Uten stabiliseringsstag	Barn 5	Bilateral	27-29
71151	Uten stabiliseringsstag	Barn 6	Bilateral	30-31
71151	Uten stabiliseringsstag	Voksen A	Bilateral	32-34
71151	Uten stabiliseringsstag	Voksen B	Bilateral	35-36
71151	Uten stabiliseringsstag	Voksen C	Bilateral	37-39
71151	Uten stabiliseringsstag	Voksen D	Bilateral	40-41
71151	Uten stabiliseringsstag	Voksen E	Bilateral	42-44
71151	Uten stabiliseringsstag	Voksen F	Bilateral	45-46
71152	Til 71151	Stabiliseringsskinne		



Bebax framfotsortose

Bebax er en innovativ pediatrik fotortose designet for progressiv og dynamisk korreksjon av kongenitale framfotsfeilstillinger. Ortosen er et medisinsk akseptert alternativ til gips. Bebax eliminerer vanlige hudproblem som kan oppstå under gips. På undersiden mellom framfot og hæl finnes et ledd som gjør det mulig å justere vinkelen i alle plan. Den er laget av økologisk kunstlær som er testet i henhold til Øko-Tex Standard 100, uten krom og latex. Den har lav vekt, en myk polstring og er lett å ta på og av. Størrelser fra og med 10 1/2 har bånd over vristen for å holde hælen på plass. Ortosen er ikke egnet for å gå på, hvilket gjelder alle størrelser.

Bruksområder: Kongenitale feilstillinger i framfoten.

Annet: Størrelse = lengden på innersålen

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
28637	Hvit	7,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	8 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	8,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	9,0 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	9,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	10 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	10,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	11,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	12,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	13,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	14,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvit	15,5	Ve/Hø
28637	Hvit	16,5 cm	Ve/Hø

Surestep™ - Løsninger for tågåere

Indy 2 Stage - Solid

Indikasjoner:

- Stramme/spastiske plantarfleksorer
- Manglende evne til å få foten i 90° med kneet i ekstensjon
- Pronasjon eller hyperekstensjon når hælen er i bakken



Indy 2 Stage - Uttalt PLS, Dorsalfleksjons assistanse

Indikasjoner:

- Stramme/spastiske plantarfleksorer
- Evne til å få foten i 90° med kneet i ekstensjon
- Barnet kan få hælen ned uten overdreven pronasjon eller hyperekstensjon



Tågåer SMO

Indikasjoner:

- Konstant tågåing
- Evne til å få foten til 90° med kneet i ekstensjon
- Gange på tærne i mer enn 50% av tiden (uendret ved bruk av sko)
- Anterior vektlinje og mangel på lateralt vektskifte
- Sensoriske mangler



SMO

Indikasjoner:

- Tågåing i korte perioder
- Evne til å få foten til 90° med kneet i ekstensjon
- Overflødig pronasjon
- Mindre enn 50% av tiden brukes på tærne (forbedres med sko)
- Anterior vektlinje og mangel på lateralt vektskifte
- Sensoriske mangler



Viktige hensyn

- Alder
- Bevegelsesområde
- Primære mangler
- Motorisk ferdighetsnivå
- % av tiden på tærne
- Brukerhistorie
- Postural kontroll





SureStep SMO

SureStep er en dynamisk ankelortose beregnet for barn. Ortosen motvirker pronasjon i fot og ankelledd hos barn med lav muskeltonus. Koordinasjon og balanse forbedres. SureStep kan brukes med en vanlig sko. Er laget av en meget lett og tynn plast. Lages etter individuelle mål.

Bruksområder: Moderat eller alvorlig pronasjon av fotbladet (plano-valgus) sammen med en av følgende: lav tonus, slappe ligament, forsinket gange, dårlig balanse, trøtte føtter og om barnet unngår å gå.

Kontraindikasjoner: Kontrakturer - foten skal nå nøytralposisjon (90°) ved passiv manipulasjon, forhøyet muskeltonus, spastisitet.

Annet: SureStep lages i USA etter mål. Ved spørsmål om måltaging kontakt ortopediingeniøren din eller oss.

Art. nr.	Modell	Type	Pk.	Vekt
28633	Surestep SMO, Standard	Målbestilt	Par	Opp til 36 kg
28634	Surestep SMO, Standard	Målbestilt	Stk.	Opp til 36 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Tilvalg	Stk.	
28733	Toe Walking Extension	Tilvalg	Stk.	
28734	Club Foot Trim Lines	Tilvalg	Stk.	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Tilvalg	Stk.	
28635	Måleveske			
93300	Måleveske til utlån			

SureStep BigShot SMO

Fordi mange barn går over fra Surestep til en mindre ortose, har en del barn fortsatt behov for maksimal støtte og stabilitet. For disse har vi funnet fram til BigShot. Denne ortosen har samme fleksibilitet som Surestep systemet og kan brukes av de barn som har vokst fra Surestep, eller som nærmer seg vektgrensen på 36 kg. Den myke silikonlignende innerhylsen gjør ortosen bekvem. Den ytre fleksible rammen av plast gir en fleksibel støtte.

Bruksområder: Moderat eller utpreget pronasjon av fotbladet (plano-valgus) sammen med en av følgende: lav tonus, slappe ligament, forsinket gange, dårlig balanse, trøtte føtter, om barnet unngår å gå, > 36 kg.

Kontraindikasjoner: Kontrakturer- Foten skal nå nøytralleie (90°) ved passiv manipulasjon, forhøyet tonus, spastisitet.

Annet: SureStep BigShot lages i USA etter mål. Ved spørsmål om måltaging kontakt ortopediingeniøren din eller oss. Unntaksvis er en gipsavstøpning nødvendig. I så fall kommer Camp til å ta kontakt.



Art. nr.	Modell	Type	Pk.	Vekt
28636	Surestep Big Shot	Målbestilt	Par	Over 36 kg
28636	Surestep Big Shot	Målbestilt	Stk.	Over 36 kg
28736	Surestep Big Shot Lite	Målbestilt	Par	22 - 40 kg
28737	Surestep Big Shot Lite	Målbestilt	Stk.	22 - 40 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Tilvalg	Stk.	
28733	Toe Walking Extension	Tilvalg	Stk.	
28734	Club Foot Trim Lines	Tilvalg	Stk.	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Tilvalg	Stk.	



SureStep Advance

SureStep Advance er en SMO som strekker seg opp på benets bakside for å hjelpe til med å redusere sagittal instabilitet, motvirke dorsifleksjon/plantarfleksjon, forenkle selvstendig stående og forbedrer proprioepsjon sammenlignet med en tradisjonell ortose. Forøvrig har ortosen SureSteps alle fordeler. Dette unike modifiserbare systemet oppmuntrer barnet til å gå over fra assistert stående til selvstendig stående ved å stabilisere føttene og anklene uten å immobilisere dem. Når barnet starter med å forflytte seg og det oppstår behov for økt bevegelighet og lavere profil på ortosen, kan SureStep Advance lett byttes ut med en SureStep SMO.

Bruksområder: Pronasjon, lav tonus, vektbærende instabilitet i tre plan, ingen evne til å opprettholde et selvstendig stående, lett tågange.

Kontraindikasjoner: Forhøyet muskeltonus, spastisitet, graverende tågange.

Art. nr.	Modell	Pk.
28639	Gips og mål	Par
28639	Gips og mål	Stk.

SureStep Indy 2 Stage

En ortose med unik design, utviklet slik at barn kan oppnå sin bevegelsesevne fra flere ulike nivåer. Ortosen finnes i to utførelser: Solid, som er uten ledd, og Leddet. Denne unike tottrinnsortosen (en ortose inne i en annen ortose) gjør det mulig å bruke Surestep avhengig av en AFO. Den tillater barnet å forflytte seg på flere ulike måter uten å hemme den normale muskelfunksjonen. Når begge ortosene brukes samtidig, låser SMO'en seg sikkert inne i AFO'en, og omvandler dermed den dynamiske SMO'en til en AFO som gir stabilitet i tre plan uten å begrense den normale bruken av fotens indre muskulatur. Indy 2 Stage er ideell for barn som trenger proksimal støtte av en AFO for å oppnå et uavhengig stående, men som fortsatt har glede av en SMO for å kunne krype og ta seg opp til stående aktiviteter på rett måte. I løpet av den tiden som disse barna utvikles og begynner å ta selvstendige skritt med sin AFO, kan du fortsette å arbeide med å forbedre bevegelsesmønstre og muskelstyrke med SMO'en for å oppnå en smidigere overgang til en minsket bruk av ortoser. Barn med funksjonshinder som fører til at de blir trøttere utover dagen kan starte med å bruke SMO på morgenen for å opprettholde sine funksjonelle muskelgrupper. Senere på dagen kan AFO-delen legges til for å opprettholde et stabilt og funksjonelt gåmønster.

Bruksområder: Hypoton fot og ankel. Barn som trenger hjelp til å forflytte seg. Vanskelighet med å oppnå et stabilt stående. Sagittal og frontal instabilitet/svakhet. Lav proprioceptiv bevissthet.

Kontraindikasjoner: Ankelkontrakturer som begrenser passiv dorsalfleksjon >90°. Alvorlig spastisitet.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
28631	Solid, Gips og mål		Par
28631	Solid, Gips og mål		Stk.
28260	Leddet, Gips og mål	<18 kg	Stk.
28260	Leddet, Gips og mål	18-40 kg	Stk.

Besøk
ALLARDAFO.com
og les mer om:

- Historien og bakgrunnen til hvordan ToeOFF® ble født og hvordan alle produktene er kommet fram i løpet av årene. Hvert produkt har sin egen unike historie.
- **40 REASONS** hvorfor Allard AFO er markedsledende.
- Hvert produkt presenteres med sine respektive egenskaper.
- Siden finnes på svensk og engelsk.

allard|AFO
Support for Better Life!



ATX Foot Lifter droppfotsortose

ATX Foot Lifter er en tekstil droppfotsortose til bruk for personer som kun har lett droppfot, og som trenger en enkel ortoseløsning som hjelper til med å holde foten oppe under gange ute og inne. Ortosen består av en tekstil ankeldel som festes ovenfor malleolene. I tekstildelens bakkappe sitter det en gelplate for å minske trykket mot hælsen. En plate med krok plasseres under snøringen på skoene (mellom snøringen og pløsen). Det elastiske funksjonsbåndet settes i kroken og festes deretter på hver side av den tekstile ankeldelen. Draget reguleres av plasseringen av kroken, samt hvor borrelåsplatene festes mot teksten. Dersom ATX Foot Lifter skal brukes uten sko finnes det en separat fotdel i tekstil som kan kjøpes som tilbehør.

Bruksområder: Hjelper til med dorsalfleksjon for en slapp fot, og bidrar til fraspark ved gange. Beregnet til bruk ved lettere tilfeller av droppfot.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm	Bilateral	Bilateral
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm	Bilateral	Bilateral
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm	Bilateral	Bilateral
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm	Bilateral	Bilateral
28169	ATX Fot-del	Small		17-21 cm	Ve/Hø
28169	ATX Fot-del	Medium		21-25 cm	Ve/Hø
28169	ATX Fot-del	Large		25-29 cm	Ve/Hø
28170	ATX Skostøtte	En størrelse		Bilateral	Bilateral
28171	ATX Elastisk bånd	Small		Bilateral	Bilateral
28171	ATX Elastisk bånd	Medium		Bilateral	Bilateral
28171	ATX Elastisk bånd	Large		Bilateral	Bilateral
28172	Ekstra kroker 2 stk.	En størrelse		Bilateral	Bilateral



Mål 1: Omkrets ankelen, ovenfor malleolen.

Mål 2: Omkrets rundt foten, over vristens høyeste punkt.



Mål: Plastdelens lengde.



NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ er en ortose laget for å hjelpe personer med mild droppfoot til bedre dorsalfleksjon. Den polstrede ortose-plastdelen sitter bekvemt mot benets framside og har en avtagbar og vaskbar polstring. Graden av dorsalfleksjon justeres ved krokens plassering i snøringen samt ved justering av det øvre båndet. Det smidige designet gjør den usynlig under bukser. NAVIGAIT finnes i tre størrelser. Plastdelen kan ved behov trimmes litt i over- og nederkant. Bruk NAVIGAIT 4-Foot sammen med NAVIGAIT ved de tilfeller brukeren ikke benytter sko. Tilgjengelig som tilbehør finns 4-Foot, en produkt beregnet til bruk sammen med NAVIGAIT ved de tilfeller at brukeren ikke bruker sko. Produktet kan også brukes i sandaler hvor det ikke er noe annet å feste i. NAVIGAIT 4-Foot skal sitte på framfoten. Kombinasjonen av elastiske og rigide materialer med en silikonrand på innsiden gjør at den sitter sikkert på plass.

Bruksområder: NAVIGAIT er beregnet til å støtte en fot når muligheten til aktiv dorsalfleksjon er redusert pga. av nevrologiske tilstander som f.eks. Stroke, MS eller Post- polio syndrom.

Kontraindikasjoner: NAVIGAIT skal ikke brukes av personer spastisitet eller som har kraftig ødem.

Annet: NAVIGAIT korrigerer ikke feilstillinger og deformiteter i foten, det skal ved behov behandles med sko og/eller innlegg etter behov. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilateral
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilateral
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilateral
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilateral
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilateral
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilateral
28412	Ekstra gummibånd med krok	X-Small		Bilateral
28412	Ekstra gummibånd med krok	Small/Medium		Bilateral
28412	Ekstra gummibånd med krok	Large/X-Large		Bilateral
28413	Kraftigere gummibånd	X-Small		Bilateral
28413	Kraftigere gummibånd	Small/Medium		Bilateral
28413	Kraftigere gummibånd	Large/X-Large		Bilateral
28414	Ekstra båndsett	X-Small		Bilateral
28414	Ekstra båndsett	Small/Medium		Bilateral
28414	Ekstra båndsett	Large/X-Large		Bilateral

ALLARD AFO MUSKELFUNKSJONSGUIDE

Denne guiden er basert på utvikling og tilbakemeldinger fra utprøvere og pasienter.

Muskelfunksjon:

Ingen eller begrenset

Moderat

Normal funksjon

Mer **DISTAL** svakhet



YPSILON[®]flow^{1/2}



Bevegelsesomfang	● ● ● ● ○
A/P	● ● ○ ○ ○
M/L	● ● ○ ○ ○
Assistert Dorsalfleksjon	● ● ○ ○ ○
Spastisitetskontroll	● ● ○ ○ ○



ToeOFF[®]flow^{2 1/2}



Bevegelsesomfang	● ● ● ○ ○
A/P	● ● ○ ○ ○
M/L	● ● ○ ○ ○
Assistert Dorsalfleksjon	● ● ○ ○ ○
Spastisitetskontroll	● ● ○ ○ ○

Mer **PROKSIMAL SVAKHET**



ToeOFF[®]2 1/2



Bevegelsesomfang	● ● ○ ○ ○
A/P	● ● ○ ○ ○
M/L	● ● ○ ○ ○
Assistert Dorsalfleksjon	● ● ○ ○ ○
Spastisitetskontroll	● ● ○ ○ ○



BLUEROCKER[®]2 1/2



Bevegelsesomfang	● ○ ○ ○ ○
A/P	● ● ● ● ●
M/L	● ● ● ● ●
Assistert Dorsalfleksjon	● ● ● ● ●
Spastisitetskontroll	● ● ● ● ●

ALLARD CUSTOM AFO

I de tilfeller hvor individuelle behov faller utenfor ovenstående parametre, tilbyr Camp Scandinavia produksjon etter individuelle behov etter skanning, mål eller gipsavstøpning. Kontakt kundeservice for mer informasjon eller besøk camp.no.



Ypsilon® Flow^{1/2}

Ypsilon® Flow^{1/2} er droppfotsortosen for den aktive pasienten som har droppfot og/eller trenger mindre støtte i ståfasen. Ypsilon® Flow^{1/2} har en lavere hælhøyde, kun 7 mm i alle størrelser. Den har også en lavere kurvatur på fotbladet, noe som gir mer plass i tåboksen og en smidigere avrulling. Den er utviklet for å tillate optimalt bevegelsesomfang og gi en dynamisk "toe-off" funksjon samtidig som det er mulig for musklene å arbeide mer aktivt. Fotbladet følger fotens fasong, og med hjelp av golvreaksjonskraften kan brukeren utnytte "toe-off" effekten med mindre styrke. Det Y-formede festepunktet ligger på hver side av tibiakammen og minsker risikoen for trykk mot prominenser og tibiakammen. Derfor er dette en ortose for den mer aktive brukeren som stiller høye krav til funksjon og bevegelighet.

Bruksområder: Droppfot med stabil ankel i kombinasjon med ingen til mild spastisitet, pasienter som trenger mer fleksibilitet og mindre støtte.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem, diabetes med bensår, veldig nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. Ypsilon® Flow leveres med komplett båndsett.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Small	23 cm	35,5 cm	Ve/Hø	35-38
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Ve/Hø	38-42
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Large	27 cm	37,5 cm	Ve/Hø	42-45
28880	Ypsilon® Flow ^{1/2}	X-Large	28,5 cm	38,5 cm	Ve/Hø	>45
28884	Polstring	S/M/L			Bilateral	
28884	Polstring	X-Large			Bilateral	
28885	Bånd	En størrelse			Bilateral	

ToeOFF® Flow2½

Gjennom å kombinere vår lange erfaring og utvikling innen produksjonsteknikk, med de ønskemål vi har fått i løpet av årene, har vi nå utviklet ytterligere en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow2½. ToeOFF® har siden introduksjonen i 1997 vært ledende på markedet med sin unike funksjon og sine dynamiske egenskaper.

ToeOFF® Flow har en ny unik oppskrift, med nye egenskaper og fordeler; Lavere hæløyde, ca. 7 mm i alle størrelser, mer ROM i A-P planet og jevnere overflate under fotbladet.

Den har også en lavere kurvatur på fotbladet, noe som gir mer plass i tåboksen og en smidigere avrulling.



ToeOFF®Flow2½ har alle Mikrofixdelene montert ved levering for enklere montering av SoftKIT™, ComfortKIT™ eller CoverKIT™. Båndene er de samme som for ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF®Flow2½ blir det bedre passform i moderne sko med lavere hæløyde. Pasienten får dessuten en skinne med lavere profil i sålen som dessuten er mer dynamisk i A/P planet.

Bruksområder: Droppfoot kombinert med ingen til mild spastisitet, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll og tåamputasjoner.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. Alle Allard AFO leveres med komplett båndsett. Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2 ½

Droppfotsortosen ToeOFF® 2 ½ har samme dynamiske funksjon og stabilitet som en ToeOFF® 2.0, men med en hælhøyde på 7 mm, for å passe bedre i sko med lavere hæl. Den har også mindre tåløft, som gir i mer plass til tærne i skoene. Helt siden starten i 1997, har Allard AFO vært markedsledende med sine unike funksjoner og dynamiske egenskaper.

ToeOFF® 2 ½ har alle MikroFIX delene montert på innsiden ved levering for en rask og enkel montering av polstringen. Båndene er samme som på 2.0, laget av et slitesterkt materiale, og kan leveres med eller uten D-ring. Båndene kan monteres så de lukkes enten innover eller utover på ortosen. Det er alltid viktig å tilpasse alle Allard AFO til skoens hælhøyde. Les mer om dette i Allard AFO Professional Instructions.

Bruksområder: Droppfot kombinert med ingen til moderat spastisitet, i visse tilfeller også ved nedsatt knekontroll. Kan brukes ved tåamputasjoner.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem, diabetes med bensår, sterkt nedsatt sensibilitet og alvorlig spastisitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. Alle Allard AFO leveres med komplett båndsett. Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT™/ ComfortKIT™ og bånd er montert ved levering – kontakt oss for mer informasjon. Posen som følger med produktet er laget av resirkulerte PET-flasker.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28980	ToeOFF® 2 ½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28980	ToeOFF® 2 ½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28980	ToeOFF® 2 ½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28980	ToeOFF® 2 ½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	38-42
28980	ToeOFF® 2 ½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28982	ToeOFF® 2 ½ m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28982	ToeOFF® 2 ½ m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28982	ToeOFF® 2 ½ m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28982	ToeOFF® 2 ½ m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28982	ToeOFF® 2 ½ m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF® 2½ addition er egentlig samme produkt som ToeOFF® 2½, men har fått en overflate av et farget materiale for å gi produktet et annet utseende. Addition finnes i tre fargevarianter: beige, svart og kamuflasje (Camo). Overflaten på Addition gjør at klær glir lettere mot materialet samtidig som hele produktet får en annen farge hele veien ned til slutten av bøylen. Addition finnes kun med bånd med D-ring. Mikrofix delene som båndene fester i sitter på ortosens innside sammen med Mikrofix delene for montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ addition i beige og kamuflasje har en mønstret overflate. Hver enkelt ortose får derfor et unikt mønster, og det kan variere noe mellom ulike ortoser.



Bruksområder: Droppfoot kombinert med ingen til middels spastisitet, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll og tåamputasjoner.

Kontraindikasjoner: Kraftige ødem, diabetes med bensår, meget nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28954	Svart m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28954	Svart m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28954	Svart m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28954	Svart m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28954	Svart m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28955	Camo m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/hø	32-35
28955	Camo m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28955	Camo m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28955	Camo m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28955	Camo m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28956	Beige m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	VE/Hø	32-35
28956	Beige m D-ring	Small	23 cm	38 cm	VE/Hø	35-38
28956	Beige m D-Ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28956	Beige m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28956	Beige m D-ring	X-Large	28,5 cm	43 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2.0

Ved å kombinere vår lange erfaring og utvikling innen produksjonsteknikk, og med de ønsker vi har fått i løpet av årene, har vi nå utviklet ToeOFF® 2.0. ToeOFF® har siden introduksjonen i 1997 vært ledende på markedet med sin unike funksjon og sine dynamiske egenskaper. ToeOFF® 2.0 har samme egenskaper og funksjoner som original ToeOFF®, og dessuten ytterligere utvikling av både form og funksjon. Formen på 2.0 er endret for å gi en smidigere passform, bedre geometri og en sletttere overflate. Dessuten er alle Mikrofix deler montert allerede ved leveranse, for en raskere og enklere montering av SoftKIT eller ComfortKIT. Båndene har en ny løsning, og er laget av ett nytt slitesterkt materiale. Dessuten finnes det bånd med eller uten D-ring. Båndene kan monteres for venstre eller høyre side avhengig av pasientens funksjonsbehov. Ytterligere en nyhet med 2.0 er at størrelse X-Large er 2 cm høyere og dermed passer bedre for en lengre legg. De dynamiske egenskapene er ikke endret, men den graderte dynamiske funksjonen og stabiliteten mellom de ulike størrelsene er den samme som tidligere. ToeOFF® 2.0 har en hælhøyde som er mellom 12 - 15 mm, avhengig av størrelse.

Bruksområder: Droppfoot kombinert med ingen til mild spastisitet, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll og tåamputasjoner.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem, diabetes med bensår, veldig nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. Alle ToeOFF® leveres med komplett båndsett. På ToeOFF® med Velcro er det harde borrelåsbåndet allerede limt fast på ortosen. Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28920	ToeOFF 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28920	ToeOFF 2.0	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28920	ToeOFF 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28920	ToeOFF 2.0	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28920	ToeOFF 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28922	ToeOFF 2.0 m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28922	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28922	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28922	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28922	ToeOFF 2.0 m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® Short

ToeOFF® Kort er en spesialmodell som har kortere tibiadel, bredere fotblad over metatarsalledene, lengre tåsprenning og lavere hælhøyde enn ToeOFF originalortose. Skal brukes sammen med polstring. ToeOFF® Kort har en hælhøyde på 7 mm i alle størrelser.

Bruksområder: Droppfot kombinert med ingen til middels spastisitet, i visse tilfeller også ved nedsatt knekontroll.

Kontraindikasjoner: Kraftige ødem, diabetessår og ved meget nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28990	ToeOFF Kort Svart	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28990	ToeOFF Kort Svart	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28990	ToeOFF Kort Svart	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42



BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® er vår mest rigide og stabile droppfotsortose. Denne har nå fått et oppdatert utseende som BlueROCKER® 2.0. Ortosens form er forandret til en bedre geometri og en med en glattere overflate. Mikrofixdelene, som båndene fester i, sitter på ortosens innside sammen med Mikrofixdelene for montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). Båndene har også fått nytt design og finnes dessuten både med og uten D-ring. Båndene kan enkelt monteres på ønsket side avhengig av pasientens funksjonsbehov. Ytterligere en forandring for 2.0 er at størrelse X-Large er 2 cm høyere enn en i størrelse Large dvs. 45 cm høy. BlueROCKER® 2.0 har en hælhøyde som er mellom 12 - 15 mm avhengig av størrelse.

Bruksområder: Droppfot i kombinasjon med ingen til stor spastisitet, nedsatt kne- og hoftekontroll, svakhet eller funksjonsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balanse, bilateralt funksjonsbortfall og delfotsamputasjon..

Kontraindikasjoner: Kraftige ødem, diabetessår og ved meget nedsatt sensibilitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® 2.0 leveres med komplett båndsett. Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28940	BlueROCKER 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28940	BlueROCKER 2.0	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28940	BlueROCKER 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28940	BlueROCKER 2.0	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28940	BlueROCKER 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28942	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28942	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28942	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28942	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28942	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

BlueROCKER® 2½

Droppfotsortosen BlueROCKER® 2½ har samme dynamiske funksjon og stabilitet som en BlueROCKER® 2.0, men med en hælhøyde på 7 mm, for å passe bedre i sko med lavere hæl. Den har også mindre tåløft, som gir i mer plass til tærne i skoen. Helt siden starten i 1997, har Allard AFO vært markedsledende med sine unike funksjoner og dynamiske egenskaper.

BlueROCKER® 2½ har alle MikroFIX delene montert på innsiden ved levering for en rask og enkel montering av polstringen. Båndene er samme som på 2.0, laget av et slitesterkt materiale, og kan leveres med eller uten D-ring. Båndene kan monteres så de lukkes enten innover eller utover på ortosen. Det er alltid viktig å tilpasse alle Allard AFO til skoens hælhøyde. Les mer om dette i Allard AFO Professional Instructions



Bruksområder: Droppfot i kombinasjon med ingen til alvorlig spastisitet, nedsatt kne- og hoftekontroll, svakhet eller funksjonsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balanse, bilateralt funksjonsbortfall og delfotsamputasjon.

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem, diabetes med bensår og sterkt nedsatt sensibilitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® leveres med komplett båndsett. Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT™/ ComfortKIT™ og bånd er montert ved levering – kontakt oss for mer informasjon. Posen som følger med produktet er laget av resirkulerte PET-flasker.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28970	BlueROCKER® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28970	BlueROCKER® 2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28970	BlueROCKER® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28970	BlueROCKER® 2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28970	BlueROCKER® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28972	BlueROCKER® 2½ m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28972	BlueROCKER® 2½ m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28972	BlueROCKER® 2½ m/D-ring	Large	27 cm	43 cm		42-45
28972	BlueROCKER® 2½ m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



BlueROCKER® Short

SHORT er spesialmodeller som utviklet for å passe personer med kortere tibia og bredere fot over metatarsalledene. Polstring skal alltid brukes for god pasientkomfort.

SHORT har en hælhøyde som er 7 mm i alle størrelser.

Bruksområder: Droppfot i kombinasjon med svake plantarfleksorer, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll. Kan også brukes ved bilaterale problemer og ved delfotsamputasjoner (mest proksimale nivå er Chopart).

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem, diabetes med bensår, veldig nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.

Annet: Mer informasjon om utprøving, indikasjoner, tilpassing, valg av modell og størrelse finnes i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28995	BlueROCKER® Short	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28995	BlueROCKER® Short	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28995	BlueROCKER® Short	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

I de tilfeller ToeOFF® og BlueROCKER® ikke dekker din pasient sitt behov, kan man spesialbestille en individuelt tilpasset Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®. Dette blir da ikke et CE-merket produkt. Bestillingen kan gjøres på flere ulike måter; skanning, positiv gips, negativ gips (plastgips eller STS-sokk) eller etter mål. Utifra gitte spesifikasjoner lages en ortose som følger vanlige ToeOFF®/BlueROCKER® former og egenskaper. Ved bestilling er det en rekke ulike valg som kan gjøres mht. hæløyde, stabilitet og avlastning. Et spesielt skjema skal fylles ut ved bestilling. Dette kan lastes ned under "Dokument" på produktet på hjemmesiden.

Annet:

Kontakt oss for mer informasjon om skjemaer og fremgangsmåte for bestilling av en individuelt laget CustomToeOFF®- eller BlueROCKER®.

Art.nr.	Modell
28460	Custom ToeOFF®
28480	Custom BlueROCKER®



Dere kan også bestille Custom digitalt via "Allard Configurator" fra vår hjemmeside. Kontakt kundeservice om dere trenger en lisens.

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

Når du bestiller en Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®, er det en del saker man må ta stilling till. Nedenfor har vi listet opp de ulike valgene som du kan gjøre og hvordan dette påvirker totalprisen. Det finns et eget bestillingsskjema for disse produktene. Skjemaet kan lastes ned på Camp sin hjemmeside blant produktinformasjonen som ligger på respektive produkt og også i Download Center under Allard AFO.

Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER®					
Custom ToeOFF® Art.nr.	Custom BlueROCKER® Art.nr.	Beskrivelse			Tilleggs kostnad
28460 1190-1310	28480 1190-1310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, venstre	Fotblad 190,195 - 310 mm		Grunnpris
28460 2190-2310	28480 2190-2310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, høyre	Fotblad 190,195 - 310 mm		Grunnpris
28463 0001	28483 0001	Fotbladsbredde	+ 5 mm		Nei
28463 0002	28483 0002	Fotbladsbredde	- 5 mm		Nei
28464 0005	28484 0005	Hælhøyde	5 mm		Nei
28464 0007	28484 0007	Hælhøyde	7 mm		Nei
28464 0010	28484 0010	Hælhøyde	10 mm		Nei
28464 0012	28484 0012	Hælhøyde	12,5 mm		Nei
28464 0015	28484 0015	Hælhøyde	15 mm		Nei
28464 0020	28484 0020	Hælhøyde	20 mm		Nei
28464 0025	28484 0025	Hælhøyde	25 mm		Nei
28464 0030	28484 0030	Individuell hælhøyde	Høyere enn 25 mm		Ja
28465 0000	28485 0000	Avlastning	Tibiakammen		Nei
28465 0003	28485 0003	Avlastning 3 mm	Tibiakammen		Nei
28465 0005	28485 0005	Avlastning 5 mm	Tibiakammen		Nei
28466 0000	28486 0000	Individuell avlastning			Ja
28468 0001	28488 0001	Stivhet A/P	+ 1 lag fiber		Ja
28468 0002	28488 0002	Stivhet A/P	+ 2 lag fiber		Ja
28468 0003	28488 0003	Standard framfot/mykere hæl	+ 1 lag fiber		Ja
28468 0004	28488 0004	Standard hæl/mykere framfot	+ 1 lag fiber		Ja
28469 0001	28489 0001	Stivhet A/P	- 1 lag fiber		Ja
28469 0002	28489 0002	Stivhet A/P	- 2 lag fiber		Ja
28469 0003	28489 0003	Standard framfot/stivere hæl	- 1 lag fiber		Ja
28469 0004	28489 0004	Standard hæl/stivere framfot	- 1 lag fiber		Ja
28470 0001	28490 0001	Stivhet M/L	+ 1 lag fiber		Ja
28470 0002	28490 0002	Stivhet M/L	+ 2 lag fiber		Ja
28471 0001	28491 0001	Stivhet M/L	- 1 lag fiber		Ja
28471 0002	28491 0002	Stivhet M/L	- 2 lag fiber		Ja
28473 0000	28493 0000	Avlastning fotrygg	Høyere innsteg		Nei

Custom ToeOFF®

Det er mulig å bestille en Custom ToeOFF® til pasienter som trenger en annen form pga. atrofi i legg/hypertrofi, unik form på leggen, annen stivhetsgrad med mere. Bestillingen kan gjøres på ulike måter: Skanning, negativ gips (plastgips eller STS-sokk), positiv gips eller etter mål. Ved bestilling kan en rekke ulike tilleggvalg gjøres med hensyn til hælhøyde, stabilitet, avlastning mm.. Et spesielt skjema skal fylles ut ved bestilling. Skjemaet kan lastes ned under produktet.

Annet: Kontakt oss for mer informasjon om skjemaet og fremgangsmåten for bestilling av en individuelt laget Custom ToeOFF® AFO.

Art. nr.	Modell
28460	Custom ToeOFF®



Custom BlueROCKER®

Det er mulig å bestille en Custom BlueROCKER® til pasienter som trenger en annen form pga. atrofi i legg/hypertrofi, unik form på leggen, annen stivhetsgrad med mere. Bestillingen kan gjøres på ulike måter: Skanning, negativ gips (plastgips eller STS-sokk), positiv gips eller etter mål. Ved bestilling kan en rekke ulike tilleggvalg gjøres med hensyn til hælhøyde, stabilitet, avlastning mm.. Et spesielt skjema skal fylles ut ved bestilling. Skjemaet kan lastes ned under produktet.

Annet: Kontakt oss for mer informasjon om skjemaet og fremgangsmåten for bestilling av en individuelt laget Custom BlueROCKER® AFO.

Art. nr.	Modell
28480	Custom BlueROCKER®



COMBO



Smidig og unik ortoseløsning ved hyperekstensjon i kombinasjon med dropfot.

ToeOFF® har gjennom mange år bevist sin plass både i rehabiliteringsprosessen, men også i dagliglivet hjulpet mange brukere med dropfot til en bedre gange og økt livskvalitet. ToeOFF® er av og til kombinert med kne-ortoser for å motvirke overstreking av kneleddet. Nå finnes det en ortoseløsning for dette som direkte kombineres med ToeOFF® eller BlueRocker®.

Comboortosen tilpasses individuelt til hver enkelt pasient. De ulike komponentene kan kombineres avhengig av pasientens størrelse og lengde.

- Valg av størrelse på lårdelen er avhengig av hvor høyt opp på låret denne plasseres. Den kan dog ikke plasseres lavere enn ca. 10 cm over tibiaplatået.
- Valg av størrelse for koblingsdelen er avhengig av hvilken størrelse på ToeOFF® eller BlueRocker® som brukes.
- Samtlige 5 artikler må bestilles for å få en komplett ortose.
- Combo er ikke beregnet for pasienter med vekt over 150 kg eller som er høyere enn 2 meter.



ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del spesielt laget for behandling av hyperekstensjon i kombinasjon med droppfot. Combo er en forlenging som monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unike konstruksjonen gjør at droppfotskinnen og Combo-delen enkelt kan kobles sammen.

Bruksområder: Instabilitet i kneleddet, overstrekkning i kombinasjon med droppfot pga. slag, post-polio, MS, nevropati etc.

Kontraindikasjoner: Totalt fravær av ligament i kneet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlengde over 2 meter. Pasientvekt over 150 kg. Kraftig svekket kognitiv evne. OBS: Når utprøvingen er ferdig kan det ikke være mer enn 10° hyperekstensjon igjen i ortosen.



Knemål 1: M-L midt-patella

Knemål 2: Omkrets 20 cm over patella

Knemål 3: M-L 20 cm over patella.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Knemål 2	Knemål 3	Knemål 1
28780	Kneledd med skinner (par)	En størrelse				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28782	Bånd, tekstil og spenner	Small	Bilateral	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spenner	Medium	Bilateral	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spenner	Large	Bilateral	12,5-16 cm		
28783	SoftKIT (2 stk.)	Small				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Medium				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Large				
28783	SoftKIT (2 stk.)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				



Prim droppfotsortose

En litt mykere droppfotsortose laget av polypropylen til bruk ved mindre problemer av droppfot i forbindelse med ulike nevrologiske diagnoser. Ortosen har en kryss-konstruksjon i bakkdelen med et åpent hælparti og åpning over leggen. Ortosen har en bred polstring i overkant som lukkes med borrelåsbånd. Et ekstra borrelåsbånd som hjelper til med å holde foten på plass i ortosen er også inkludert. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippes til ønsket passform etter fotstørrelsen til brukeren.

Bruksområder: Lett droppfot.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Lengde	Høyde	Ve/Hø
71296	Hvit	Small	23 cm	29 cm	Ve/Hø
71296	Hvit	Medium	24,5 cm	31 cm	Ve/Hø
71296	Hvit	Large	26 cm	33 cm	Ve/Hø
71296	Hvit	X-Large	27,5 cm	35 cm	Ve/Hø



Swedish droppfotsortose

En litt mykere droppfotsortose laget av polypropylen til bruk ved mindre problemer av droppfot i forbindelse med ulike nevrologiske diagnoser. Ortosen har en kryss-konstruksjon i bakkdelen med et åpent hælparti og åpning over leggen. Ortosen har en bred polstring i overkant som lukkes med borrelåsbånd. Et ekstra borrelåsbånd som hjelper til med å holde foten på plass i ortosen er også inkludert. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippes til ønsket passform etter fotstørrelsen til brukeren.

Bruksområder: Lett droppfot.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Lengde	Høyde	Ve/Hø
71298	Hvit	Small	24 cm	26 cm	Ve/Hø
71298	Hvit	Medium	27 cm	29 cm	Ve/Hø
71298	Hvit	Large	28 cm	34 cm	Ve/Hø
71298	Hvit	X-Large	30 cm	38 cm	Ve/Hø

Ekstra bånd Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Separate bånd med eller uten D-ring for Allard AFO modellene 2.0 og 2½.

Båndene kan monteres med åpning medialt eller lateralt.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Pk.
28760	Enkle bånd	Svart	X-Small	1 sett
28760	Enkle bånd	Svart	Small	1 sett
28760	Enkle bånd	Svart	Medium	1 sett
28760	Enkle bånd	Svart	Large	1 sett
28760	Enkle bånd	Svart	X-Large	1 sett
28761	Bånd med D-ring	Svart	X-Small	1 sett
28761	Bånd med D-ring	Svart	Small	1 sett
2876	Bånd med D-ring	Svart	Medium	1 sett
28761	Bånd med D-ring	Svart	Large	1 sett
28761	Bånd med D-ring	Svart	X-Large	1 sett
28763	Bånd med D-ring	Beige	X-Small	1 sett
28763	Bånd med D-ring	Beige	Small	1 sett
28763	Bånd med D-ring	Beige	Medium	1 sett
28763	Bånd med D-ring	Beige	Large	1 sett
28763	Bånd med D-ring	Beige	X-Large	1 sett
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Svart	Small	1 sett
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Svart	Medium	1 sett
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Svart	Large	1 sett



ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD er en polstring for Ypsilon® Flow. Hovedegenskapen hos ComfortPAD er å minske friksjonen mellom ortosen og benet, framfor alt i samband med ulike aktiviteter, som f.eks. løping, sykling eller spasereturer. Et ekstra lag av tekstilmateriale mellom ortosen og benet gjør at bevegelsen skjer lettere mellom de tekstile materialene. Tester som er gjort, har vist at når de to materialene glir mot hverandre minskes friksjonen mot huden med ca. 25%. ComfortPAD finnes i en størrelse. ComfortPAD kan tas på og av med en hånd. Det brede båndet er behagelig og forårsaker mindre trykk på baksiden av benet. En behagelig løsning for den som har følsom legg eller hud, og vil kunne være aktiv.

Bruksområder: Passer kun til Ypsilon® Flow 1/2.

Art. nr.	Beskrivelse
28886	Ypsilon® Flow ComfortPAD





CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™ 2.0 er en helt ny smart polstring for Allard AFO. CoverKIT passer til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0. Den er enkel å ta på og av! Gir en smidig overflate som går hele veien ned til slutten av skinnen. Innsiden er som et SoftKIT™, og om en trenger ekstra avlastning er også to vertikale neoprenstaver inkludert for å kunne skape en trykkfri kanal for tibia. Ortosen sine vanlige bånd kan brukes sammen med CoverKIT™.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Omkrets legg
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	X-Small	31 - 34 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	Small	34 - 37 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	Medium	37 - 41 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	Large	41 - 46 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	X-Large	46 - 51 cm

SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 er en behagelig og smidig polstring beregnet for ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0. Tibiakammen kan enkelt avlastes ved å bruke neoprenestavene mellom ortosen og polstringen. Hver forpakning inneholder to polstringer og to neoprenestaver.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
28750	SoftKIT 2.0	Svart	X-Small
28750	SoftKIT 2.0	Svart	Small
28750	SoftKIT 2.0	Svart	Medium
28750	SoftKIT 2.0	Svart	Large
28750	SoftKIT 2.0	Svart	X-Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Medium
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Large
28752	Mikrofix dråper 2.0	Svart	X-Small
28752	Mikrofix dråper 2.0	Svart	Small
28752	Mikrofix dråper 2.0	Svart	Medium/Large/X-Large
28753	Neoprenestaver 2.0	Svart	Small
28753	Neoprenestaver 2.0	Svart	Large
28754	Mikrofix vinger 2.0	Svart	



SoftKIT™ Short

softKIT™ er en bekvem og smidig polstring beregnet til ToeOFF®. softKIT er laget av skumpolstring. Tibiakammen kan enkelt avlastes ved å bruke neoprenestavene mellom ortose og polstring. Hver pakke inneholder to polstringer, to neoprenestaver og selvklebende Mikrofix.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
28391	SoftKIT™ Short	Svart	Small
28391	SoftKIT™ Short	Svart	Medium
28391	SoftKIT™ Short	Svart	Large
28356	Mikrofix dråper	Svart	Small
28356	Mikrofix dråper	Svart	Medium
28356	Mikrofix dråper	Svart	Large
28357	Mikrofix vinger	Svart	En størrelse





ComfortKIT™ 2.0

En myk polstring for ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0 som er spesielt egnet for sensibel hud, men også for de med høyt aktivitetsnivå. ComfortKIT™ 2.0 har en indre kjerne av såkalt "memory foam" som gjør at den naturlig tilpasser seg benets form ved bruk. Når materialet hviler går det tilbake til sin opprinnelige form.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
28751	comfortKIT 2.0	Svart	X-Small
28751	comfortKIT 2.0	Svart	Small
28751	comfortKIT 2.0	Svart	Medium
28751	comfortKIT 2.0	Svart	Large
28751	comfortKIT 2.0	Svart	X-Large
28752	Mikrofix dråper 2.0	Svart	X-Small
28752	Mikrofix dråper 2.0	Svart	Small
28752	Mikrofix dråper 2.0	Svart	Medium/Large



T-Strap

T-Strap drar øvre talokruralledd og subtalarleddene lateralt så de posisjoneres tilbake under tibia. Den distale delen av T-Strap festes på undersiden av ortosens fotplate og den proksimale delen rundt ankelen og mot ortosen sin laterale skinne. Produktet er lett å justere i lengde, og innerkjernen av plastazote kan enkelt varmes opp med en varmepistol ved behov for å justere passformen. Yttermaterialet er mykt, ventilerende men samtidig støttende.

Bruksområder: Pes valgus kontroll.

Kontraindikasjoner: Ødem, svekket blodsirkulasjon, hudmaserasjon eller andre tilstander som ytterligere kan forverres av kompresjon.

Annet: T-Strap er kun beregnet til bruk sammen med produkter innen Allard AFO, og alltid sammen med et individuelt laget innlegg/fotseng for korrekt posisjonering av foten. Om T-Strap brukes uten innlegg/fotseng øker stresset på ortosens laterale skinne, og dermed øker risikoen for delaminering.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
28777	Svart	En størrelse	Ve/Hø


Nyhet!

kiddieflow™

Vi har utvidet vårt pediatrike AFO-sortiment med en ny modell; KiddieFLOW™. Dette har vi gjort etter ønsker fra klinikker om en ortose som har mer fleksibilitet i fotplaten og som gir et ytterligere alternativ til vår nåværende serie med Kiddie-modeller. KiddieFLOW™ kommer til å være broen over kløften mellom innersåler/SMO og våre nåværende AFO for barn. Det gjør det mulig med en bedre kontroll av fotens posisjon i sen svingfase, noe som i sin tur forenkler stabilitet under støtfasen. Den gir også hjelp i dorsifleksjon i svingfasen, samtidig som det gjør det mulig med et større bevegelsesomfang i støtfasen.

For en kombinasjon av økt A/P og M/L kontroll, kan KiddieFLOW™ som tillegg til våre andre Kiddie modeller, også kombineres med innlegg eller SMO.

Opgaven med å velge riktig ortosekombinasjon for pasienten din skal alltid baseres på etablerte evalueringsverktøy som f.eks. ganganalyse, leddenes bevegelsesomfang, manuell muskeltest eller andre anerkjente målemetoder. Våre diagram og teorier som beskrives nedenfor kan også hjelpe deg med å velge den best egnede løsningen for pasienten din.

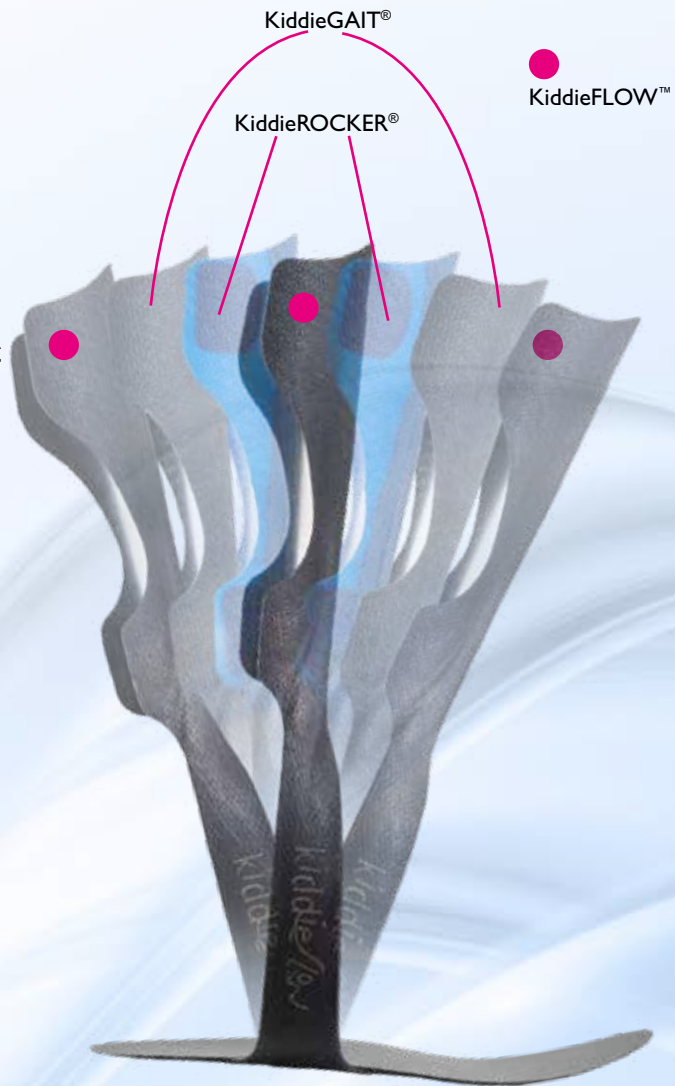

- ✓ Ved å analysere hvilke gangavvik som finnes, kommer du til å få en mer omfattende analyse for egnet valg av ortosekombinasjon. Dette vil gi de beste kliniske resultatene for pasienten din.
- ✓ Forbedret M/L-kontroll ved overdrevent pronasjon eller supinasjon kan det oppnås med innlegg eller SMO.
- ✓ Når behovet for A/P-kontroll øker, behøver man vanligvis også en gradvis stivere AFO. Ortosene våre KiddieFLOW™, KiddieGAIT™ og KiddieROCKER™ i kombinasjon med innersåler eller SMO, gir tilstrekkelig kompensasjon for de fleste pasienter.
- ✓ Det er nødvendig å gjøre fortløpende evaluering som inkluderer en ganganalyse mens pasienten bærer valgt ortosekombinasjon for å fastslå forbedring i funksjon.
- ✓ Man bør overveie en stivere AFO for de mer omfattende funksjonshindrene som inkluderer en økende grad av spastisitet og mer komplekse gangavvikelser.



kiddieflow™ kiddieGAIT® kiddieROCKER®



Barn som rammes av nevrologiske handicap og milde former av utviklingsskader, er i mange tilfeller avhengig av ortoseløsninger for de nedre ekstremitetene. Start med rett fot - la barnet prøve en ortose som hjelper deres små føtter til et jevnere og mer naturlig gangmønster.

- Alle våre AFO modeller er laget i kullfiberkomposit. Fotbladet gir støtte og dynamikk til foten, og er med sin åpne hæl lett å få ned i skoene.
- Ortosen støtter på framsiden av leggen og hjelper til med å strekke i kne og hofte ved f.eks. crouch-gange.
- Tre modeller - tre ulike nivåer av stabilitet - for å kunne tilby barnet en individuell løsning.

INDIKASJONER

Droppfot. KiddieFLOW™, KiddieGAIT® og KiddieROCKER® (alle modeller) er beregnet som støtte ved droppfot, gangavvikler etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten mellomfotkollaps, spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

KONTRAINDIKASJONER


Begrenset evne til dorsalfleksjon (behøver minst +5° dorsalfleksjon forbi nøytralleiet). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdrevet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korrigerbar pes valgus eller pes varus-feilstilling.

BEGRENSNINGER

Gjenværende hyperekstensjon i kneet til tross for behandling.

KiddieFLOW skal ikke brukes ved Crouch gange.

KiddieGAIT®, KiddieROCKER® og KiddieFLOW™ skal alltid kombineres med en eller annen type individuell ankelortose, for å kunne kontrollere fotens posisjon. (Se også informasjon på andre siden.) Det er viktig at foten har en så funksjonell posisjon som mulig ved belastning. De vanligste feilstillingene i foten som pronasjon, supinasjon, pes varus eller pes valgus skal korrigeres med et innlegg. Vanligvis skal et slikt innlegg ha en dyp hæl-kopp for å stimulere hæl-til-tågange.

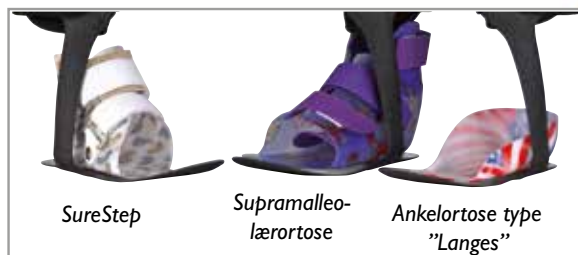

KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ er til forskjell fra KiddieGAIT® mer fleksibel i fotplatens hæl- og tåparti, og gir et større bevegelsesomfang. KiddieFLOW™ bygger på samme prinsipper som våre voksne FLOW-modeller, og har samme geometri som KiddieGAIT® og KiddieROCKER®. Ortosen støtter fotens dorsalfleksjon i svingfasen, gir en bedre kontroll av fotposisjoneringen i sen svingfase, noe som igjen forbedrer stabilitet i støtfasen. Samtidig gir det mykere fotbladet lettere avvikling i slutten av støtfasen. For en kombinasjon av økt A/P og M/L kontroll, kan KiddieFLOW™ som tillegg til våre andre barnemodeller, også kombineres med individuelle innlegg eller SMO.

Bruksområder: Droppfot. KiddieFLOW™ er beregnet som støtte ved droppfot, gangavvikler etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten kollaps av mellomfoten, spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner: Begrenset evne til dorsalfleksjon (behøver minst +5° dorsalfleksjon forbi nøytralleie). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdreivet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korrigerbar pes valgus eller pes varus-feilstilling. KiddieFLOW skal ikke brukes på barn med crouch gange.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vas/Oik

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® Baby, som inngår i vår serie produkter for droppfot, tilbyr en tidlig dynamisk ortosebehandling som kan hjelpe barnet til et jevnere og mer naturlig biomekanisk korrekt gangmønster. Ortosen hjelper barnet gjennom svingfasen, og kontrollerer fotens bevegelse i flere plan gjennom støtfasen. Ortosens plassering på framsiden av tibia hjelper også til ved andre proksimale problemer, som f.eks. hyperekstensjon i kneet eller "Crouch"-gange. KiddieGAIT® Baby skal brukes i kombinasjon med en individuell fottilpassing for å kontrollere fotens posisjon.

Bruksområder: Droppfot. Forandringer i gånøstretet pga. proprioepsjonsforstyrrelse. Tågåere med intakt mellomfot. "Crouch"-gange pga. lav tonus (fleksjon i hofte/kne/ankel). Spina Bifida. Cerebral Parese. Muskeldystrofi og MMC.

Kontraindikasjoner: Begrenset bevegelse i ankelleddet (minst 5° dorsalfleksjon ved passiv bevegelse). Altfor rigid fotstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturelle feilstillinger i kne og/eller ankel.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Small	11 cm	15 cm	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Large	14 cm	20 cm	Ve/Hø





KiddieGAIT®

KiddieGAIT® tilbyr en tidlig ortosebehandling i og med at de finnes i Baby modeller fra ca. 1 års alder. Ankel Fot Ortosen (AFO) bidrar til at barnet får et jevnere og mer naturlig gangmønster. Ortosen hjelper barnet gjennom svingfasen, og kontrollerer fotens bevegelse i flere plan gjennom støtfasen. Skinnens plassering på framsiden av tibia hjelper også til ved andre proksimale problemer, som f.eks. hyperekstensjon i kneet eller "Crouch"-gange. KiddieGAIT® er beregnet for bruk i kombinasjon med en individuell tilpassing av foten for å kontrollere fotens posisjon.

Bruksområder: Droppfot. KiddieGAIT® er beregnet som støtte ved droppfot, gangavvikler etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten kollaps av mellomfoten, crouch gange med lav tonus ved tilstander som spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner: Begrenset dorsalfleksjon (behøver minst +5° dorsalfleksjon forbi nøytralstilling). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdreivet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korrigerbar pes valgus eller pes varus-feilstilling.

Annet: Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Svart	Small	160 mm	220 mm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Svart	Medium	180 mm	257 mm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Svart	Large	200 mm	295 mm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Svart	X-Large	210 mm	315 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	Small	160 mm	220 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	Medium	180 mm	257 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	Large	200 mm	295 mm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	X-Large	210 mm	315 mm	Ve/Hø

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® er utviklet for å møte behovet hos barn med mer omfattende problemer enn kun droppfoot. Her kan barnet ha bilateral svakhet og behøver mer stabilitet i støtfasen. Akkurat som de andre barnemodellene er KiddieROCKER® dynamisk gradert mellom størrelsene. Modellen gir også økt stabilitet i M/L- plan og A/P-plan.

Bruksområder: Droppfoot. KiddieROCKER® er beregnet som støtte ved droppfoot, gangavvikler etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten kollaps av mellomfoten, crouch gange med lav tonus ved tilstander som spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner: Begrenset dorsalfleksjon (behøver minst +5° dorsalfleksjon forbi nøytralleie). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdreivet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korregerbar pes valgus eller pes varus-feilstilling.

Annet: Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Small	16 mm	22 mm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Medium	18 mm	25,7 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

Bånd til KiddieFLOW™, KiddieGAIT® og KiddieROCKER®

Separate bånd med eller uten D-ring til KiddieFLOW™, KiddieGAIT® eller KiddieROCKER®.

Båndene kan monteres med åpning medialt eller lateralt.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Pakke
28373	Bånd KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Small	1 sett
28373	Bånd KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Medium	1 sett
28373	Bånd KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Large	1 sett
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small	1 sett
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium	1 sett
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large/X-Large	1 sett
28369	D-Ring bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small	1 sett
28369	D-Ring bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium	1 sett
28369	D-Ring bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large/X-Large	1 sett





KiddieGAIT® softKIT™

KiddieGAIT® SoftKIT™ er en bekvem og smidig polstring beregnet til bruk sammen med KiddieGAIT®. Hver pakning inneholder to polstringer og selvklebende MikroFix.

Art. nr.	Modell	Størrelse
28397	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Baby Small
28397	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Baby Medium
28397	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Baby Large
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Small
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Medium
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Large
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	X-Large
28379	Microfix Drop	Small
28379	Microfix Drop	Medium
28379	Microfix Drop	Large/X-Large



KiddieGAIT® comfortKIT™

En ny myk polstring til KiddieGAIT® og KiddieROCKER® som er spesielt egnet for pasienter med prominent tibia eller sensitiv hud, men også for de med høyt aktivitetsnivå. ComfortKIT™ har en indre kjerne av såkalt "memory foam" som gjør at den naturlig tilpasser seg benets form ved bruk. Når materialet hviler går det tilbake til sin opprinnelige form.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large
28418	For KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	X-Large

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

SoftSHELL™ Baby er en polstring for KiddieGAIT® Baby. Disse størrelsene av KiddieGAIT® SoftSHELL™ må kompletteres med en standard SoftKIT™ (art.nr. 28397) av samme størrelse. SoftSHELL™ har en overflate av glinsende, mønstret lycramateriale som forandrer utseendet og i tillegg gjør at klær glir lettere mot ortosen. Denne modellen har båndet integrert i selve produktet.

Annet: Mønsteret kan bli endret.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
28388	Dyr	Blå	Baby Small
28388	Dyr	Blå	Baby Medium
28388	Dyr	Blå	Baby Large
28389	Stjerner	Rosa	Baby Small
28389	Stjerner	Rosa	Baby Medium
28389	Stjerner	Rosa	Baby Large



KiddieGAIT® SoftSHELL™

SoftSHELL™ er en polstring for KiddieGAIT® som kler inn hele ortosen. Innsiden er laget av samme materiale som SoftKIT™. Ytersiden består av et blankt mønstrete lycramateriale som forandrer utseendet. Det blanke materialet gjør at klær glir lettere mot ortosen. KiddieGAIT® SoftSHELL™ leveres komplett med polstring og bånd.

Annet: Mønsteret kan bli endret.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
28358	Hjerter	Rosa	Small
28358	Hjerter	Rosa	Medium
28358	Hjerter	Rosa	Large
28358	Hjerter	Rosa	X-Large
28359	Piratmønster	Grå	Small
28359	Piratmønster	Grå	Medium
28359	Piratmønster	Grå	Large
28359	Piratmønster	Grå	X-Large



Non Slip materiale

Et antigli materiale som ved hjelp av sin friksjon er perfekt for overflater hvor man ønsker å forhindre gning. Materialet er spesielt laget for å brukes på KiddieGAIT® sitt fotblad, for å hindre at f.eks. en SureStep-ortose glir mot det glatte fotbladet. OBS! Dette materialet skal ikke brukes direkte mot huden.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde
28411	Svart	14 cm	1m





Ypsilon® Flow^{1/2} utprøvingssortose

Ypsilon® Flow utprøvingssortose er en Ypsilon® Flow med teksten “Not-for-Resale” laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte eller ved en gangbarre. Om pasienten kjenner ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	23 cm	35,5 cm	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	27 cm	37,5 cm	Ve/Hø
2888I	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	27 cm	38,5 cm	Ve/Hø

ToeOFF® Flow2½ utprøvningsortose

ToeOFF® Flow utprøvningsortose er en ToeOFF® Flow med teksten “Not-for-Resale” laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med en polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2.0 utprøvningsortose

ToeOFF® 2.0 utprøvningsortose er en ToeOFF® 2.0 med teksten “Not-for-Resale” laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte, eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Skostørrelse
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	35-38
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	42-45
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28923	ToeOFF 2.0 NFR m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	35-38
28923	ToeOFF 2.0 NFR m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28923	ToeOFF 2.0 NFR m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	42-45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45

ToeOFF® 2½ utprøvningsortose

ToeOFF® 2½ utprøvningsortose er en ToeOFF® 2½ med teksten “Not-for-Resale” laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte, eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
2898I	ToeOFF® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28983	ToeOFF® 2½ NFR m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28983	ToeOFF® 2½ NFR m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28983	ToeOFF® 2½ NFR m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/hø	38-42
28983	ToeOFF® 2½ NFR m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28983	ToeOFF® 2½ NFR m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® Short utprøvningsortose

ToeOFF® Short utprøvningsortose er en ToeOFF® Short med teksten “Not-for-Resale” laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte, eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Fotbladets lengde	Høyde	Skostørrelse
2899I	ToeOFF® Short NFR	Small	Ve/Hø	21,5 cm	29,5 cm	32-35
2899I	ToeOFF® Short NFR	Medium	Ve/Hø	23,5 cm	32 cm	35-38
2899I	ToeOFF® Short NFR	Large	Ve/Hø	25,5 cm	34 cm	38-42



BlueROCKER® 2.0 utprøvningsortose

BlueROCKER® 2.0 utprøvningsortose er en BlueROCKER® 2.0 med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte, eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



BlueROCKER® 2½ utprøvningsortose

BlueROCKER® 2½ utprøvningsortose er en BlueROCKER® 2½ med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte, eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	<45

BlueROCKER® Short utprøvningsortose

BlueROCKER® Short utprøvningsortose er en BlueROCKER® Short med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Vi anbefaler at første utprøving skjer med støtte, eller ved en gåbarre. Om pasienten føler ubehag eller smerte skal utprøvingen avbrytes. Ortosen skal brukes sammen med polstring.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø	Skostørrelse
28997	BlueROCKER® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28997	BlueROCKER® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28997	BlueROCKER® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42



Ypsilon® Flow 1/2 Utprøvningssett

Ypsilon® Flow utprøvningssett inkluderer 6 polstrede Ypsilon® Flow utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28882	Ypsilon Flow 1/2	6 stk.



ToeOFF® Flow 2 1/2 utprøvningssett

ToeOFF® Flow utprøvningssett består av 6 polstrede ToeOFF® Flow utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28964	ToeOFF Flow 2 1/2	6 stk.
28965	ToeOFF Flow 2 1/2 m/D-ring	6 stk.





ToeOFF® 2.0 utprøvningssett

ToeOFF® 2.0 utprøvningssett består av 6 polstrede ToeOFF® 2.0 utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28930	ToeOFF 2.0	6 stk.
28931	ToeOFF 2.0 m/D-ring	6 stk.



ToeOFF® 2½ utprøvningssett

ToeOFF® 2½ utprøvningssett består av 6 polstrede ToeOFF® 2½ utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28984	ToeOFF 2½	6 stk
28985	ToeOFF 2½ m/D-ring	6 stk



ToeOFF® Short utprøvningssett

ToeOFF® Short utprøvningssett består av 6 polstrede ToeOFF® Short utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Model	Pk.
28992	ToeOFF Short	6 stk

BlueROCKER® 2.0 utprøvningssett

BlueROCKER® 2.0 utprøvningssett består av 6 polstrede BlueROCKER® 2.0 utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28944	BlueROCKER 2.0	6 stk.
28945	BlueROCKER 2.0 m/D-ring	6 stk.



BlueROCKER® 2½ utprøvningssett

BlueROCKER® 2½ utprøvningssett består av 6 polstrede BlueROCKER® 2½ utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28974	BlueROCKER 2½	6 stk
28975	BlueROCKER 2½ m/D-ring	6 stk



BlueROCKER® Short utprøvningssett

BlueROCKER® Short utprøvningssett består av 6 polstrede BlueROCKER® Short utprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" laminert i ortosen. Settet som leveres i en Camp-bag består av venstre og høyre i størrelsene small, medium og

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk, for å prøvegå, innen valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Pk.
28998	BlueROCKER® Short	6 st





KiddieFLOW™ utprøvingssortose

KiddieFLOW™ utprøvingssortose er en ortose merket med "Not-for-resale". Denne er beregnet å være et hjelpemiddel innen valg av ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved bruk.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW utprøvingssortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW utprøvingssortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Vå/Hö
28894	KiddieFLOW utprøvingssortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW utprøvingssortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring utprøvingssortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring utprøvingssortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring utprøvingssortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring utprøvingssortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø



KiddieGAIT® utprøvingssortose

KiddieGAIT® utprøvingssortose er en ortose merket med "Not-for-resale". Denne er beregnet å være et hjelpemiddel innen valg av ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved bruk.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28382	KiddieGAIT utprøvingssortose	Baby Small	11 cm	15 cm	Ve/Hø
28382	KiddieGAIT utprøvingssortose	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Ve/Hø
28382	KiddieGAIT utprøvingssortose	Baby Large	14 cm	20 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT utprøvingssortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT utprøvingssortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT utprøvingssortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGAIT utprøvingssortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring utprøvingssortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring utprøvingssortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring utprøvingssortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGAIT m D-ring utprøvingssortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieROCKER® utprøvningsortose

KiddieROCKER® utprøvningsortose er en ortose merket med "Not-for-resale". Denne er beregnet å være et hjelpemiddel innen valg av ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved bruk.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Fotbladets lengde	Høyde	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER utprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER utprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER utprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER utprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring utprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring utprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring utprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring utprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieFLOW™ utprøvningssett

KiddieFLOW™ utprøvningssett består av seks polstrede KiddieFLOW utprøvningsortoser merket med teksten "Not-for-Resale". Settet leveres i en Camp-bag og består av venstre og høyre i størrelsene Small, Medium og Large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
28896	KiddieFLOW™ utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28897	KiddieFLOW™ m D-ring utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.





KiddieGAIT® utprøvningssett

KiddieGAIT® utprøvningssett består av seks polstrede KiddieGAIT® utprøvningsortoser merket med teksten "Not-for-Resale". Settet leveres i en Camp-bag og består av venstre og høyre i størrelsene Small, Medium og Large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
28381	KiddieGAIT Baby utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28907	KiddieGAIT m D-ring utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28905	KiddieGAIT utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.



KiddieROCKER® utprøvningssett

KiddieROCKER® utprøvningssett består av seks polstrede KiddieGAIT® utprøvningsortoser merket med teksten "Not-for-Resale". Settet leveres i en Camp-bag og består av venstre og høyre i størrelsene Small, Medium og Large.

Bruksområder: Ortosen er kun beregnet for kortvarig bruk for å prøvegå før valg av individuell ortose.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
28909	KiddieROCKER utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6
28911	KiddieROCKER m D-ring utprøvningssett	Hø+Ve Small, Medium, Large	6

LA OSS

PRESENTERE

kiddieflow™

En mer **FLEKSIBEL MODELL**
med samme unike egenskaper som
KiddieGAIT® & KiddieROCKER®!

Vi har utvidet vårt pediatriiske AFO-sortiment med en ny modell; KiddieFLOW™. Dette har vi gjort etter ønsker fra klinikker om en ortose som har mer fleksibilitet i fotplaten og som gir et ytterligere alternativ til vår nåværende serie med Kiddie-modeller. KiddieFLOW™ kommer til å være broen over kløften mellom innersåler/SMO og våre nåværende AFO for barn. Det gjør det mulig med en bedre kontroll av fotens posisjon i sen svingfase, noe som i sin tur forenkler stabilitet under støtfasen. Den gir også hjelp i dorsifleksjon i svingfasen, samtidig som det gjør det mulig med et større bevegelsesomfang i støtfasen.





NYHET!

Walker Protect Fixed, lav

Immobiliserende walker i lav modell, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design som er stabil og har lav vekt. Walkeren har to faste sidestøtter som gir utmerket stabilitet for fot og ankel, to rigide buer (en foran og en bak) samt en vattering over vristen for å styrke immobiliseringen. Walkeren sin indre vatterte tekstil er foret med et mykt, luftig og vaskbart velourstoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Leveres med to ekstra kondyleputer for å avlaste ved trykk og for å gi ekstra komfort. Rullesåle med antislip tillater en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Tilpasset for kilesystem. Slipper igjennom røntgenstråler. Lett å prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer; akutt ankeldistorsjon, hæleneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Høyde 27 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
47609	Protect Fixed lav	Small	25 cm
47609	Protect Fixed lav	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed lav	Large	32 cm
47612	Ekstra båndsett	En størrelse	
47616	Ekstra polstring	Small	
47616	Ekstra polstring	Medium	
47616	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sett	Small	
47617	Kiler, sett	Medium	
47617	Kiler, sett	Large	
47618	Tåbeskytter	En størrelse	

Walker Protect Fixed, høy

Immobiliserende walker i høy modell, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design som er stabil og har lav vekt. Walkeren har to faste sidestøtter som gir utmerket stabilitet for fot og ankel, to rigide buer (en foran og en bak) samt en vattering over vristen for å styrke immobiliseringen. Walkeren sin indre vatterte tekstil er foret med et mykt, luftig og vaskbart velourstoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Leveres med to ekstra kondyleputer for å avlaste ved trykk og for å gi ekstra komfort. Rullesåle med antislip tillater en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Tilpasset for kilesystem. Slipper igjennom røntgenstråler. Lett å prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakture; akutt ankeldistorsjon, hæleneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Høyde 42 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
47608	Protect Fixed høy	Small	25 cm
47608	Protect Fixed høy	Medium	29 cm
47608	Protect Fixed høy	Large	32 cm
47611	Ekstra båndsett	En størrelse	
47615	Ekstra polstring	Small	
47615	Ekstra polstring	Medium	
47615	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sett	Small	
47617	Kiler, sett	Medium	
47617	Kiler, sett	Large	
47618	Tåbeskytter	En størrelse	



NYHET!



Static Walker

Uleddet walker for immobilisering av ankelleddet. Walkeren er innstilt i nøytral vinkel (90°), har sideskinner i plast, lukket hælparti, og rullåsåle for en mer naturlig gange. Ekstra hælbredder for økt stabilitet. Walkeren har en polstring som puster og transporterer fuktighet bort fra huden, samt en sømløs fotpolstring som kan klippes av. Alle bånd har D-ring, og båndene på tibiadelen kan plasseres hvor man ønsker for optimal dråretning.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, hæleneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Vektbegrensning: X-Small, Small - 90 kg, Medium, Large, X-Large - 110 kg

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Lengde innersøle
47601	Walker, Svart	Small	Bilateral	25,1 cm
47601	Walker, Svart	Medium	Bilateral	27,9 cm
47601	Walker, Svart	Large	Bilateral	29,7 cm
47601	Walker, Svart	X-Large	Bilateral	31,6 cm
47602	Ekstra polstring inkl. båndsett	Small		
47602	Ekstra polstring inkl. båndsett	Medium		
47602	Ekstra polstring inkl. båndsett	Large		
47602	Ekstra polstring inkl. båndsett	X-Large		

ROM Walker

ROM walker med justerbar ankelvinkel. Leddet kan låses i fiksert posisjon, innstilles for bevegelse i et begrenset intervall, eller innstilles for helt fri bevegelse. Bevegelsesomfang kan stilles inn mellom 45° plantarfleksjon og 45° dorsalfleksjon med 7,5° intervaller. Walkeren har lukket hælparti, aluminiumskinner, utskiftbar polstring og en rullerulle med antisklibelegg for sikker og myk gange. Polstringen kan også brukes som tåkappe.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer; akutt ankeldistorsjon, hæleneruptur, mykdelsskader, Postoperativ behandling.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Fotsålens lengde
47630	ROM Walker, Svart	Small	Bilateral	25,1 cm
47630	ROM Walker, Svart	Medium	Bilateral	27,9 cm
47630	ROM Walker, Svart	Large	Bilateral	29,7 cm
47630	ROM Walker, Svart	X-Large	Bilateral	31,6 cm
47631	Ekstra polstring m/båndsett	Small		
47631	Ekstra polstring m/båndsett	Medium		
47631	Ekstra polstring m/båndsett	Large		
47631	Ekstra polstring m/båndsett	X-Large		



Walker AIR høy

Immobiliserende walker, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design som både har lav vekt og er stabil. Walkeren har et integrert luftsystem hvor man gradvis kan øke/reducere immobilisering etter behov. Ortosen har to faste metallstøtter som stabiliserer foten og ankelen. Den vatterte polstringen er foret med et mykt, luftig og vaskbart stoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Rullesåle med antigli tillater en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Ekstra polstring, båndsett og tåbeskytter kan bestilles. Tilpasset for kilesystem. Lett å prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer; akutt ankeldistorsjon, hæleneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Høyde Small 35 cm. Høyde Medium, Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
47607	Walker Air høy	Small	23 cm
47607	Walker Air høy	Medium	27 cm
47607	Walker Air høy	Large	30 cm
47610	Ekstra båndsett	Small	
47610	Ekstra båndsett	Medium/Large	
47614	Ekstra polstring	Small	
47614	Ekstra polstring	Medium	
47614	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sett	Small	
47617	Kiler, sett	Medium	
47617	Kiler, sett	Large	
47618	Tåbeskytter	En størrelse	



Walker hækile

Kilesystem i sett à 6 stk. som hver gir en vinkel fra ca. 4°. Totalt opp til 20°. Finnes i tre størrelser.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
47617	Hækile sett	Small	6 stk.
47617	Hækile sett	Medium	6 stk.
47617	Hækile sett	Large	6 stk.

Optima Diab

Optima Diab er en knehøy støvel beregnet først og fremst for diabetesfotsår på fram- og mellomfot. Støvelen har en høy stabil bakkappe som kan formes om med varmpistol, og et før som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast og et modulbasert innleggssett, "Optima innlegg 3x3 sett", for målrettet avlastning av det plantare fotsåret. Innleggssettet gir en vektavlastning med 3 lag og 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, myk). Ortosen har velcro lukkebånd og et plombert plastbånd som sikrer at produktet ikke tas av. "Optima innlegg ved amputasjon" passer i Optima Diab og kan bestilles separat.



Bruksområder: Diabetesfotsår og fotsår på fram- og mellomfot, Rehabilitering etter mindre amputasjoner (unntatt - Chopart amputasjon), Rehabilitering etter kirurgi av foten, Behandling av Charcot fot i overgangsfasen fra akutt til kronisk.

Annet: Instruksjonsfilm finnes på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79000	Optima Diab	Small	Bilateral	34 - 36
79000	Optima Diab	Medium	Bilateral	37 - 39
79000	Optima Diab	Large	Bilateral	40 - 42
79000	Optima Diab	X-Large	Bilateral	43 - 45
79000	Optima Diab	XX-Large	Bilateral	46 - 48
79005	Optima Innlegg 3x3 sett	Small	Bilateral	34 - 36
79005	Optima Innlegg 3x3 sett	Medium	Bilateral	37 - 39
79005	Optima Innlegg 3x3 sett	Large	Bilateral	40 - 42
79005	Optima Innlegg 3x3 sett	X-Large	Bilateral	43 - 45
79005	Optima Innlegg 3x3 sett	XX-Large	Bilateral	46 - 48



Optima Clheel

Optima Clheel er en knehøy avlastende støvel beregnet først og fremst for diabetesfotsår og skader på hælen. Støvelen er åpen i hælen med en høy stabil bakkappe som kan formes om med varmepistol. Før som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast, og et modulbasert innleggssett, "Optima Clheel innlegg 3x3 sett", for målrettet avlastning av det plantare fotsåret. Innleggssettet gir en vektavlastning med 3 lag og 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, myk). Ortosen har velcro lukkingsbånd og et plombert plastbånd som sikrer at produktet ikke tas av.

Bruksområder: Diabetes plantarsår på hælen eller skader på hælen, leddbåndskader, trykksår.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79002	Optima Clheel	Small	Bilateral	34 - 36
79002	Optima Clheel	Medium	Bilateral	37 - 39
79002	Optima Clheel	Large	Bilateral	40 - 42
79002	Optima Clheel	X-Large	Bilateral	43 - 45
79002	Optima Clheel	XX-Large	Bilateral	46 - 48
79006	Optima Clheel innlegg 3x3 sett	Small	Bilateral	34 - 36
79006	Optima Clheel innlegg 3x3 sett	Medium	Bilateral	37 - 39
79006	Optima Clheel innlegg 3x3 sett	Large	Bilateral	40 - 42
79006	Optima Clheel innlegg 3x3 sett	X-Large	Bilateral	43 - 45
79006	Optima Clheel innlegg 3x3 sett	XX-Large	Bilateral	46 - 48



Optima Postop

Optima Postop er en lav, avlastende støvel beregnet for behandling av iskemiske sår. Støvelen har en rigid bakkappe som kan formes om med varmepistol og et før som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast, plantar innleggssåle i myk densitet og velcro lukkingsbånd. Både "Optima innlegg 3x3 sett" og "Optima innlegg ved amputasjon" passer i Optima Postop støvelen.

Bruksområder: Ved behandling av iskemiske sår (før og etter revaskularisering), Metatarsalfrakturet, rehabilitering etter tåamputasjon, stabilisering før operasjoner, tåfrakturer.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79001	Optima Postop	Small	Bilateral	34 - 36
79001	Optima Postop	Medium	Bilateral	37 - 39
79001	Optima Postop	Large	Bilateral	40 - 42
79001	Optima Postop	X-Large	Bilateral	43 - 45

Optima Europa

Optima Europa er en sko beregnet til bruk ved fotrehabilitering. Skoen har en rigid bakkappe som kan formes om med varmemistol og et før som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast, plantar innleggssåle i myk densitet og velcro lukkingsbånd. Både "Optima innlegg 3x3 sett" og "Optima innlegg ved amputasjon" passer i Optima Europa.

Bruksområder: Behandling av sår mellom tærne, rehabilitering etter hallux valgus operasjon, rehabilitering etter hammertåoperasjon, rehabilitering etter operasjon av Morton's nevrom, rehabilitering etter fjerning av negl.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79003	Optima Europa	Small	Bilateral	34 - 36
79003	Optima Europa	Medium	Bilateral	37 - 39
79003	Optima Europa	Large	Bilateral	40 - 42
79003	Optima Europa	X-Large	Bilateral	43 - 45
79003	Optima Europa	XX-Large	Bilateral	46 - 48



Optima Free

Optima Free er en støvel beregnet for fotrehabilitering. Støvelen har en rigid bakkappe som kan formes om med varmemistol og et før som puster og kan vaskes. Rullesåle i plast, plantarinnleggssåle i myk densitet og velcro lukkingsbånd. "Optima innlegg 3x3 sett" passer i Optima Free.

Bruksområder: Dorsale skader av foten, rehabilitering etter hallux valgus operasjon.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79004	Optima Free	Small	Bilateral	34 - 36
79004	Optima Free	Medium	Bilateral	37 - 39
79004	Optima Free	Large	Bilateral	40 - 42
79004	Optima Free	X-Large	Bilateral	43 - 45
79004	Optima Free	XX-Large	Bilateral	46 - 48





Optima innlegg 3x3 sett

Optima innlegg 3x3 sett er beregnet for målrettet avlastning av plantare fotsår. Innlegget har tre lag og tre fasthetsgrader; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) og Myk (Rød, 20 Sh) som kan kombineres og tilpasses fotsåret. Optima innlegg 3x3 sett inngår som standard i Optima Diab, men passer også til Optima Postop, Europa og Free og kan bestilles separat.

Annet: OBS! Optima Innlegg 3x3 sett må tilpasses individuelt utelukkende av kyndig medisinsk personale. Bruk aldri innleggene i vanlige sko eller andre ortopediske sko. Settet skal alltid brukes i sin helhet, med alle komponentene ordentlig koplet til hverandre inne i Optima ortosen. Bruk Optima Brukerinstruksjon for bruker-prosedyren. Instruksjonsfilm finnes på Youtube / Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79005	Optima innlegg 3x3 sett	Small	Bilateral	34 - 36
79005	Optima innlegg 3x3 sett	Medium	Bilateral	37-39
79005	Optima innlegg 3x3 sett	Large	Bilateral	40-42
79005	Optima innlegg 3x3 sett	X-Large	Bilateral	43-45
79005	Optima innlegg 3x3 sett	XX-Large	Bilateral	46-48



Optima innlegg ved amputasjon

Optima innlegg ved amputasjon er en innersåle av EVA-materiale til bruk i ortosene OptimaDiab, Postop og Europa etter transmetatarsal amputasjon.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79007	Optima innlegg ved amputasjon	Small	Bilateral	34-36
79007	Optima innlegg ved amputasjon	Medium	Bilateral	37-39
79007	Optima innlegg ved amputasjon	Large	Bilateral	40-42
79007	Optima innlegg ved amputasjon	X-Large	Bilateral	43-45
79007	Optima innlegg ved amputasjon	XX-Large	Bilateral	46-48

Body Armor Pro Term

En amputasjonsortose for midlertidig behandling etter Chopart eller Lisfranc amputasjoner. Et alternativ i den første helingsperioden. Sålens utforming både på innsiden og utsiden holder hælen i dorsalekstensjon og sikrer at belastningen ligger på hælen. Den stabile konstruksjonen holder stumpen godt på plass, og hjelper til med å opprettholde formen. Innerstrømpen har en innebygget pumpefunksjon som hjelper til med å holde formen ved hjelp av lett kompresjon. Kommer i to størrelser avhengig av stumpens lengde. 16 respektive 19 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
79008	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilateral
79008	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilateral



Mål: Stumpens lengde.



SBI Motus Diabetes Walker

SBI Motus Diabetes Walker er beregnet for avlastning av diabetesfotsår på framfot og mellomfoten. Ortosen har en stabil plastramme som beskytter tibia, og en avtagbar innerdel som kan formes med varmepistol. Den avtagbare yttersålen; Total rullersåle, er beregnet til behandling av plantarskade ved fotsår. Som tilbehør finnes også den avtagbare "Stabile rullersålen" som forenkler å gå fra akutt til kronisk behandling. Ortosen har båndfester kan flyttes og som også kan sikres til et "Ikke avtagbart" system. Justerbart SBI innlegg 3x3 sett er en innleggsåle for målrettet avlastning av plantare fotsår. Innlegget har tre lag og tre fasthetsnivåer (rigid, medium og myk) som kan kombineres og tilpasses til fotsåret. SBI innlegg 3 x 3 sett inngår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.

Bruksområder: Sårpleie og behandling av sår på fram- og mellomfoten ved diabetes. Som stabilisering for Charcot fot. Ved rehabilitering etter operasjon.

Annet: Tubestørpe uten sømmer skal alltid brukes under SBI ortosene. Tubestørpen, med en innside av myk frotté, er inkludert ved levering.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilateral	34 - 36
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilateral	37 - 39
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilateral	40 - 42
79015	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilateral	43 - 45
79015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilateral	46 - 48

SBI Frame Post-op Walker

Prefabrikkert og justerbar traume-Walker med lav vekt og høy komfort for funksjonell rehabilitering. Ortosen har en stabil plastramme som beskytter tibia og en avtagbar innerdel som kan formes med varmepistol. Flyttbar plassering av båndfestene. Avtagbar Stabil Rullesåle og SBI innlegg enkel er inkludert.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakture; alvorlige forstuvninger av ankelen, post-operativ behandling.

Annet: Tubestømpe uten sømmer skal alltid brukes under SBI ortosene. Tubestømpen, med en innside av myk frotté, er inkludert ved levering.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79016	SBI Frame Post-op Walker	Small	Bilateral	34-36
79016	SBI Frame Post-op Walker	Medium	Bilateral	37-39
79016	SBI Frame Post-op Walker	Large	Bilateral	40-42
79016	SBI Frame Post-op Walker	X-Large	Bilateral	43-45
79016	SBI Frame Post-op Walker	XX-Large	Bilateral	46-48



SBI Wheel Walker åpen hæl

En Walker som er utviklet for funksjonell rehabilitering og hælavlastning ved behandling av sår på hælen. Ortosen, som har lav vekt og høy komfort, er åpen i hælen for avlastning av sår. Den åpne hælen bidrar også til lufting av sår, og at hælssår kan inspekteres ved behov. Den er justerbar med en stabil plastramme som beskytter tibia, og har en innerdel som er avtagbar og som kan formes med varmpistol. Avtagbar Total rulllesåle for behandling av plantarskade ved fotsår, og justerbar innleggssåle 3x3 er inkludert. Båndfestenes plassering kan flyttes.

Bruksområder: Behandling av sår på hælen.

Annet: Tubestørpe uten sømmer skal alltid brukes under SBI ortosene. Tubestørpen, med en innside av myk frotté, er inkludert ved levering.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79017	SBI Wheel Walker åpen hæl	Small	Bilateral	34-36
79017	SBI Wheel Walker åpen hæl	Medium	Bilateral	37-39
79017	SBI Wheel Walker åpen hæl	Large	Bilateral	40-42
79017	SBI Wheel Walker åpen hæl	X-Large	Bilateral	43-45
79017	SBI Wheel Walker åpen hæl	XX-Large	Bilateral	46-48

SBI Trekk

Vannavvisende SBI Trekk som beskytter og holder SBI Walkeren ren. Det er designet for SBI Motus, SBI Frame og SBI Wheel. Materialet er semielastisk med en glidelås bak. En gummisåle gir bedre stabilitet under gange. Trekket kan vaskes.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
79029	SBI Trekk	Small	Bilateral
79029	SBI Trekk	Medium	Bilateral
79029	SBI Trekk	Large	Bilateral
79029	SBI Trekk	X-Large	Bilateral
79029	SBI Trekk	XX-Large	Bilateral



SBI Walker Ramme Lukket Hæl

Utbyttbar ramme med lukket hæl til SBI Motus Diabetes Walker og SBI Frame Post-op Walker.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79018	SBI Walker Ramme Lukket Hæl	Small	Bilateral	34 - 36
79018	SBI Walker Ramme Lukket Hæl	Medium	Bilateral	37 - 39
79018	SBI Walker Ramme Lukket Hæl	Large	Bilateral	40 - 42
79018	SBI Walker Ramme Lukket Hæl	X-Large	Bilateral	43 - 45
79018	SBI Walker Ramme Lukket Hæl	XX-Large	Bilateral	46 - 48





SBI Walker Ramme Åpen Hæl

Utbyttbar ramme med åpen hæl til SBI Wheel Walker åpen hæl.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79019	SBI Walker Ramme Åpen Hæl	Small	Bilateral	34 - 36
79019	SBI Walker Ramme Åpen Hæl	Medium	Bilateral	37 - 39
79019	SBI Walker Ramme Åpen Hæl	Large	Bilateral	40 - 42
79019	SBI Walker Ramme Åpen Hæl	X-Large	Bilateral	43 - 45
79019	SBI Walker Ramme Åpen Hæl	XX-Large	Bilateral	46 - 48



SBI Komplett Innerdel til Walkere

Utbyttbar komplett innerdel til SBI Walkere i Multidensity myk EVA som kan formes om. Innerdelen er formet etter fotens og benets anatomi. Tibiabeskytter med en avtagbar ekstra skinnleggförsterkning.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
79020	SBI Komplett Innerdel til Walkere	Small	Bilateral
79020	SBI Komplett Innerdel til Walkere	Medium	Bilateral
79020	SBI Komplett Innerdel til Walkere	Large	Bilateral
79020	SBI Komplett Innerdel til Walkere	X-Large	Bilateral
79020	SBI Komplett Innerdel til Walkere	XX-Large	Bilateral

SBI Spenner og Bånd til Walker (Sett)

Utbyttbart komplett sett til SBI ortoser med 8 spenner og 4 bånd.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
79021	SBI Spenner og Bånd til Walker	Small/Medium	8 spenner, 4 bånd
79021	SBI Spenner og Bånd til Walker	Large/X-Large/ XX-Large	8 spenner, 4 bånd



SBI Stabil Rullesåle

Sålene på SBI ortosene kan enkelt og raskt settes på, løsnes fra og byttes ut på hovedenheten. Stabil Rullesåle har mindre avrulling enn Total Rullesåle, og brukes når behandlingen går over fra den akutte til den kroniske fasen. Stabil Rullesåle er ikke inkludert med produktet, men må kjøpes separat.

Annet: OBS! Bruk aldri SBI ortosen uten såle. Les nøye i SBI brukerinstruksjon angående bytte av såle.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
79022	SBI Stabil Rullesåle	Grå	Small	Bilateral
79022	SBI Stabil Rullesåle	Grå	Medium	Bilateral
79022	SBI Stabil Rullesåle	Grå	Large	Bilateral
79022	SBI Stabil Rullesåle	Grå	X-Large	Bilateral
79022	SBI Stabil Rullesåle	Grå	XX-Large	Bilateral





SBI Total Rullesåle

Sålene på SBI ortosene kan enkelt og raskt settes på, løsne fra og byttes ut på hovedenheten. SBI Total Rullesåle er inkludert i SBI ortosene ved levering. Den er beregnet til bruk i den akutte fasen ved behandling av plantare fotsår. Den har mer avrulling enn SBI Stabil Rullesåle.

Annet: OBS! Bruk aldri SBI ortosen uten såle. Les nøye i SBI brukerinstruksjon angående bytte av såle.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
79023	SBI Total Rullesåle	Svart	Small	Bilateral
79023	SBI Total Rullesåle	Svart	Medium	Bilateral
79023	SBI Total Rullesåle	Svart	Large	Bilateral
79023	SBI Total Rullesåle	Svart	X-Large	Bilateral
79023	SBI Total Rullesåle	Svart	XX-Large	Bilateral



SBI Innlegg 3x3 Sett

Modulsystemet SBI Innlegg 3x3 Sett er laget for å omfordele trykket på fotsålen og håndtere sår på framfot, midtfot og hæl. Settet består av ni deler som er koplet til hverandre som et puslespill som danner tre ulike plantarsåler. De tre plantarsålene har tre ulike densiteter; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) og Myk (Rød, 20 Sh) og kan kombineres vertikalt og horisontalt. Trykket på fotsålen kan enkelt omfordeles ved at man kombinerer de ulike delene. Innleggene er beregnet til bruk i SBI Motus (inkludert), SBI Wheel (inkludert), SBI Frame (tilvalg).

Annet: OBS! SBI Innlegg 3x3 Sett må tilpasses utelukkende av kyndig medisinsk personale. Bruk aldri innleggene i vanlige sko eller andre ortopediske sko. Settet skal alltid brukes i sin helhet med alle komponentene ordentlig koplet til hverandre inne i SBI ortosen. Bruk SBI Brukerinstruksjon for brukerprosedyren. Instruksjonsfilm finnes på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
79024	SBI Innlegg 3x3 Sett	Small	Bilateral
79024	SBI Innlegg 3x3 Sett	Medium	Bilateral
79024	SBI Innlegg 3x3 Sett	Large	Bilateral
79024	SBI Innlegg 3x3 Sett	X-Large	Bilateral
79024	SBI Innlegg 3x3 Sett	XX-Large	Bilateral

SBI Innlegg ved amputasjon

SBI Innlegg ved amputasjon er laget for bruk postoperativt etter amputasjon av tær eller transmetatarsal amputasjon. Innlegget er beregnet til bruk i SBI Motus (bestilles ekstra), SBI Wheel (bestilles ekstra), SBI Frame (bestilles ekstra).

Annet: SBI Innlegg ved amputasjon må kun ordineres av medisinsk kyndig personale. Bruk aldri innlegget i vanlige sko eller andre ortopediske sko. Bruk SBI Brukerinstruksjon for brukerprosedyren.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
79025	SBI Innlegg ved amputasjon	Small	Bilateral
79025	SBI Innlegg ved amputasjon	Medium	Bilateral
79025	SBI Innlegg ved amputasjon	Large	Bilateral
79025	SBI Innlegg ved amputasjon	X-Large	Bilateral
79025	SBI Innlegg ved amputasjon	XX-Large	Bilateral



SBI Innlegg enkel

En kraftig ettlags innleggssåle som inngår i SBI Frame Post-op Walker Art.nr. 79016, men som også kan kjøpes separat.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
79026	SBI Innlegg enkel	Small	Bilateral
79026	SBI Innlegg enkel	Medium	Bilateral
79026	SBI Innlegg enkel	Large	Bilateral
79026	SBI Innlegg enkel	X-Large	Bilateral
79026	SBI Innlegg enkel	XX-Large	Bilateral




SBI Tubestømpe uten sømmer

Tubestømpe uten sømmer skal alltid brukes under SBI ortosene. Tubestømpen, med en innside av myk frotté, er inkludert alle SBI ortoser ved levering.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Ve/Hø
79027	SBI Tubestømpe uten sømmer	Blå	En størrelse	Bilateral



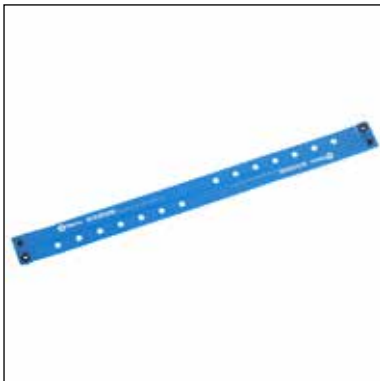

SBI Låsebånd til walker

Låsebåndet er beregnet til å sikre ortosen til et "ikke avtagbart" system.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
79028	SBI Låsebånd til walker	En størrelse	2



Kneortoser

www.camp.no



Mål: Omkrets kne under patella.



Mål: Mål tas rundt kneet når det er bøyd.

Patellavator

Patellavator kneortose gir ved hjelp av kompresjon mot patellasenen lindring av smerte i kneet ved patella tendinitis. Ortosen er laget av et CoolFlex materiale som puster for optimal komfort ved daglig bruk og trening. Den vatterte kjernen gir et jevnt fokusert trykk over patellasenen for å redusere smerte og ømhet. For mer effektiv kompresjon har Patellavator en unik snøringsdesign som øker spenningen fra båndet. Dessuten en interlock lukking som er designet for å tåle aggressiv bruk uten å åpne seg eller ikke å påvirke motsatt ben under løping etc. Knebåndet er også designet slik at det ikke skal stase rundt benet eller irritere den myke delen i knehasen.

Bruksområder: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sykdom og Chondromalacia patella.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28674	Svart	Small	28-33 cm	Bilateral
28674	Svart	Medium	33-39 cm	Bilateral
28674	Svart	Large	39-44 cm	Bilateral
28674	Svart	X-Large	> 44 cm	Bilateral

ELEMENTS kne

ELEMENTS kne er beregnet til behandling av lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte og betennelse. Knestøtten gir en lett kompresjon og holder leddet varmt.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte og betennelse.

Kontraindikasjoner: Ødem, leddbåndsskader, bensår eller kraftig hevelse.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34106	Grå/Svart	X-Small	30 - 33 cm	Bilateral
34106	Grå/Svart	Small	33 - 36 cm	Bilateral
34106	Grå/Svart	Medium	36 - 39 cm	Bilateral
34106	Grå/Svart	Large	39 - 42 cm	Bilateral
34106	Grå/Svart	X-Large	42 - 47 cm	Bilateral

PatellaCamp

Patella Camp er en kneortose beregnet til å gi stabilitet for patella. Ortosen er drarundtmodell og er åpen i knehasen. En innleggspute plasseres mot den siden av patella som er instabil, og de to elastiske båndene dras til ønsket mothold.

Bruksområder: Patella luksasjon, Patella sublaksasjon, Patellafemoralt smerte syndrom (PFPS).

Kontraindikasjoner: Kraftig ødem når kompresjon kan påvirke sirkulasjonen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28679	Svart	Medium	<40 cm	Bilateral
28679	Svart	Large	>40 cm	Bilateral



Mål: Knemål midt-patella

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Drarundtmodell med kraftig ileggspute for stabilisering av patella. Patellastøtten kan appliseres lateralt eller mediant. Draget fra ileggsputen justeres lett med de to små båndene. Ortosen har integrerte støttebånd og er åpen i knehasen. Laget i et materiale som puster.

Bruksområder: Chondromalacia patella eller etter lukseret patella og subluskert patella.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28677	Svart	X-Small	25-30 cm	Bilateral
28677	Svart	Small	30-35 cm	Bilateral
28677	Svart	Medium	35-40 cm	Bilateral
28677	Svart	Large	40-45 cm	Bilateral
28677	Svart	X-Large	45-50 cm	Bilateral
28677	Svart	XX-Large	50-55 cm	Bilateral



Mål: Knemål midt-patella



Mål: Omkretsmål midt-patella.

Active X™ Patella

Denne åpne modellen tenkt å stabilisere patella framfor alt i sideveis. Ortosen har en inbygget spesiallaget innleggspute som ved hjelp av sin konstruksjon legger seg stødig på siden av patella og "griper" tak og holder patella på plass. For en ekstra støtte har ortosen en uttakbar halvmåneformet plastskinne. Materialet er det innovative ventilerende Active X-materialet som er behagelig og føyelig.

Bruksområder: PFSS (Patellafemoralt Smerte Syndrom), Patella luksasjon, Patella Subluksasjon.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28055	Svart	XX-Small	24-29 cm	Bilateral
28055	Svart	X-Small	28-33 cm	Bilateral
28055	Svart	Small	32-37 cm	Bilateral
28055	Svart	Medium	36-41 cm	Bilateral
28055	Svart	Large	40-45 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella er en kneortose for bruk ved patellaproblemer. Den hesteskoformede puten kan enkelt tas ut og plasseres på den siden av patella der man behøver støtte. Puten har elastiske drabånd som fester seg til det myke velourmaterialet rundt kneskålen. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

Bruksområder: Patella luksasjon, patellafemoralt smertesyndrom, Schlatter, Jumpers Knee eller framre knesmerte.

Annet: Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35704	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilateral
35704	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilateral
35704	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilateral
35704	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilateral
35704	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilateral

SELECTION® Knee Minor

SELECTION® Minor er beregnet til bruk ved lettere smertetilstander i kneet. Minor gir lett kompresjon og har en varmende funksjon. De stabiliserende spiralfjærene på sidene gir en lett og behagelig støtte. Denne modellen er laget som en tube og gir dermed økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Lukkingen på lår og legg kan enkelt etterjusteres. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader eller overanstrengning.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35700	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilateral
35700	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilateral
35700	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilateral
35700	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilateral
35700	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilateral
35700	Svart	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Knee Minor Wrap

SELECTION® Minor er beregnet til bruk ved lettere smertetilstander i kneet. Minor gir lett kompresjon og har en varmende funksjon. De stabiliserende spiralfjærene på sidene gir en lett og behagelig støtte. Det åpne designet gjør ortosen enkel å ta på og av. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg kan enkelt etterjusteres. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader eller overanstrengning.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Dette produktet finnes i to lårvidder, se produktinformasjonen i tabellen. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35701	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilateral
35701	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilateral
35701	Svart	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilateral
35701	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilateral
35701	Svart	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilateral
35701	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilateral
35701	Svart	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilateral
35701	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilateral
35701	Svart	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilateral
35701	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilateral
35701	Svart	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilateral

SELECTION® Knee Optima

SELECTION® Optima er beregnet til bruk ved en rekke ulike smertetilstander i kneleddet. Ortosens multifunksjoner gjør at den enkelt kan tilpasses ved utprøving. Optima leveres komplett med justerbare dobbeltleddede skinner og hyperekstensjonskryss på baksiden som enkelt kan monteres på og av. Ekstra bånd for å redusere at tibia faller framover i samband med ACL-problem. Denne modellen er laget som en tube, og gir dermed økt kompresjon og forbedret proprioepsjon. Ortosen har en anatomisk formet patellaåpning for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort. Optima har rigide bånd øverst og nederst, noe som gir økt stabilitet.

Bruksområder: Mild hyperekstensjon i kneleddet, mild/moderat M-L instabilitet, begynnende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artritt, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) eller ACL-skader.

Kontraindikasjoner: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor kneleddet utsettes for vold, og hvor det er stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Bevegelsesintervall i ROM leddet. Fleksjon: 45°, 60°, 75° og 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30° og 40°. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35702	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilateral
35702	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilateral
35702	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilateral
35702	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilateral
35702	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilateral
35702	Svart	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Knee Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap er beregnet til bruk ved en rekke ulike smertetilstander i kneleddet. Ortosens multifunksjoner gjør at den enkelt kan tilpasses ved utprøving. Optima leveres komplett med justerbare dobbeltleddede skinner og hyperekstensjonskryss på baksiden som enkelt kan monteres på og av. Ekstra bånd for å redusere at tibia faller framover i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomisk formet patellaåpning for optimal passform. Den delte lukkingen på lår og legg gjør det enkelt å etterjustere ortosen. Materialet i knehasen er ekstra smidig for økt komfort. Optima har rigide bånd øverst og nederst, noe som gir økt stabilitet.

Bruksområder: Mild hyperekstensjon i kneleddet, mild/moderat M-L instabilitet, begynnende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artritt, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) eller ACL-skader.

Kontraindikasjoner: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor kneleddet utsettes for vold, og hvor det er stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelser og/eller dårlig blodsirkulasjon

Annet: Bevegelsesintervall i ROM leddet. Fleksjon: 45°, 60°, 75° og 90°. Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30° og 40°. Dette produktet finnes i to lårvidder, se produktinformasjon i tabellen. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35703	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilateral
35703	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilateral
35703	Svart	Small Pluss	28-31 cm	33-33 cm	40-44 cm	Bilateral
35703	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilateral
35703	Svart	Medium Pluss	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilateral
35703	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilateral
35703	Svart	Large Pluss	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilateral
35703	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilateral
35703	Svart	X-Large Pluss	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilateral
35703	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilateral
35703	Svart	XX-Large Pluss	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilateral

CROSS™ Semirigid kneortose for hyperekstensjon

CROSS™ er en semirigid kneortose beregnet til bruk ved overstrekking i kneleddet. CROSS er utviklet spesielt for å passe sammen med en ALLARD AFO (Ankel-Fot-Ortose/Droppfotsortose). Den har ingen bånd eller spenner som havner i konflikt med en ortose. Båndkrysset på baksiden stabiliserer overstrekkingen.

Den unike konstruksjonen gjør den enkel å ta på og av med bare en hånd. Ortosen har en ultramyk innside uten sømmer som gnager. Den myke innsiden gjør at ortosen glir lett mot huden og derfor er enkel å dra opp på benet. For å hindre migrasjon har ortosen strategisk plasserte silikonbånd på innsiden.

Den unike forsterkningen i overkanten gjør at CROSS™ alltid holder seg åpen, og ikke kollapser, noe som er en forutsetning for enkelt å kunne ta på ortosen med bare en hånd. Ta-på-hornet hjelper personer med nedsatt balanse og rekkevidde med å styre ortosen over foten og dra den opp på benet.

CROSS™ -ortosen har ledd med innstilling for fleksjon og ekstensjon.

Bevegelsesintervallene i ROM leddet er fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90° og ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.

Bruksområder: CROSS™ er beregnet for mild til middels alvorlig hyperekstensjon i kneleddet på grunn av nevromuskulære sykdommer eller andre skader. Ortosen kan brukes sammen med Allard AFO når hyperekstensjon i kneleddet forekommer i kombinasjon med droppfot.

Annet: CROSS™ kan vaskes i 40°. For mer informasjon om bruk, og på og avtaking av CROSS™ henviser vi til YouTube hvor det finnes en utprøvningsvideo. Med i forpakningen finnes også en tydelig grafisk instruksjon om hvordan man enklest tar på og av ortosen.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28715	CROSS™ kneortose	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715	CROSS™ kneortose	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715	CROSS™ kneortose	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715	CROSS™ kneortose	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716	CROSS™ Ta-på-hornet	En størrelse			



Active X™ Short

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en lett kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Sirkulære bånd med D-ring (ett oppe og ett nede) som kan løsnes. Leveres med leddet stilt inn på 10° fleksjon. Sett med stoppere er inkludert.

Bruksområder: Lett/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikasjoner: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Annet: Lengden på ortosen er 32 cm.

Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28050	Drapå modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050	Drapå modell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28050	Drapå modell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050	Drapå modell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050	Drapå modell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050	Drapå modell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050	Drapå modell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051	Drarundt modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Drarundt modell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Drarundt modell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Drarundt modell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Drarundt modell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Drarundt modell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Drarundt modell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710		Fleksjons-/Ekstensjonstopp				

Active X™ Long

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksjons-/ekstensjonstopp. Materialet i ortosen gir en lett kompresjon og varme. Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Sirkulære bånd med D-ring (to oppe og to nede) som kan løsnes. Leveres med leddet stilt inn på 10° fleksjon. Sett med stoppere er inkludert.

Bruksområder: MCL/LCL instabilitet Mindre mediale eller laterale meniskskader Lett gonartrose Bursitt Leddlidelser

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som f.eks. ACL/PCL rupturer. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Annet: Lengden på ortosen er 40 cm.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28052	Drapå modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28052	Drapå modell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28052	Drapå modell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052	Drapå modell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052	Drapå modell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052	Drapå modell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052	Drapå modell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28053	Drarundt modell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28053	Drarundt modell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28053	Drarundt modell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28053	Drarundt modell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28053	Drarundt modell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28053	Drarundt modell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksjons-/Ekstensjonstopp					



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Active X Sleeve

Denne drapåmodellen er beregnet til bruk ved milde smertetilstander i kneet. Materialet i ortosen gir lett kompresjon og varme. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Rundt patellaåpningen ligger en myk polstring for økt patellastabilisering. Ortosen har borrelåsjustering på lårets framside og på leggens bakside. Active X Sleeve har en spiralskinne i hver side.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse eller lett instabilitet i kneet.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som ACL/PCL-rupturer, alvorlige MCL/LCL skader. Vær oppmerksom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Ortosens lengde er 32 cm

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28056	Active X Sleeve	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056	Active X Sleeve	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056	Active X Sleeve	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056	Active X Sleeve	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056	Active X Sleeve	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056	Active X Sleeve	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056	Active X Sleeve	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Active X Sleeve PLUS

Denne drapåmodellen er beregnet til bruk ved lette smertetilstander i kneet. Materialet i ortosen gir en mild kompresjon og varme. Patellaåpningen er anatomisk formet for optimal passform. Rundt patellaåpningen ligger en myk polstring for økt patellastabilisering. Ortosen har borrelåsjustering på lårets framside og på leggens bakside. Active X Sleeve PLUS har to spiralskinner i hver side samt to stabiliserende sirkulære bånd. PLUS er derfor litt mer stabil enn Active X Sleeve. Forøvrig har ortosene samme design og egenskaper.

Bruksområder: Knesmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse, lett kneinstabilitet.

Kontraindikasjoner: Alvorlige kneskader som ACL/PCL rupturer, alvorlige MCL/LCL skader. Vær varsom ved alvorlige problemer med hevelse og/eller dårlig blodsirkulasjon.

Annet: Ortosens lengde er 32 cm

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knemål midt-patella

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella

Active X™ Double Axis

En kneortose for ulike typer knesmerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har dobbeltleddede skinner og er stilt inn i 10° fleksjon. Materialet gir en lett kompresjon og varme. Avtagbare sirkulære bånd med D-ring (ett oppe og ett nede). Ortosen finnes i både drapåmodell og drarundtmodell. Drapåmodellen har en myk polstring rundt patella for økt stabilisering.

Bruksområder: Lett/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikasjoner: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skader. Vær oppmerksom ved hevelser og sirkulasjonsproblemer.

Annet: Lengden på ortosen er 32 cm.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28058	Drapå modell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Drapå modell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Drapå modell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Drapå modell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Drapå modell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Drapå modell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Drapå modell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Drarundt modell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Drarundt modell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Drarundt modell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Drarundt modell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Drarundt modell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Drarundt modell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

Elcross kne drarundt

Drarundtmodell med åpning for patella og i knehasen. Modellen har integrerte støttebånd med borrelås som går helt rundt. Dette gjør den enkel å ta på og av. Ortosen har enkeltleddede skinner: Elcrossmaterialet har myk bomull på innsiden og polyester på utsiden.

Bruksområder: Lett kneleddsinstabilitet og smerte i kneleddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28124	Beige	Small	31-37 cm	Bilateral
28124	Beige	Medium	37-43 cm	Bilateral
28124	Beige	Large	43-49 cm	Bilateral
28124	Beige	X-Large	49-55 cm	Bilateral



Mål: Knemål midt-patella

Gripper™ hinged knee

Drarundtmodell med patellaåpning og åpning i knehasen. Modellen har integrerte, rundtgående støttebånd med borrelås, samt metallskinner i forsterkede lommer. Enkel å ta på og av. Ortosen er laget av et materiale som puster. For å forhindre at ortosen sklir ned er det et antisklimateriale montert på ortosens innside.

Bruksområder: Lett kneleddsinstabilitet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28128	Svart	X-Small	25-30 cm	Bilateral
28128	Svart	Small	30-35 cm	Bilateral
28128	Svart	Medium	35-40 cm	Bilateral
28128	Svart	Large	40-45 cm	Bilateral
28128	Svart	X-Large	45-50 cm	Bilateral
28128	Svart	XX-Large	50-55 cm	Bilateral
28128	Svart	XXX-Large	>55 cm	Bilateral



Mål: Knemål midt-patella

KNE immobilizer

Immobiliseringsortose av polyester-velour med innebygde skinner for stabilisering. Ortosen er bygd opp av ulike paneler for enkelt å gi mulighet til å justere omfanget. Borrelåslukning gjennom D-ringer. Åpning for patella. Finnes i voksen- og barnestørrelser.

Bruksområder: Postoperativ behandling, muskel- og ligamentskader, etter gipsing og til enklere ståtrening.

Art. nr.	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Lengde	Ve/Hø
28655	Barn	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilateral
28655	Voksen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilateral



Mål 1: Knemål 15 cm over midt-patella

Mål 2: Knemål 2 midt-patella.



Mål 1: Lengde ortose

Mål 2: Omkrets lår

Mål 3: Omkrets legg

Kneimmobiliseringsskinne

Immobiliseringsskinne for tilfeldig immobilisering av kneleddet. Kan også brukes som støtte ved enklere ståtrening. Skinnen finnes i to ulike lengder. For å justere omkretsen kan de to sidestykkene flyttes framover/bakover med den hensikt å tilpasse størrelsen optimalt. De dorsale skinnene kan bøyes forsiktig til ønsket grad av fleksjon.

Bruksområder: Ved tilfeldig immobilisering av kneleddet og ved enklere ståtrening. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
47500	Lysegrå	Small/Medium	51 cm	39-60 cm	30-45 cm
47500	Lysegrå	Large/X-Large	60 cm	47-73 cm	34-47 cm



OACTIVE® 2

Unilateral kneortose for behandling av enkelsidig kneartrose. Smidig og enkel konstruksjon med lav vekt. Laget av aluminium. Ortosen har smarte innovative spenner for å forenkle å ta på og av ortosen.

Det unike Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90°, og vri 1/8-dels verv om gangen for å justere avlastningen. OACTIVE® 2 kan også innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert. Ortosen leveres med et kart med ulike stopp for fleksjon og ekstensjon. OACTIVE® 2 finnes i en størrelse, venstre eller høyre.

Bruksområder: Mild til alvorlig enkelsidig kneartrose. Medialt eller lateralt.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Annet: OACTIVE® 2 har en vektbegrensning på maks. 135 kg

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø
55000	OACTIVE 2	En størrelse	Ve/Hø
55012	Ekstra Båndsett (uten spenner)	En størrelse	Ve/Hø
55013	Ekstra Polstring	En størrelse	Ve/Hø
55014	Suspension Wrap	61 cm	
55014	Suspension Wrap	81 cm	

Catalyst Propel™ OA

Denne firepunkts-kneortosen er beregnet for behandling av mild til alvorlig enkelsidig kneartrose i kombinasjon med kneinstabilitet eller etter skade for å redusere belastningen mot leddet. Ortosen har den unike Active Thigh Cuff™ (ATC) løsningen på lårets framside. Dette er en fleksibel og sterk dobbel lårmansjett som muliggjør den ultimate passformen. Gir beskyttelse og komfort ved å bevege seg med musklene gjennom hele bevegelsen. Sterk, men lavprofil aluminiumsramme av beste kvalitet gir en overlegen beskyttelse.

Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90°, og vri 1/8-dels verv om gangen for å justere avlastningen. Ortosen leveres med et kart med ulike stopp for fleksjon og ekstensjon. Catalyst Propel™ OA kan også innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Mild til alvorlig enkelsidig kneartrose i kombinasjon med kneinstabilitet. Etter skade for å redusere belastningen mot leddet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	Medium	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
5500I	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra båndsett	Small				
55010	Ekstra båndsett	Medium				
55010	Ekstra båndsett	Large				
55010	Ekstra båndsett	X-Large				
55010	Ekstra båndsett	XX-Large				
5501I	PCL Bånd	35 cm				
5501I	PCL Bånd	43 cm				
5501I	PCL Bånd	50 cm				



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

FreeFlex™ OA

Denne tekstile OA-ortosen er beregnet for mild til moderat enkelsidig kneartrose. Det er en helt åpen drarundtmodell med ledd på en side. Samme ortose fungerer for medial eller lateral side. Medial høyre blir en lateral venstre. Det unike Q-leddet justeres med- eller motsols for å oppnå ønsket avlastning. Start med ortosen i nøytralposisjon, med kneet bøyd i 90°, og vri 1/8-dels verv om gangen for å justere avlastningen. Ortosen leveres med et kart med ulike stopp for fleksjon og ekstensjon.

FreeFlex™ OA kan også innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Mild til moderat enkelsidig kneartrose i kombinasjon med kneinstabilitet. Etter skade for å redusere belastningen mot leddet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Annet: Ortose for venstre = Venstre medial/høyre lateral. Ortose for høyre = Høyre medial/venstre lateral.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55002	FreeFlex™ OA	XS/S	>29-33 cm	>29-33 cm	>37-43 cm	Ve/Hø
55002	FreeFlex™ OA	M/L	33-42 cm	33-43 cm	43-57 cm	Ve/Hø
55002	FreeFlex™ OA	XL/XXL	42-56 cm	43-56 cm	57-76 cm	Ve/Hø

Catalyst Propel™ ATC

Denne firepunkts ligamentortosen har alle ønskede funksjoner for den aktive brukeren. Den patenterte Active Thigh Cuff (ATC) er en fleksibel og sterk dobbel lårmansjett som gir den ultimate passformen. Sterk og behagelig, og som lar musklene følge med i hele bevegelsen. Ortosen er laget av lavprofil aluminium av beste kvalitet. Skinnene kan bøyes for optimal passform.

Catalyst Propel™ ATC har bøyse på leggens framside.

Catalyst Propel™ ATC kan innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombinert ligamentinstabilitet. Som sikkerhet etter operasjon. Konservativ behandling av ligamentskader. Forebyggende i samband med høy aktivitet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55003	Catalyst Propel™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsett	Small				
55010	Ekstra Båndsett	Medium				
55010	Ekstra Båndsett	Large				
55010	Ekstra Båndsett	X-Large				
55010	Ekstra Båndsett	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				



Mål: Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

Catalyst Propel™ Rigid Top

Denne firepunkts ligamentortosen har alle ønskede funksjoner for den aktive brukeren. Ortosen er laget av lavprofil aluminium av beste kvalitet. Skinnene kan bøyes for optimal passform. Catalyst Propel™ Rigid Top har bøyle på lårets og leggens framside.

Catalyst Propel™ Rigid Top kan stilles inn for å begrense bevegelsesområdet for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombinert ligamentinstabilitet. Som sikkerhet etter operasjon. Konservativ behandling av ligamentskader. Forebyggende i samband med høy aktivitet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsett	Small				
55010	Ekstra Båndsett	Medium				
55010	Ekstra Båndsett	Large				
55010	Ekstra Båndsett	X-Large				
55010	Ekstra Båndsett	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				

Catalyst Elite™ ATC

Denne firepunkts ligamentortosen har alle ønskede funksjoner for den aktive brukeren. Den patenterte Active Thigh Cuff (ATC) er en fleksibel og sterk dobbel lårmansjett som gir den ultimate passformen. Sterk og behagelig, og som lar musklene følge med i hele bevegelsen. Ortosen er laget av lavprofil aluminium av beste kvalitet. Skinnene kan bøyes for optimal passform. Catalyst Elite™ ATC har bøyle på leggens bakside.

Catalyst Elite™ ATC kan innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombinert ligamentinstabilitet. Som sikkerhet etter operasjon. Konservativ behandling av ligamentskader. Forebyggende i samband med høy aktivitet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55005	Catalyst Elite™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hö
55008	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hö
55008	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hö
55008	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hö
55008	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hö
55010	Ekstra Båndsett	Small				
55010	Ekstra Båndsett	Medium				
55010	Ekstra Båndsett	Large				
55010	Ekstra Båndsett	X-Large				
55010	Ekstra Båndsett	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

Catalyst Elite™ Rigid Top

Denne firepunkts ligamentortosen har alle ønskede funksjoner for den aktive brukeren. Ortosen er laget av lavprofil aluminium av beste kvalitet. Skinnene kan bøyes for optimal passform. Catalyst Elite™ Rigid Top har bøyle på lårets framside og leggens bakside.

Catalyst Elite™ Rigid Top kan innstilles for å begrense bevegelsesomfanget for ekstensjon og fleksjon uavhengig av hverandre. Ortosen kan også stilles inn for fri bevegelse. Leveres med 5° stopp installert.

Bruksområder: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombinert ligamentinstabilitet. Som sikkerhet etter operasjon. Konservativ behandling av ligamentskader. Forebyggende i samband med høy aktivitet.

Kontraindikasjoner: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33	37-43 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsett	Small				
55010	Ekstra Båndsett	Medium				
55010	Ekstra Båndsett	Large				
55010	Ekstra Båndsett	X-Large				
55010	Ekstra Båndsett	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				

Catalyst Propel™ R.O.M.ATC

Catalyst Propel™ R.O.MATC er utviklet for også å fungere som en postoperativ ortose. Foruten leddets innstillingsmuligheter har denne ellers samme egenskaper og funksjoner som ligamentortosen Catalyst Propel. R.O.M-ortosen finnes kun med den patenterte Active Thigh Cuff (ATC), som er en fleksibel og sterk dobbel lårmansett som gir den ultimate passformen. Sterk og behagelig samt lar musklene følge med i hele bevegelsen. Ortosen er laget av lavprofil aluminium av beste kvalitet. Skinnene kan bøyes for optimal passform. Catalyst Propel™ R.O.MATC har bøyler på leggens framside.

Catalyst Propel™ ROMATC kan låses i en fast posisjon ved 0°, 15°, 30°, 60°, eller 90° eller stilles inn i bevegelsesomfang mellom 0°, 15°, 30°, 60° og 90°.

Bruksområder: Postoperativ behandling. Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombinert ligamentinstabilitet. Konservativ behandling av ligamentskader.



Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knemål midt-patella.

Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55008	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Båndsett	Small				
55010	Ekstra Båndsett	Medium				
55010	Ekstra Båndsett	Large				
55010	Ekstra Båndsett	X-Large				
55010	Ekstra Båndsett	XX-Large				



Mål: Knemål midt-patella.



Mål: Knebredde M-L midt-patella

Swedish Knee

Ortose for hyperekstensjon eller instabilitet i kneleddet. Laget av aluminium med bånd i bomullslerret. Enkel konstruksjon med justerbar trykkpute samt bøyelige skinner. Intet mekanisk kneledd, noe som hindrer hyperekstensjon.

Bruksområder: Hyperekstensjon i kneleddet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28668	Hvit	Small/Medium	28 - 38 cm	Bilateral
28668	Hvit	Medium/Large	38 - 53 cm	Bilateral
28669	Ekstra bånd og skruesett	Small/Medium		Bilateral
28669	Ekstra bånd og skruesett	Medium/Large		Bilateral

CHECK™ stainless steel

Bekvem kneortose beregnet for å motvirke hyperekstensjon og å støtte ved instabilitet i kneleddet. Ortosens lengde gjør at trykket mot femur og tibia blir mindre og ortosen blir mer bekvem i bruk. Den smidige konstruksjonen gjør at ortosen kan brukes under klær. Polstringen er laget av kunstlær. D-ringene som er inkludert kan settes på den siden av ortosen som passer pasienten best. Ortosen har kondyleputer.

Bruksområder: Check Stainless hensikt er å motvirke hyperekstensjon i kneleddet og å støtte instabilitet i kneleddet. Indikasjoner for bruk av Check Stainless er: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, nevrologiske skader/sykdommer som medfører svakhet i m.Quadriceps.

Kontraindikasjoner: Ikke beregnet for idrettsaktiviteter.

Art. nr.	Farge	Mål	Lengde	Ve/Hø
28652	Grå	9-13 cm	45 cm	Bilateral
28651	Ekstra polstring			
28653	Ekstra D-ringer			

ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del spesielt laget for behandling av hyperekstensjon i kombinasjon med droppfot. Combo er en forlenging som monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unike konstruksjonen gjør at droppfotskinnen og Combo-delen enkelt kan kobles sammen.

Bruksområder: Instabilitet i kneleddet, overstrekkning i kombinasjon med droppfot pga. slag, post-polio, MS, nevropati etc.

Kontraindikasjoner: Totalt fravær av ligament i kneet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlengde over 2 meter. Pasientvekt over 150 kg. Kraftig svekket kognitiv evne. OBS: Når utprøvingen er ferdig kan det ikke være mer enn 10° hyperekstensjon igjen i ortosen.



Mål: Knemål 1: M-L midt-patella
Knemål 2: Omkrets 20 cm over patella
Knemål 3: M-L 20 cm over patella.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Knemål 2	Knemål 3	Knemål 1
28780	Kneledd med skinner (par)	En størrelse				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28782	Bånd, tekstil og spenner	Small	Bilateral	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spenner	Medium	Bilateral	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spenner	Large	Bilateral	12,5-16 cm		
28783	SoftKIT (2 stk.)	Small				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Medium				
28783	SoftKIT (2 stk.)	Large				
28783	SoftKIT (2 stk.)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				



Ascender® post-op kneortose

Ascender® er en teleskopisk postoperativ kneortose med innstilling mellom -10° (hyperekstensjon) og 70° . Fleksjonsbegrensning kan stilles inn mellom -10° og 120° . Innstillingen justeres enkelt ved å løfte og flytte stopperne i leddet. Leddet kan også låses i fem ulike posisjoner: -10° (hyperekstensjon), 0° (nøytral), 10° , 20° , 30° fleksjon. Leddet kan sikres ekstra ved å sette inn en "Anti-tamper" låsing ovenfor selve stopperen. Denne må klippes bort med saks om man senere ønsker å åpne innstillingen.

Hver skinne kan justeres til ønsket lengde individuelt. På hver skinne finnes en hekte som åpnes. Skinnen har tydelige markeringer for å forenkle at det blir samme lengde på den laterale og den mediale skinnen.

Den myke og føyelige polstringen har antigli materiale på innsiden. Båndene låses med ekstra låseklips for å holdes på plass under utprøvingen. Ortoosen lukkes med kraftige spenner som hektes fast. Båndenes lengde kan enkelt justeres ved å løsne Y-festet og klippe båndet til ønsket lengde. Polstringen og båndene kan vaskes for hånd i lunkent vann med mild såpe. Universalmodell som passer både venstre og høyre. En størrelse.

Bruksområder: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde	Ve/Hø
47540	Ascender post-op kneortose	En størrelse	44 – 70 cm	Bilateral
47541	Komplett polstring- og båndsett	En størrelse		Bilateral
47542	Ekstra polstringssett	En størrelse		Bilateral
47543	Ekstra båndsett	En størrelse		Bilateral



E-SENSE ROM post-op kneortose

Denne helt unike postoperative kneortosen har teleskopiske skinner som kan justeres oppe eller nede til ønsket lengde mellom 46 til 69 cm. Leddet er justerbart i ønsket bevegelsesomfang. Fleksjon fra 0° - 120° med 10° intervall og ekstensjon fra 0° - 90° med 10° intervall. Leddet kan også låses i 0° , 15° og 30° med en enkel trykknapp. Polstringen er laget i et "non-slip" materiale som puster. Materialets konstruksjon gjør at polstringen ikke glir på benet. En størrelse som passer både til venstre og høyre ben. Verktøy er ikke nødvendig for å gjennomføre innstillingene. Båndene har dobbel låsing - både med plastkrok og med borrelås.

Bruksområder: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47522	E-SENSE ROM post-op kneortose	En størrelse	46 - 69 cm	Bilateral
47523	Ekstra polstring	En størrelse		Bilateral

ROM Postoperativkneortose

Postoperativ kneortose i universalstørrelse. Polstringen kan klippes til ønsket størrelse uten å frynse seg. Skinner av metall som kan formes for best mulig passform. Den komfortable og luftige polstringen holdes på plass av de sirkulære båndene. Det innkapslede polysentriske leddet er enkelt å justere. Leddet har pinner som holdes fast i leddet med små plastbånd for å hindre at pinnene faller ut. Leddet låses fast med en skrue for å hindre at det endres. Leddet kan stilles i ønsket grad av fleksjon (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) og ekstensjon (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen finnes i en kort og en lang versjon.

Bruksområder: Postoperativ eller posttraumatisk behandling for immobilisering av kneleddet for kontroll av fleksjon/ekstensjon.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Lengde
28308	Kneortose, kort	Mørkeblå	En størrelse	40 cm
28309	Kneortose, lang	Mørkeblå	En størrelse	60 cm
28311	Ekstra Båndsett 28308 kort	Mørkeblå	En størrelse	
28312	Ekstra Båndsett 28308 lang	Mørkeblå	En størrelse	
28313	Ekstra Polstring 28308 kort	Mørkeblå	En størrelse	
28314	Ekstra Polstring 28309 lang	Mørkeblå	En størrelse	



NYHET!

Egne notater

[illegible]



Hofteortoser

www.camp.no



NewCamp hofteortose

Rigid hofteortose med aluminiumskinner. Hoftedel og lårdel som kobles sammen med et justerbart ledd i fleksjon/ekstensjon og i abduksjon. Ortosens fleksible hoftedel gjør det mulig å bruke samme ortose til både dame og herre. Polstring som kan skiftes ut festes med borrelås.

Bruksområder: Pre- og postoperativt. For å unngå dislokasjon i hofteleddet etter primær eller revidert hofteartroplastikk.

Annet: For komplett ortose må både hoftedel og lårdel bestilles.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Midje	Ve/Hø	Lårmål
28686	Hoftedel m/ledd	Small	60-90 cm	Bilateral	
28686	Hoftedel m/ledd	Large	80-110 cm	Bilateral	
28684	Lårdel	Small		Bilateral	40-50 cm
28684	Lårdel	Large		Bilateral	50-60 cm
28687	Ekstra polstring hofte	Small		Bilateral	
28687	Ekstra polstring hofte	Large		Bilateral	
28688	Ekstra polstring lår	Small		Bilateral	
28688	Ekstra polstring lår	Large		Bilateral	
28685	Reservedelskit	Small		Bånd og skruer	
28685	Reservedelskit	Large		Bånd og skruer	

Lerman Haro hofteortose

Hofteortose med flere ulike innstillingsmuligheter: Rotasjonsinnstilling i transversalplanet, kontroll, og innstilling i både fleksjon/ekstensjon og abduksjon/adduksjon. Plastkonstruksjon med stål/aluminium ledd. Passer både dame og herre.

Bruksområder: Postoperativt.

Annet: Ekstra polstring kan kjøpes separat.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Midje	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	Small	70-80 cm	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	Medium	85-90 cm	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	Large	100-110 cm	Ve/Hø
62790	Lerman Haro	X-Large	115-125 cm	Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	Small		Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	Medium		Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	Large		Ve/Hø
62791	Ekstra polstring hofte	X-Large		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	Small		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	Medium		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	Large/X-Large		Ve/Hø
62792	Ekstra polstring lår	X-Large		Ve/Hø





Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD er beregnet for personer med Multippel Sklerose (MS) som har generell svakhet i benet. HFAD er tenkt å øke styrken i det benet hvor HFAD brukes, forbedre gåprestasjonen og øke det daglige aktivitetsnivået. Ortosen består av et behagelig hoftebånd og to elastiske gummibånd som festes i skoene. Båndene assisterer ved hofte-, kne- og dorsalfleksjon i ankelen. Nivået på assistansen kan lett instilles etter brukerens behov. HFAD kan brukes over vanlige klær eller under løstsittende klær. Finnes i utførelse for ett eller begge bena.

Bruksområder: HFAD kan være fordelaktig for pasienter med MS som har: svakhet i hofte-, kne- og fotleddsbøyeren, begrenset utholdelse og eventuell utmattelse ved gange, vanskelig for å løfte ben og fot. Bruker kompensasjonsbevegelser som f.eks. bekkentipping, sirkumduksjon og/eller tyngdeoverføring til motsatt side, har forsøkt å bruke en AFO for å kompensere for droppfot, men har fortsatt vansker med å gå på grunn av svakhet i hofte og knefleksorene, forhøyet tonus og får ved hjelp av ortosen til lettere å slappe av og dermed oppnår en bedre gange.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Midje	Ve/Hø
62784	Enkel HFAD	Small	61-82 cm	Ve/Hø
62784	Enkel HFAD	Medium	83-102 cm	Ve/Hø
62784	Enkel HFAD	Large	103-122 cm	Ve/Hø
62783	Dobbel HFAD	Small	61-82 cm	Bilateral
62783	Dobbel HFAD	Medium	83-102 cm	Bilateral
62783	Dobbel HFAD	Large	103-122 cm	Bilateral



Slynge for rotasjonskontroll

Bekkenbelte med slynge til bruk for å korrigere og motvirke kraftig rotasjon i de nedre ekstremitetene. Ortosen bidrar til å normalisere gånemønstret ved hjelp av en langsom stretch fra ankel til hofte. Slingen følger benet og festes i skoens snøring.

Bruksområder: Nevrologiske skader og svakhet i nedre ekstremiteter.


Art. nr.	Modell	Størrelse	Bredde	Funksjon
53305	B	Barn B	5,1 cm	Utover rotasjon venstre ben/ innover rotasjon høyre ben
53305	A	Barn A	5,1 cm	Utover rotasjon høyre ben/ innover rotasjon venstre ben
53305	D	Voksen D	7,6 cm	Utover rotasjon venstre ben/ innover rotasjon høyre ben
53305	C	Voksen C	7,6 cm	Utover rotasjon høyre ben/ innover rotasjon venstre ben

S.W.A.S.H.®


rett posisjonering når man
står, går og sitter.



Når hofteleddet flekteres når man sitter, skapes en triangulær sittebase som øker stabiliteten og gir barnet en mer oppreist holdning. Dette øker forutsetningene for en bedre holdning og en mer funksjonell sitteposisjon, noe som gjør at barnet i større utstrekning kan bruke hendene aktivt.

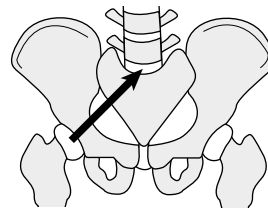

Med SWASH

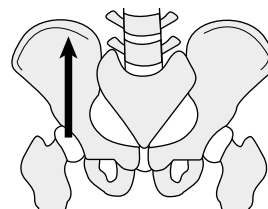

Uten SWASH

Primære funksjonsmål ved bruk av SWASH-ortosen:

1. Økt abduksjon og stretching av hofteadduktorene for å forbedre hofteleddsplasseringen.
2. Å forhindre overdrevet adduksjon ved sittende, stående og gående posisjon.
3. Å forbedre holdningen i sittende og stående posisjon.
4. Med samme ortose å muliggjøre forflytting fra nøytral (gå og stå) til abduksjon (sittende) med punkt 1, 2 og 3 opprettholdt.

SWASH-ortosen er en "team-innsats". Det er viktig at hele teamet er involvert i utprøvingen, og at det settes rimelige mål for behandlingen.

SWASH-ortosen sin unike konstruksjon medvirker til en bedre hofteleddsplassering. Ortosen gir nok abduksjon for å hindre saksing og medial femurrotasjon, både ved stående posisjon og ved gange.

S.W.A.S.H.®

rett posisjonering når man
står, går og sitter.




Velg abduksjonsvinkel

Til SWASH-ortosen er det mulig å velge to ulike abduksjonsvinkler - en som gir en bredere sittebase og en som gir en noe smalere sittebase.



Minsket abduksjon - benstag 115°

- Om barnet bruker en smal rullestol.
- Ved veldig stramme adduktorer.

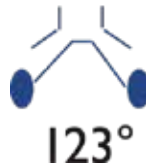

Økt abduksjon - benstag 123°

- Gir større mulighet til tøying av musklene ved sittende posisjon.
- Gir en mer oppreist holdning.

Bruksområder:

- Spastisk hemiplegi.
- Spastisk diplegi.
- Spastisk quadriplegi.
- Risiko for hofteforskyvning.
- I samband med Botox-behandling.
- Postoperativt.
- Nattskinne

Kontraindikasjoner:

- Om hoften er ute av ledd.
- Hoftefleksjonskontrakturer > 20°

Mer om utprøving og tilpassing finner man i SWASH Steady & Go Fitting Manual

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

SWASH® STEADY Midjedel

SWASH® STEADY, som erstatter SWASH® Classic, er en videreutvikling med utførte forbedringer og et nytt friskt utseende. Målet med SWASH er å forhindre overdreven hofteadduksjon ved sittende, stående og gange, som er vanlig ved Cerebral parese. Ortosen er et godt alternativ ved saksende gange. Den tillater bevegelse i alle tre bevegelsesplan. I sittende blir basen bredere for støtte, noe som hjelper barnet til å få en oppreist, balansert holdning og samtidig strukket på adduktorene.

Hofteaksjonen bestående av polyethylene strekker seg fra L2/L3 til den distale marginalen av halevirvelen, noe som gir maksimal støtte til hofter og bol. Pasienter med svak bolmuskulatur og/eller meget begrenset bolstabilitet, kan dra nytte av den økte posteriore og laterale støtten modellen tilbyr. STEADY har et mykt, attraktivt og slitesterkt trekk og klikkspenner for lettere og raskere av- og påtaking. Størrelsene 2-4 har leddhus med lav profilform. Benstagene er 6 mm i diameter for størrelse 1. For størrelsene 2, 3 og 4 er benstagene 8 mm i diameter. Benstagene finnes i vinklene 115° og 123°.

For å få et komplett produkt kreves også lårdel og benstag.

Bruksområder: Cerebral parese med saksende gange eller instabilitet ved sittende på grunn av overdrevent abduksjon eller hofte subluksasjon. Når maksimal bolkontroll er nødvendig, f.eks. pasienter som mangler muskelstyrke eller har nok bolkontroll for å kunne sitte oppreist. Når pasienten primært er urørlig.

Kontraindikasjoner: Dislokerte hofter. Hoftefleksjonskontrakturer større enn 20° (dynamiske eller fikserte). Når adduktorene er for sterke for ortosen. Når adduktorene er for korte for å bruke SWASH® ved sittende.



Mål: For mer detaljert informasjon om mål henvises til SWASH® Fitting Manual.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Omkrets
28852	STEADY Midjedel	1	40-46,5 cm
28852	STEADY Midjedel	2	46-55 cm
28852	STEADY Midjedel	3	54-63 cm
28852	STEADY Midjedel	4	62-72 cm



Mål: For mer detaljert informasjon om mål henvises til SWASH® Fitting Manual.

SWASH® GO Midjedel

SWASH® GO, som erstatter SWASH® Low Profile, er en videreutvikling med utførte forbedringer og et nytt friskt utseende. Målet med SWASH er å forhindre overdreven hofteadduksjon ved sittende, stående og gange, som er vanlig ved Cerebral parese. Ortosen er et bra alternativ ved saksende gange. Den tillater bevegelse i alle tre bevegelsesplan. I sittende gjøres basen bredere for støtte, noe som hjelper barnet med å få en oppreist, balansert holdning og samtidig strekke på adduktorene.

SWASH® GO har en lavere støttende hofteprofil med bøyelige iliacastag. Den anbefales for pasienter med bedre stabilitet i bolen og som er mer aktive og f.eks. går. Ortosen har et mykt, attraktivt og slitesterkt trekk og klikkspenner for lettere og raskere av- og påtaking. Benstagene er 8 mm i diameter i alle seks størrelsene. Benstagene finnes i vinklene 115° og 123°. For å få et komplett produkt kreves også lårdel og benstag.

Bruksområder: Cerebral parese med saksende gange eller instabilitet ved sittende på grunn av overdreven abduksjon eller hofte subluksasjon. SWASH® GO er beregnet for pasienter med bra ryggkontroll og som er mer aktive.

Kontraindikasjoner: Dislokerte hofter. Hoftefleksjonskontrakturer større enn 20° (dynamiske eller fikserte). Når adduktorene er for sterke for ortosen. Når adduktorene er for korte for å bruke SWASH® ved sittende.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Omkrets
28853	GO Midjedel	1	40-46,5 cm
28853	GO Midjedel	2	46-55 cm
28853	GO Midjedel	3	54-63 cm
28853	GO Midjedel	4	62-72 cm
28853	GO Midjedel	5	71-81 cm
28853	GO Midjedel	6	80-90 cm

SWASH® STEADY og GO Lårdel

For å få et komplett SWASH® STEADY eller GO produkt kreves midjedel, lårdel og benstag. Midjedelen og lårdelene har et mykt, behagelig og slitesterkt trekk samt klikkspenne for lettere og raskere av- og påtaking.

Fordi benstagene har samme diameter i alle størrelser (unntatt størrelse 1) er det enkelt å kombinere ulike størrelser på midjedelen med annen størrelse på lårdelene. Benstagene er 6 mm i diameter i størrelse 1. I størrelsen 2, 3 og 4 er benstagene 8 mm i diameter. Benstagene finnes i vinklene 115° og 123°.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Omkrets
28854	STEADY Lårdel	1	21-25 cm
28854	GO Lårdel	1	21-25 cm
28854	STEADY og GO Lårdel	2	25-29 cm
28854	STEADY og GO Lårdel	3	29-33 cm
28854	STEADY og GO Lårdel	4	33-38 cm
28854	STEADY og GO Lårdel	5	38-44 cm
28854	STEADY og GO Lårdel	6	44-50 cm



SWASH® STEADY og GO Benstag


For å få et komplett SWASH® STEADY eller GO produkt kreves midjedel, lårdel og benstag. Fordi benstagene har samme diameter i alle størrelser (unntatt størrelse 1) kan man enkelt kombinere ulike størrelser på midjedelen med en annen størrelse på lårdelne. Benstagene er 6 mm i diameter i størrelse 1. I størrelsene 2, 3 og 4 er benstagene 8 mm i diameter. Benstagene finnes i vinklene 115° og 123°.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde	Diameter
28855	STEADY benstag sett 115°	1	31 cm	6 mm
28855	GO benstag sett 115°	1	31 cm	8 mm
28855	STEADY og GO benstag sett 115°	2	37,5 cm	8 mm
28855	STEADY og GO benstag sett 115°	3	44 cm	8 mm
28855	STEADY og GO benstag sett 115°	4	48 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstang sæt 115 °	5	54 cm	8 mm
28855	STEADY og GO benstag sett 115°	6	60 cm	8 mm
28856	STEADY benstag sett 123°	1	31 cm	6 mm
28856	GO benstag sett 123°	1	31 cm	8 mm
28856	STEADY og GO benstag sett 123°	2	37,5 cm	8 mm
28856	STEADY og GO benstag sett 123°	3	44 cm	8 mm
28856	STEADY og GO benstag sett 123°	4	48 cm	8 mm
28856	STEADY og GO benstag sett 123°	5	54 cm	8 mm
28856	STEADY og GO benstag sett 123°	6	60 cm	8 mm

SWASH® Tilbehør


Til SWASH® STEADY og GO finnes ulike tilbehør og varianter, f.eks. tekstile midjedeler som finnes til modellene STEADY og GO. Tekstil lårdel er lik for STEADY og GO. Mageplate finnes også i lik variant til STEADY og GO. I tillegg kan diverse tilbehør bestilles.

Annet: For mer detaljer om SWASH® tilbehør, vennligst se komponentliste i SWASH Fitting Manual.

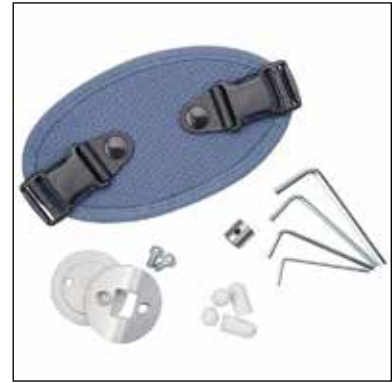

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
28857	STEADY tekstil midjedel	1	1 sett
28857	STEADY tekstil midjedel	2	1 sett
28857	STEADY tekstil midjedel	3	1 sett
28857	STEADY tekstil midjedel	4	1 sett
28858	GO tekstil midjedel	1	1 sett
28858	GO tekstil midjedel	2	1 sett
28858	GO tekstil midjedel	3	1 sett
28858	GO tekstil midjedel	4	1 sett
28858	GO tekstil midjedel	5	1 sett
28858	GO tekstil midjedel	6	1 sett
28859	STEADY og GO tekstil lårdel	1	1 par
28859	STEADY og GO tekstil lårdel	2	1 par
28859	STEADY og GO tekstil lårdel	3	1 par
28859	STEADY og GO tekstil lårdel	4	1 par
28859	STEADY og GO tekstil lårdel	5	1 par
28859	STEADY og GO tekstil lårdel	6	1 par
28860	STEADY og GO mageplate	1	1 stk.
28860	STEADY og GO mageplate	2	1 stk.
28860	STEADY og GO mageplate	3	1 stk.
28860	STEADY og GO mageplate	4	1 stk.
28860	STEADY og GO mageplate	5	1 stk.
28860	STEADY og GO mageplate	6	1 stk.
28861	STEADY skruesett 6 mm	1	1 sett
28861	STEADY og GO skruesett 8 mm	1-6	1 sett
28862	STEADY låsering sett 6 mm	1	1 sett
28862	STEADY og GO låsering sett 8 mm	1-6	2 stk.
28863	STEADY Plasthette til ledd	1	2 stk.
28864	STEADY Gummiplugg til benstag 6 mm	1	2 stk.
28864	STEADY og GO Gummiplugg til benstag 8 mm	1-6	10 stk.
28865	STEADY messingforing	1	10 stk.
28866	STEADY Hofteleddssett 6mm	1	2 stk.
28866	STEADY Hofteleddssett 8 mm	2-4	2 stk.
28867	GO Hofteleddssett 8 mm	1-6	2 stk.
28868	STEADY og GO Sekskantnøkkel	1-6	1 sett
28869	STEADY og GO Plastspenne 25 mm	1-3	2 stk.
28869	STEADY og GO Plastspenne 38 mm	4-6	2 stk.

STEADY & GO RESERVEDELER

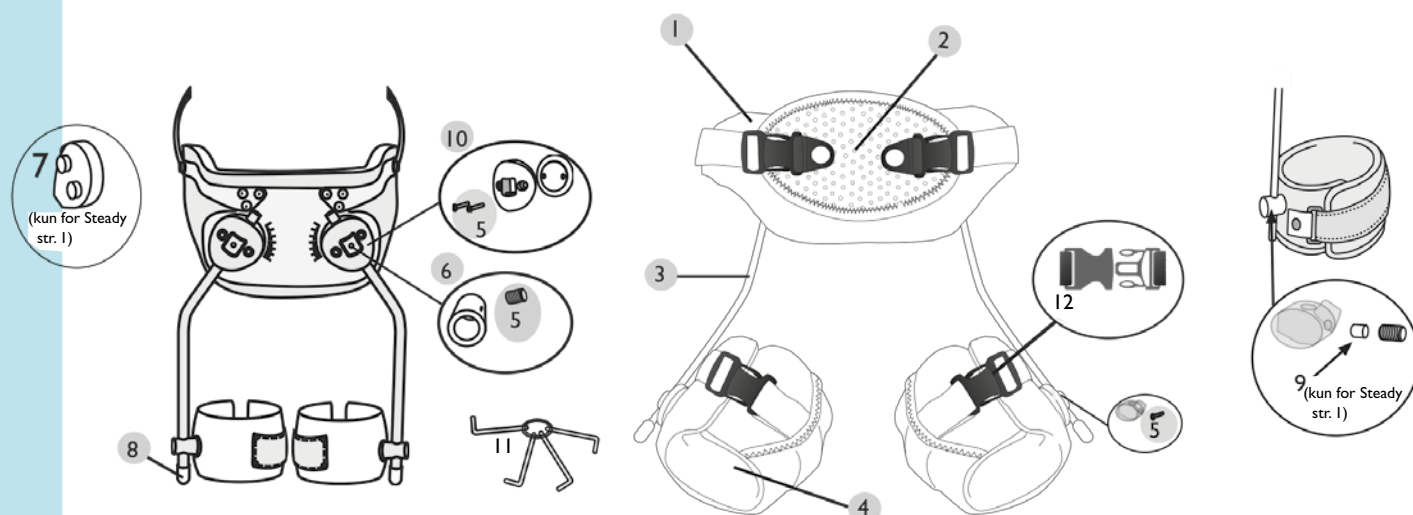

Nr.	Beskrivelse	Enhet	STEADY	GO
1	Tekstil midjedel inkl. mageplate	1 sett	28857	28858
2	Mageplate	1 stk.	28860	28860
3	Benstag 6 mm 15°, str. I	Par	28855-06	
3	Benstag 8 mm 15°	Par	28855-08	28855-08
3	Benstag 6 mm 23°, str. I	Par	28856-06	
3	Benstag 8 mm 23°	Par	28856-08	28856-08
4	Tekstil til lårdel	Par	28859	28859
5	Skruesett, str. I		28861-06	
5	Skruesett, str. 2 - 6		28861-08	28861-08
6	Låsering, str. I	2 stk.	28862-06	
6	Låsering, str. 2 - 6	2 stk.	28862-08	28862-08
7	Plasthette for ledd, str. I	2 stk.	28863-06	
8	Gummiplugg for benstag, str. I	2 stk.	28864-06	
8	Gummiplugg for benstag, str. 2 - 6	10 stk.	28864-08	28864-08
9	Messingforing, str. I	10 stk.	28865	
10	Hofteleddssett, str. I	2 stk.	28866-06	
10	Hofteleddssett, str. 2 - 6	2 stk.	28866-08	28867-08
11	Sekskantnøkkel	1 sett	28868	28868
12	Plastspenne 25 mm, str. I - 3	2 stk.	28869-25	28869-25
12	Plastspenne 38 mm, str. 4 - 6	2 stk.	28869-38	28869-38

Abduksjonsskinne C29

Abduksjonsskinne i plast med myke førede kanter. Rustfrie stålskinner mellom benhylsene foran og bak. Ryggplate med bånd rundt brystkassen gir sidestabilitet. Luftig og hygienisk. Kan brukes med bleie.

Bruksområder: Kongenitale hofteledsluksasjoner.

Art. nr.	Størrelse	Mål
20290	X-Small	14-17 cm
20290	Small	18-23 cm
20290	Medium	25-30 cm
20290	Large	33-38 cm



Mål: Avstand mellom knærne i abduksjon

Abduksjonsskinne, justerbar

Støtter hoften under hofteens utvikling ved hofte dysplasi, samt brukes etter reposisjon ved hofte luksasjon hos spebarn. Lårbenet er plassert på en måte som sikrer lårbenshodet i Acetabulum for å forhindre uønskede bevegelser og risiko for hofte (sub) luksasjon. Ortozen fikserer hofteleddet i 90° fleksjons- og 60° abduksjonsposisjon.

Bruksområder: Hofte dysplasi, hofteledsluksasjon eller -subluksasjon.

Art. nr.	Størrelse
20291	En størrelse



Hofteabduksjonsortose

Prefabrikkert ortose for barn med uttagbar polstring. Brukes ved behandling av Perthes sykdom samt ved andre hofterelaterte sykdommer. Ekstensjon og fleksjon kan innstilles med 20° intervall. Formstøpt plast med stålskinner for lav vekt. Polstringen kan maskinvaskes. Uttagbar polstring.

Bruksområder: Perthes sykdom og andre hofterelaterte sykdommer.

Annet: Ekstra polstring kan bestilles separat.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Bekkenvidde M-L
28600	Hofteabduksjonsortose	Small	<21 cm
28600	Hofteabduksjonsortose	Large	>21 cm
28601	Ekstra polstring	Small	
28601	Ekstra polstring	Large	





Maple Leaf hofteortose

Ortose med uttagbar polstring som opprettholder musklenes lengde for å forhindre tilbakefall av deformiteter etter mykdelsoperasjoner relatert til hoften. Leddet gjør det mulig å posisjonere hofteleddet nære den anatomiske linjen. Justerbar i bredde og lengde. Mulighet for å stille inn i intervaller med 20° fleksjon/ekstensjon, 9° abduksjon/adduksjon samt rotasjon i transversalplanet. Størrelse X-Small er forhåndsinnstilt med en abduksjonsvinkel på 15°, noe som kan økes eller minskes ved justering. X-Small kan ikke roteres i transversalplanet. Formstøpt plast med stålskinner. Uttagbar polstring.

Bruksområder: CP og postoperativt.

Annet: Ekstra polstring kan bestilles separat.

Art. nr.	Størrelse	Bekkenvidde M-L
62786	X-Small	15 - 19 cm
62786	Small	20 - 24 cm
62786	Medium	25 - 29,5 cm
62786	Large	30 - 34,5 cm

Maple Leaf DE

Maple Leaf finnes også med en distal forlengelse for leggen for pasienter som har behov for ytterligere rotasjonskontroll av hoften. Kneleddet kan låses samt stilles inn i intervaller med 20° fleksjon/ekstensjon, 9° abduksjon/adduksjon. Forøvrig har ortosen samme egenskaper og innstillinger som Maple Leaf art.nr. 62786. Formstøpt plast med stålskinner. Hofte-, lår- og leggdel har polstring og bånd som kan skiftes ut.

Bruksområder: Cerebral Parese og postoperativt. Ved behov av ytterligere rotasjonskontroll av hoften.

Annet: Ekstra polstring kan bestilles separat.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Bekkenvidde M-L
62787	Komplett Maple Leaf DE	Small	20 - 24 cm
62787	Komplett Maple Leaf DE	Large	30 - 34,5 cm
62793	Ekstra polstring leggdel	Small	
62793	Ekstra polstring leggdel	Large	
62794	Ekstra bånd til leggdel	Small	
62794	Ekstra bånd til leggdel	Large	
62796	Ekstra polstring hoftedel	Small	
62796	Ekstra polstring hoftedel	Large	
62797	Ekstra polstring lårdel	Small	
62797	Ekstra polstring lårdel	Large	
62798	Ekstra bånd til hoftedel	Small	
62798	Ekstra bånd til hoftedel	Large	
62799	Ekstra bånd til lårdel	Small	
62799	Ekstra bånd til lårdel	Large	



Egne notater

[illegible]



Brystproteser

www.camp.no



Diamond



Massasjeprotese Air



Massasje BH



Embrace BH

Brystproteser

Camp sine brystproteser er godt tilpasset 2000-tallets operasjonsmetoder, og til den moderne kvinnes forventninger. Velg mellom modeller av tradisjonell silikon eller lettvektssilikon. Felles for disse modellene er en matt overflate og en varm naturlig farge. Uansett om du velger tradisjonell silikon eller lettvektssilikon, er protesene av beste kvalitet, myke og naturlige samtidig som de følger kroppens bevegelser.

I sortimentet finnes bl.a. Camp sin unike Massasje-protese som er blitt en stor suksess. Massasjeprotesen har kanaler på baksiden som stimulerer brystkassen og samtidig tillater luft å sirkulere så huden føles sval og kan puste. Massasjeprotesene er spesielt fordelaktig for kvinner med lymfødem, og finnes også som festeprotese.

Samtlige ABC brystproteser av silikon leveres i en praktisk veske. Her skal protesen oppbevares når den ikke er i bruk slik at formen opprettholdes. Det er ikke inkludert trekk til protesen, men dette kan bestilles separat.

Kontakt oss for mer informasjon.



Nakkeortoser

www.camp.no



Halskrage rett modell

Myk halskrage i rett modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Kan lukkes foran eller bak. Stoffet er i hovedsak av bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Halskrage formet modell

Myk halskrage i anatomisk formet modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger hakens og kroppens konturer for en bekvem passform. Stoffet er i hovedsak bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Vission halskrage

Myk halskrage i anatomisk formet modell som gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger haken og brystets konturer for en behagelig passform. Trekket av Lycra gir et moderne utseende samt en sval og god følelse mot huden. Materialet er helt uten Latex.

Bruksområder: Midlertidig avlastning av nakke ved f.eks. overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47014	Svart	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Svart	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Svart	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Svart	Large	12 cm	32-48 cm

Ortho Prim halskrage

Delbar halskrage av polyeten for stabilisering av nakke. Skåret ut under haken for bra passform og med mykt polstrede kanter. Justerbar i høyde og vidde ved hjelp av en enkel borrelås. Plasten er perforert for økt ventilasjon.

Bruksområder: Til avlastning av nakke, overbelastet muskulatur samt revmatologiske sykdommer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
20560	Hvit	X-Small	7,5-9 cm	32-37 cm
20560	Hvit	Small	8-9,5 cm	36-41 cm
20560	Hvit	Medium	8,5-10 cm	40-45 cm
20560	Hvit	Large	9-10,5 cm	44-49 cm
20560	Hvit	X-Large	9-10,5 cm	48-53 cm



Eclipse® Halskrage

Eclipse halskrage har moderne design og en god passform og funksjon. Eclipse er enkel å justere og har en semirigid rammestruktur med "quick-fit" funksjoner for enkel utprøving og tilpassing av størrelsen. Eclipse har som formål å begrense fleksjon, ekstensjon og rotasjon for å fremme pasientens bedring. Den åpne rammekonstruksjonen gjør den luftig og behagelig samt at den får en stor trachea-åpning. Kun én størrelse som dekker det meste i omfang og høyde. Polstringen kan byttes ut og kan kjøpes separat. Høyden kan stilles inn mellom 7,5 cm opp til 18,75 cm.

Bruksområder: Stabilisering av ryggraden for å begrense bøyning, strekking og rotasjon etter en nakkeskade eller -lidelse.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
20628	Eclipse Halskrage	Lysegrå	En størrelse
20629	Ekstra polstring	Grå	En størrelse





Trachea halskrage

Todelt halskrage i plastazote med tracheostomiåpning. Halskragen er anatomisk formet for god passform og plastforsterket i nakken og under haken. Fikses med borrelås på begge sider.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Pacific halskrage

Todelt halskrage av polyethylene som fikses med borrelås på begge sider. Det stabile skallet følger hakens fasong og hviler bekvemt mot brystbenet. Kragen er lavere på sidene for ikke å gnage mot skuldre eller ører. Høyden på kragen justeres ved hjelp av to plastskruer. En myk og luftig polstring uten sømmer er inkludert. Polstringen kan vaskes eller byttes ut.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde
20625	Hvit	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Hvit	Medium/Large	8-13 cm
20626	Ekstra polstring	Small/Medium	
20626	Ekstra polstring	Medium/Large	



Stomiprodukter

www.camp.no


StomaCare™

StomaCare er et elastisk stomibelte som gir støtte og fiksasjon av stomiposen, kompresjon av bolen ved svekket bukmuskulatur samt forebygger og lindrer prolaps/brokk i arr- og stomiområdet.

Brokkbeltet passer både for rett og innsvingt figur. Det er laget av et bredt dacronbånd som er sydd sammen med en elastisk søm for optimal passform. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene er det en smidig forsterkningsplate av plast. Brokkbeltet har beskyttelsesbånd over åpningen.

En nyhet i sortimentet er modellen StomaCare EasyOpener som har en integrert borrelås under hullet, for å forenkle bytte av stomiposen.

StomaCare finnes i tre høyder godkjent for refusjon; 10 cm, 15 cm og 22,5 cm. Hullet i brokkbeltet fås i to diametre: 60 mm og 72 mm, noe som forenkler tilpassingen til ulike størrelser på stomiposen.

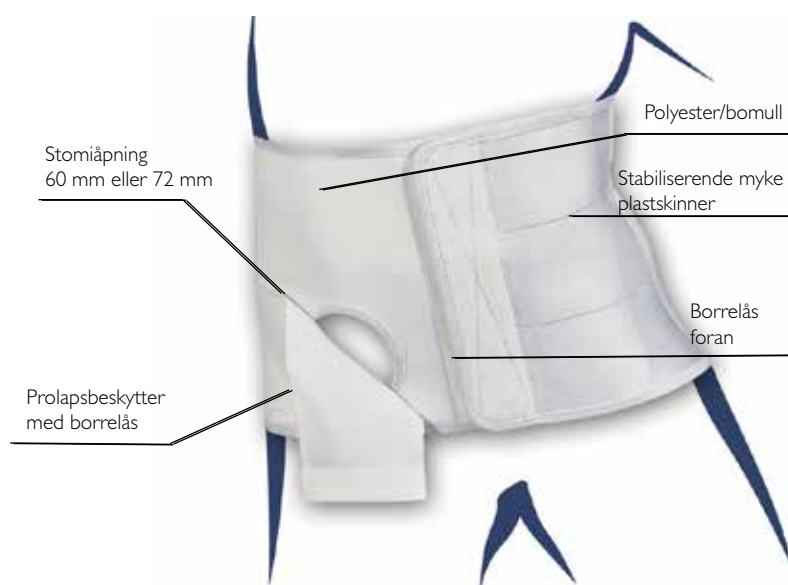

Størrelsestabell

Størrelse	Midjemål
S	70 - 79 cm
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Målet skal tas av personen liggende.

The diagram shows a person's waist with a horizontal line indicating the measurement point, just above the hips.

Stomacare EasyCut PLUS

EasyCut Plus er laget av Coolmax-materiale som puster og som sikrer maksimal fjerning av fukt. Fukten sprer seg og fordamper 4 ganger raskere enn bomull. Dette holder kroppen behagelig tørr - selv under fysisk aktivitet. Den svale grå fargen er knapt synlig, selv under lyse klær. Passer både rett og innsvingt figurtype. Med EasyCut beltet er det lett å sette på og justere stomiåpningen på beltet på pasienten. Dette er spesielt raskt og behagelig for pasienter som pleies hjemme. Tilpasset etter individuelt behov, kan stomiåpningen sin posisjon, form og diameter appliseres med en saks. En mal for ulike former og størrelser følger med beltet. Materialet frynser ikke og det er stabilt for optimal støtte. EasyCut Plus finnes i størrelser fra 70 – 140 cm og i høydene 10 cm, 15 cm, 19 cm og 23 cm. Beltet i 15 cm høyde er godkjent for refusjon i Norge.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av posen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.



Mål: Omkretsmål over navelen tas når pasienten ligger.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Midje	Høyde	Ve/Hø
23322	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	10 cm	Bilateral
23322	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	10 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	15 cm	Bilateral
23323	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	15 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	19 cm	Bilateral
23324	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	19 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	Medium	80 - 89 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	Large	90 - 99 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	X-Large	100 - 109 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	XXX-Large	121 - 130 cm	23 cm	Bilateral
23325	Lysegrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	23 cm	Bilateral



StomaCare EasyOpener beige

StomaCare EasyOpener har en integrert lukking under stomiåpningen. Denne gir ekstra komfort ved bytte av stomiposen, da man ikke trenger å ta av selve beltet. Denne modellen egner seg ikke for pasienter med meget høyt abdominaltrykk, basert på en mulig høy belastning på stomiåpningens lukning.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av stomiposen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål rundt buken over stomien eller hvor bukomfanget er størst. Målet tas når pasienten ligger. Angi på hvilken side stomien finnes. Beltets høyde foran og bak er 15 cm.


Art. nr.	Farge	Størrelse	Midje	Diameter stomiåpning	Ve/Hø
23316	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Ve/Hø
23316	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Ve/Hø
23318	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Ve/Hø
23318	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Ve/Hø

StomaCare lav

Stomacare er laget av et bredt dacronbånd som sys sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av posen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål rundt buken over stomien eller hvor bukomfanget er størst. Målet tas når pasienten ligger. Beltets høyde foran og bak er 10 cm. Modell 308 i størrelse XXX-Large og XXXX-Large samt modell 309 er ikke godkjent for refusjon i Norge.

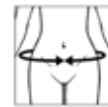

Art. nr.	Farge	Størrelse	Midje	Diameter stomiåpning	Ve/Hø
23308	Hvit	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilateral
23308	Hvit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilateral
23308	Hvit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilateral
23308	Hvit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilateral
23308	Hvit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilateral
23308	Hvit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilateral
23308	Hvit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilateral
23309	Hvit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilateral
23309	Hvit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilateral
23309	Hvit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilateral
23309	Hvit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilateral
23309	Hvit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilateral
23309	Hvit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilateral



StomaCare standard svart

Elastisk rygg-/brokkbelte laget av et bredt dacronbånd som er sydd sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Lukkes med borrelås.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av stomiposen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål rundt buken over stomien eller hvor bukomfanget er størst. Målet tas når pasienten ligger. Beltets høyde foran og bak er 15 cm. Str. XXXL og XXXXL er ikke godkjent for refusjon i Norge.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Midje	Diameter stomiåpning	Ve/Hø
23306	Svart	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilateral
23306	Svart	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilateral
23306	Svart	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilateral
23306	Svart	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilateral
23306	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilateral
23306	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilateral
23306	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilateral
23307	Svart	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilateral
23307	Svart	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilateral
23307	Svart	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilateral
23307	Svart	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilateral
23307	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilateral
23307	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilateral
23307	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilateral

[illegible]



StomaCare standard beige

Elastisk rygg-/brokkbelte laget av et bredt dacronbånd som er sydd sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Lukkes med borrelås.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av stomiposen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål rundt buken over stomien eller hvor bukomfanget er størst.

Målet tas når pasienten ligger. Beltets høyde foran og bak er 15 cm. Str. XXXL og XXXXL er ikke godkjent for refusjon i Norge.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Midje	Diameter stomiåpning	Ve/Hø
23306	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilateral
23306	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilateral
23306	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilateral
23306	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilateral
23306	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilateral
23306	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilateral
23306	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilateral
23307	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilateral
23307	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilateral
23307	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilateral
23307	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilateral
23307	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilateral
23307	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilateral
23307	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilateral

StomaCare høy

Stomacare er laget av et bredt dacronbånd som sys sammen med elastisk søm for optimal passform. Passer både rett og innsvingt figurtype. Området ved åpningen for stomien er av dobbelt lag uelastisk materiale. Mellom disse lagene finnes en smidig forsterkningsplate av plast. Utstyrt med beskyttelsesbånd over åpningen. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Som støtte og fiksasjon av posen. Ved svekket bukmuskulatur. Forebygger og lindrer prolaps og brokk i arr- og stomiområdet.

Annet: Ta mål rundt buken over stomien eller hvor bukomfanget er størst. Målet tas når pasienten ligger. Angi på hvilken side stomien finnes. Beltets høyde foran og bak er 22,5 cm. Str. XXXL og XXXXL er ikke godkjent for refusjon i Norge.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Midje	Diameter stomiåpning	Ve/Hø
23302	Hvit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Ve/Hø
23302	Hvit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Ve/Hø
23303	Hvit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Ve/Hø
23303	Hvit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Ve/Hø



Egne notater

[illegible]

StomaCare Protector

Beskytteren er laget i høytemperaturplast. Brukes for å beskytte stomien mot trykk og traume, framfor alt under aktivitet. Den passer til alle StomaCare modellene. Låses mot beltets materiale med borrelås på beskytterens bakside.

Art. nr.	Farge	Størrelse
23300	Lys grå	En størrelse
23299	Svart	En størrelse



Stomacare ProtectorMax

ProtectorMax er en beskyttelse designet for å stå imot trykk og traume i daglige situasjoner samt ved aktivitet. Den minsker risikoen for at stomiposen kommer i klem eller fester seg i f.eks. bukse og belte. Den beskytter helt enkelt stomien i de fleste situasjoner. Den er anatomisk utformet og laget i et mykt formpresset gummiliknende materiale med myke kanter. Innsiden har en myk polstring som gir en behagelig følelse mot huden. ProtectorMax er helt uten Latex og andre skadelige stoffer. Det elastiske midjebåndet er føyelig og former seg etter kroppens bevegelser.



Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Midje
23296	ProtectorMax	Lysegrå	En størrelse	70 - 140 cm
23297	Ekstra midjebånd	Lysegrå	En størrelse	

Egne notater

[illegible]



Ryggortoser

www.camp.no

Camps Korsettsortiment

Fra 1908 og fram til i dag har vi lyttet til pasienter og kunder og deres behov. Vi har alltid lagt stor vekt på innovasjon, god passform, høy kvalitet og design. Vi kan med rette si at vi har god erfaring innen leveranser av korsett, og vi er stolte over i dag å kunne presentere vårt brede sortiment på de følgende sidene.


Ved valg av korsett er det viktig å overveie indikasjon og anatomi, men også å ta hensyn til pasientens figurtype, livsstil og akseptering. For å gjøre valget enklere har vi delt inn våre ryggbelter og korsetter i katalogen etter systemet nedenfor. Ønsker du ytterligere informasjon er du velkommen til å ringe oss.

Stabilitet

Ryggbelter	Elastisk materiale
Korsett	Tøy, forsterket med skinne
Rigide	Plast, metall

Høyde

SIO	Sacroiliacal
LSO	Lumbosacral
TO	Thoracal
TLSO	Thoraco-lumbo-sacral
ABDO	Abdominal

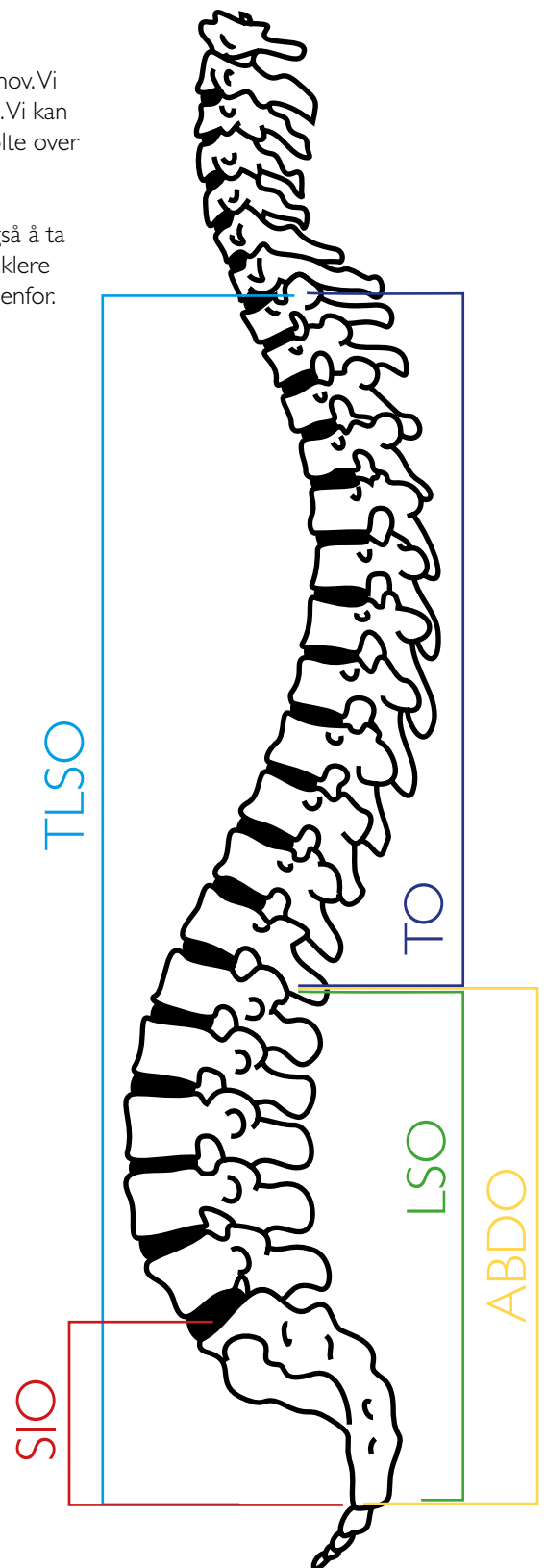

Trokanterbelte Tro-Camp

SIO - Elastisk og stabilt belte for sacroiliacaleddet. Beltet passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel hekterad tillater utvidelse av størrelsen under graviditet. Snøringen midt bak dras sammen for å minske belastningen på sacroiliacaleddet. Avtagbare lyskeband er inkludert. Beltet lukkes med hekter midt foran.

Bruksområder: Bekkeninsuffisiens/vanskeligheter med symfysiolysen.

Annet: Størrelse = hoftemåling

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde bak	Høyde foran
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobelt

SIO - Belte for sacroiliacaleddet med en elastisk indre del mot huden, og en ytre rigid del for avlastning og stabilisering. Beltet passer både rett og innsvingt figurtype. Utstyrt med antiglistopp som forhindrer beltet i å gli mot huden eller klærne. Avtagbar ileggspute i sacrum for optimal avlastning.

Bruksområder: Bekkeninsuffisiens/vanskeligheter med symfysiolysen.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
21030	Svart	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm





Graviditetsbelte Happymammy

Anatomisk graviditetsbelte som kan tilpasses de ulike stadiene under graviditeten. Beltet løfter opp magen for å minske følelsen av tyngde i bekkenområdet. Skinner i ryggen støtter og forbedrer holdningen, noe som reduserer ryggsmerte. I sidene er det ekstra drabånd for å justere støtten ved behov. Laget i et moderne og ekstra mykt materiale for komfort og lav vekt.

Bruksområder: Graviditetsrelatert ryggsmerte og/eller smerte i bekkenet.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22149	Grå	En størrelse	90-130cm	13 cm	7 cm

Elcross® LUX lav

SIO – Denne lave modellen er ment å gi en sacroiliacal støtte, men kan også plasseres slik at den støtter mer lumbalt. ELCROSS®LUX er en serie medium stabile belter laget av det innovative "Resistex® Carbon"-materialet som holder kroppen kjølig og komfortabel. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaper, transporterer fuktighet bort fra kroppen og er Øko-Tex 100 sertifisert. De ekstra stroppene kan plasseres etter ønske. Kanten på stroppene gjør de enkle å få tak i når man skal ta dem av. Passer godt for ulike typer kroppsfasonger. Skinnene bak og på sidene gir stabilitet sammen med de sterke stroppene. Det er borrelåsfeste midt foran. På baksiden er det to åpne rom for ekstra formbare stabile skinner som er inkludert i pakken. Materialet i ELCROSS®LUX er uten latex.

Bruksområder: Ryggsmertor og rygginsuffisiens.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22171	Beige	Small	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Medium	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Large	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	X-Large	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	19 cm	15 cm

NYHET!

ELEMENTS rygg

ELEMENTS Rygg er beregnet for behandling av lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, allmenn svakhetsfølelse i ryggen eller lignende. Ryggbeltet gir en viss stabilisering av korsryggen ved hjelp av den kompresjonen som oppstår når man tar det på. Ryggbeltet holder også korsryggen varm.

Bruksområder: Lette og tilfeldige problemer som f.eks. smerte, allmenn svakhetsfølelse i ryggen eller lignende.

Kontraindikasjoner: Ryggproblemer med nevrologisk opprinnelse.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål
34102	Grå/Svart	Small	82 - 95 cm
34102	Grå/Svart	Medium	92 - 105 cm
34102	Grå/Svart	Large	102 - 115 cm
34102	Grå/Svart	X-Large	112 - 125 cm
34102	Grå/Svart	XX-Large	122 - 135 cm



Mål: Omkrets hofte.

SELECTION® rygg lav

SIO - Elastisk smidig ryggortose laget av det gode SELECTION®-materialet som kjennetegnes av sin ventilerende evne, lave vekt og optimale passform. Modellen passer for såvel rett som innsvingt figur, og har ekstra stabiliserende drabånd som overlapper hverandre i ryggen. Drabåndene glir ekstra smidig i de spesialdesignede D-ringene. Forsterkningen i ryggen har en ny utforming som fordeler trykket over en større flate, men lar ryggraden være helt fri. På framstykket er det ekstra hjelp for å lukke ortosen, med en lomme på en side og et ekstra bånd på den andre siden. Materialet i front er en ny konstruksjon som gir en smidig låsing uten harde og klumpete borrelåsbånd. Materialene i Selection Rygg er av ypperlig kvalitet, og funksjon har stått i fokus under utviklingsfasen.

Bruksområder: Ryggsmerte og Rygginsuffisiens.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
35400	Svart	X-Small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm



SELECTION® rygg standard

LSO - Elastisk smidig ryggortose laget av det gode SELECTION®-materialet som kjennetegnes av sin ventilerende evne, lave vekt og optimale passform. Modellen passer for såvel rett som innsvingt figur, og har ekstra stabiliserende drabånd som overlapper hverandre i ryggen. Drabåndene gliir ekstra smidig i de spesialdesignede D-ringene. Forsterkningen i ryggen har en ny utforming som fordeler trykket over en større flate, men lar ryggraden være helt fri. På framstykket er det ekstra hjelp for å lukke ortosen, med en lomme på en side og et ekstra bånd på den andre siden. Materialet i front er en ny konstruksjon som gir en smidig låsing uten harde og klumpete borrelåsbånd. Materialene i Selection Rygg er av ypperlig kvalitet, og funksjon har stått i fokus under utviklingsfasen.

Bruksområder: Ryggsmerte og Rygginsuffisiens.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
3540I	Svart	X-Small	75-85 cm	23 cm	16 cm
3540I	Svart	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
3540I	Svart	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
3540I	Svart	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
3540I	Svart	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
3540I	Svart	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
3540I	Svart	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm

SELECTION® rygg vid

ABDO - Elastisk smidig ryggortose laget av det gode SELECTION®-materialet som kjennetegnes av sin ventilerende evne, lave vekt og optimale passform. Denne modellen er spesielt laget med tanke på personer med et kraftig mageparti som trenger løft og støtte. Lukkingen foran er delt i to for å forenkle påtagning, og for å kunne justere høyden foran. Ortosen har ekstra stabiliserende drabånd som overlapper hverandre i ryggen. Drabåndene glir ekstra smidig i de spesialdesignede D-ringene. Forsterkningen i ryggen har en ny utforming som fordeler trykket over en større flate, men lar ryggraden være helt fri. På framstykket er det ekstra hjelp for å lukke ortosen, med en lomme på en side og et ekstra bånd på den andre siden. Materialet i front er en ny konstruksjon som gir en smidig låsing uten harde og klumpete borrelåsbånd. Materialene i Selection Rygg er av ypperlig kvalitet, og funksjon har stått i fokus under utviklingsfasen.

Bruksområder: Ryggsmerte og Rygginsuffisiens hos personer med kraftig mageparti.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
35402	Svart	Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Medium	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Large	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	X-Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XX-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XXX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm

NAVY X™



23552

Navy X finnes i tre ulike høyder, lav, standard og høy. Standardmodellen finnes dessuten i tre ulike farger: marineblå, beige og grå.

Felles for alle modellene er:

- det slitesterke og luftige materialet
- de ekstra stabiliserende drabåndene
- den gode passformen

Den høye modellen har delt lukking i front og åpne kanaler i ryggen for komplettering av mer stabile skinner når det er ønskelig.

Samtlige modeller finnes i størrelsene X-Small til XX-Large, noe som dekker et hoftemål fra 75 cm til 135 cm.



23550



23555



23549



23554

Høyde i cm:

	Foran	Bak
23549 Blå	12	18,5
23554 Grå	12	18,5
23550 Blå	16	22
23555 Grå	16	22
23560 Beige	16	22
23552 Blå	25	31



23560

Navy X™ lav

SIO - Elastisk og luftig ryggbelte i ekstra stødig og slitsterkt materiale som passer både rett og innsvingt figurtype. Sterke drabånd gir ekstra stabilitet sammen med skinnene i plast som sitter bak og i sidene. Borrelåslukking midt foran. Ryggbeltet er velegnet for røffe miljøer. Ryggbeltet er beregnet som en sacroiliacal støtte, men kan også passe som lumbosacral støtte til en lav pasient.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
23549	Mørkeblå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mørkeblå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm





Navy X™

LSO - Elastisk og luftig ryggbelte i ekstra stødig og slitesterk elastikk som passer både rett og innsvingt figurtype. Sterke drabånd samt skinner i plast bak og i sidene gir ekstra stabilitet. Borrelås midt foran. Ryggbeltet er velegnet for røffe miljøer.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
23550	Blå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Blå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy XT™ høy

LSO - Elastisk og luftig ryggbelte i ekstra stødig og slitesterkt materiale. Modellen er ekstra høy og har delt lukning foran, samt ekstra drabånd for økt stabilisering. Den har åpne kanaler bak for komplettering av mer stabile skinner når det ønskes.

Bruksområder: Ryggsmerte, rygginsuffisiens

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
23552	Mørkeblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Mørkeblå	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Mørkeblå	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Mørkeblå	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Mørkeblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Mørkeblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Auminiumskinner 2 stk.	2 cm x 26 cm			





Elcross® LUX mellom

LSO – En modell med middels høyde som gir stabil lumbosacral støtte.

ELCROSS®LUX er en serie medium stabile belter laget av det innovative

”Resistex® Carbon”-materialet som holder kroppen kjølig og komfortabel.

Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaper, transporterer fuktighet bort fra kroppen og er Øko-Tex 100 sertifisert. De ekstra stroppene kan plasseres etter ønske. Kanten på stroppene gjør de enkle å få tak i når man skal ta dem av. Passer godt for ulike typer kroppsfasonger. Skinnene bak og på sidene gir stabilitet sammen med de sterke stroppene. Det er borrelåsfeste midt foran. På baksiden er det to åpne rom for ekstra formbare stabile skinner som er inkludert i pakken. Materialet i ELCROSS®LUX er uten latex. Finnes i beige og grå modell.

Bruksområder: Ryggsmertor og rygginsuffiens.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22172	Beige	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm

Elcross® Light standard

LSO - Ryggortose laget i et meget elastisk materiale som gir 50% mer kompresjon enn konvensjonelle ryggortoser. Ortosens to lycra-lag er tynnere og luftigere enn det tradisjonelle Elcross-materialet. Ryggortosen passer både rett og innsvingt figurtype. Fjær og skinner bak og i sidene gir stabilitet sammen med de ekstra stabiliserende drabåndene på hver side.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22159	Svart	Small	85-95 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Medium	95-105 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Large	105-115 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	X-Large	115-125 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	XX-Large	125-135 cm	28 cm	20 cm



Elcross® LUX høy

LSO- Denne modellen er noe høyere og vil derfor egne seg godt til høye personer. Den gir støtte lumbalsacralt og i nedre delen av thorax. ELCROSS®LUX er en serie medium stabile belter laget av det innovative "Resistex® Carbon"- materialet som holder kroppen kjølig og komfortabel. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaper, transporterer fuktighet bort fra kroppen og er Øko-Tex 100 sertifisert. De ekstra stroppene kan plasseres etter ønske. Kanten på stroppene gjør de enkle å få tak i når man skal ta dem av. Passer godt for ulike typer kroppsfasonger. Skinnene bak og på sidene gir stabilitet sammen med de sterke stroppene. Det er borrelåsfeste midt foran. På baksiden er det to åpne rom for ekstra formbare stabile skinne som er inkludert i pakken. Materialet i ELCROSS®LUX er uten latex. Finnes i beige og grå modell.

Bruksområder: Ryggsmerter og rygginsuffisiens.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22173	Beige	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm

Elcross® Light høy

LSO - Ryggortose laget i et meget elastisk materiale som gir 50% mer kompresjon enn konvensjonelle ryggortoser. Ortosens to lycra-lag er tynnere og luftigere enn det tradisjonelle Elcross-materialet. Ryggortosen passer både rett og innsvingt figurtype. Fjær og skinner bak og i sidene gir stabilitet sammen med de ekstra stabiliserende dråbandene på hver side.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22160	Svart	Small	85-95 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Medium	95-105 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Large	105-115 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	X-Large	115-125 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	XX-Large	125-135 cm	33 cm	23 cm



Camp MAX korsett standard

LSO – Elastisk stoffkorsett som er ekstra smidig og føyelig. Det er semi-rigid og gir lumbosacral støtte. Korsettet er laget av et mykt ventilerende materiale. De patenterte ekstra stabiliserende båndene former seg godt rundt kroppen og gir god støtte. Åpne spilelommer bak med bøyelige skinner, og et frontpanel med en myk borrelåslukning foran. Camp Max har lav vekt og er et behagelig korsett å bruke.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22140	Grå	Small	80-95 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Medium	90-105 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Large	100-115 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	X-Large	110-125 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	XX-Large	120-135 cm	28 cm	20 cm





Camp MAX korsett høy

LSO – Elastisk stoffkorsett som er ekstra smidig og føyelig. Det er semi-rigid og gir lumbosacral støtte. Korsettet er laget av et mykt ventilerende materiale. De patenterte ekstra stabiliserende båndene former seg godt rundt kroppen og gir god støtte. Åpne spilelommer bak med bøyelige skinner, og et frontpanel med en myk borrelåslukning foran. Camp Max har lav vekt og er et behagelig korsett å bruke.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22141	Grå	Small	80-95 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Medium	90-105 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Large	100-115 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	X-Large	110-125 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	XX-Large	120-135 cm	33 cm	20 cm



Camp MAX korsett ekstra høy

LSO – Elastisk stoffkorsett som er ekstra smidig og føyelig. Det er semi-rigid og gir lumbosacral støtte. Korsettet er laget av et mykt ventilerende materiale. De patenterte ekstra stabiliserende båndene former seg godt rundt kroppen og gir god støtte. Åpne spilelommer bak med bøyelige skinner, og et frontpanel med en myk borrelåslukning foran. Camp Max har lav vekt og er et behagelig korsett å bruke.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22142	Grå	Small	80-95 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Medium	90-105 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Large	100-115 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	X-Large	110-125 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	XX-Large	120-135 cm	35 cm	23 cm

SpinAir Ryggortose

SpinAir er beregnet for pasienter med osteoporose eller kyfose. Ortosen tilbyr en effektiv og behagelig behandling ved disse tilstandene. Ortosen fremmer og forbedrer tilbakeskyving av skuldrene uten støtte fra ribbena, for økt komfort. Lumbale forsterkninger gir økt stabilitet og en bedre lumbal passform. SpinAir er diskret med lav vekt, og er enkel å prøve ut på pasienten. Fleksible skulderbånd gir en anatomisk passform av ortosen over skuldrene. En myk vattering gir ytterligere komfort for pasienten. Skulderbåndene kan justeres etter behov og gradvis forbedring. De kan også klippes til ønsket lengde.

Bruksområder: Osteoporose, kyfose, spinal artrose

Art. nr.	Modell	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak
22146	SpinAir	Small	78 - 93 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium1	90 - 105 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium2	90 - 105 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large2	103-120 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large3	103-120 cm	68-75 cm
22147	SpinAir Forlengingsbånd	En størrelse		



Mål: Målet "Høyde bak" måles fra Th2 til SI.

Elcross® LUX skulder

TO - Elastisk og myk holdningsbandasje laget av det innovative Resistex® Carbon"- materialet som holder kroppen kjølig og komfortabel. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaper, transporterer fuktighet bort fra kroppen og er Øko-Tex 100 sertifisert. Med bomull mot huden for pasienter som trenger støtte over brystryggen ved for eksempel holdningstrening. Polstrede skulderstropper forhindrer gnag. Borrelåsåpning midt foran. Materialet i ELCROSS®LUX er uten latex.

Bruksområder: Rygginsuffisiens, økt thorakal kyfose og holdningsproblemer.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Mål: Rundt brystkassen under bysten.



Elcross® LUX mage

ABDO – Denne modellen er spesielt utviklet for pasienter med kraftig mageparti. Den gir stabil støtte over korsryggen samtidig som den støtter godt under magen. På fremsiden har den en bred borrelåsåpning på den ene siden som gjør det mulig å variere bredden og få en optimal støtte. Kan også brukes av gravide. Stroppene plasseres da foran eller under magen. ELCROSS®LUX er en serie medium stabile belter laget av det innovative "Resistex® Carbon"-materialet som holder kroppen kjølig og komfortabel. Materialet er antistatisk, har temperaturregulerende egenskaper, transporterer fuktighet bort fra kroppen og er Øko-Tex 100 sertifisert. De ekstra stroppene kan plasseres etter ønske. Kanten på stroppene gjør de enkle å få tak i når man skal ta dem av. Passer godt for ulike typer kroppsfasonger. Skinnene bak og på sidene gir stabilitet sammen med de sterke stroppene. Det er borrelåsfeste midt foran. På baksiden er det to åpne rom for ekstra formbare stabile skinner som er inkludert i pakken. Materialet i ELCROSS®LUX er uten latex.

Bruksområder: Ryggsmerter og rygginsuffisiens. Som støtte for svak magemuskulatur og for mindre brokk.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22174	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	26 cm



Ryggplate

Hjerteformet ryggplate i Campolite, kledd med frotté. Platen festes med borrelås på korsettet eller ryggbeltet. Skåret ut for ryggraden for å unngå trykk.

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Tykkelse	Høyde
22135	En størrelse	18 cm	1 cm	16 cm

Camp® ONE Lav

LSO - Camp® ONE er en serie stabile belter i stoff. Du får beltene i forskjellige høyder og de er laget av et stabilt stoff med bomull som base (60% bomull, sammen med polyamid, elastan og polyester). Disse materialene sammen gir god stabilitet og holdbarhet. Denne lave modellen gir støtte for den nedre delen av korsryggen og over sacrum. Enkel å ta på og tilpasse til ønsket kompresjon. Borrelåsfeste midt foran. Modellene har løkker på sidene der snorene går. Modellene har doble snorer som gir en stabil passform og føyelighet. Det er innsydde plastskinner i ortosen og åpne rom der man kan bruke 2 ekstra stabile formbare skinner (inkludert i pakken). Materialets fleksibilitet gjør at ortosen er svært føyelig, noe som gjør den godt egnet for ulike typer kroppsfasonger. Materialet i Camp®ONE er uten latex.

Bruksområder: Ryggsmarter og rygginsuffisiens.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22178	Grå	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm

Camp® ONE mellom

LSO - Camp® ONE er en serie stabile belter i stoff. Du får beltene i forskjellige høyder og de er laget av et stabilt stoff med bomull som base (60% bomull, sammen med polyamid, elastan og polyester). Disse materialene sammen gir god stabilitet og holdbarhet. Denne middels høye modellen gir god støtte for korsryggen. Enkel å ta på og tilpasse til ønsket kompresjon. Modellene har løkker på sidene der snorene går. Modellene har doble snorer som gir en stabil passform og føyelighet. Det er innsydde plastskinner i ortosen og åpne rom der man kan bruke 2 ekstra stabile formbare skinner (inkludert i pakken). Materialets fleksibilitet gjør at ortosen er svært føyelig, noe som gjør den godt egnet for ulike typer kroppsfasonger. Materialet i Camp®ONE er uten latex.

Bruksområder: Ryggsmarter og rygginsuffisiens.



Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22179	Grå	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm



Camp® ONE høy

LSO - Camp® ONE er en serie stabile korsetter i stoff. Du får korsettene i i forskjellige høyder og de er laget av et stabilt stoff med bomull som base (60% bomull, sammen med polyamid, elastan og polyester). Disse materialene sammen gir god stabilitet og holdbarhet. Denne noe høyere modellen gir god støtte i korsryggen, men også nedre del av thorax. Passer for personer som er høyere. Enkel å ta på og tilpasse til ønsket kompresjon. Modellene har løkker på sidene der snorene går. Modellene har doble snorer som gir en stabil passform og føyelighet. Det er innsydde plastskinner i ortosen og åpne rom der man kan bruke 2 ekstra stabile formbare skinner (inkludert i pakken). Materialets fleksibilitet gir at ortosen er svært føyelig, noe som gjør den godt egnet for ulike typer kroppsfasonger. Materialet i Camp®ONE er uten latex.

Bruksområder: Ryggsmertor og rygginsuffiens.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22180	Grå	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm



Camp® ONE tilbehør

For komplettering med ekstra spileomme når ekstra stabilitet ønskes. Det finnes to bredder av spileomme samt tilhørende kanteband.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde
22183	Kanteband		125 m
22184	Spileomme grå	25 mm	30 m
22184	Spileomme grå	34 mm	30 m

Camp® XXI standard

LSO - Tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon, da all kraft kan justeres med snøringen i kombinasjon med de stabile båndene. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen og to skinner er inkludert. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hofte mål	Høyde bak	Høyde foran
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm



Camp® XXI høy

LSO - Tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon, da all kraft kan justeres med snøringen i kombinasjon med de stabile båndene. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen og to skinner er inkludert. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Denne modellen kan oppleves litt liten i størrelsen. Om målet ligger i øvre delen, så velg en størrelse større.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hofte mål	Høyde bak	Høyde foran
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm





Camp® XXITLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacralt tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Passer både rett og innsvingt figurtype. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon, da all kraft kan justeres med snøringen i kombinasjon med de stabile båndene. Polstrede skulderbånd på skulderdelen gjør at korsettet ikke gnager i armhulen. Disse krysses bak på øvre del av ryggen og festes på framsiden. Borrelås midt foran.

Bruksområder: Osteoporose og kyfose.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm



Camp® XXI mage

ABDO - Lumbo-sacralt tøykorsett i bomull med innvevd polymertråd for lett elastisitet. Denne modellen er spesielt egnet for pasienter med kraftig mageparti. Dobbel Camp-snøring i hver side med borrelås. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon da snøringen er meget enkel å regulere. Todelt borrelås i siden gir god justeringsmulighet og forenkler når korsettet skal tas på.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens hos personer med kraftig mageparti.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm

Lumbo 267

LSO - Tøykorsett i bomull som passer en middels stor, rett figurtype. Korsettet har tredobbel Camp-snøring i hver side og elastikkinnfelling opp og nede i sidene foran. Utstyrt med åpne spilelommer i ryggen. Lukkes med glidelås midt foran. Spiler er ikke inkludert.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Dette helfabrikatet har 4 åpne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Disse skinnene er ikke inkludert.

Art. nr.	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
22672	74	74 cm	39 cm	26 cm
22672	78	78 cm	39 cm	26 cm
22672	82	82 cm	39 cm	26 cm
22672	86	86 cm	39 cm	26 cm
22672	90	90 cm	39 cm	26 cm
22672	94	94 cm	39 cm	26 cm
22672	98	98 cm	39 cm	26 cm
22672	102	102 cm	39 cm	26 cm
22672	106	106 cm	39 cm	26 cm
22672	110	110 cm	39 cm	26 cm



Lumbo 439

LSO - Tøykorsett i bomull som passer både for en rett og innsvingt figurtype. Korsettet har gjennomgående elastikkinnfelling i hver side foran, og åpne spilelommer i ryggen. Fire åpne sømmer i sidene og åpen søm i ryggen gir store tilpassingsmuligheter. Korsettet kan med fordel brukes av pasienter med svak håndfunksjon da det lukkes med borrelås gjennom d-ring vekselvis fra høyre/venstre.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Dette halvfabrikatet har 4 åpne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Disse skinnene er ikke inkludert.

Art. nr.	Størrelse	Midje	Høyde bak	Høyde foran
26439	76	76 cm	68 cm	55 cm
26439	84	84 cm	68 cm	55 cm
26439	92	92 cm	68 cm	55 cm
26439	100	100 cm	68 cm	55 cm





Lumbo 59I

LSO - Tøykorsett som passer for en rett figurtype. Korsettet har elastikkinnfelling i hver side nede foran og åpne spilelommer i ryggen. Fire åpne sømmer i sidene og åpen søm i ryggen gir store tilpassingsmuligheter. Lukkes med regulerbare drabånd vekselvis fra høyre/venstre.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Dette halvfabrikatet har 4 åpne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Disse skinnene er ikke inkludert.

Art. nr.	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
2759I	82	82 cm	42 cm	30 cm
2759I	86	86 cm	42 cm	30 cm
2759I	90	90 cm	42 cm	30 cm
2759I	94	94 cm	42 cm	30 cm
2759I	98	98 cm	42 cm	30 cm
2759I	102	102 cm	42 cm	30 cm
2759I	106	106 cm	42 cm	30 cm



Lumbo 073

LSO KorsettTøykorsett som passer for en innsvingt figurtype. Korsettet er utstyrt med dobbel Camp-snøring i hver side, elastikkinnfelling opppe og nede i sidene foran og åpne spilelommer i ryggen. Lukkes med hekterad i fremre sidesøm. Spiler er ikke inkludert.

Bruksområder: Ryggsmerte og rygginsuffisiens.

Annet: Dette helfabrikatet har 2 åpne kanaler i ryggen til ekstra skinner. Disse skinnene er ikke inkludert. Størrelse = hofte måling

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde bak	Høyde foran
29073	Beige	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	110 cm	30 cm	20,5 cm



Elastisk kantebånd

Elastisk kantebånd for kanting av tekstile korsetter.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
25010	Hvit	20 mm	175 m	Rull
25010	Beige	20 mm	175 m	Rull

Drabånd

Stødig drabånd i nylon. Kan brukes til korsetter, men også til andre type ortoser. Materialet er stabilt og overflaten tillater en d-ring å gli uten motstand. Den avklippede kanten lukkes ved å brenne den.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde
29715	Hvit	25 mm	50 m
29715	Beige	25 mm	50 m



Trevikta list

Trevikta list i bomull for ferdiggjøring av korsett. Kan brukes som spilelomme.

Art. nr.	Farge	Bredde	Pk.
25006	Beige	21 mm	50 mm





Navy™ Xtra

Navy™ Xtra er en ryggortose som kan tilpasses etter behov. Ortosen kan brukes ved stabilisering etter operasjon, men også som lett støtte under rehabilitering. Ved hjelp av den individuelt formede ryggplaten og korsettets forsterkede framdel, stabiliseres ryggen og bidrar til smertelindring. Ryggplaten er laget av 3D-LITE™ materiale. Denne lavtemperaturplasten puster, har lav vekt og er enkel å bearbeide selv til de mest krevende utfordringer. Forsterkningene på ortosen sin framside kan enkelt fjernes. Det svarte tekstilmaterialet er av samme stabile og ventilerende materiale som brukes i vår produktserie med ryggortoser under varemerket NavyX™.

Bruksområder: Frakturer, Post-Op-Stabilisering, Post-Op ryggskivekirurgi, Degenerative tilstander i ryggraden, Skivebrokk, Bøyd skive, Spondylolistese, Spondylolyse, Facett syndrom, spinal stenose.

Kontraindikasjoner: Ustabil ryggrad.

Annet: Dette produktet skal kun tilpasses av medisinsk kyndig fagpersonale. Ryggdelen av 3D-LITE materiale kan varmes i ovn eller med varmpistol ved ca. 80°C.

Art. nr.	Størrelse	Hoftemål	Høyde bak	Høyde foran
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
23563	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm

Hyperekstensjonsstøtte C35+

Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær for postoperativ behandling. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og brystvidde og har en brystplate som kan vrís med gradering som gjør det enkelt å stille inn vinkelen. Den nedre bøylen kan stilles i bevegelig eller fast posisjon. Justerbar ryggplate.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale stabilefrakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose, Luksasjoner eller Osteoartritt.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.



Art. nr.	Modell	Størrelse	Høyde	Hoftemål
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20352	Ekstra ryggplate	Small/Medium		
20352	Ekstra ryggplate	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøyle foran			



Hyperekstensjonsstøtte C37

Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og vidde, har en hofteplate som kan vrís og justerbar ryggplate. Den nedre bøylen er justerbar i vinkelen.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale; stabile frakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose, luksasjoner, osteoartritt.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Høyde	Hoftemål
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20352	Ekstra ryggplate	Small/Medium		
20352	Ekstra ryggplate	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøyle foran			



C35 Hydro

Et hyperekstensjonskorsett som er laget i et vanntett materiale, og som derfor er passende for badeterapi. Korsettet er justerbart i høyde og brystvidde og har en brystplate som kan vrís. Bekkenbøylen kan låses i valgfri posisjon. Lukkes med hurtigspenner. Polstringen kan byttes ut.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale; stabile frakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose, luksasjoner, osteoartritt. Beregnet for bruk av og til ved badeterapi.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Høyde	Hoftemål
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Ekstra polstring	Small		
20359	Ekstra polstring	Medium		
20359	Ekstra polstring	Large		
20359	Ekstra polstring	X-Large		
20360	Ekstra bånd med spenne	En størrelse		

Mål: Høyde: Mål fra brystbenet til pubis.

Cut-4-Custom LSO

Cut-4-Custom er et korsett i 3D-LITE™ materiale som består av en fram- og bakdel (pre-cut) med formonterte bånd. De formes enkelt direkte på pasienten for å få et individuelt tilpasset stabilt korsett. Korsettene finnes i LSO og TLSO for å passe ulike pasientanatomier. Finn riktig størrelse ved å ta mål på pasienten og sammenlign med størrelsestabellen. Velg en framdel og en bakdel.

Bruksområder: Post-operativt, kompresjonsfrakturer og immobilisering av ryggraden.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Tykkelse	Høyde	Omkrets
64919	Foran	XS / S	5 mm	19,5 cm	60 - 75 cm
64919	Foran	S / M	5 mm	19,5 cm	70 - 90 cm
64919	Foran	M / L	7 mm	21,5 cm	85 - 105 cm
64919	Foran	L / XL	7 mm	24,5 cm	95 - 120 cm
64919	Foran	XL / XXL	7 mm	27 cm	115 - 140 cm
64921	Bak	XS / S	5 mm	30 cm	60 - 75 cm
64921	Bak	S / M	5 mm	31,5 cm	70 - 90 cm
64921	Bak	M / L	7 mm	33,5 cm	85 - 105 cm
64921	Bak	L / XL	7 mm	35 cm	95 - 120 cm
64921	Bak	XL / XXL	7 mm	36,5 cm	115 - 140 cm



Mål: Størrelsen bestemmes av midjemålet. Ta målet ved å stramme litt til. Mål også ønsket høyde foran og bak i henhold till anvisningene. Velg størrelse fra tabellen.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom er et korsett i 3D-LITE™ materiale som består av en fram- og bakdel (pre-cut) med formonterte bånd. De formes enkelt direkte på pasienten for å få et individuelt tilpasset stabilt korsett. Korsettene finnes i LSO og TLSO for å passe ulike pasientanatomier. Finn riktig størrelse ved å ta mål på pasienten og sammenlign med størrelsestabellen. Velg en framdel og en bakdel.

Bruksområder: Post-operativt, kompresjonsfrakturer og immobilisering av ryggraden.


Art. nr.	Modell	Størrelse	Tykkelse	Høyde	Omkrets
64922	Foran	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Foran	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Foran	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Foran	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Bak	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Bak	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mål: Størrelsen bestemmes av midjemålet. Ta målet ved å stramme litt til. Mål også ønsket høyde foran og bak i henhold till anvisningene. Velg størrelse fra tabellen.

MÅLINSTRUKSJONER

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

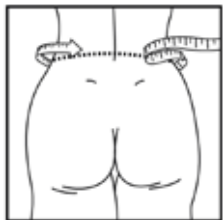

Størrelse

Størrelsen bestemmes av midjemålet. Ta målet litt stramt. Mål også tiltenkt høyde foran og bak i henhold til anvisningene. Velg størrelse fra tabellen.

	Beskrivelse	Omkrets i cm		Total høyde foran i cm	Total høyde bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO foran



LSO bak





TLSO foran



TLSO bak

Disse illustrasjonene viser den omtrentlige høyden for de to modellene, LSO og TLSO.

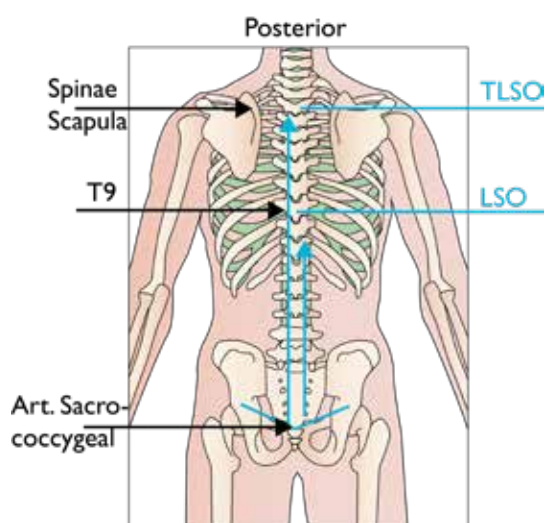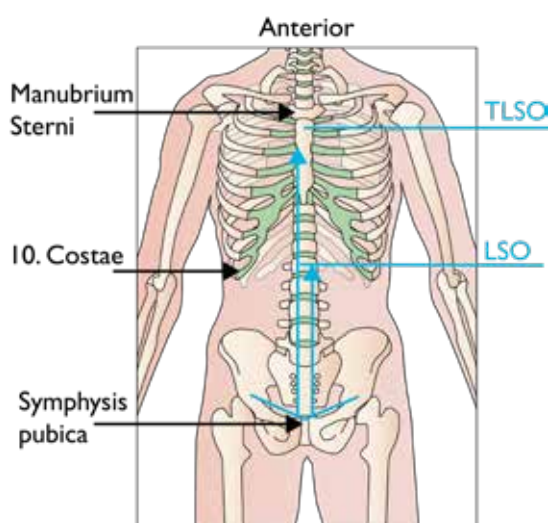

BOSTON Overlap Brace

Prefabrikeret korsett laget spesielt for behandling av kronisk eller tilfeldig korsryggsmerte. Korsettet finnes i 20 standardstørrelser og i flere ulike tykkelser og ulike lordosegrader. Kan også bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Velg mellom polstret og upolstret. Modulen er laget av polyeten. Skal brukes sammen med en undertrøye. Bånd og D-ring er inkludert med hvert korsett.

Bruksområder: Korsryggsmerte, spondylolistes, spondylitt, osteoporose, pre- og postoperativt, spinal stenose og frakturer.

Annet: Korsettet kan kun bestilles i hvit polyeten. Bruk størrelsestabellen for standardstørrelser. For målbestilte korsetter: fyll i Bestillingsskjemaet. Produksjonsmanualer og studier kan bestilles.

Art. nr.	Modell	Tykkelse
29690	Standardmodul 15°	1,5 mm
29694	Standardmodul 30°	3 mm
29695	Standardmodul 15°	3 mm
29697	Målbestilt polstret	3 mm
29698	Standardmodul polstret 15°	3 mm
29696	Ryggfjær 20 cm	
29696-1	Ryggfjær 25,5 cm	
29696-2	Ryggfjær 30,5 cm	
29696-3	Ryggfjær 35,5 cm	





BOSTON LITE™

Boston LITE™ er en videreutvikling av "Soft Brace" som har vært på markedet i mange år. Nye teknikker har gjort det mulig å skape et korsett som er både tynnere og mer ventilt, men med samme stabilitet. Boston LITE har fått en del nye funksjoner ved at forsterkningsmaterialet "bakes" inn i platen. Dette gjør det mulig å lage hull i den mykere platen som er mellom de ulike forsterkningssegmentene. Korsettet leveres med en separat innerdel som lages av en "3D-Spacer"-vev. Denne tillater fukt og varme å absorberes slik at huden holdes svalere og tørrere, samtidig som den fungerer som en polstring og fordeler trykket mot kroppen. Innerdelen brukes istedet for en vanlig undertrøye. For en mer kosmetisk design er det utviklet nye spenner med lav profil og som gir et smidigere utseende.

Bruksområder: Nevromuskulære Skolioser, holdningskontroll og postoperativ støtte.

Annet: Dette korsettet kan bestilles i samme farger som Boston Soft Body Jacket. Boston LITE finnes kun med åpning bak. Størrelsene for Boston LITE Liner dekker 2 størrelser av modulen (J1 / J2 = str. 1, J3 / J4 = str. 2) "Boston LITE Målbestilt (29726 og 29728) kan kun fås i samme størrelsesutvalg som standardstørrelsene J1 – Y4F, med 15° lordose og åpning bak. 1 stk. liner er inkludert med hvert enkelt korsett. Ytterligere linere kan bestilles separat. En spesiell båndløsning med spenne er inkludert.

Art. nr.	Modell	Beskrivelse	Størrelse	Lordosegrad
29725	Boston LITE Korsett	Modul, ikke ferdig	J1 - Y4F	15°
29726	Boston LITE Korsett	Modul, ikke ferdig	Målbestilt	15°
29728	Boston LITE Korsett	Ferdiglaget	Målbestilt	15°
29729	Boston LITE Korsett	Ferdiglaget	J1 - Y4F	15°
29730	Separat liner	(se under Mål)	1 - 6	
29731	Ekstra bånd	Sett med 3 bånd/spenner	En størrelse	
29732	Plastspenne			

BOSTON Soft Body Jacket

Prefabrikert korsett beregnet for pasienter med nedsatt muskelstyrke, svak bolkontroll eller som av andre årsaker ikke klarer å bruke en rigid ortose. Modulen er laget av et hardere polyetenfoam på ytersiden samt et mykere polyetenskum på innsiden. Standardmodulen, som finnes i 30 størrelser, er hvit, har 15° lordose, åpning bak samt åpne kanaler. Kan også bestilles i ulike farger, lordoser, åpne eller lukkede kanaler samt etter mål. Skal brukes sammen med en undertrøye. Bånd og D-ring er inkludert til hvert korsett.

Bruksområder: Nevromuskulære scolioser, holdningskontroll og postoperativ støtte.

Annet: Dette korsettet kan bestilles i flere ulike farger som framgår av Bestillingsskjemaet. Kontakt oss for fargeprøver. Det kan også bestilles med en ekstern ramme som har heldekkende mønster fra "Mønsterlisten". Ved bestilling av BSBJ med ekstern ramme er grunnmaterialet alltid hvitt. Det kan også bestilles med små transfermønstre fra "Boston Transfer listen". Kontakt oss for mer informasjon og prøver. Bruk størrelsestabellen for standardstørrelser. For målbestilte korsetter; fyll i Bestillingsskjemaet. Produksjonsmanualer og studier kan bestilles.

Art. nr.	Modell	Type	Lordosegrad
29707	Standardmodul	Åpne kanaler	15°
29708	Målbestilt	Åpne kanaler	
29709	Standard modul	Lukkede kanaler	15°
29710	Målbestilt	Lukkede kanaler	
29700	Med ramme		
29719	Bånd med spenne	5 cm x 30,5 cm	



BOSTON Body Jacket

Body Jacket laget av LDPE (low density polyeten) beregnet for immobilisering av ryggraden. Kan bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Skal brukes sammen med en undertrøye. Bånd er ikke inkludert, og må bestilles separat.

Bruksområder: Postoperativt, kompresjonsfrakturer og immobilisering av ryggraden.

Annet: Korsettet kan kun bestilles i hvit Polyeten (LDPE). Det kan bestilles med heldekkende mønster fra "Mønsterlisten". Det kan også bestilles med små transfermønstre fra "Boston Transfer listen". Kontakt oss for mer informasjon og prøver. Bruk størrelsestabellen for standardstørrelser. For målbestilte korsetter; fyll i Bestillingsskjemaet.

Art. nr.	Modell
29701	Målbestilt
29699	Tillegg for ferdigstilt korsett





BOSTON Skoliosekorsett

Veldokumentert prefabrikkert korsett for behandling av skoliose. Finnes i 30 standardstørrelser i 0° eller 15° lordose, men kan også bestilles etter mål eller gipsavstøpning. Modulen er laget av polypropen og polstret med polyetenfoam. Korsettet skal brukes sammen med undertrøye. Bånd og spenner er ikke inkludert.

Bruksområder: Idiopatiske skolioser.

Annet: Korsettet kan kun bestilles i hvit Polypropen. Det kan bestilles med heldekkende mønster fra "Mønsterlisten". Det kan også bestilles med små transfermønstre fra "Boston Transfer listen". Kontakt oss for mer informasjon og prøver. Bruk størrelsestabellen for standardstørrelser. For målbestilte korsetter; fyll i Bestillingsskjemaet. Produksjonsmanualer og studier kan bestilles hos oss.

Art. nr.	Modell	Tykkelse	Lordosegrad
29705	Standardmodell	4,5 mm	15°
29706	Standardmodell	4,5 mm	0°
29704	Målbestilt	4 mm	



BOSTON Skoliosis Night Brace

Scoliosekorsett beregnet for bruk om natten. Korsettet skal brukes minst 7 timer pr. natt. Modulen er laget av 3 mm copolymer og finnes i to ulike utførelser: En med avtagbar polstring og en med permanent polstring. Korsettet skal brukes sammen med undertrøye. Bånd og spenner er inkludert.

Bruksområder: Dette produktet er beregnet for behandling av idiopatisk skoliose i henhold til følgende retningslinjer: Mindre kurvestørrelse: ca. 25° - 45° Cobb-vinkel: Umodne skjelett (Riser 0-3), Apex opp til maksimalt Th9, Doble kurvaturer kan behandles, men krever høyere kompetansnivå. Det viktige elementet i behandlingen av doble kurvaturer er evnen til å identifisere de primære og sekundære kurvene. Ved behandling av en dobbel-kurvatur bør den primære være den Thorakale. Om det er den Lumbale kurven som er den primære: ta kontakt med oss for videre rådgivning.

Annet: Korsetten kan kun bestilles i hvit Copolymer. Det kan bestilles med heldekkende mønster fra "Mønsterlisten". Ved bestilling av heldekkende mønster er alltid innermaterialet hvitt. Det kan også bestilles med små transfermønstre fra "Boston Transfer listen". Kontakt oss for mer informasjon og prøver. Bruk Bestillingsskjemaet ved målbestillingen. Produksjonsmanual kan bestilles hos oss.

Art. nr.	Modell	Type
29720	Ferdiglaget med avtagbar polstring	Målbestilt
29721	Ikke ferdiglaget med avtagbar polstring	Målbestilt
29722	Ferdiglaget med permanent polstring	Målbestilt
29723	Ikke ferdiglaget med permanent polstring	Målbestilt

BOSTON korsett tilbehør

Her finner du ulikt tilbehør for ferdiggjøring av Boston Skoliosemoduler. Det er fremre og bakre forsterkningssett, sveistråd og innleggsputter.


Art. nr.	Modell	Størrelse	Bredde	Lengde	Ve/Hø
29711	Forsterkningssett Anterior	En størrelse			
29711	Forsterkningssett Posterior	En størrelse			
29713	Sveistråd i plast		3 mm	1,2 m	
29713	Sveistråd i plast		5 mm	1,2 m	
29715	Drabånd hvit		25 mm	50 m	
29715	Drabånd beige		25 mm	50 m	
29750	Elastisk materiale, hvitt		20 cm	1 m	
29753	Lumbar Pad	Small			Ve/Hø
29573	Lumbar Pad	Large			Ve/Hø
29573	Lumbar pad	Small			
29573	Lumbar pad	Large			
29757	Abdominal Pad	Medium			
29757	Abdominal pad	Large			



Boston Brace Mønster og Motiv

For ulike Boston korsetter kan man velge heldekkende mønster eller motiv. Disse kan kun velges på målbestilte korsetter og ikke for standardmoduler vi har på lager. Disse gjelder for Boston Body Jacket, Boston Scoliosekorsett og Boston Night Brace. Enkle motiv kan også bestilles til Boston Soft Body Jacket.

Art. nr.	Modell
29716	Løse motiv
29717	Motiv montert på korsett
29718	Heldekkende mønster montert på korsett

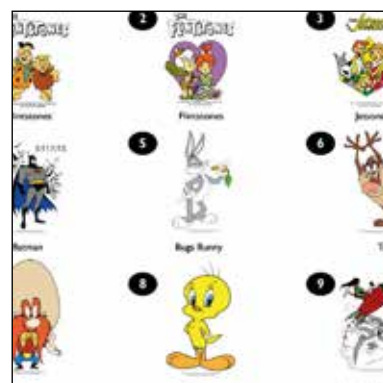

Boston Undertrøye Hvit

Denne 2-ply Boston undertrøya har rund hals og er helt sømløs, noe som gjør den perfekt for bruk under en rigid ryggortose. Elastisiteten gir en skrukkefri og ettersittende passform under korsettet. Den er laget av CoolMAX® og Elastan som gjør at den er sval på sommeren og varm på vinteren. Denne modellen har vinge under hver arm for å beskytte armhulene. Materialet er antistatisk og uten sølv og latex. Laget i henhold til Øko-Tex Standard 100, Class II.

Art. nr.	Størrelse	Lengde	Omkrets	Vidde	Aksillastøtte
29764	Small	46 cm	40-61 cm	14 cm	To sider
29764	Medium	52 cm	61-81 cm	20 cm	To sider
29764	Large	65 cm	81-102 cm	25 cm	To sider
29764	X-Large	65 cm	102-122 cm	30,5 cm	To sider



NYHET!



Størrelseskjema for Bostonkorsetter

Størrelsetabell B.O.B

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
I	71	51	66
ID	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	51	63,5
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Størrelsetabell Flexaform

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Størrelsetabell Scoliose og Soft Body Jacket

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Størrelsetabell B.O.B Boston LITE

Størrelse	Hofte i cm	Midje i cm	Bryst i cm
I5J1	54	40	49
I5J2	58	42	51
I5J3	62	45	54
I5J4	64	47	56
I5Y1	67	46	56
I5Y1A	66	51	55
I5Y2	71	47	60
I5Y2A	72	55	62
I5Y3	75	48	63
I5Y3A	78	57	69
I5Y4	79	51	64
I5Y4F	80	57	66



Ortosekomponenter

www.camp.no



Shearban®

ShearBan® er et selvklebende PTFE-materiale utviklet for å kontrollere friksjonskreftene i ortose- og proteseonstruksjoner. ShearBan gjør at friksjonskoeffisienten kan minskes dramatisk på områder der risikoen for hudirritasjon, sårdannelse osv. er stor. ShearBan-materialet er konstruert for tilpasset trimming og plassering på sko, innleggssåler, ortoser og protesehylser. Materialet appliseres på produktet og ikke mot huden. ShearBan dekkklapper kan brukes som dekkmateriale over skruer, nagler eller andre områder hvor materialer er sammenføyd eller har ujevnheter. Dekklappene finnes i to størrelser og i Beige eller Svart. Platene finnes kun i klarblå farge. Hver enkelt applikasjon er testet for sitt spesielle bruksområde.

Bruksområder: ShearBan-materialet er konstruert for tilpasset trimming og plassering på sko, innleggssåler, ortoser og protesehylser.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Pk.
38498	Beige	24 mm	pk à 84 lapper
38499	Svart	24 mm	pk à 84 lapper
38502	Beige	19 mm	pk à 138 lapper
38503	Svart	19 mm	pk à 138 lapper
38500	Blå	225 mm x 300 mm	5 ark
38501	Blå	225 mm x 300 mm	1 stk



Kid-Dee-Lite™

Markedets minste, justerbare ankelledd for barn. Leddet veier 20 gram og er laget av aluminium. Den gjør det mulig med tidlig mobilisering av barn spesielt med nevromuskulære skader. Justerbart bevegelsesomfang i 20° plantarfleksjon til 20° dorsalfleksjon. Kan brukes både med rette eller bøyde skinner. Leveres komplett med leddpinne og øvrig tilbehør som behøves ved produksjon og montering. Leddet er beregnet for barn under 5 år og er begrenset for bruk opp til vekt 25 kg og til høyde 120 cm. Maksimum belastning er 15 Nm.

Bruksområder: Til dynamiske behandlinger der et begrenset bevegelsesomfang kreves for å forhindre kontrakturer.

Kontraindikasjoner: Totalt bortfall av følelse.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Materiale	Størrelse	Pk.
62200	Polert aluminium	En størrelse	1 par

Binky universalledd

Et universalledd uten fleksjons- og ekstensjonsstopp, for parvis bruk ved produksjon av ortoser i termoplast eller separat som fritt bevegelig ledd. Binky-leddene egner seg for både barn og voksne i ortoser for håndledd og albue. Binky finnes i to størrelser. Størrelse Smal skal anvendes til mindre ledd og størrelse Large skal anvendes til større ledd. Ansvarlig lege foreskriver ortosen og avgjør behandlingens lengde.

Bruksområder: Paralytisk syndrom

Annet: Binky finnes i to størrelser. Størrelse Small skal brukes til mindre ledd (vektbelastning < 35 kg) og størrelse Large skal brukes til større ledd (vektbelastning > 35 kg).

Art. nr.	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
69688	12 mm	62 mm	2,5 mm	1 par
69688	18 mm	76 mm	2,5 mm	1 par



Gillette

Polyuretanledd for produksjon av termoplastortoser. Ankelleddet finnes i to ulike utførelser. Den dorsalflekterende modellen finnes i flere ulike størrelser og hardheter. Høyere hardhet gir sterkere dorsalfleksjon.

Art. nr.	Modell	Hardhet	Størrelse	Pk.
62775	Fleksibelt ankelledd		Barn	1 par
62775	Fleksibelt ankelledd		Voksen	1 par
62776	Dorsiflex ankelledd	0,5 kg	Barn Sølv	1 par
62776	Dorsiflex ankelledd	1 kg	Barn Transparent	1 par
62776	Dorsiflex ankelledd	1,5 kg	Barn Gull	1 par
62776	Dorsiflex ankelledd	0,5 kg	Voksen Sølv	1 par
62776	Dorsiflex ankelledd	1 kg	Voksen Transparent	1 par
62776	Dorsiflex ankelledd	1,5 kg	Voksen Gull	1 par





Tamarack

Selvrettende ledd i to ulike utførelser; Flexure (rett) og Flexure med Dorsiflexion Assist (bøyd). Laget av polyuretan med en forsterket kerne som minsker tøying av materialet. Tamarackleddene finnes i tre hardheter; 75Nm, 85Nm og 95Nm, hvor 95 gir mer løft.

Bruksområder: Ortoseapplikasjoner som albue, håndledd, barn-kneortoser samt ankel-fot-ortoser.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Modell	Hardhet	Størrelse	Pk.
62730	Flexure rett svart		Barn	1 par
62730	Flexure rett svart		Medium	1 par
62730	Flexure rett svart		Large	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	75	Barn	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	75	Medium	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	75	Large	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	85	Barn	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	85	Medium	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	85	Large	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	95	Barn	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	95	Medium	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	95	Large	1 par
62740	Flexure		Barn	1 par
62740	Flexure		Medium	1 par
62740	Flexure		Large	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	75	Barn	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	75	Medium	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	75	Large	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	85	Barn	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	85	Medium	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	85	Large	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	95	Barn	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	95	Medium	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist	95	Large	1 par
62741	Dummy		Barn	1 par
62741	Dummy		Medium	1 par
62741	Dummy		Large	1 par
62748	Holder for ekstern montering		Barn	1 par
62748	Holder for ekstern montering		Medium	1 par
62748	Holder for ekstern montering		Large	1 par

Tamarack verktøy

Tamarack Hand Punch: Brukes for å lage hull i plasten. Tamarack Spanner Wrench: Parallellverktøy Tamarackledd i en allerede eksisterende ortose.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Modell	Størrelse
62744	Hand Punch	Barn
62744	Hand Punch	Medium
62744	Hand Punch	Large
62745	Spanner Wrench	Barn
62745	Spanner Wrench	Medium/Large



Camber Axis

Ekstra sterkt ledd av rustfritt stål for krevende applikasjoner. Bevegelsesområdet stilles enkelt inn i plantar- eller dorsalfleksjon med justeringsplater som er inkludert. Disse finnes i ulike farger for ulike funksjoner.

Sølv = 0° Låst

Rød = 5° Låst i plantar- eller dorsalfleksjon

Blå = 10° Låst i plantar- eller dorsalfleksjon

Lilla = 15° Låst i plantar- eller dorsalfleksjon

Grønn = 0° - 30° Begrenset bevegelsesomfang i plantar- eller dorsalfleksjon

Svart = 5° - 10° Begrenset bevegelsesomfang i plantar- eller dorsalfleksjon

Gul = 7,5° - 10° Begrenset bevegelsesomfang i plantar- eller dorsalfleksjon



Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen. Samtlige justeringsplater er inkludert.

Art. nr.	Størrelse	Pk.	Vekt
62750	Small	1 par	36-45 kg
62750	Medium	1 par	opp til 72 kg
62750	Large	1 par	opp til 99 kg



Oklahoma

Ankelledd i nylon eller polypropen for bevegelseskontroll. Nylonleddet er velegnet for meget aktive pasienter.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Pk.
62760	Polypropen	Barn	I
62760	Polypropen	Small	I
62760	Polypropen	Medium	I
62760	Polypropen	Large	I
62760	Polypropen	X-Large	I



Ankelledd Dobbel Kompakt

Et ankelledd som leveres med en pin i den fremre kanalen og en fjær i den bakre kanalen for å tillate normal gange og innledende kontakt, såvel som å gi maksimal kontroll og stabilitet av kne og hofte. Ankelledd Dobbel Kompakt er beregnet for både lettere voksne- og barnepasienter. Ekstra pins og fjær inngår.

Annet: Maksimum vekt 72 kg. 62726/27 passer til skinner 5 x 13 mm.

Art. nr.	Modell	Materiale	Størrelse
62724	Ankelledd MED proksimal skinne	Rustfritt stål	En størrelse
62725	Ankelledd MED proksimal skinne	Aluminium	En størrelse
62726	Ankelledd UTEN proksimal skinne	Rustfritt stål	En størrelse
62727	Ankelledd UTEN proksimal skinne	Aluminium	En størrelse



Slim Line Double Action ankelledd

Ankelledd som enkelt kan stilles i ønsket plantar-dorsal fleksjon. Leddet har et rett innfeste for skinnen. Brukes med fordel sammen med "Kneledd trinnvis låsbart" og "Kneledd med bøyelås" som inngår i modulsystemet for helbensortoser samt til SafetyStride og FullStride. Leddet finnes i både rustfritt stål og aluminium.

Art. nr.	Modell	Materiale	Størrelse	Passer til skinner
62778	Ankelledd Double Action AL	Aluminium	En størrelse	19 mm
62777	Ankelledd Double Action RS	Rustfritt stål	En størrelse	19 mm
62778	Ankelledd Double Action AL	Aluminium	En størrelse	16 mm
62777	Ankelledd Double Action RS	Rustfritt stål	En størrelse	16 mm

Slim Line Y-bøyle

Y-bøyle til fotdelen. Brukes sammen med Slim Line Double Actions ankelledd for å kontrollere foten i plantar-dorsalfleksjon.

Annet: Passer til ledd/ åpning innvendig mål

Art. nr.	Materiale	Størrelse	Mål
62772	Rustfritt stål	Voksen	3,2 mm
62773	Rustfritt stål	Barn	2,4 mm



TRIPLE ACTION®

Innstilling, R.O.M. (bevegelsesomfang) og motstand plantart og/eller dorsalt, justeres helt uavhengig av hverandre. Dette gir en unik mulighet for å imøtekomme kravet om finjustering gjennom gangsyklusens ulike faser. De kraftige fjærene og den smidige innstillingen gjør det enklere å møte pasientens behov gjennom hele rehabiliteringsfasen. Leddene har fjær som tåler et høyt vrimoment, og tre enkle innstillinger sikrer ønsket funksjon. Triple Action-leddene forenkler effektiv behandling ved ulike biomekaniske funksjonshemminger i samband med nevrologiske skader.



Voksen 2.0 Ankelled
(19mm System)



Medium Ankelled
Small Adult
(16mm System)



Barn Ankelled
(13mm System)

Triple Action® komponentselektering

Pasientvekt	Kg	15	45	55	80	90	100
Leddtype	Ledd (Boostere)						
Barn 13 mm	1 (0)						
	2 (0)						
Medium 16 mm	1 (0)						
	1 (1-2)						
	2 (0)						
	2 (1-4)						
Voksen 19 mm	1 (0)						
	1 (1)						
	2 (0)						
	2 (1-2)						

Triple Action® ankelledd for barn

Et ankelledd utviklet for barn. Leddets unike fjærsystem gjør den ekstra holdbar selv for de mest aktive barna. Enkel tilpassing og justering direkte på pasienten. Juster i gangsyklusen der det er nødvendig. Velg mellom ulike fjæralternativ. Komponentene som har en høy materialstivhet gir funksjon gjennom hele gåsyklusen og eksepsjonell ytelse. Triple Action for barn passer til 13 mm skinner.



Bruksområder: Ved behandling av ulike funksjonshemminger i samband med nevrologiske skader: Crouch gange, plantarfleksjons-kontrakturer; Quadriceps svakhet, spastisitet og som tillegg ved Botox®-behandling, postoperativ immobilisering ved akillesforlenging eller mobilisering av den spastiske ankelen. Unilateral maks. 40 kg, Bilateral maks. 50 kg.

Kontraindikasjoner: For ortoser med ledd med monolateral konstruksjon (ledd kun på lateralsiden) skal ikke TripleAction Pediatric velges. Ønskes monolateral konstruksjon velg TripleAction Ankelledd Medium.

Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62707	Ankelledd uten boostesr	Bilateral
62670	Ankelledd med en booster	Plantar booster = Venstre medial/Høyre lateral eller Dorsal Booster = Venstre lateral/Høyre medial
62671	Ankelledd med en booster	Dorsal Booster = Venstre medial/Høyre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/Høyre medial
62672	Ankelledd med plantar og dorsal booster	Bilateral
62673	Distal skinne lateral	Bilateral
62674	Distal skinne medial	Ve/Hø
62675	Distal Y-skinne lang	Bilateral
62676	Distal rett skinne	Bilateral
62709	Verktøysett for produksjon	
62722	Kombinasjonsnøkkel Barn	



Triple Action® ankelledd medium

Triple Action "Small Adult" er beregnet for 16 mm skinner og er designet for å gi mest mulig aktiv kontroll gjennom alle fasene i gåsyklusen. De kraftige fjærene og den smidige innstillingen gjør det enklere å møte pasientens behov gjennom hele rehabiliteringsfasen. Leddet har fjær som takler et høyt vriment, og tre enkle innstillinger sikrer ønsket funksjon. Triple Action-leddet forenkler effektiv behandling ved ulike biomekaniske funksjonshemminger i samband med neurologiske skader. Laget av rustfritt stål for god holdbarhet og sikkerhet.

Bruksområder: Til bruk ved behandling av ulike biomekaniske funksjonshemminger i samband med neurologiske skader. Unilateral maks. 90 kg, Bilateral maks. 100 kg.

Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62711	Ankelledd uten booster	Bilateral
62713	Ankelledd med en booster	Plantar booster = Venstre medial/Høyre lateral eller Dorsal Booster = Venstre lateral/Høyre medial
62714	Ankelledd med en booster	Dorsal Booster = Venstre medial/Høyre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/Høyre medial
62715	Ankelledd med plantar og dorsal booster	Bilateral
62677	Distal skinne lateral	Ve/Hø
62678	Distal skinne medial	Ve/Hø
62679	Distal Y-skinne	Bilateral
62680	Distal rett skinne	Bilateral
62699	Camber Axis hengslet ledd	Bilateral
62719	Verktøysett for produksjon	
62721	Kombinasjonsnøkkel Medium	

Triple Action ankelledd 2.0 for voksne

Et ledd som er designet for å gi en optimal grad av justering og for å imøtekomme de biomekaniske kravene. Innstilling, R.O.M. (bevegelsesomfang) og motstand plantart og/eller dorsalt, justeres helt uavhengige av hverandre, noe som gir en unik mulighet for å imøtekomme kravet om finjustering gjennom gangsyklusens ulike faser. De kraftige fjærene og den smidige innstillingen gjør det enklere å møte pasientens behov gjennom hele rehabiliteringsfasen. Leddet har fjær som takler et høyt vrimoment og tre enkle innstillinger sikrer ønsket funksjon. Triple Action-leddet forenkler effektiv behandling ved ulike biomekaniske funksjonshemninger i samband med nevrologiske skader. Laget av rustfritt stål for god holdbarhet og sikkerhet. Triple Action 2.0 Voksen passer til 19 mm skinner.



Bruksområder: Tiltent i bruk ved behandling av ulike biomekaniske funksjonshemninger i forbindelse med nevrologiske skader. Unilateral maks. 100 kg. Bilateral maks. 110 kg.

Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62690	Ankelledd uten booster	Venstre lateral/høyre medial
62691	Ankelledd utan booster	Høyre lateral/venstre medial
62692	Ankelledd med plantar booster	Venstre lateral/høyre medial
62693	Ankelledd med plantar booster	Høyre lateral/venstre medial
62695	Distal skinne lateral	Ve/Hø
62696	Distal skinne medial	Ve/Hø
62697	Distal Y-skinne	Ve/Hø
62698	Distal rett skinne	Bilateral
62699	Camber Axis Hengslet ledd	Bilateral
62694	Verktøysett for produksjon	
62720	Kombinasjonsnøkkel Voksen	

Bevegelsesbegrener 655

Bevegelsesbegrener av rustfritt stål og nylon for begrensning av plantar-/dorsalfleksjon i ankelleddet.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pk.
62655	Small	1 sett
62655	Large	1 sett
62655	X-Large	1 sett





Bevegelsesbegrenser 755

Bevegelsesbegrenser av polyuretan for plantarfleksjonsstopp. Enkel å justere.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pk.
62755	En størrelse	1 sett



Bevegelsesdemper 795

Bevegelsesdemper av rustfritt stål og polyuretan. Den gir en variabel plantarfleksjon som kan låses i ønsket posisjon.

Annet: Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art. nr.	Størrelse	Pk.
62795	En størrelse	1 sett



SureStep HEKO kneledd

Surestep HEKO er en funksjonell overstrekkingsortose for mindre barn. HEKO motvirker hyperekstensjon i kneet ved å begrense knebevegelsen uten å påvirke kneets funksjon. Tradisjonelt er hyperekstensjon kontrollert ved å begrense plantarfleksjonsbevegeligheten i ankelen. Dette i seg selv begrenser gangen, minsker barnets mulighet til normal gåfunksjon og aktivitet. HEKO tillater barnet å gå, springe, sitte på huk og hoppe. Leddet har full ROM fra 0° til 135°. Det 4-akslede leddet gir full ROM, fordi den etterligner den anatomiske bevegelsen i et kne. Det har lav vekt og profil, og kan med fordel brukes under klær. Den er lett å ta på og av.

Bruksområder: Lokal kontroll av hyperekstensjon, varus samt valgus i kneet.

Annet: Leveres med medialt og lateralt ledd som begge har 8 mm offset.

Maksimalvekt for Small - 22 kg

Maksimalvekt for Large - 45 kg

Art. nr.	Materiale	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
62650	Rustfritt stål	Small	10 x 2 mm	135 mm	35 mm
62650	Rustfritt stål	Large	12 x 3 mm	185 mm	45 mm

Mål 1: Bredde og tykkelse skinne

Mål 2: Skinnens lengde fra senter av leddhuset

Mål 3: Leddhusets lengde

Kneledd trinnvis låsbart

Et trinnvis låsbart kneledd som hjelper pasienten med å nå full knestrekking og knestabilitet ved hjelp av den trinnvise knefleksjonen. Disse komponentene fra Becker Orthopedic inngår i et modulsystem beregnet for produksjon av helbensortoser. De module kneleddene finnes i rustfritt stål og aluminium. Skinnene, som er inkludert, er avrundet i overkant og rette i nederkant. Den lange vinklede låsebøylen er lett å tilpasse pasientens behov da den kan avkortes og formes individuelt.

Art. nr.	Modell	Materiale	Størrelse
62852	Kneledd trinnvis låsbart	Aluminium	19 mm
62853	Kneledd trinnvis låsbart	Rustfritt stål	19 mm



Mål: Passer till skinner 19 mm.

Låsekneledd med bøyelås

Et låsekne som automatisk aktiveres når leddet når full strekking. Disse komponentene fra Becker Orthopedic inngår i et modulsystem beregnet for produksjon av helbensortoser. Designet øker produksjonsmulighetene og forenkler vedlikeholdet av ortosen. Den lange vinklede låsebøylen er lett å tilpasse pasientens behov da den kan avkortes og formes individuelt. De module kneleddene finnes i to størrelser samt i Rustfritt stål og aluminium. Skinnene, som er inkludert, er avrundet i overkant og rette i nederkant. Vaier er inkludert. Låsekneet leveres også med en fremre drakabel som tillater pasienten å låse opp leddet.



Annet: Finnes i størrelser som passer til 16 mm og 19 mm skinner, både i aluminium og rustfritt stål.

Art. nr.	Modell	Materiale	Størrelse
62850	Låsekneledd AL	Aluminium	19 mm
62851	Låsekneledd RS	Rustfritt stål	19 mm
62850	Låsekneledd AL	Aluminium	16 mm
62851	Låsekneledd RS	Rustfritt stål	16 mm



SPL2 - Swing Phase Lock kneledd

SPL leddene er utviklet for å hjelpe pasienter med partiell eller totalt nedsatt funksjon av M.Quadriceps (kneekstensorene). Annet bruk er ikke tillatt. Leddets funksjon består av en pendelmekanisme som låser og låser opp kneleddet avhengig av leddets vinkel i sagittalplanet. Under gåsyklusen låser leddet før hælissetting for å gi støtte under ståfasen, for så etterpå å låse opp igjen når hælen forlater underlaget. Hensikten er å imitere kneekstensorenes normale fysiologiske funksjon og gi et mer normalt gånemønster uten sirkumduksjon eller hoftegange. SPL2-leddet låser ved full kneekstensjon og har ytterligere et sikkerhetsstopp som utløser seg ved 15° fleksjon når full ekstensjon ikke oppnås. Dette innebærer at ortosen låser seg selv om kneet ikke er helt ekstendert. Da SPL2-leddet ikke er avhengig av ankelsens posisjon og/eller bakkekontakt, kan leddet brukes for ulike typer ortoser:

- Helbensortoser med eller uten ankelledd
- Helbensortose eventuelt med hofteledd
- Kneortoser

Bruksområder: M.Quadriceps pareser pga: MS eller lignende sykdommer, slag, polio, perifere nerveskader og andre nevromuskulære sykdommer.

Kontraindikasjoner: Knefleksjonskontrakturer > 10° og moderat til alvorlig spastisitet

Annet: I begge produktene er I håndkontroll, dummy for innstøpning samt øvrig tilbehør for montering inkludert. SPL2-leddet er beregnet for 20 mm skinner. Skinner er ikke inkludert. Art. 62800 inneholder SPL- samt SPC-ledd. Art. 62803 inneholder SPL-ledd. Pasientvekt maks. 100 kg. Utførlig produksjons- og utprøvningsmanual er inkludert. Oversikt over reservedeler finnes i manualen. Det finnes også en separat manual beregnet for fysioterapeuter. Manualer kan bestilles fra oss.

Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62800	SPL2	Ve/Hø
62803	SPL2 Monolateral	Ve/Hø
62801	Parallellverktøy	
62802	Dummy	
62805	Renoverings-sett	
93101	Prøveortose til utlån. Ortosen kan justeres/tilpasses.	Bilateral

Load Response kneledd

Load Response kneledd gir støtdemping og tillater 18° knefleksjon i ståfasen. En belastet spiralfjær opprettholder kneleddets stabilitet ved å stå imot knefleksjon. Load Response finnes med skinner av aluminium, rustfritt stål eller titan.

Bruksområder: Total M. Quadricepsbortfall samt i kombinasjon med svakhet i hoftemuskulaturen. Pasientvekt: minimum 50 kg og maksimum vekt 86 kg.

Annet: Load Response leddet er beregnet for 19 mm skinner.

Art. nr.	Modell	Materiale	Ve/Hø
62820	Load Response kneledd komplett	Aluminium	Ve/Hø
62820	Load Response kneledd komplett	Aluminium	
62821	Load Response kneledd komplett	Stål	Ve/Hø
62821	Load Response kneledd komplett	Stål	
62822	Load Response kneledd komplett	Titan	Ve/Hø
62822	Load Response kneledd komplett	Titan	
62823	Urethane bånd		
62828	Parallellverktøy		
62829	Opplåsingskit, venstre ledd	Ve/Hø	
62829	Opplåsingskit		
93220	Demoortose til utlån		





GX-Knee kneledd

GX-Knee er et kneledd beregnet for å hjelpe til med kneekstensjonen under svingfasen. En gassfjær brukes for å hjelpe kneet til full ekstensjon ved hælissetting. Gassfjæren finnes i to ulike hardheter, 125N som standard samt 175N for meget aktive pasienter.

Bruksområder: Isolert Quadriceps svakhet, svakhet i Quadriceps i kombinasjon med fot- og ankelproblemer og svakhet i Quadriceps med sideinstabilitet i kneleddet. Pasientvekt maks. 100 kg.

Kontraindikasjoner: Svak hoftemuskulatur.

Annet: GX-knee leveres komplett med skinner medialt og lateralt.

Art. nr.	Modell	Hardhet	Materiale	Ve/Hø
62830	GX-Knee ungdom	125N	Aluminium	Ve/Hø
62830	GX-Knee ungdom	175N	Aluminium	Ve/Hø
62831	GX-Knee ungdom	125N	Rustfritt stål	Ve/Hø
62831	GX-Knee ungdom	175N	Rustfritt stål	Ve/Hø
62832	GX-Knee voksen	125N	Aluminium	Ve/Hø
62832	GX-Knee voksen	175N	Aluminium	Ve/Hø
62833	GX-Knee voksen	125N	Rustfritt stål	Ve/Hø
62833	GX-Knee voksen	175N	Rustfritt stål	Ve/Hø

FullStride™ kneledd

Fullstride kneledd gir mekanisk knekontroll ved hjelp av et kabelsystem. Leddet låses ved full ekstensjon, samt låser opp automatisk ved slutten av ståfasen. Fullstride gir maksimal kontroll av varus/valgus instabilitet og hyperekstensjon i kneleddet. Leddet FullStride kan skiftes til SafetyStride. Passer sammen med de fleste ankelled. Ved å skifte leddene fra medialt til lateralt og omvendt kan man få et låst kne.

Bruksområder: M. Quadriceps svakhet, MS, Stroke, skade på femoralisnerven og/eller inkomplett ryggmargsskade og inklusjonskroppsmysitt.

Kontraindikasjoner: Pasientvekt > 100kg, spastisitet i hofter, kne eller ankelmuskulatur, betydelig forskjell i benlengde hvor den skadede siden er kortere og ekstensjonskontraktur i kneleddet.

Annet: FullStride-leddet er beregnet for 19 mm skinner. Levereres komplett med skinner medialt og lateralt. På bildet er Slim Line Double Action ankelled samt Slim Line Y-bøyle montert. Demo-ortosen er kun beregnet for visning, ikke for utprøving.



Art. nr.	Modell	Materiale	Ve/Hø
62837	FullStride AL	Aluminium	Bilateral
62838	FullStride RS	Rustfritt stål	Bilateral
93240	FullStride demoortose til utlån	-	Bilateral
93250	PreSTRIDE prøveortose til utlån.	Ortosen kan justeres/ tilpasses.	Ve
93251	PreSTRIDE prøveortose til utlån.	Ortosen kan justeres/ tilpasses.	Hø



SafetyStride™ kneledd

SafetyStride kneledd gir knefleksjonskontroll ved hjelp av et mekanisk kabelsystem. Leddet behøver ikke full kneekstensjon for å låse under ståfasen, men låses uansett vinkel. En låstapp aktiveres inne i kneleddet under svingfasen for å forsikre stabilitet, samt låser opp automatisk ved slutten av støtfasen. SafetyStride kan skiftes til FullStride. Passer sammen med de fleste ankelledd.

Bruksområder: M. Quadriceps svakhet, MS, hjerneslag, skade på femoralisnerven og/eller inkomplett ryggmargsskade og inklusjonskroppsmysitt.

Kontraindikasjoner: Pasientvekt > 100kg, spastisitet i hofter, kne eller ankelmuskulatur og betydelig forskjell i benlengde der den skadede siden er kortere.

Annet: SafetyStride-leddet er beregnet for 19 mm skinner. Levereres komplett med skinner medialt og lateralt. På bildet er Camber Axis ankelledd montert. Demo-ortosen er kun beregnet for visning, ikke for utprøving.

Art. nr.	Modell
62835	SafetyStride, Aluminium
62836	SafetyStride, Rustfritt stål
93230	SafetyStride, demoortose til utlån
93231	SafetyStride, demoortose til utlån
93250	PreStride prøveortose til utlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses.
93251	PreStride prøveortose til utlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses.

MultiMotion korrigerende ledd

MultiMotion er et dynamisk korrigerende leddsystem som kan brukes når bevegelsen begrenses som f.eks. ved kontrakturer, spastisitet, etter operasjoner eller i forbindelse med brannskader. Systemet kan brukes til mange av kroppens ledd, både i ekstensjon og fleksjon. Leddets dynamiske funksjon gir en sikker og varig behandling helt etter pasientens individuelle forutsetninger. Ortozesystemet lages individuelt av ortopediingeniøren. Systemet er enkelt å manøvrere og innstillingene er lette å endre alt ettersom bevegelsesområdet forandres. Ved å bruke oppfølgingsskjemaet kan du enkelt følge utviklingen, og sikkerhetsstille hvilke justeringer og endringer som gjøres. Dette finnes som kun ledd samt som komplette sett inklusive øvre og nedre skinner. En spesiell variant for ankel finnes også hvor den integrerte T-skinne har 12 mm offset.



Bruksområder: Eksempel på diagnoser: Apoplexi, ligamentskader, brannskader, Cerebral Parese, frakturer, medfødte spastiske pareser, MS, Spina Bifida, underbensamputasjoner og spastiske pareser.

Kontraindikasjoner: Ankylose, deformiteter av muskler og ben, fibrose, ossifikasjon.

Annet: Oppfølgingsskjemaet kan bestilles hos oss, eller hentes under fliken "Last ned informasjon" på vår hjemmeside; www.camp.no.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål
69100	Korrigerende ledd	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69110	Korrigerende ledd (69100) + øvre og nedre rett skinne (69702)	Regular	200 x 16 x 4 mm
69111	Korrigerende ledd (69100) + øvre og nedre formet skinne (69706)	Regular	450 x 16 x 4 mm
69112	Korrigerende ledd (69100) + T-skinne og rett skinne (69710)	Regular	150 x 16 x 3,2 mm
69113	Korrigerende ledd med montert T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69121	Korrigerende ledd med integrert skinne	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69122	Korrigerende ledd med integrert skinne	Small	Skinnens bredde 12 mm
69123	Korrigerende ledd med integrert T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69125	Korrigerende ledd med integrert T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69200	Korrigerende ledd	Small	Skinnens bredde 12 mm
69210	Korrigerende ledd (69200) + øvre og nedre rett skinne (69701)	Small	200 x 12 x 3,2 mm
69211	Korrigerende ledd (69200) + øvre og nedre formet skinne (69705)	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69212	Korrigerende ledd (69200) + T-skinne og rett skinne (69709)	Small	150 x 12 x 3,2 mm
69213	Korrigerende ledd med montert T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69951	Dummy korrigerende ledd	Regular	
69952	Dummy korrigerende ledd	Small	



MultiMotion hengslet ledd

MultiMotion hengslet ledd plasseres på motsatt side av det korrigerende leddet. Dette for å oppnå ønsket vristivhet i ortosen. Denne finnes som kun ledd samt som komplette sett inklusive øvre og nedre skinner. En spesiell variant for ankel finnes også hvor den integrerte T-skinne har 12 mm offset.

Bruksområder: Se MultiMotion Korrigerende ledd.

Annet: Fri bevegelse (+135° til -135°).

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål
69505	Hengslet ledd	Small	Skinnens bredde 12 mm
69128	Hengslet ledd med integrert skinne	Small	Skinnens bredde 12 mm
69500	Hengslet ledd	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69127	Hengslet ledd med integrert skinne	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69518	Hengslet ledd med montert T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69131	Hengslet ledd med integrert T-skinne 12 mm offset	Small	Skinnens bredde 12 mm
69513	Hengslet ledd med montert T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69129	Hengslet ledd med integrert T-skinne 12 mm offset	Regular	Skinnens bredde 16 mm
69515	Hengslet ledd (69505) + øvre og nedre rett skinne (69701)	Small	200 x 12 x 3,2 mm
69516	Hengslet ledd (69505) + øvre og nedre formet skinne (69705)	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69517	Hengslet ledd (69505) + T-skinne og rett skinne (69709)	Small	150 x 12 x 3,2 mm
69510	Hengslet ledd (69500) + øvre og nedre rett skinne (69702)	Regular	200 x 16 x 4 mm
69511	Hengslet ledd (69500) + øvre og nedre formet skinne (69706)	Regular	450 x 16 x 4 mm
69512	Hengslet ledd (69500) + T-skinne og rett skinne (69710)	Regular	150 x 16 x 3,2 mm
69953	Dummy hengslet ledd	Regular	
69954	Dummy hengslet ledd	Small	

MultiMotion R.O.M ledd

MultiMotion R.O.M. ledd plasseres på motsatt side av det korrigerende leddet. Dette gir den ønskede vristivheten i ortosen.

Bruksområder: Se MultiMotion Korrigerende ledd.

Annet: Fleksjons-/ekstensjonsstopp er justerbare: Small i 14° intervall og Regular i 12° intervall.


Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål
69555	ROM Ledd med skinnefester	Small	Skinnens bredde 12 mm
69550	ROM Ledd med skinnefester	Regular	Skinnens bredde 16 mm



MultiMotion skinner

Til MultiMotion systemet finnes flere ulike typer av skinner å velge mellom. Skinnene finnes i to bredder: 12 og 16 mm. Alle skinnene leveres med ferdige hull for enkel montering.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål
69701	Rett skinne	Small	200 x 12 x 3 mm
69705	Formet skinne	Small	350 x 12 x 3,2 mm
69709	T-skinne rett	Small	R/200 x 12 x 3,2 mm, T/150 x 12 x 3,2 mm
69702	Rett skinne	Regular	200 x 16 x 4 mm
69706	Formet skinne	Regular	450 x 16 x 4,0 mm
69710	T-skinne rett	Regular	R/200 x 16 x 4 mm, T/150 x 16 x 3,2 mm
69722	Aluminiumskinner I par	Small	150 x 12 x 3.2 mm
69723	Aluminiumskinner I par	Regular	150 x 16 x 4.0 mm

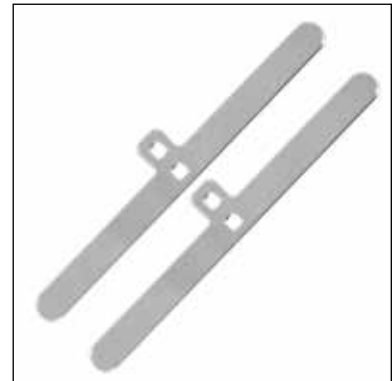



MultiMotion tilbehør

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Antall pr. pk.
69950	Parallellverktøy			
69900	Skrutrekker			
69101	Skrue til leddhus	Regular		
69102	Distansebrikke	Regular		
69103	Leddhuss	Regular		
69104	Kraftindikatorskive	Regular		
69105	Fjærspenning	Regular	10,2 Nm	
69106	Fleksjons-/Ekstensjonsstopp	Regular		2
69107	Skruer	Regular		4
69108	Gjengede muttere	Regular		4
69201	Skrue til leddhus	Small		
69202	Distansebrikke	Small		
69203	Leddhuss	Small		
69204	Kraftindikatorskive	Small		
69205	Fjærspenning	Small	3,4 Nm	
69206	Fleksjons-/Ekstensjonsstopp	Small		2
69207	Skruer	Small		4
69208	Gjengede muttere	Small		4
69501	Leddbeskytter			
69502	Aksesett			
69503	Skruer til skinnene			4
69504	Gjengede muttere for skinnene			4



Mål 1: Maksimalt rotasjonsmoment (leddet)

Mål 2: Husets diameter

Mål 3: Leddets vekt

MultiMotion hofteabduksjonssystem

Leddsystemet er beregnet for behandling av korrigerbare kontrakturer i hofteleddet hos barn. Systemet består av to komponenter, det korrigerende leddet og abduksjonsskinnene. Komponentene monteres på en individuelt laget ortose. Ortosen posisjonerer barnets ben i korrekt leie, samt stabiliserer hofteleddet. Adduktorene strekkes ut ved hjelp av langsom tøyning. Leddene kan låses og låses opp i ønsket leie. Justerbart fleksjons- og ekstensjonsstopp: Small 14° intervall, Regular 12° intervall.

Bruksområder: Spastisk diplegi, spastisk tetraplegi, spastisk triplegi, kongenital sublaksasjon av hofteleddet.

Annet: Leddsystemet må kun brukes på ortoser beregnet for nedre ekstremiteter, og må ikke vektbelastes.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ålder
69721	Abduksjonsskinne	Small	< 105 cm			
69720	Abduksjonsskinne	Regular	> 105 cm			
69200	Korrigerende ledd	Small	3,4 Nm	35 mm	100g	< 4 år
69100	Korrigerende ledd	Regular	10,2 Nm	53 mm	245g	> 4 år

MultiStatic behandlingsledd

MultiStatic-leddet er beregnet til bruk ved behandling av korrigerbare kontrakturer, både hos voksne og barn. Leddet gjør det mulig med en rask, effektiv og adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leddet arbeider etter HLBS-prinsippene (High Load Brief Stretch). Vinkelen i leddet settes av en eksentrisk akse. MultiStatic-leddet er beregnet til bruk i ortoser som ikke er vektbærende. Vi anbefaler å kombinere MultiStatic-leddet sammen med et hengslet ledd på den motsatte siden for å sikre vristivhet og rotasjon av ortosen. Kan brukes både til fleksjon og ekstensjon. Fri innstilling mellom +120 ° til -120°. Bilateralt.



Bruksområder: Behandling av korrigerbare kontrakturer hos voksne og barn.

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Lengde	Høyde	Diameter	Vekt
69690	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
69691	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
69692	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g

MultStatic hengslet ledd

Dette hengslede leddet med fri bevegeglighet brukes sammen med MultiStatic Behandlingsledd for å sikre vristivhet og best mulig funksjon. Laget av rustfritt stål.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Høyde	Diameter	Vekt
69695	Hengslet ledd	12 mm	400 mm	8 mm	19 mm	78 gram
69696	Hengslet ledd	16 mm	400 mm	8 mm	24 mm	114 gram



Monodos

Monodos er et ledd som er utviklet for behandling av dynamiske kontrakturer. Leddet tillater bevegelse i en retning og blokkerer bevegelsen helt i motsatt retning. Beregnet for øvre og nedre ekstremiteter i fleksjon og ekstensjon. Leddet har en enkel åpningsmekanisme.

Bruksområder: Behandling av dynamiske kontrakturer.

Annet: Leddet skal ikke brukes til vektbærende ortoser. For størrelse large inngår free motion ledd samt skinner.

Art. nr.	Størrelse	Pk.	Ve/Hø
62780	Small	1 stk.	Bilateral
62780	Medium	1 stk.	Bilateral
62780	Large	1 par	Bilateral



Egne notater

[illegible]



Plast og materiale

www.camp.no

X-LITE®

3D-LITE™

På fabrikken i Belgia produserer vi våre plastgipsmaterialer som er ideelle for produksjon av alle typer gips og ortoser. Våre produkter er uten giftstoffer, og derfor helt ufarlige for pasienter og personale. Dessuten verner vi om miljøet med et helt nedbrytbart produkt - X-LITE® EcoCast.

Hvorfor X-LITE® eller 3D-LITE™??

- Helt ufarlig materiale, frigir ingen isocyanater og inneholder ikke glassfiber
- Miljøvennlig
- Ikke behov for utsug
- Ikke behov for beskytteshansker eller munnbind
- Avgir ikke støv og kladder ikke
- Meget lav vekt som er en fordel for pasienten
- Luftige og fordelaktige for hud og sårheling
- Tåler fukt
- Slipper igjennom røntgenstråler
- Mindre materiale går til spille da rester og allerede oppvarmet materiale kan gjenbrukes



X-LITE®

X-LITE® materialet framstilles av 100% bomullsvev som impregneres med en giftfri termoplast harpiks. Dette gir et sterkt, stabilt og meget holdbart materiale, som samtidig er luftigt og lett. X-LITE® varmes i vannbad ved 70°C og kan lett formes om. X-LITE® kan gjenbrukes og varmes opp igjen et uendelig antall ganger, og avklippede biter kan derfor brukes som forsterkningsmateriale eller til mindre applikasjoner. Mindre korrigeringer på ortosen kan utføres direkte på pasienten ved å bruke en vanlig hårføner. Stabiliteten kan økes ved å bruke flere lag materiale. X-LITE® finnes i tre ulike varianter; CLASSIC, PREMIUM og PLUS. Valg av materiale avhenger av den kliniske indikasjonen og hva man foretrekker.

3D-LITE™

3D-LITE™ er som X-LITE® en lavtemperaturplast laget av en tredimensional polyestervev, som er impregnert med harpiks. Den er egnet for alle eksisterende skinner og ortoser. Materialet er sterkt, stabilt, lett, luftig og enkel å applisere. 3D-LITE™ finnes i tre ulike tykkelser; 3, 5 og 7 mm.

Materialet former seg fint over konturene, og er ikke mottagelig for fingeravtrykk. 3D-LITE™ materialet varmes opp i 80°C i ovn eller med varmluftspistol. Kan lett formes om.

Gipsning

X-LITE® X-LITE finnes i ruller til sirkulærgips og som ark- samt i en dispenserboks til framstilling av skinner. Fordi materialet er helt uten gift behøves ingen hansker eller annen utrustning for beskyttelse når det arbeides med materialet. En sirkulærgips fjernes lett med en gipssag uten at det støver. Gipsen kan belastes allerede etter tretti minutter. Materialet slipper igjennom røntgenstråler ved opptil tre lag.

Ortoser og skinner

X-LITE® og 3D-LITE™ kan brukes til framstilling av alle typer skinner og ortoser. Valg av materiale er knyttet til annen eksisterende utrustning, kroppsdel og ønsket stabilitet og formbarhet.



X-LITE® Classic rull

X-LITE® Classic er det mest stabile materialet. Den åpne strukturen gjør materialet luftig og lar huden puste. X-LITE® Classic er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Classic rullene har en beskyttelsesfilm mellom lagene som fjernes under sirkuleringen.

Velg mellom tre farger: hvit, antrasitt og kongeblå.

Bruksområder: Sirkulær gips.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64103	Hvit	50 mm	1,8 m	20 ruller
64133	Hvit	75 mm	1,8 m	20 ruller
64136	Antrasitt	75 mm	1,8 m	5 ruller
64137	Kongeblå	75 mm	1,8 m	5 ruller
64143	Hvit	100 mm	1,8 m	10 ruller
64146	Antrasitt	100 mm	1,8 m	5 ruller
64147	Kongeblå	100 mm	1,8 m	5 ruller
64153	Hvit	125 mm	1,8 m	10 ruller
64162	Hvit	150 mm	1,8 m	5 ruller
64163	Hvit	150 mm	1,8 m	10 ruller
64168	Antrasitt	150 mm	1,8 m	2 ruller
64169	Kongeblå	150 mm	1,8 m	2 ruller





X-LITE® Classic ark og dispenser

X-LITE® Classic er det mest stabile materialet. Den åpne strukturen gjør materialet luftig og lar huden puste. Classic er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE Classic kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde. Materialet finnes i tre ulike farger hvit, antrasitt og kongeblå.

Bruksområder: Gipsskinner, ortoser og avtagbare skinner.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.	Ark/Dispenser
64250	Hvit	75 mm	10 m	1	Dispenser
64251	Hvit	100 mm	10 m	1	Dispenser
64252	Hvit	150 mm	10 m	1	Dispenser
64253	Hvit	200 mm	10 m	1	Dispenser
64254	Hvit	125 mm	10 m	1	Dispenser
64255	Antrasitt	150 mm	10 m	1	Dispenser
64256	Kongeblå	150 mm	10 m	1	Dispenser
64278	Hvit	25 mm	500 mm	50	Ark
64290	Hvit	200 mm	375 mm	15	Ark
64291	Hvit	200 mm	1,2 m	15	Ark
64292	Hvit	200 mm	900 mm	15	Ark
64293	Hvit	75 mm	375 mm	15	Ark
64294	Hvit	100 mm	375 mm	15	Ark
64295	Hvit	125 mm	375 mm	15	Ark
64296	Hvit	150 mm	375 mm	15	Ark
64297	Hvit	150 mm	900 mm	15	Ark
64298	Hvit	450 mm	500 mm	10	Ark
64299	Hvit	500 mm	500 mm	10	Ark
64302	Antrasitt	200 mm	375 mm	8	Ark
64303	Antrasitt	450 mm	500 mm	4	Ark
64304	Kongeblå	200 mm	375 mm	8	Ark
64305	Kongeblå	450 mm	500 mm	4	Ark

X-LITE® PLUS rull

X-LITE® PLUS ruller har en myk overside som gir en myk og behagelig gips for pasienten. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® PLUS rullene har ingen beskyttelsesfilm mellom lagene, så materialet appliseres raskt og enkelt på pasienten.

Velg mellom fem farger: hvit, rød, blå, svart og knallrosa.

Bruksområder: Sirkulær gips.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk./Rull
64701	Hvit	25 mm	1,8 m	5
64702	Hvit	50 mm	1,8 m	20
64703	Hvit	75 mm	1,8 m	20
64704	Hvit	100 mm	1,8 m	10
64706	Hvit	125 mm	1,8 m	10
64707	Hvit	150 mm	1,8 m	10
64708	Hvit	150 mm	1,8 m	2
64711	Rød	25 mm	1,8 m	5
64712	Rød	50 mm	1,8 m	20
64713	Rød	75 mm	1,8 m	20
64714	Rød	100 mm	1,8 m	10
64716	Rød	125 mm	1,8 m	10
64717	Rød	150 mm	1,8 m	10
64718	Rød	150 mm	1,8 m	2
64721	Blå	25 mm	1,8 m	5
64722	Blå	50 mm	1,8 m	20
64723	Blå	75 mm	1,8 m	20
64724	Blå	100 mm	1,8 m	10
64726	Blå	125 mm	1,8 m	10
64727	Blå	150 mm	1,8 m	10
64728	Blå	150 mm	1,8 m	2
64731	Svart	25 mm	1,8 m	5
64732	Svart	50 mm	1,8 m	20
64733	Svart	75 mm	1,8 m	20
64734	Svart	100 mm	1,8 m	10
64736	Svart	125 mm	1,8 m	10
64737	Svart	150 mm	1,8 m	10
64738	Svart	150 mm	1,8 m	2
64741	Knallrosa	25 mm	1,8 m	5
64742	Knallrosa	50 mm	1,8 m	20
64743	Knallrosa	75 mm	1,8 m	20
64744	Knallrosa	100 mm	1,8 m	10
64746	Knallrosa	125 mm	1,8 m	10
64747	Knallrosa	150 mm	1,8 m	10
64748	Knallrosa	150 mm	1,8 m	2





X-LITE® PLUS ark og dispenser

X-LITE® PLUS har en myk overside som gir økt pasientkomfort. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® PLUS kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde.

Velg mellom fem farger: hvit, rød, blå, svart og knallrosa.

Bruksområder: Alle skinner og ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.
64790	Rød	150 mm	10 m	1 Dispenser
64791	Blå	150 mm	10 m	1 Dispenser
64792	Svart	150 mm	10 m	1 Dispenser
64793	Knallrosa	150 mm	10 m	1 Dispenser
64753	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64754	Svart	200 mm	375 mm	8 ark



X-LITE® Premium rull

X-LITE® Premium er det mest fleksible materialet. Med sin tynne struktur er det ikke like stabilt som øvrige X-LITE materialer. Derimot er det enklere å forme perfekt over mindre konturer, og passer godt til bandasje for øvre ekstremiteter og barn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Premium ruller har en beskyttelsesfilm mellom lagene som fjernes under sirkuleringen.

Bruksområder: Sirkulærgips. For øk stabilitet kan man applisere et ekstra lag.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64205	Hvit	50 mm	1,8 m	5 ruller
64207	Hvit	75 mm	1,8 m	5 ruller
64209	Hvit	100 mm	1,8 m	5 ruller
64210	Hvit	125 mm	1,8 m	5 ruller
64211	Hvit	150 mm	1,8 m	5 ruller

X-LITE® Premium ark og dispenser

X-LITE® Premium er det mest fleksible materialet. Med sin tynne struktur er det ikke like stabilt som øvrige X-LITE materialer. Derimot er det enklere å forme perfekt over mindre konturer, og passer godt til bandasje for øvre ekstremiteter og barn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. Materialet kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde.

Bruksområder: Gipsskinner, ortoser og avtagbare skinner. For økt stabilitet kan man applisere et ekstra lag.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.	Ark/Dispenser
64215	Beige	75 mm	375 mm	10	Ark
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Ark
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Ark
64220	Beige	200 mm	375 mm	10	Ark
64225	Beige	75 mm	10 m	1	Dispenser
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Dispenser
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Dispenser
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Dispenser



X-LITE® PLUS Kantebånd

Kantebåndet gir en mykere og behageligere kant på skinner. Med en bakside av Premium-materiale gir det ekstra stabilitet til skinnen. Fungerer godt sammen med alle våre materialer inkludert 3D-LITE. Varmes i vannbad ved 70°C.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64235	Hvit	25 mm	4 m	Dispenser
64236	Rød	25 mm	4 m	Dispenser
64237	Blå	25 mm	4 m	Dispenser
64238	Svart	25 mm	4 m	Dispenser
64239	Knallrosa	25 mm	4 m	Dispenser



X-LITE® termoplastisk kantebånd

X-LITE termoplastisk kantebånd er laget av samme materiale som X-LITE. Båndet varmes i vannbad og fester direkte til X-LITE og våre øvrige lavtemperaturplaster. Ortosene får en myk og fin kant.

Annet: Ark à 50 stk. leveres i plastpose.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.	Ark/Dispenser
64185	Hvit	18 mm	7,5 m	1	Dispenser
64180	Hvit	25 mm	7,5 m	1	Dispenser
64190	Hvit	50 mm	7,5 m	1	Dispenser
64183	Hvit	18 mm	500 mm	50	Ark
64187	Hvit	25 mm	500 mm	50	Ark





X-LITE® termoplastisk borrelås

X-LITE borrelås har en bakside av X-LITE som ved oppvarming fester til X-LITE, 3D-LITE og våre øvrige lavtemperaturplaster. Det varmes i vannbad eller med varmluftpistol. Myk eller hard borrelås appliseres etterpå som vanlig.

Annet: Ark à 5 stk. leveres i plastpose.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.	Ark/Dispenser
64195	Hvit	50 mm	50 cm	5	Ark
64196	Hvit	50 mm	5 m	1	Dispenser
64197	Svart	50 mm	50 cm	5	Ark
64198	Svart	50 mm	5 m	1	Dispenser



X-LITE® Stockinette

Rundstrikket stockinette i 100% ubleket polypropylen. Myk og behagelig med en utmerket evne til å transportere fukt bort fra huden. Stockinetten er ribbestrikket, noe som gir en god passform og ingen brett mot huden.

Art. nr.	Farge	Materiale	Bredde	Lengde	Pk.
64400	Beige	Bomull	21 mm	23 m	1 rull
64401	Hvit	Polypropen	30 mm	10 m	1 rull
64411	Hvit	Polypropen	50 mm	10 m	1 rull
64421	Hvit	Polypropen	70 mm	10 m	1 rull
64431	Hvit	Polypropen	100 mm	10 m	1 rull
64441	Hvit	Polypropen	150 mm	10 m	1 rull
64442	Hvit	Polypropen	200 mm	10 m	1 rull



Stockinette dispenser

Stockinette dispenser er en rundstrikket polyester stockinette som er myk og føyeelig. Stockinetten er ribbestrikket, noe som gir en bra passform og ingen skrukker som kan gnage mot huden. Rullene kommer i en praktisk dispenser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64394	Hvit	30 mm	25 m	1 dispenser
64395	Hvit	50 mm	25 m	1 dispenser
64396	Hvit	70 mm	25 m	1 dispenser
64397	Hvit	100 mm	25 m	1 dispenser
64398	Hvit	150 mm	25 m	1 dispenser

Foam-bind

Foam-bindet er en skummipolstring som puster og ikke trekker til seg så mye vann. Polstringen gir bra støtdemping og er ikke like følsom for bretter som tradisjonell gipsolstring.

Bruksområder: Som polstring under gips av X-LITE.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64480	Hvit	75 mm	2,75 m	20 ruller
64485	Hvit	100 mm	2,75 m	16 ruller
64490	Hvit	125 mm	2,75 m	10 ruller



Color elastisk bind

Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskinne tilbyr vi elastisk bind i høy kvalitet og i fine farger. Da komforten og kvaliteten på bindet er veldig høy, er den perfekt for pasienter som skal bære gipsen i lang tid. Color elastisk bind puster, og sammen med X-LITE® gipsen gir det en veldig luftig bandasje.

Den har en myk overflate og vevde kanter som føles behagelig mot huden. Den tilpassede elastisiteten gjør at den former seg fint og at den derfor kan brukes både til større og mindre applikasjoner. Den har en "anti-slip" effekt, noe som betyr at lagene ikke deler seg og man får et holdbart resultat. Elastisk bind kan vaskes i 60°C og steriliseres



Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64106	Color elastisk bind	Svart	6 cm	5 m	10
64107	Color elastisk bind	Rød	6 cm	5 m	10
64108	Color elastisk bind	Kongeblå	6 cm	5 m	10
64109	Color elastisk bind	Grønn	6 cm	5 m	10
64110	Color elastisk bind	Gul	6 cm	5 m	10
64112	Color elastisk bind	Svart	10 cm	5 m	10
64113	Color elastisk bind	Kongeblå	10 cm	5 m	10



Strava Vannbad

STRAVA Vannbad er det første på markedet som har innebygd UV-sterilisering og rengjøringsfunksjon med høy vanntemperatur. Dette doble rengjøringsystemet garanterer at vannet er 99,99% uten skadelige bakterier og virus. Strava Vannbad har estetisk utseende og er laget av komposittmateriale med høy holdbarhet og isolerende- og beskyttende egenskaper.

Vannbadet tømmes enkelt og raskt på et par minutter med et innebygget pumpesystem. Vannet sirkulerer i vannbadet, noe som gjør at temperaturen er jevn i vannet og varmes raskt opp til ønsket temperatur. Oversiktlig "Touch Screen" i farger gjør det enkelt å velge mellom ulike forprogrammerede termoplastmaterialer eller å skape sine egne favorittprogram. Kan stilles inn for å starte og slås av automatisk.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Høyde
64507	Vannbad	Yttermål: 51,6 cm Kar: 31,6 cm	Yttermål: 59 cm Kar: 48,6 cm	Yttermål: 22,6 cm Kar: 14,7 cm
64508	Dreneringsslange			
64509	Varmeelement			
64510	EU elkabel			
64511	DK adapter			
64512	UV lampe			



X-LITE® plate med silikonbelegg

Brukes som arbeidsoverflate ved gipsing med X- LITE. Silikonbelegget forhindrer at X-LITE fester seg til underlaget. Den perforerte overflaten på platen gjør at overflødig vann fra X- LITE rullene lett kan renne ned under platen og suges opp av underliggende håndduk.

Art. nr.	Bredde	Lengde
64811	325 mm	530 mm

Postoperativ sko

Behandlingssko laget av slitesterk laminert nylon. Overdelen er formsydd med god overlapping for å passe såvel mindre føtter som gips. Polstringen i hælpertiet er bekvem og beskytter mot gnagsår. Hælkappen er forsterket for å holde foten på plass. Sålen er stiv og rett uten avrulling. Ved enklere mellomfotsoperasjoner kan gips utelates og skoen brukes direkte.

Bruksområder: Behandlingssko ved mellomfotsoperasjoner; tåfrakturer; hallux valgus-operasjoner eller som gipssko.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
43205	Herre	Small	26 cm
43205	Herre	Medium	27,5 cm
43205	Herre	Large	30 cm
43205	Herre	X-Large	31 cm
43206	Dame	Small	23,5 cm
43206	Dame	Medium	24,5 cm
43206	Dame	Large	26 cm



3D-LITE™

3D-LITE er en lavtemperaturplast som er laget av en tredimensjonal polyesterrev som er impregnert med termoplast. Materialet er stabilt, lett, luftig og enkel å forme. Det har en smidig overflate og det etterlates ingen fingeravtrykk i materialet under bearbeidingen. Materialet har stretch i en retning. Varmes i vannbad ved 70°C. eller i ovn ved 80°C.

Bruksområder: Ortoseproduksjon. 3 mm anbefales til små ortoser og mindre kroppsdeler. 5 mm anbefales til halvstore ortoser som for eksempel frakturortoser. 7 mm anbefales til større ortoser som for eksempel korsetter.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
64896	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	3 mm	1 ark
64897	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	3 mm	1 ark
64898	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	5 mm	1 ark
64899	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	5 mm	1 ark
64900	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	7 mm	1 ark
64901	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	7 mm	1 ark
64905	3D-LITE Beige	650 mm	1200 mm	5 mm	1 ark





3D-Safe

3D-Safe er et kantebånd av polyeteneskumplast. Båndet er selvklebende og litt elastisk. Enkelt og raskt å applisere. For økt stretch og klebeevne bør man varme kantebåndet med varmluftpistol før applisering.

Bruksområder: Som kantebånd eller polstring på ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
64200	Hvit	40 mm	10 m	3 mm	1 rull

Lavtemperaturplaster

Det stilles ulike krav til ulike applikasjoner som lages i lavtemperaturplast. Camp tilbyr derfor et bredt utvalg av lavtemperaturplaster som gjør det mulig å finne riktige egenskaper ut fra pasientens behov.

De fleste av våre lavtemperaturplaster kommer fra Rolyan, som har mer enn 30 års erfaring innen området. Rolyan arbeider hele tiden for å bevare og forbedre sin høye kvalitet, og samtidig prioriteres forskning og utvikling av nye produkter. Samtlige plaster er ufarlige å bearbeide. Ingen skadelige stoffer avgis ved bearbeiding.

Plastenes og de ferdige ortosenes egenskaper er avhengige av en rekke ulike faktorer.

- Minne - evnen til å gå tilbake til opprinnelig form.
- Føyelighet - evnen til å tilpasse seg underlaget i oppvarmet tilstand.
- Stretchmotstand - Evnen å gi etter for strekking og trykk i oppvarmet tilstand.
- Festeevne - evnen til å feste til seg selv i oppvarmet tilstand.
- Oppvarmings- og bearbeidelsestid.


Ulike perforeringer for lavere vekt og ventilasjon.

- Perforert 1% - meget spredte, store hull (2,5 cm mellom hullene).
- Perforert 2,5% - spredte, store hull (1 cm mellom hullene).
- Optiperforert 19% - tettsittende små hull.
- Ultraperforert 13% - tettsittende veldig små hull.
- Superperforert 42% - meget tettsittende små hull.




Prosenttallet angir hvor mye materiale som er fjernet. F.eks. Superperforert 42%, angir at 42% av materialet er fjernet.

VI ANBEFALER OPPBEVARING MØRKT OG TØRT.

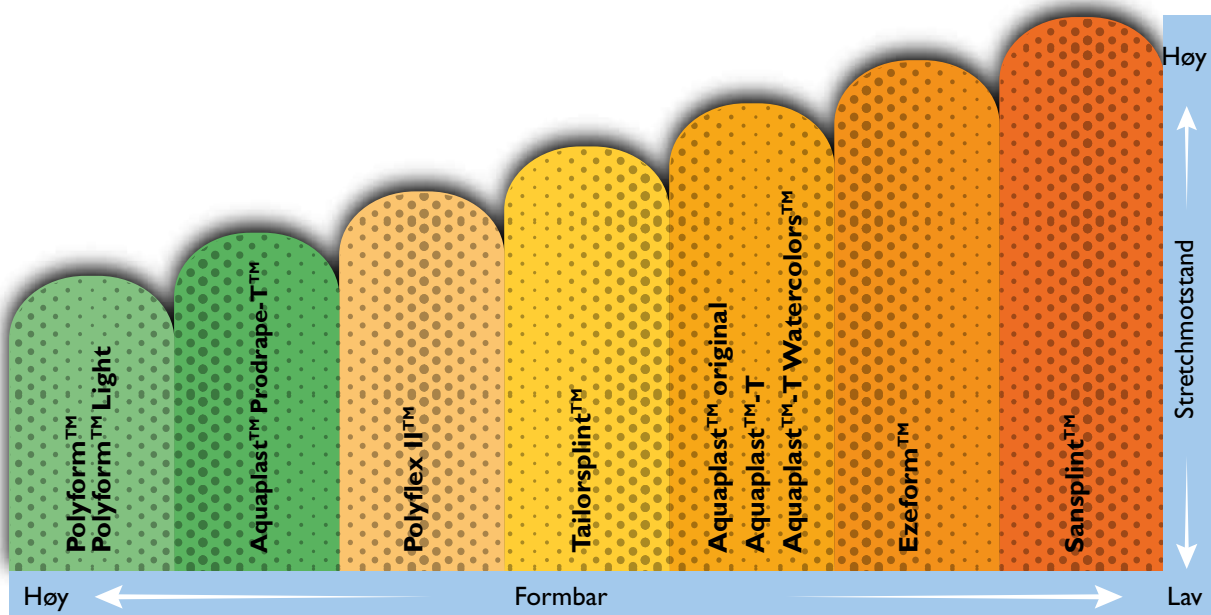

Minimal stretch	Middels stretch	Maksimal stretch
- Lett å forme - Lett å håndtere	- Former seg lett - Bedre kontroll	- Solid materiale - God holdbarhet - Rigid sluttprodukt

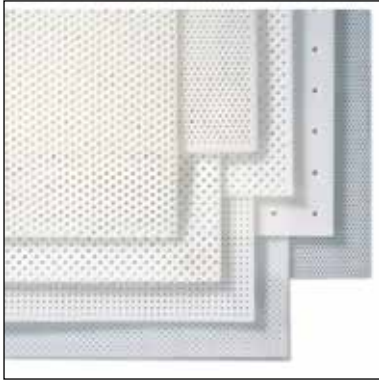

Om Aquaplast™

Aquaplast™ sortimentet består av et bredt utvalg av materialer med flere felles, men også unike egenskaper for å møte ulike behov. Aquaplast er en plast det er enkelt å bearbeide. Følgende materialer finnes i sortimentet:

Aquaplast™ Original - Fester til seg selv

Aquaplast-T™ - Har Non-sticky overflate

Aquaplast™ Prodrap™ -T - Har Non-sticky overflate og meget høy formbarhetsgrad

Aquaplast-T™ Antimicrobial - Har Non-sticky overflate og minsker risikoen for dårlig lukt

Aquatube™ - Fester permanent mot andre Rolyanplaster

Aquaplast™ Watercolors - Har Non-sticky overflate og finnes i mange farger



Aquaplast™ Original

Aquaplast™ Original finnes i mange tykkelser og perforeringer. Passer til et stort utvalg av ortoser. Materialet er ikke overflatebehandlet og fester umiddelbart og permanent til seg selv. Materialet former seg lett og har selvåsende kanter. Har 100% minne og blir transparent ved oppvarming. Ved kontakt med materialoverflaten etterlates ingen fingeravtrykk. Kan også varmes i ovn. Observer: Bruk bunnbeskytter i varmekaret. Egenskaper for den ferdige ortosen: Gir en støttende ortose med en jevn og myk overflate.

Bruksområder: Som base til dynamiske og statiske ortoser; tommel-, finger-, hånd- og håndleddsortoser. 3,2 mm tykkelse også til arm- og benortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50121	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50122	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50123	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50124	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50125	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%

Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ finnes i mange tykkelser og perforeringer. Passer til et stort utvalg av ortoser. Den former seg godt og har selvslående kanter. Har 100% minne og blir transparent ved oppvarming. Overflatebehandlet for å gi en "Non-sticky" overflate. Ved kontakt med materialoverflaten etterlates ingen fingeravtrykk. Kan også varmes i ovn. Egenskaper for den ferdige ortosen: Gir en støttende ortose med en jevn og myk overflate. Egner seg for gjentatt økonomisk omarbeiding. Den hvite Aquaplasten blir gjennomsiktig ved oppvarming, noe som gjør at man lettere kan se prominenser og eventuelle områder som krever ekstra avlastning. Borrelåsbånd fester seg lettere til materialet om man først rubber opp overflaten på plasten.

Bruksområder: Som base til dynamiske og statiske ortoser for tommel-, finger-, hånd- og håndleddsortoser. 3,2 mm tykkelse også til arm- og benortoser.

Art. nr.	Farge	Type	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
50126	Hvit	Massiv	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50127	Hvit	Massiv	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50128	Hvit	Massiv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50129	Hvit	Massiv	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
50133	Hvit	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50134	Hvit	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50135	Hvit	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50136	Hvit	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50137	Hvit	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50138	Hvit	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50331	Hvit	Ultraperf. 13%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark



Aquaplast™ Prodrapet™-T

Aquaplast™ Prodrapet™-T er den Aquaplasten som har best formbarhet og føyeligheit. Den tilpasser seg veldig godt til konturer. Kantene er selvslående. Har 100% minne og blir transparent ved oppvarming. Overflatebehandlet. Ved kontakt med materialoverflaten etterlates ingen fingeravtrykk. Kan også varmes i ovn. Egenskaper for den ferdige ortosen: Gir en støttende ortose som følger alle konturer nært. Ideell for pasienter med verkende ledd. Egner seg for gjentatt økonomisk omarbeiding. Den hvite Aquaplasten blir gjennomsiktig ved oppvarming, noe som gjør at man lettere kan se prominenser og eventuelle områder som krever ekstra avlastning. Borrelåsbånd fester seg lettere til materialet om man først rubber opp overflaten på plasten.

Bruksområder: Akutt traume, smerte og leddirritasjoner; tommel-, finger-, hånd- og håndleddsartoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50165	Hvit	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50166	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv





Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samme egenskaper som Aquaplast-T™. Den finnes i mange tykkelser og perforeringer, som passer til et stort utvalg av ortoser. Dette gir pasient og terapeut stor valgfrihet. Den former seg godt og har selvklæbende kanter. Har 100% minne. De lyse fargene blir noe transparente ved oppvarming. Overflatebehandlet for å gi en "Non-sticky" overflate. Ved kontakt

Bruksområder: Barneortoser, som base til dynamiske og statiske ortoser for tommel-, finger-, hånd- og håndledd. 3,2 mm tykkelse også til arm- og benortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50144	Gråsvart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50145	Gråsvart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50146	Gråsvart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50147	Gråsvart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50334	Gråsvart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50140	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50143	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50141	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50142	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50321	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50333	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50308	Kongeblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50309	Lavendel	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50322	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50343	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50154	Lilla	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50155	Lilla	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50313	Lilla	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50336	Lilla	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50152	Lilla	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50153	Lilla	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50164	Lysegrønn	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50307	Lysegrønn	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50317	Lysegrønn	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50340	Lysegrønn	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50304	Sjokkrosa	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50300	Sjokkrosa	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50314	Sjokkrosa	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50337	Sjokkrosa	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50149	Rød	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50150	Rød	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50151	Rød	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50139	Rød	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50335	Rød	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50156	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50157	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50158	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50159	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50160	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50161	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50341	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50323	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50344	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50359	Blå Metallic	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50348	Blå Metallic	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50325	Sølv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50346	Sølv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50349	Sølv	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50312	Sølv	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50329	Blå	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%



Polyform™ og Polyform™ light

Polyform har gode stretchegenskaper noe som gjør at materialet passer til komplekse ortoser. Den er lett overflatebehandlet og har selvslående kanter. Har ikke minne. Vær nøye da kontakt med materialoverflaten lett kan gi varige fingeravtrykk og merker. Egenskaper for den ferdige ortosen: Gir en rigid og støttende ortose.

Bruksområder: Akutt traume, smerte og leddirritasjoner; tommel-, finger-, hånd- og håndledds ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50100	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50101	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv
50102	Hvit	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50103	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50107	Hvit	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv



Polyflex II™

Polyflex II har gode stretchegenskaper, men ikke mer enn at kontrollen opprettholdes under ortoseproduksjonen. Materialet har et visst minne, noe som forenkler ved mindre justeringer. Lett overflatebehandlet. Kantene bør trimmes. Vær nøye da kontakt med materialoverflaten lett kan gi varige fingeravtrykk og merker. Egenskaper for den ferdige ortosen: Gir en rigid og støttende ortose som er fleksibel, noe som forenkler på- og avtaking. Fleksibiliteten i den ferdige ortosen kan utnyttes ved bruk til f. eks. pasienter med svak håndfunksjon eller lettere forhøyet tonus.

Bruksområder: Akutt traume, smerte og leddirritasjoner; tommel-, finger-, hånd- og håndledds ortoser; som base til dynamiske ortoser og ortoser til pasienter med neurologiske sykdommer.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50109	Hvit	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50113	Hvit	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50114	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Perf. 1%

TailorSplint™

Tailorsplint er en allsidig plast. Dekker et bredt behov og kan brukes til mange ulike ortoser. Medium stretchmotstand tillater at platen kan bearbeides litt hardere, samtidig som god kontroll opprettholdes. Overflatebehandlet. Kantene rulles enkelt og er selvslående. Ved kontakt med materialoverflaten etterlates ikke fingeravtrykk. Egenskaper for den ferdige ortosen: Overflaten er pudderaktig, noe som gir en fin finish.

Bruksområder: Tommel-, finger- og håndleddsartoser; 3,2 mm tykkelse også til arm- og benortoser; som base til dynamiske ortoser og ortoser til pasienter med nevrologiske sykdommer

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50116	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm	4 ark	Massiv
50117	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	4 ark	Massiv
50118	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv



Ezeform™ og Ezeform™ light

Ezeform er spesielt utviklet for å gi maksimal motstand mot strekking, samtidig som platen former seg godt til underlaget. Den tillater også en mer aggressiv håndtering. Holder formen og passer til større ortoser. Materialet har en lett klebrig overflate, noe som gjør at det ikke glir under modelleringen. Selvslående kanter. Fester permanent til seg selv. Ved kontakt med materialoverflaten etterlates ikke varige fingeravtrykk. Egenskaper for den ferdige ortosen: Gir en meget rigid ortose med fin finish.

Bruksområder: Ortoser til pasienter med nevrologiske sykdommer, hvile- og funksjonelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter; som base til større dynamiske ortoser og Ezeform light til barneortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50170	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv
50171	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50173	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50174	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50175	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50176	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50178	Hvit	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50179	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50180	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50181	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50182	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50183	Hvit	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv
50184	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv





Ezeform™ Antimicrobial

Ezeform™ Antimicrobial har en antimikrobial behandling som hemmer tilvekst av bakterie og dårlig lukt. Overflatebehandlingen kan ikke "vaskes" bort. Dette materialet er velegnet når en skinne eller ortose skal brukes over lang tid eller brukes i utsatte miljøer. Øvrige egenskaper som Ezeform™.

Bruksområder: Ortoser til pasienter med neurologiske sykdommer, hvile- og funksjonelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter eller som base til større dynamiske ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50187	Hvit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv



San-Splint™ og San-Splint™ light

San-Splint gir maksimal motstand mot strekking. Dette gjør at den passer godt til større ortoser når det kreves kontroll under produksjonen. San-Splint er en Isoprene-gummibasert plast, som tillater aggressiv håndtering og holder formen. Materialet fester permanent til seg selv om kantene trykkes sammen. Ved kontakt med materialoverflaten etterlates ikke varige fingeravtrykk. Kan varmes i ovn. Egenskaper for den ferdige ortosen: Høy grad av rigiditet uten forsterkninger.

Bruksområder: Frakturortoser, body jackets eller korsetter.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50200	Beige	610 mm	910 mm	3 mm	1 ark	Massiv
50204	Beige	610 mm	910 mm	3 mm	1 ark	Perf. 2,5%
50205	Beige	460 mm	610 mm	3 mm	4 ark	Perf. 2,5%



Plastazote™

Polyeteneskum for produksjon av større og mindre ortoser. Passer til ortoser der det stilles høye krav til komfort. Krymper ikke. Varmes i ovn ved 140°C. Mindre endringer kan gjøres med hjelp av varmepistol.

Bruksområder: Innlegg, halskrager, ortoser til revmatikere og diabetespasienter, produksjon av spesialgrep, polstring av ortoser.


Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.	Massiv/Perf.
50521	Beige	760 mm	1000 mm	12 mm	1 ark	Perforert

Aliplast

Et copolymerfoam som fester til seg selv. Materialet har en glatt overflate som er lett å holde ren. Egnert for applikasjoner som må ligge direkte mot huden. Vakuumformbart. Varmes i ovn i 70-120°C. Blir klebrig om ønsket i høy temperatur og ved for lang tid i ovn. Finnes i tre hardhetsgrader.

Bruksområder: Polstringsmateriale for ortoser og for produksjon av for eksempel innleggsputer.


Art. nr.	Farge	Hardhet	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
30400	Hvit	Myk 4E	750 mm	900 mm	3 mm	1 ark
30401	Hvit	Myk 4E	750 mm	900 mm	6 mm	1 ark
30405	Hvit	Myk 4E	750 mm	35 m	3 mm	1 rull
30406	Hvit	Myk 4E	750 mm	24 m	6 mm	1 rull
30410	Hvit	Medium 6A	750 mm	600 mm	3 mm	1 ark
30411	Hvit	Medium 6A	750 mm	600 mm	6 mm	1 ark
30415	Hvit	Hard 10	750 mm	600 mm	3 mm	1 ark
30416	Hvit	Hard 10	750 mm	12 m	3 mm	1 rull

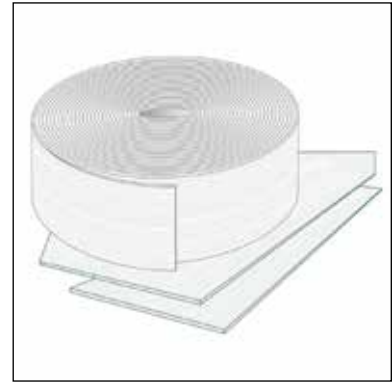

Thermofoam LD

Polstringsmateriale i Polyetene med medium densitet. Har lukkede celler. Kan utmerket skjæres og klippes i, men kan også stanses. Varmes i ovn ved 155°C. Lett å etterjustere.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
30451	Hvit	750 mm	900 mm	12,5 mm	1 ark

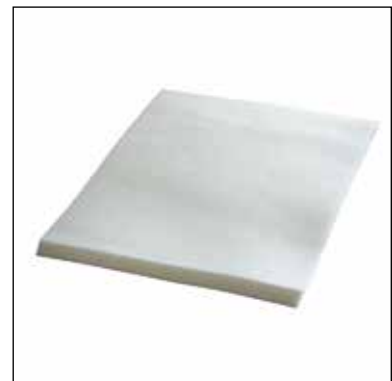

Durofoam HD

Polstringsmateriale i Polyeten med høy densitet som opprettholder sin tykkelse i en lang periode. Har åpne celler. Kan utmerket skjæres og klippes i, men kan også stanses. Varmes i ovn ved 150-170°C. Lett å etterjustere med varmluftpistol.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
30450	Hvit	610 mm	610 mm	12,5 mm	1 ark





Polypropene

Copolymerplast som er stiv, seig og med god stabilitet. Varmes i ovn i 200-210°C eller vakumformes. Materialet fester til seg selv. La plasten svalne noe på gipsen. Mindre endringer kan gjøres med hjelp av varmepistol.

Bruksområder: Ortoseproduksjon.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
38039	Hvit	600 mm	1200 mm	2 mm	1 ark
38040	Hvit	675 mm	1050 mm	3 mm	1 ark
38041	Hvit	675 mm	1050 mm	4 mm	1 ark
38042	Hvit	675 mm	1050 mm	5 mm	1 ark



Non Slip materiale

Et antigli materiale som ved hjelp av sin friksjon er perfekt for overflater hvor man ønsker å forhindre gnaging. Materialet er spesielt laget for å brukes på KiddieGAIT sitt fotblad, for å hindre at f.eks. en SureStep-ortose glir mot det glatte fotbladet. OBS! Dette materialet skal ikke brukes direkte mot huden.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde
28411	Svart	14 cm	1 m



Ortosestrømpe Komfort

Ferdigsydd ortosestrømpe i ekstra tykt og mykt materiale. Alle kanter er doble eller sydd med overløksøm for økt holdbarhet. Kan brukes istedet for polstring.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Pk.
51107	Håndledd	Natur	En størrelse	10 stk.
51108	Håndledd/Tommel lang	Natur	En størrelse	10 stk.



comfortKIT™ materiale

ComfortKIT er et materiale med en indre kjerne av såkalt "memory foam" som gjør at det naturlig former seg etter kroppsformen. Når materialet hviler går det tilbake til sin opprinnelige form.


Bruksområder: Materialet brukes i polstringen comfortKIT™, som er beregnet for ToeOFF® og BlueROCKER®. Materialet kan med fordel brukes som polstring til ulike ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
30422	Svart	300 mm	400 mm	10 mm	1 ark

T-Stick

Trykkavlastende materiale i polyuretan som puster. Materialet former seg etter kroppen og har minne slik at det går tilbake til opprinnelig form. Brukes til avlastning av trykkpunkter og som polstring i ortoser og proteser. Selvklebende bakside. Arkene 51100 og 51102 har selvklebende bakside. Finnes i to hardhetsgrader.

Art. nr.	Farge	Kategori	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51100	Blå	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark
51101	Blå	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 ark
51102	Rosa	Myk	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark

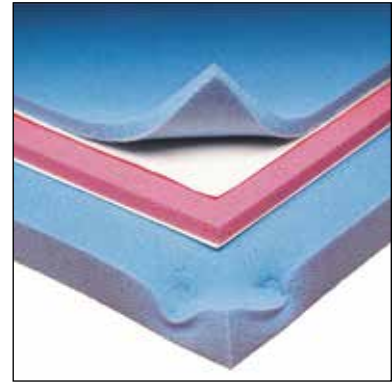

Polycushion polstring

Skumpolstring med lett trykkavlastende effekt. Brukes som polstring for ortoser. Polstringen har lukkede celler, er lett å rengjøre og kan festes på ortosen innen oppvarming i vannbad. Materialet er selvklebende. Den med mindre klebeevne forenkler ved bytte av polstring. Lett å klippe til ønsket form.

Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51120	Vedheft = Høy	Beige	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51115	Vedheft = Lav	Beige	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark



Fleecy Web

Ekstremt mykt og selvklebende materiale i 100% bomull som føles som mollskinn. Brukes som polstring til ortoser. Meget tøyelig og derfor lett å applisere i en ferdig ortose.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51110	Rosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 ark
51104	Rosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rull





Fleecy Foam

Mykt selvklebende materiale laminert mot en skumkjerne. Gir lett trykkavlastende effekt. Brukes som avlastning av trykkpunkter eller som polstring for hele ortosen.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51105	Rosa	230 mm	460 mm	4,8 mm	4 ark




Mollskinn rull

Mykt materiale med selvklebende bakside. Brukes til polstring av ortoser og som kantepolstring.

Kontraindikasjoner: Inneholder latex.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51125	Beige	300 mm	4,6 m	0,8 mm	1 rull

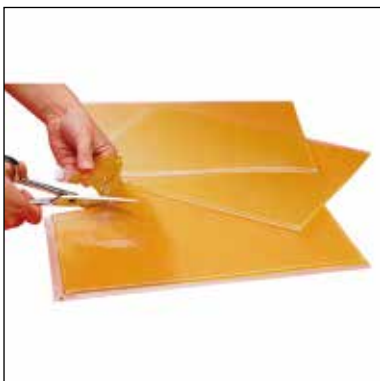

Gel-polstring

Avlastende gel, som ikke helt kan komprimeres. Velegnet til ortoser, hansker og sko. Fordeler trykket og minsker friksjonen mot huden. Kan klippes til ønsket størrelse. Det anbefales at kantene låses med for eksempel kirurgisk tape etter klipping. Mindre variasjon i farge kan forekomme.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51140	Gul	250 mm	340 mm	3,2 mm	1 ark
51141	Gul	250 mm	340 mm	4,8 mm	1 ark
51142	Gul	250 mm	340 mm	6,4 mm	1 ark

Neoprene™

Latexfri neoprene med en nylonside og en side med myk velour. Hard borrelås fester lett mot den myke velouren. Brukes til produksjon av myke ortoser eller som ortosebånd. Er lett elastisk, noe som gir god passform. Materialet bevarer varmen og bidrar til økt blodsirkulasjon. Utmerket for pasienter med revmatologiske sykdommer.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51179	Svart	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 ark
51180	Beige	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 ark
51181	Beige	150 mm	970 mm	3,2 mm	1 ark
51183	Beige	25 mm	3,2 m	3,2 mm	1 rull
51184	Blå	460 mm	610 mm	3,0 mm	1 ark
51189	Grønn	460 mm	610 mm	1,0 mm	1 ark



Borrelås myk standard

Den myke delen av standard borrelås laget av vevd bånd med sydde kanter. God fasthet i både dra- og åpningsretning. Kan brukes ved temperaturer mellom -30° til +140°C.

Annet: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Pk.
25020	Myk/Snill del = Loop, Hvit	25 mm	25 m	1 rull
25020	Myk/Snill del = Loop, Hvit	50 mm	25 m	1 rull
25021	Myk/Snill del = Loop, Beige	25 mm	25 m	1 rull
25021	Myk/Snill del = Loop, Beige	50 mm	25 m	1 rull
25027	Myk/Snill del = Loop, Svart	25 mm	25 m	1 rull
25027	Myk/Snill del = Loop, Svart	50 mm	25 m	1 rull



Borrelås hard, standard

Hard borrelås med festeoverflate på en side mot myk borrelås. Laget av vevet bånd med sydde kanter. God fasthet i både dra- og åpningsretning. Kan brukes i temperaturer mellom -30° til +140°C.

Annet: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Pk.
25020	Hard/Sint del = Hook, Hvit	25 mm	25 m	1 rull
25020	Hard/Sint del = Hook, Hvit	50 mm	25 m	1 rull
25021	Hard/Sint del = Hook, Beige	25 mm	25 m	1 rull
25021	Hard/Sint del = Hook, Beige	50 mm	25 m	1 rull
25027	Hard/Sint del = Hook, Svart	25 mm	25 m	1 rull
25027	Hard/Sint del = Hook, Svart	50 mm	25 m	1 rull





Borrelås myk, elastisk

Elastisk borrelås. God fasthet i både dra- og åpningsretning. Kan brukes ved temperaturer mellom -30° til +140°C.

Annet: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Pk.
25022	Myk/Snill del = Loop, Hvit	30 mm	10 m	1 rull
25022	Myk/Snill del = Loop, Hvit	50 mm	10 m	1 rull
25023	Myk/Snill del = Loop, Beige	30 mm	10 m	1 rull
25023	Myk/Snill del = Loop, Beige	50 mm	10 m	1 rull



Borrelås myk, selvklebende

Myk, selvklebende borrelås som fester mot hard borrelås. God fasthet i både dra- og åpningsretning. Kan bearbeides i temperaturer mellom -10° til +80°C. Klebeevne ved høyere og lavere temperaturer er avhengig av fuktighet og overflate.

Annet: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Pk.
25024	Myk/Snill del = Loop, Hvit	20 mm	25 m	1 rull
25024	Myk/Snill del = Loop, Hvit	25 mm	25 m	1 rull
25024	Myk/Snill del = Loop, Hvit	50 mm	25 m	1 rull
25025	Myk/Snill del = Loop, Beige	25 mm	25 m	1 rull
25028	Myk/Snill del = Loop, Svart	25 mm	25 m	1 rull
25028	Myk/Snill del = Loop, Svart	50 mm	25 m	1 rull



Borrelås hard, selvklebende

Hard selvklebende borrelås som fester mot myke borrelåser. God fasthet i både dra- og åpningsretning. Kan bearbeides i temperaturer mellom -10° til +80°C. Klebeevne ved høyere og lavere temperaturer er avhengig av fuktighet og overflate.

Annet: ØKO-TEX klasse 2.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Pk.
25024	Hard/Sint del = Hook, Hvit	20 mm	25 m	1 rull
25024	Hard/Sint del = Hook, Hvit	25 mm	25 m	1 rull
25024	Hard/Sint del = Hook, Hvit	50 mm	25 m	1 rull
25025	Hard/Sint del = Hook, Beige	25 mm	25 m	1 rull
25028	Hard/Sint del = Hook, Svart	25 mm	25 m	1 rull
25028	Hard/Sint del = Hook, Svart	50 mm	25 m	1 rull

Borrelås komfort myk, elastisk

Den myke delen av elastisk borrelås i ekstra kraftig kvalitet. Borrelåsen har myke kanter for å unngå gnaging.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
25030	Hvit	19 mm	4,5 m	1 rull
25030	Hvit	25 mm	4,5 m	1 rull
25030	Hvit	50 mm	4,5 m	1 rull



Mikrofix hard, selvklebende

Selvklebende hard borrelås som fester mot Mikrofix myk og andre vanlige myke borrelåser. Ekstra tynn på grunn av korte heftelementer som sitter veldig tett. Den selvklebende baksiden fester mot de fleste materialer.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
25040	Transparent	50 mm	25 m	1 rull
25041	Svart	50 mm	25 m	1 rull



Mikrofix myk

Myk selvklebende borrelås som fester mot Mikrofix og andre vanlige harde borrelåser. Ekstra tynt.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
25042	Hvit	50 mm	25 m	1 rull
25043	Svart	50 mm	25 m	1 rull



Mykt AFO bånd

Et dobbeltvevet mykt bånd med litt elastisitet for økt føyelighet. Velegnet til ulike ortoseapplikasjoner. Fester til velcro. Kan klippes til ønsket bredde uten at det revner.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
25060	Svart	40 mm	10 m	1 rull
25061	Svart	50 mm	10 m	1 rull





D-ring plast

D-ringer i plast. Finnes med eller uten feste.

Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Pk.
25070	Uten feste	Hvit	25 mm	25 stk.
25070	Uten feste	Hvit	50 mm	25 stk.
25071	Med feste	Hvit	25 mm	25 stk.
25071	Med feste	Hvit	50 mm	25 stk.



Festebånd

Mykt bånd med skumkjerne i midten. Kan klippes til ønsket bredde og har selvklæbende kant. Hard borrelås fester til begge sider av båndet.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
51160	Beige	25 mm	9 m	1 dispenser
51161	Beige	50 mm	9 m	1 dispenser



Ekstra tynt bånd

Ekstra tynt og mykt bånd for mindre ortoser. Hard borrelås fester til en side av båndet.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
51155	Hvit	13 mm	9 m	1 dispenser

Festebånd robust

Ekstra slitesterkt og mykt bånd med en tynn skumkjerne i midten. Kan lukkes og åpnes mer enn 1000 ganger. Uelastisk. Velcro fester til begge sider av båndet.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
51165	Blå/Hvit	25 mm	9 m	1 rull
51165	Blå/Hvit	38 mm	9 m	1 rull
51166	Blå/Hvit	50 mm	9 m	1 rull
51167	Hvit	25 mm	9 m	1 rull
51168	Hvit	50 mm	9 m	1 rull
51169	Beige	25 mm	9 m	1 rull
51170	Beige	50 mm	9 m	1 rull



Foam-bånd

Ekstra mykt bånd med en 0,6 cm skumkjerne i midten. Kan klippes til ønsket bredde og har selvåsende kant. Hard borrelås fester til begge sider av båndet.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
51176	Blå	50 mm	4,6 m	1 rull
51177	Hvit	50 mm	4,6 m	1 rull



Borrelås med D-ring

Selvklebende myk borrelås med D-ring av nylon. Hard borrelås er montert til lukningen av båndet.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
51185	Hvit	25 mm	300 mm	10 stk.
51186	Hvit	25 mm	460 mm	10 stk.
51187	Hvit	50 mm	300 mm	10 stk.
51188	Hvit	50 mm	460 mm	10 stk.





NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam med medium elastisitet. Elastisk i alle retninger.

Former seg godt etter kroppens konturer. Fabrifoam kan brukes innen mange ulike områder. Til produksjon av myke ortoser, som ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompresjonsforbinding. Et alternativ til neoprene. Fabrifoam finnes i to ulike grader av stretch. Materialet er hudvennlig, puster og transporterer fuktighet. Dette tynne materialet har en side som er behandlet slik at den ikke glir mot huden, og en side hvor hard borrelås fester lett. Inneholder ikke gummi.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Pk.
50505	Blå	100 mm x 0,91 m	3 ruller
50506	Blå	100 mm x 1,22 m	3 ruller
50508	Blå	150 mm x 1,22 m	3 ruller



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med lav til medium elastisitet. Elastisk primært i en retning. Fabrifoam kan brukes innen mange ulike områder. Til produksjon av myke ortoser, som ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompresjonsforbinding. Et alternativ til neoprene. Fabrifoam finnes i to ulike grader av stretch. Materialet er hudvennlig, puster og transporterer fuktighet. Dette tynne materialet har en side som er behandlet slik at den ikke glir mot huden, og en side hvor hard borrelås fester lett. Inneholder ikke gummi.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Pk.
50500	Beige	50 mm x 3,6 m	2 ruller
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rull



Fingerløkke

Myke, luftige fingerløkke i skinn, som enkelt kan trimmes til ønsket bredde og form. Metall-løkkene gjør det lett å feste tråd og elastikk.

Bruksområde: Til dynamiske ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
51232	Brun	22 mm	76 mm	10 stk.
51233	Brun	22 mm	102 mm	10 stk.

[illegible]

Oversikt lavtemperaturplaster

	Sansplint	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobial
Fargeforandring	Nei	Nei	Nei	Blir transparent	Blir transparent	Blir transparent
Fester mot huden	Litt Bruk strømppe	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei
Fester til seg selv	Litt under bearbeiding Permanent ved sammenstrykning	Litt Ikke permanent *)	Litt Ikke permanent *)	Permanent	Litt under bearbeiding. Ikke permanent *)	Nei
Formbar	Motstandskraftig	Meget formbar	Noe begrenset	Begrenset	Begrenset	Begrenset
Stretch-motstand	Maksimum	Minimum	Medium	Medium	Medium	Medium
Følgelig	Mindre god	Overlegen	Meget god	God	God	God
Minne (Kan formes om)	Litt (For etterjustering)	Litt (For etterjustering)	Litt (For etterjustering)	Ja	Ja	Ja
Fingeravtrykk	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei
Kanter	Fine Kan enkelt trimmes	Kan enkelt trimmes	Kan enkelt trimmes	Fine	Fine	Fine
Perf./Massiv	Massiv Perf 2,5 %	Massiv Perf 1 %	Massiv Perf 1 %	Massiv Perf 13 % Perf 19 %	Massiv Perf 1 % Perf 13 % Perf 19 % Perf 42 %	Massiv Perf 19 %
Farger	Beige	Hvit Beige	Hvit	Hvit Beige	Hvit	Hvit
Temperatur Tid i vannbad	70-80°C 30 sek – 1 min	65-70°C 30 sek – 1 min	65-70°C 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min
Bearbeidelsestid 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm	1-3 min (2 mm) 4-5 min (3 mm)	1 min 3-5 min	2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	2-3 min 4-6 min
	Sansplint	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobial

*) Kan permanent festes til seg selv ved å slippe eller skrape overflaten med en skarp gjenstand.

Aquaplast T Prodrappe	Aquaplast Water-colors	Ezeform	Ezeform Antimikro-bial	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	
Blir transparent	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Fargeforandring
Nei	Nei	Litt Drar i hårene	Nei	Nei	Nei	Nei	Fester mot huden
Litt under bearbeiding. Ikke permanent *)	Ikke permanent *)	Litt under bearbeiding Permanent ved sammen-trykning	Nei	Ja Kan tas fra hverandre ved oppvarming	Ja Kan tas fra hverandre ved oppvarming	Nei	Fester til seg selv
Meget formbar	Begrenset	Motstands-kraftig	Motstands-kraftig	Begrenset Kun i en retning	Begrenset Kun i en retning	Begrenset Kun i en retning	Formbar
Minimum	Medium	Maksimum	Maksimum	Maksimum	Maksimum	Maksimum	Stretch-motstand
Overlegen	God	Mindre god	Mindre god	God	God	Mindre god	Følgelig
Ja	Ja	Litt (For etterjustering)	Litt (For etterjustering)	Ja	Ja	Ja	Minne (Kan formes om)
Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Fingeravtrykk
Fine	Fine	Fine	Bør trimmes	Bør trimmes	Bør trimmes	Bør trimmes	Kanter
Massiv	Massiv Perf 13 % Perf 19 %	Massiv	Massiv Perf 1 %	Nettstruktur	Nettstruktur	Tredimen-sjonal nettstruktur	Perf./Massiv
Hvit	Mange Se utvalg i katalogen	Hvit Beige Blå	Hvit	Hvit Lyseblå Lysegrønn	Dispenser/ark: Beige Rull: Hvit	Beige	Farger
70-75°C 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70°C Ark: 1 min Rull: 2 min	70°C Ark: 1 min Rull: 2 min	70°C 3 mm: 2 min 5 mm: 2 min 7 mm: 2 min	Temperatur Tid i vannbad
2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 4-6 min	4-6 min	Ark: 45 sek - 1 min Rull: 2 - 3 min	Ark: 30 - 45 sek Rull: 60 - 90 sek	2-3 min	Bearbeidelsestid 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm
Aquaplast T Prodrappe	Aquaplast Water-colors	Ezeform	Ezeform Antimikro-bial	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	

Mange av våre plaster lages også i andre farger, tykkelser og perforeringer enn det som er angitt i tabellen.
Kontakt oss på telefon 23 23 31 20 for ytterligere informasjon.

Egne notater

[illegible]



Verktøy og tilbehør

www.camp.no



Bandasjesaks med plasthåndtak

Praktisk saks med stort grep, beregnet for ulike plastmaterialer. Saksen er laget i rustfritt stål AISI 420 og kan autoklaveres. Et prisgunstig alternativ.

Art. nr.	Farge	Materiale	Lengde
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grønn	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Supersaks

En veldig skarp saks med stort håndtak. Passer utmerket til å klippe i plastmateriale, selv når plasten har begynt å bli hard. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51217	AISI 420	20 cm



Bøyd MAYO Saks

Bøyd saks med små håndtak. Velegnet til trimming av kanter på ortoser hvor plasten har begynt å bli hard. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan autoklaveres. Kan brukes med høyre eller venstre hånd.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51214	AISI 420	14 cm



Smith Saks

En veldig skarp saks med stort håndtak. Er lett å håndtere og bruke på myke plastmaterialer. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51216	AISI 420	18 cm

Gipssaks rustfri

En saks i høy kvalitet som klipper lett i alle materialer. Nedre blad med fin sagtann og skarpt vinklet øvre blad. Saksen er laget i rustfritt stål og kan autoklaveres.

Art. nr.	Modell	Lengde
51208	Gipssaks rustfri	14 cm
51207	Gipssaks rustfri	18 cm



Gipssaks vinklet Nibbler

Liten presisjonssaks av høy kvalitet som kan brukes til å klippe i kalde og varme plastmaterialer. Ideell til små justeringer rundt omkring på ortosen og for å trimme kanter på en ferdig ortose eller sirkulærgips. Den nedre eggen er tannet. Laget av rustfritt stål som kan autoklaveres.

Art. nr.	Modell	Lengde
51209	Gipssaks vinklet nibbler	12 cm





Strava Vannbad

STRAVA Vannbad er det første på markedet som har innebygd UV-sterilisering og rengjøringsfunksjon med høy vanntemperatur. Dette doble rengjøringsystemet garanterer at vannet er 99,99% uten skadelige bakterier og virus. Strava Vannbad har estetisk utseende og er laget av komposittmateriale med høy holdbarhet og isolerende- og beskyttende egenskaper.

Vannbadet tømmes enkelt og raskt på et par minutter med et innebygget pumpesystem. Vannet sirkulerer i vannbadet, noe som gjør at temperaturen er jevn i vannet og varmes raskt opp til ønsket temperatur. Oversiktlig "Touch Screen" i farger gjør det enkelt å velge mellom ulike forprogrammerede termoplastmaterialer eller å skape sine egne favorittprogram. Kan stilles inn for å starte og slås av automatisk.

Beskytt vannbadet med en "non-stick" duk som kan gjenbrukes for å unngå at materiale fester seg i bunnen. Duken kan klippes til ønsket størrelse.

Art. nr.	Modell	Bredde	Lengde	Høyde
64507	Vannbad	Yttermål: 51,6 cm Kar: 31,6 cm	Yttermål: 59 cm Kar: 48,6 cm	Yttermål: 22,6 cm Kar: 14,7 cm
64508	Dreneringsslange			
64509	Varmeelement			
64510	EU elkabel			
64511	DK adapter			
64512	UV lampe			



X-LITE® plate med silikonbelegg

Brukes som arbeidsoverflate ved gipsing med X- LITE. Silikonbelegget forhindrer at X-LITE fester seg til underlaget. Den perforerte overflaten på platen gjør at overflødig vann fra X- LITE rullene lett kan renne ned under platen og suges opp av underliggende håndduk.

Art. nr.	Bredde	Lengde
64811	325 mm	530 mm



Test, trening og behandling

www.camp.no



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med lav til medium elastisitet. Elastisk primært i en retning. Fabrifoam kan brukes innen mange ulike områder: Til produksjon av myke ortoser, som ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompresjonsforbinding. Et alternativ til neoprene. Fabrifoam finnes i to ulike grader av stretch. Materialet er hudvennlig, puster og transporterer fuktighet. Dette tynne materialet har en side som er behandlet slik at den ikke glir mot huden, og en side hvor hard borrelås fester lett. Inneholder ikke gummi.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Pk.
50500	Beige	50 mm x 3,6 m	2 ruller
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rull



NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam med medium elastisitet. Elastisk i alle retninger. Former seg godt etter kroppens konturer. Fabrifoam kan brukes innen mange ulike områder: Til produksjon av myke ortoser, som ortosebånd, stabiliserende forbindelse og kompresjonsforbinding. Et alternativ til neoprene. Fabrifoam finnes i to ulike grader av stretch. Materialet er hudvennlig, puster og transporterer fuktighet. Dette tynne materialet har en side som er behandlet slik at den ikke glir mot huden, og en side hvor hard borrelås fester lett. Inneholder ikke gummi.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Pk.
50505	Blå	100 mm x 0,91 m	3 ruller
50506	Blå	100 mm x 1,22 m	3 ruller
50508	Blå	150 mm x 1,22 m	3 ruller



Cica Care silicongel

Cica Care brukes for å redusere arrdannelse, og kan kun brukes på helede sår. Øker bevegelighet og funksjon i arrområdet og minsker oppkomster av hypotrofi og keloider. Den høye klebeevnen gjør at tape og bandasje ikke er nødvendig. Kan tas av smertefritt og enkelt reappliseres. Man kan bruke Cica Care der man ikke kan ha trykk. Materialet kan vaskes og settes tilbake.

Art. nr.	Bredde	Lengde	Pk.
54600	120 mm	150 mm	1 ark
54601	120 mm	150 mm	10 ark

R-lite foam block

Treningsblokk til håndtrening laget av T-Foam. Materialet går langsomt tilbake til opprinnelig form, noe som hjelper pasienten til ikke å overanstrenge seg. Finnes i fire ulike hardhetsgrader. Kan vaskes i varmt vann med mild såpe.

Art. nr.	Farge	Hardhet	Mål	Pk.
54130	Gul	Ekstra myk	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Rosa	Myk	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54130	Grønn	Hard	4,4x4,4x7,6 cm	32 stk.
54131	3 stk. i hver farge		4,4x4,4x7,6 cm	12 stk.



Jamar® hånddynamometer

Et enkelt og sikkert verktøy for løpende å kontrollere gripestyrke innenfor ulike vurderinger. Skala mellom 0 - 90 kg. Kalibrering anbefales årlig for å forsikre seg om holdbarheten og påliteligheten. Leveres i praktisk veske som også fungerer som oppbevaring.

Annet: Garantitid 1 år. Garantien dekker ikke kalibrering.

Art. nr.	Modell
52100	Jamar Hånddynamometer
52101	Kalibrering



Jamar® Pinch Gauge

Måler fingerstyrke med meget høy presisjon. Den røde indikasjonspålen stopper til måleren resettes. Fungerer med hydraulikk, og det isometriske designet sikrer korrekt måling. Skala mellom 0 - 20 kg (0 - 45 lbs). Leveres i praktisk veske som også fungerer som oppbevaring.

Annet: Garantitid 1 år. Instruksjonsmanual finnes kun på engelsk.

Art. nr.	Modell
52110	Jamar Pinch Gauge





Mål 1: Lengde arm 1

Mål 2: Lengde arm 2

Goniometer

Bruk dette gjennomsiktige plastgoniometeret for enkelt og effektivt kunne måle bevegelsesomfangets vinkler på store ledd. Måler bevegelsesomfang 180° med 2° intervall.

Annet: Begge goniometrene har intervall på 2°.

Art. nr.	Modell	Farge	Mål 1	Mål 2
52200	Arm	Transparent	15 cm	15 cm



Pegtest 9 hulls

Ett enkelt test for bedømming av håndfunksjon. Letthåndterlig format. Alle deler kan desinfiseres. Stoppeur er inkludert.

Art. nr.	Modell	Pk.
52315	Peg test	
52316	Ekstra pegger	9 stk.



Purdue Pegboard test

Måler to ulike aktiviteter:

- 1) Store bevegelser av fingre, hånd og arm.
- 2) Følelse i fingertuppene.

Pakken inkluderer instruksjonsmanual, normalverdi og 25 protokoller. Stoppeur er ikke inkludert.

Art. nr.	Modell
52320	Purdue Pegboard test
52321	Ekstra deler

Grooved Pegboard

En stimulerende test for fingerferdighet og visuell evne som krever mer komplett motorikk og koordinasjon enn de fleste Pegboard. Inneholder 25 hull med tilfeldig plasserte former som krever rotasjon ved isetting.

Art. nr.	Modell	Pk.
52325	Grooved Pegboard	
52326	Ekstra pegger	30 stk.



Ødemhanske

Smidig og bekvem hanske som gir lett kompresjon for å minske ødem. Laget i lycra og spandex. Finnes i to utførelser; hel hanske og som hanske med åpne fingre. Hanskene er for å kontrollere funksjon og hevelse.

Annet: Kompresjonsklasse I.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Pk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	X-Small	17,8 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Small	20,3 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Medium	22,9 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Large	25,4 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	X-Small	17,8 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	Small	20,3 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	Medium	22,9 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åpne fingre	Large	25,4 cm	1 stk.	Ve/Hø



Mål: Håndens omkrets ved tommelroten.



Vakumpute

Vakumpute fylt med små granulatkuler som former seg når luften evakueres. Kan formes om ved å åpne ventilen. Puten har god vakumstabilitet og lav vekt. Separate trekk kan bestilles.

Bruksområder: Ved operasjoner eller som støtte ved sittende posisjon. Kan også brukes av tannleger.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
22393	Vakumpute	Hvit	55x30 cm
22394	Vakumpute	Hvit	55x65 cm
22395	Vakumpute	Hvit	55x85 cm
22396	Vakumpute	Hvit	40x50 cm
22275	Enhåndspumpe		
26334	Ekstra ventil til vakumpute		




Urias splint

Urias splinter gir et jevnt trykk på arm, ben, hånd og fot. Splintene er laget i dobbelt lag PVC og lukkes med glidelås. Det gjennomsiktige materialet gir kontroll over splintens posisjon. OBS: Trykket må ikke overstige 40 mmHg.

Bruksområder: Ved ødembehandling og proprioseptiv stimulering ved neurologisk rehabilitering.

Art. nr.	Modell	Lengde
53510	Lang arm	80 cm
53511	Kort arm	70 cm
53512	Halv arm	53 cm
53513	Albue	40 cm
53516	Fot	32 cm
53517	Ben stor	66 cm
53519	Hånd	20 cm
53518	Ben liten	56 cm
53515	Munnstykke	100 stk.
53514	Filter til munnstykke	5 stk.

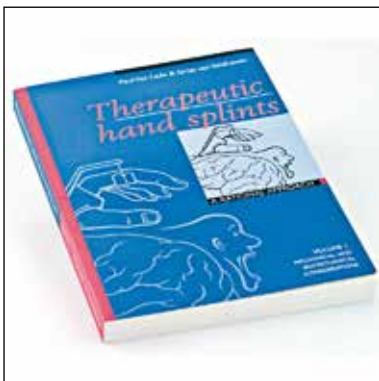

Bok: Therapeutic hand splints

Paul van Ledes og Griet van Veldhovens to utgaver inneholder alt du trenger å vite om hånden, dets anatomi, biomekanikk og patologi som berører ortoser og skinner. Volume 2 gir gode eksempler på fremstilling av ortoser og dets bruk. Bøkene er på engelsk.

Art. nr.	Beskrivelse	Volum
99200	Mechanical and biomechanical considerations	I
99201	Practical applications	II

Kinetec™ Spectra Essential Kne

Spectra har en oversiktlig håndkontroll som er enkel å bruke. Når de individuelle innstillingene for pasienten er satt og låst, kan man enkelt bruke kun på- og avknappene. Den er justerbar for pasientlengde fra 145 cm til 195 cm, og justerbar i bevegelsesintervall fra -10° til 120° fleksjon. Finnes blant annet med hygienisk plastpolstring som kan sprites. Spectra Essential er den enkleste av Spectra modellene, denne kan man enkelt oppgradere til Spectra ved å bytte håndkontrollen og oppgradere til en Kompanion ved å bytte både håndkontroll samt et oppgraderingssett med eller uten fotplate.



Art. nr.	Modell	Materiale
40681	Spectra Essential	Stoffpolstring
40682	Spectra Essential	Plastpolstring

Kinetec™ Performa kne

Performa er justerbar for pasientlengde fra 112 cm opp til 206 cm. Denne maskinen har også en oversiktlig og enkel håndkontroll hvor alle innstillinger gjøres. Maskinen tillater aktiv bevegelse i både fleksjon og ekstensjon. Finnes bl. a. med hygienisk plastpolstring, timer, bevegelsesintervall -3° til 130° fleksjon, forprogrammerbar for opptil 16 pasienter, tillater aktiv bevegelse, justerbar lengde.



Art. nr.	Modell	Materiale
40620	Performa	Stoffpolstring
40624	Performa	Plast

Kinetec™ Centura 5 Albue/Skulder

Centura 5 er en maskin med mange funksjoner og muligheter. Den drives av 2 motorer som enkelt monteres ved hjelp av fargekoder, avhengig av hvilken bevegelse man vil trene. Funksjonene dekker de viktigste bevegelsene i skulder og albue ved rehabiliteringen. Centura 5 kan trene bevegelsene fleksjon-ekstensjon, abduksjon-adduksjon, rotasjon, og til og med rotasjon samtidig som fleksjon eller abduksjon samt horisontell abduksjon og adduksjon. De ulike funksjonene kan kombineres og gi fleksibilitet i behandlingen. Bevegelsesaksen sentreres ved aktuelt ledd. Justerbar i høyde og lengde. Maskinen og stolen kan enkelt rulles ved forflyttinger. Ergonomisk håndkontroll.



Art. nr.	Modell	Materiale
40630	Centura 5	Plastpolstring



Kinetec™ Spectra kne

Spectra har en oversiktlig håndkontroll som er enkel å bruke. Når de individuelle innstillingene for pasienten er satt og låst, kan man enkelt bruke kun på- og avknappene. Den er justerbar for pasientlengde fra 145 cm til 195 cm, og justerbar i bevegelsesintervall fra -10° til 120° fleksjon. Finnes blant annet med hygienisk plastpolstring som kan sprites. Spectra og Spectra XL er mellommodellen. Det som skiller disse to er at XL har en bredere og sterkere maskin som også takler de største og tyngste pasientene (maks. 227 kg). Begge har alle funksjoner som Essential samt oppvarmingsprogram og timer. Denne kan også lett oppgraderes til en Kompanion ved å kjøpe et oppgraderingssett, med eller uten fotplate.

Art. nr.	Modell	Materiale
40660	Spectra	Stoffpolstring
40664	Spectra	Plastpolstring
40687	Spectra XL	Stoffpolstring
40688	Spectra XL	Plastpolstring



Kinetec™ Spectra Kompanion Kne

Spectra har en oversiktlig håndkontroll som er enkel å bruke. Når de individuelle innstillingene for pasienten er satt og låst, kan man enkelt bruke kun på- og avknappene. Den er justerbar for pasientlengde fra 145 cm til 195 cm, og justerbar i bevegelsesintervall fra -10° til 120° fleksjon. Finnes blant annet med hygienisk plastpolstring som kan sprites.

Dette er en oppgradert Spectra med Touch Screen og med Bluetooth hvor pasienten og fysioterapeut/pleier og lege kan få ut maksimal informasjon under og etter trening. Man kan stille inn oppvarmingsprogram, bevegelsesomfang og antall repetisjoner. I tillegg kan man få en vurdering av framsteg. Man kan velge mellom ulike språk, treningsprogram som kan pushe pasienten og motstandsøvinger. Det er også mulig å ha videosamtale mellom pleiepersonale og pasient direkte i touchenheten. Touchenheten håndteres som et nettbrett, som forenkler oppfølging av pasientene. Utvikling og framsskritt for pasienten kan også følges opp og tas ut i protokollform, som tydeliggjør effekten av rehabiliteringen for alle involverte. I tillegg har maskinen en rekke andre funksjoner som forenkler og forbedrer mulighetene for pleiepersonale og pasienter. Funksjonen "Kompanion" kan også kjøpes som en separat oppgradering til både Spectra (40660/40664) og Essential (40681/40682).

Art. nr.	Modell	Materiale
40685	Spectra Kompanion	Stoffpolstring
40686	Spectra Kompanion	Plastpolstring

Standard salgs- og leveringsvilkår

LEVERANSER

Vår ambisjon er at vi skal ha en god leveranseevne på de produktene som eksponeres i denne produktkatalogen. Enkelte ytterstørrelser og tilbehør kan forekomme som bestillingsvarer med litt lengre leveringstid. Det samme gjelder målbestilte produkter.

RETURER

Før en eventuell retur må vår godkjenning innhentes. Kontakt oss for opprettelse av returnummer. I de tilfeller returen gjelder bytte eller feilbestilling skal produktene returneres komplett i originalforpakning, og returneres senest 2 måneder etter mottak. I de tilfeller et bytte eller feilbestilling meldes inn, fra 2 måneder opp til 4 måneder etter mottak, trekkes 50% av kjøpesum fra på kreditnotaen. Det utstedes ikke kreditnota for returer og feilbestillinger som er eldre enn 4 måneder. Spesialbestilte varer og bestillingsvarer tas ikke i retur.

BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje senest 30 dager etter fakturadato. Morarente debiteres i henhold til gjeldende lovbestemte rentesats. Priser er gjeldende t.o.m. 31.12.2022. Vi forbeholder oss retten til prisendringer i løpet av denne perioden som kan komme pga. av pris- og/eller valutaforandringer. Prisene er alltid angitt eksklusive moms.

ARTIKKELNUMMER

Camp sitt artikkelnummer består av ni siffer. De fem første sifrene identifiserer produktet. Resterende sifre beskriver om produktet er høyre eller venstre, hvilken størrelse, tykkelse eller annet.

Eksempel: ToeOFF 2.0 venstre medium 289201012	28920: ToeOFF 2.0	I0: Venstre	I2: Medium
---	-------------------	-------------	------------

I0: Venstre	09: XX-Small
20: Høyre	I0: X-Small
	I1: Small
	I2: Medium
	I3: Large
	I4: X-Large
	I5: XX-Large

VIKTIG OM PRODUKTENES MATERIALE OG VEDLIKEHOLD

I de tilfeller det finnes viktig informasjon som krever oppmerksomhet før bestilling, angis dette under rubrikken "Øvrig" i samband med produkttekstene i denne katalogen.

Camp sitt tekstile sortiment skal håndvaskes og tørkes flatt om ikke annet angis i brukerinstruksjonen eller på etiketten i produktet. Rigide ortoser tørkes av med en fuktig klut.

FOR ET BEDRE MILJØ

Camp unngår produkter som inneholder miljø- og helsefarlige materialer. For Camp Scandinavia er det meget viktig at virksomheten vår drives på en slik måte at miljøet påvirkes minst mulig, i henhold til sunne forretningsprinsipper.

Camp tar sitt produsentansvar i henhold til WEEE-direktivet, Returordningen for Batterier og Forpakkingsemballasje og er medlem/rapporterer til de ulike innsamlingssystemene i respektive land hvor vi har virksomhet.



Salgsorganisasjon og kundeservice



Frøydis Alstad Stenhaus

Produktspesialist/ Offentlig godkjent
ortopediingeniør
Mobil: 905 04 084
froydis.stenhaus@camp.no



Anders Jahnsen

Produktspesialist / Fysioterapeut
Mobil: 416 01 444
anders.jahnsen@camp.no



Unni Sandkvist

Produktspesialist /
Administrativ leder
Tlf: 23 23 31 23
unni.sandkvist@camp.no



Marthe Glæserud

Salgskordinator
Tlf: 23233126
marthe.glaeserud@camp.no



Geir Tollerud

Lageransvarlig
Tlf: 23 23 31 22
geirtollerud@camp.no



Anders Jemth

Salgssjef
Mobil: +46 704 50 50 85
anders.jemth@camp.se